




**Küschall®**  
**ELEMENT**

—  
Proiettata  
nel futuro



Küschall.com

Edizione limitata





IN COLLABORAZIONE  
CON BREITFUSS

# ELEMENT

La nuova Küschall Element edizione limitata è una carrozzina attiva raffinata, dal design esclusivo e unica nel suo genere.

L'estrema cura dei dettagli esprime al meglio il nostro impegno verso l'eccellenza. Ogni carrozzina viene realizzata a mano e combina prestazioni, precisione e personalità.

In collaborazione con Breitfuss, innovatori nel wood design, La Küschall Element combina competenze tecniche con il desiderio di creare qualcosa di realmente eccezionale.

AUDACE E  
INCONFONDIBILE

—  
STRAORDINARIA  
PER NATURA





---

## Forza della natura

Realizzata in legno lamellare di frassino europeo di altissima qualità – un materiale dalle prestazioni superiori – Küschall Element garantisce resistenza strutturale e durabilità nel tempo.



---

## Unica


Esteticamente distintiva, Küschall Element combina una scorrevolezza superiore ad un'eleganza naturale. Una carrozzina progettata per valorizzare l'individualità e la personalità e rendere unica ogni esperienza.





# Armonia e precisione

Assetto del telaio e della seduta sono progettati ed ottimizzati per garantire manovrabilità e reattività in fase di spinta.

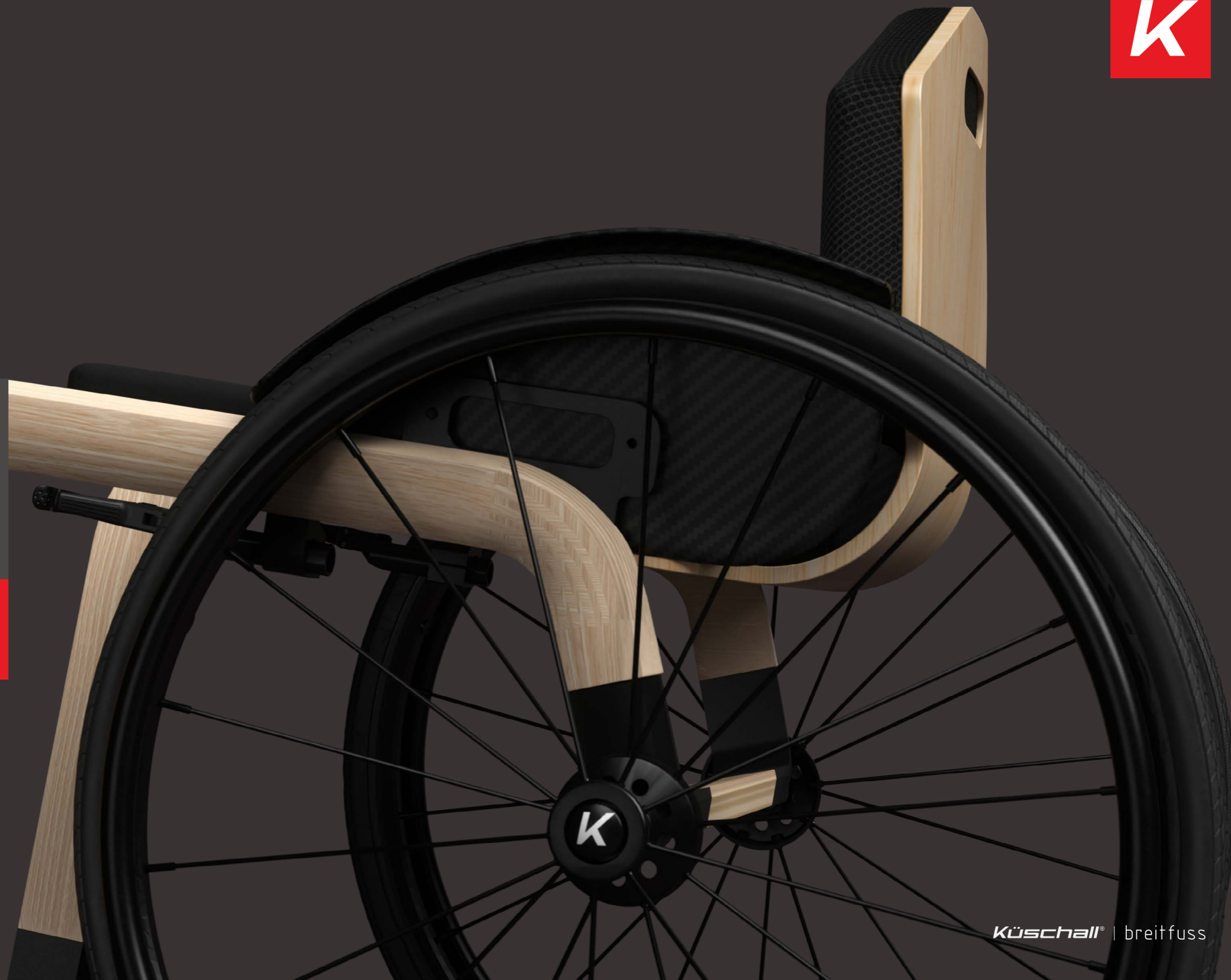



# Un'occhiata da vicino

## Grande trasportabilità

Due impugnature integrate sullo schienale e sul sedile.

## Ampia gamma di corrimani ergonomici e leggeri tra cui scegliere.

## Ruote ad alte prestazioni

Spinergy CLX da 24" di serie, oppure optional Corima in carbonio con pneumatici Schwalbe Marathon Plus.



## Schienale traspirante

Imbottitura in tessuto mesh nero.

## Posizionamento sicuro

Una gamma di cinture Bodypoint per soddisfare ogni esigenza individuale.

## Freno Light Active

Facile da azionare e dal design pulito e minimal.

## Struttura ad alta resistenza

Telaio in lamellare di frassino, progettato per garantire resistenza e durabilità nel tempo.

## Poggiapiedi in carbonio

Resistente e leggero.

[CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO >>](#)

# Dati tecnici

## LARGHEZZA SEDUTA

340 - 420 mm



## PROFONDITA' SEDUTA

410 - 460 mm



## LUNGHEZZA GAMBE

390 - 460 mm



## ALTEZZA SCHIENALE

300 - 360 mm



## ANGOLO SCHIENALE

85°



## ALTEZZA SEDUTA

Anteriore: 480 - 500 mm



## ANGOLO SEDUTA

8° / 12°



## ANGOLO TELAIO

90°



## LARGHEZZA TOTALE

655 mm per SW 420 mm



## LUNGHEZZA TOTALE

865 mm per SD 460 mm



## CENTRO DI GRAVITA'

95mm  
(seduta regolabile  
-15 mm / +15 mm)



## STABILITA' STATICA IN PENDENZA

4,8° (con angolo  
seduta 12°), 9,1° (con  
angolo seduta 8°)



## PESO TOTALE SENZA ACCESSORI

Circa 12,9 kg (con  
cuscino seduta e  
imbottitura schienale)



## PESO DA TRASPORTO

Circa 8,2 kg (senza  
ruota posteriore,  
cuscino seduta e  
imbottitura schienale)



## PESO MAX UTENTE

100 kg



Tutte le misure e i pesi indicati si riferiscono a una larghezza seduta di 400 mm e una profondità seduta di 400 mm nella configurazione più leggera e compatta.  
Peso e misure possono variare a seconda delle diverse configurazioni.

Tel.: +39 0445 380059  
www.invacare.it  
e-mail: italia@invacare.com

INVACARE MECC SAN SRL  
Via Marco Corner, 19  
36016 Thiene (VI) - ITALY



©2026 Invacare International GmbH. All rights reserved. Küschall® Element™ designed in collaboration with Breitfuss. È stato fatto ogni sforzo per garantire che i contenuti di questa pubblicazione siano completamente aggiornati al momento della stampa. Nell'ambito del continuo miglioramento dei prodotti, Invacare International GmbH si riserva il diritto di modificare i modelli esistenti in qualsiasi momento. Le immagini e le informazioni relative ai prodotti sono destinate esclusivamente agli operatori professionali del settore e non hanno finalità pubblicitarie, bensì informative. Tutti i diritti riservati. IT\_15042026