



Küschall® CHAMPION

UNICA NEL
SUO GENERE

—
CHAMPION
PER NATURA



Küschall.com



*PIEGHEVOLE
E ULTRA
COMPATTA*

CHAMPION

Scopri Küschall Champion, la nostra prima carrozzina pieghevole a telaio aperto, un modello originale progettato per offrire la massima libertà di movimento. Progettata con precisione e dotata di un robusto meccanismo di piegatura ibrido, garantisce una guida ancora più performante una volta aperto il telaio. Facile da piegare e da riaprire con un unico movimento fluido, per un trasporto e uno stoccaggio più semplici.

*DESIGN
SOLIDO*





UNICA NEL SUO GENERE

Progettata con passione e cura,
Küschall Champion è una carrozzina
unica nel suo genere. All'avanguardia
nell'innovazione e in continua
evoluzione, offre prestazioni
consolidate nel tempo e un'affidabilità
di guida su cui puoi contare, sempre.



ULTRA COMPATTA

Facile da trasportare e riporre grazie al meccanismo di piegatura in un unico passaggio, allo schienale abbattibile e alle ruote posteriori ad estrazione rapida. Scegli la versione Swiss Knife "SK", con telaio anteriore pieghevole, per rendere Champion ancora più compatta.



Küschall Champion SK





CHAMPION *PER NATURA*

Progettata per offrire funzionalità e prestazioni, Küschall Champion è la combinazione perfetta. La tecnologia avanzata di idroformatura e l'innovativo meccanismo di piegatura garantiscono una maggiore rigidità del telaio e una propulsione più efficiente.



PRESENTIAMO CHAMPION CARBON

Leggera quando serve. Robusta quando conta. Champion in carbonio migliora la portabilità senza rinunciare alle prestazioni. Più rigidità, maggiore reattività e una struttura ultraleggera che rende più semplici sollevamento, chiusura e trasporto. La bellezza del carbonio si traduce in sicurezza e controllo a ogni utilizzo.



Guarda il video

Prestazioni ed estetica
da Champion.

C



-430g*

*Peso complessivo inferiore
rispetto alla versione standard in
alluminio della Champion.



Küschall®
CHAMPION





GUARDALA DA VICINO

CERCHI DI SPINTA CARBOLIFE

L'innovativo profilo del cerchio di spinta migliora il controllo, mentre l'impugnatura a ridotto sforzo riduce l'affaticamento durante la propulsione.

SISTEMA DI CHIUSURA

Si chiude facilmente in un unico movimento, con regolazione integrata del baricentro per un posizionamento su misura.

CHAMPION SL

Scopri la Champion nella sua versione ultra leggera e reattiva:



**GUARDA IL
VIDEO**



FRENO ATTIVO LEGGERO

Design minimal e precisione dei dettagli.

TECNOLOGIA IDROFORMATA

Rinforza il telaio, aumentando la rigidità e migliorando l'efficienza energetica durante la propulsione.

Küschall® | 

OPZIONE CON TELAIO IN CARBONIO ULTRALEGGERO

Migliora le prestazioni di guida e conferisce un'estetica visiva più elegante e sicura.



PERSONALIZZA LA TUA CHAMPION

1. COLORE TELAIO

Colori standard telaio



Bianco

Grigio
Antracite

Nero



Rosso

Blu

Colori telaio aggiuntivi*



Giallo Fluo

Nero Lucido

Grigio Argento

Blu Notte
Perlato



Rosso Rubino

Arancione
Dinamite

Verde Foresta

*Previsti tempi di consegna aggiuntivi.

2. STILE DECAL




3. COLORE DECAL



Rosso

Nero

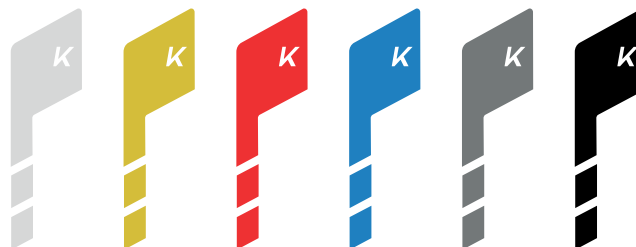

Grigio
Chiaro

Oro

Rosso

Blu

Grigio
Scuro

Nero

4. SERVIZIO UNIQUE

Crea la tua nuova Küschall UNIQUE,
costruita su misura a partire dalle ruote.
Un servizio esclusivo per realizzare la tua
carrozzina personalizzata, progettata
intorno a te e al tuo stile di vita.

unique
Designed by you. Built by us.



In foto: ruota Spinergy
personalizzata
UNIQUE. Scansiona
il codice QR presente
in questa pagina per
ulteriori informazioni.





DATI TECNICI

LARGHEZZA SEDUTA

360 - 480 mm
incrementi di 20 mm



PROFONDITÀ SEDUTA

340 - 480 mm
incrementi di 20 mm



LUNGHEZZA GAMBE

320 - 500 mm
Stepless adjustable



ALTEZZA SCHIENALE

300 - 465 mm
incrementi di 15 mm



ANGOLO DELLO SCHIENALE

76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°



ALTEZZA SEDUTA

Anteriore: 450 - 540 mm
Posteriore: 390 - 490 mm



ANGOLAZIONE TELAIO

75° / 90°
Straight or tapered



CENTRO DI GRAVITÀ

9 positions



CAMPANATURA

0° / 1° / 3°



LUNGHEZZA TOTALE

75° circa 930 mm
90° circa 830 mm



LARGHEZZA TOTALE

SW + 160 - 240 mm



TOTAL WIDTH FOLDED

Circa 280 - 340 mm



PESO TOTALE SENZA ACCESSORI

Circa 8.8 kg



PESO SENZA RUOTE

Circa 6.3 kg



PESO MASSIMO UTENTE

120 kg



Tutte le misure e i pesi indicati si riferiscono a una larghezza seduta di 400 mm e a una profondità seduta di 400 mm, nella configurazione più leggera e compatta. Peso e dimensioni possono variare in base alle diverse configurazioni. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso disponibile sul nostro sito web.

/ UNLIMIT YOUR WORLD

info@kuschall.com
www.kuschall.com

DHCare Italia S.r.l.
Via Marco Corner, 19
36016 Thiene (VI)

