



# Küschall® COMPACT

POLYVALENCE  
& CONFORT  
RÉUNIS

---



Küschall.com



*PLIANT  
& LÉGER*

---

# COMPACT

**Le Küschall Compact est la référence absolue en matière de fiabilité et de qualité dans le domaine des fauteuils roulants pliants.** Il s'adapte facilement à différents besoins pour optimiser le confort global. Disponible avec des potences fixes, il offre rigidité et d'excellentes performances de conduite. En potences escamotables, les transferts sont facilités, tout comme le rangement et le transport.

*CONFORT  
AMÉLIORÉ*





## *DES FONCTIONNALITÉS EXCEPTIONNELLES*

Grâce à son dossier rabattable, ce fauteuil est peu encombrant et facile à transporter. Les potences sont disponibles avec un angle de 70° ou 80°, en version fixes ou escamotables.



# DÉCOUVREZ LE COMPACT CARBONE

**Un petit détail. Une différence notable.** Les potences en carbone, confèrent au Compact une finition plus légère et plus raffinée. Une amélioration subtile qui rehausse à la fois le confort et l'esthétique générale, sans compromettre la fiabilité sur laquelle vous comptez.



Scannez  
pour en  
savoir plus !

—  
Donnez une touche d'élégance à votre Compact et roulez en toute confiance grâce à une touche de carbone.

C

-200g\*

\* sur le poids complet du fauteuil

Küschall®  
COMPACT





# REGARDEZ DE PLUS PRÈS

## **PLIAGE FACILE**

La conception unique du croisillon permet de plier facilement le Compact, avec un seul doigt : une caractéristique essentielle si vous manquez de force ou si la mobilité de vos mains est réduite.

## **DOSSIER RABATTABLE**

Le dossier réglable en inclinaison et rabattable sur l'assise se replie facilement sur l'assise pour un rangement compact et un transport aisé.

## **KEEP ON TRACK\***

Un système de réglage des roues avant intuitif et unique, conçu pour garantir que votre fauteuil roulant fonctionne toujours de la manière la plus économe en énergie possible, ce qui facilite la propulsion sur de plus longues distances.



## **POTENCES**

Optez pour un fauteuil roulant équipé de potences escamotables, parfait pour le transport ou les transferts, ou de potences fixes 70° ou 80° pour une plus grande rigidité et un look dynamique.

## **Küschall® | e**

Potences en carbone disponibles pour un rendu plus léger et plus raffiné

## **PALETTES**

Les palettes s'adaptent à toutes les largeurs de siège et sont dotées d'une surface antidérapante pour un confort et un maintien accrus.

\* : Réglage du parallélisme



# PERSONNALISEZ VOTRE COMPACT

## 1. COLORIS DE CHÂSSIS

Coloris standards



Blanc Éclatant   Gris Anthracite   Noir Spatial



Rouge Carmin   Bleu Azur

Coloris additionnels\*



Jaune Flashy   Noir Brillant   Gris Argent   Bleu Nuit Nacré



Rouge Rubis   Orange Dynamite   Vert Forêt

\* Délais de livraison rallongés

## 2. STYLE DE DÉCALCOMANIE




## 3. COLORIS DE DÉCALCOMANIE



Rouge

Noir

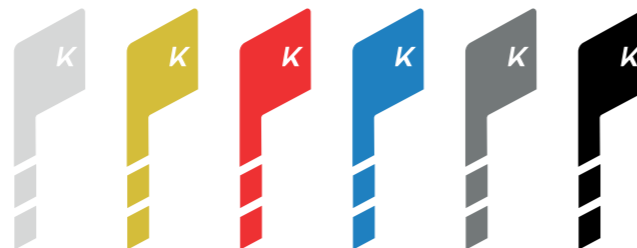

Gris Clair

Doré

Rouge

Bleu

Gris Foncé

Noir

## 4. UNIQUE

Créez votre nouveau fauteuil roulant Kuschall de A à Z grâce à UNIQUE. Ce service sur mesure vous permettra de concevoir un fauteuil personnalisé, adapté à vos besoins et à votre mode de vie.

**UNIQUE**  
Designed by you. Built by us.





# DONNÉES TECHNIQUES

**LARGEUR D'ASSISE**  
280 – 500 mm  
par pas de 20 mm



**PROFONDEUR D'ASSISE**  
280 – 500 mm  
par pas de 20 mm



**DISTANCE UL**  
200 - 510 mm  
par pas de 10 mm



**HAUTEUR DE DOSSIER**  
300 – 510 mm  
par pas de 15 mm



**ANGLE DE DOSSIER**  
82°/86°/90°/  
94°/98°/102°



**HAUTEUR D'ASSISE**  
Avant : 380 – 530 mm  
Arrière : 370 – 500 mm  
par pas de 10 mm



**ANGLE DE CHÂSSIS**  
70° / 80°  
Droit ou avant rétréci



**LARGEUR TOTALE**  
Largeur d'assise  
+ 160 mm



**LARGEUR TOTALE PLIÉE**  
Approx. 290 mm



**LONGUEUR TOTALE**  
Châssis 70° approx. 870 – 1220 mm  
Châssis 80° approx. 850 – 1200 mm



**CARROSSAGE**  
0° / 3°



**POIDS TOTAL**  
Approx. 10.3 kg (potences  
escamotables)  
Approx. 9.6 kg (châssis fixe)



**POIDS DE TRANSPORT**  
Approx. 7.8 kg (potences  
escamotables)  
Approx. 6.7 kg (châssis fixe)



**POIDS MAX. UTILISATEUR**  
130 kg



**CRASH TEST**  
Conforme à la norme  
ISO 7176-19



Toutes les mesures et poids indiqués sont basés sur la configuration la plus légère et la plus compacte possible dans une largeur d'assise de 400 mm et une profondeur d'assise de 400 mm. Les poids et les mesures peuvent changer en fonction de la configuration du fauteuil. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site internet.

**UNLIMIT YOUR WORLD\***

Tél. : +33 2 47 62 64 00  
contactfr@invacare.com  
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.  
Route de Saint Roch  
37320 Fondettes  
France



Küschall est une marque déposée. Tout a été mis en œuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible au moment de l'impression. Dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, Invacare International GmbH se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés.  
© July 2026, Invacare International GmbH. Tous les droits sont réservés. FR

\* : Votre monde sans limite