



Küschall® COMPACT

POLYVALENCE
& CONFORT
RÉUNIS



Küschall.com



*PLIANT
& LÉGER*

COMPACT

Le Küschall Compact est la référence absolue en matière de fiabilité et de qualité dans le domaine des fauteuils roulants pliants. Il s'adapte facilement à différents besoins pour optimiser le confort global. Disponible avec des potences fixes, il offre rigidité et d'excellentes performances de conduite. En potences escamotables, les transferts sont facilités, tout comme le rangement et le transport.

*CONFORT
AMÉLIORÉ*





DES FONCTIONNALITÉS EXCEPTIONNELLES

Grâce à son dossier rabattable, ce fauteuil est peu encombrant et facile à transporter. Les potences sont disponibles avec un angle de 70° ou 80°, en version fixes ou escamotables.



DÉCOUVREZ LE COMPACT CARBONE

Un petit détail. Une différence notable. Les potences en carbone, confèrent au Compact une finition plus légère et plus raffinée. Une amélioration subtile qui rehausse à la fois le confort et l'esthétique générale, sans compromettre la fiabilité sur laquelle vous comptez.



Scannez
pour en
savoir plus !

—
Donnez une touche d'élégance à votre Compact et roulez en toute confiance grâce à une touche de carbone.

C

-200g*

* sur le poids complet du fauteuil



Küschall®
COMPACT





REGARDEZ DE PLUS PRÈS

PLIAGE FACILE

La conception unique du croisillon permet de plier facilement le Compact, avec un seul doigt : une caractéristique essentielle si vous manquez de force ou si la mobilité de vos mains est réduite.

DOSSIER RABATTABLE

Le dossier réglable en inclinaison et rabattable sur l'assise se replie facilement sur l'assise pour un rangement compact et un transport aisé.

KEEP ON TRACK*

Un système de réglage des roues avant intuitif et unique, conçu pour garantir que votre fauteuil roulant fonctionne toujours de la manière la plus économe en énergie possible, ce qui facilite la propulsion sur de plus longues distances.



FIXED FRAME

Increases rigidity and gives a more active aesthetic. 70° or 80° legrest angle.

SWING-AWAY LEGRESTS

Making transport, storage or transfers easier. 70° or 80° legrest angle.

Küschall® |

Potences en carbone disponibles pour un rendu plus léger et plus raffiné

PALETTES

Les palettes s'adaptent à toutes les largeurs de siège et sont dotées d'une surface antidérapante pour un confort et un maintien accrus.

* : Réglage du parallélisme



PERSONNALISEZ VOTRE COMPACT

1. COLORIS DE CHÂSSIS

Coloris standards



Blanc Éclatant Gris Anthracite Noir Spatial



Rouge Carmin Bleu Azur

Coloris additionnels*



Jaune Flashy Noir Brillant Gris Argent Bleu Nuit Nacré



Rouge Rubis Orange Dynamite Vert Forêt

* Délais de livraison rallongés

2. STYLE DE DÉCALCOMANIE




3. COLORIS DE DÉCALCOMANIE



Rouge

Noir

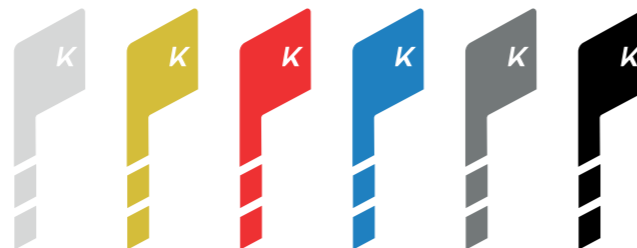

Gris Clair

Doré

Rouge

Bleu

Gris Foncé

Noir

4. UNIQUE

Créez votre nouveau fauteuil roulant Kuschall de A à Z grâce à UNIQUE. Ce service sur mesure vous permettra de concevoir un fauteuil personnalisé, adapté à vos besoins et à votre mode de vie.

UNIQUE
Designed by you. Built by us.





DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR D'ASSISE

280 – 500 mm
par pas de 20 mm



PROFONDEUR D'ASSISE

280 – 500 mm
par pas de 20 mm



DISTANCE UL

200 - 510 mm
par pas de 10 mm



HAUTEUR DE DOSSIER

300 – 510 mm
par pas de 15 mm



ANGLE DE DOSSIER

82°/86°/90°/
94°/98°/102°



HAUTEUR D'ASSISE

Avant : 380 – 530 mm
Arrière : 370 – 500 mm
par pas de 10 mm



ANGLE DE CHÂSSIS

70° / 80°
Droit ou avant rétréci



LARGEUR TOTALE

Largeur d'assise
+ 160 mm



LARGEUR TOTALE PLIÉE

Approx. 290 mm



LONGUEUR TOTALE

Châssis 70° approx. 870 – 1220 mm
Châssis 80° approx. 850 – 1200 mm



CARROSSAGE

0° / 3°



POIDS TOTAL

Approx. 10.3 kg (potences
escamotables)
Approx. 9.6 kg (châssis fixe)



POIDS DE TRANSPORT

Approx. 7.8 kg (potences
escamotables)
Approx. 6.7 kg (châssis fixe)



POIDS MAX. UTILISATEUR

130 kg



CRASH TEST

Conforme à la norme
ISO 7176-19



Toutes les mesures et poids indiqués sont basés sur la configuration la plus légère et la plus compacte possible dans une largeur d'assise de 400 mm et une profondeur d'assise de 400 mm. Les poids et les mesures peuvent changer en fonction de la configuration du fauteuil. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site internet.

UNLIMIT YOUR WORLD*

Tél. : +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare SA
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique



Küschall est une marque déposée. Tout a été mis en œuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible au moment de l'impression. Dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, Invacare International GmbH se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés.

© July 2026, Invacare International GmbH. Tous les droits sont réservés. FR

* : Votre monde sans limite