

**K**

**Küschall®**  
**K-SERIES**

INDIVIDUELLE  
POSITIONIERUNG  
FÜR EIN AKTIVES  
FAHRERLEBNIS

---



Küschall.com

INDIVIDUELL  
ANPASSBAR



STARR UND  
DYNAMISCH



---

# ***K-SERIES***

**Die K-Series ist eine Stilikone, ein Vorreiter in der Konstruktion von Einrohrrahmen.**

Das raffinierte, modulare Sitzsystem passt sich buchstäblich an deine Bedürfnisse an und die dynamische Aufmachung bietet dir eine hervorragende Fahrleistung, damit du gerne auf Achse bist. Worauf wartest du noch?








## *BEFREIE DEINE WELT VON GRENZEN*

Mit modernster Technologie und eleganter Ästhetik bleibt die Küschall K-Series dem Küschall-Design von Leichtigkeit und Minimalismus treu. Dieser Stuhl verspricht Flexibilität und Freiheit, damit du mühelos die Welt entdecken kannst.



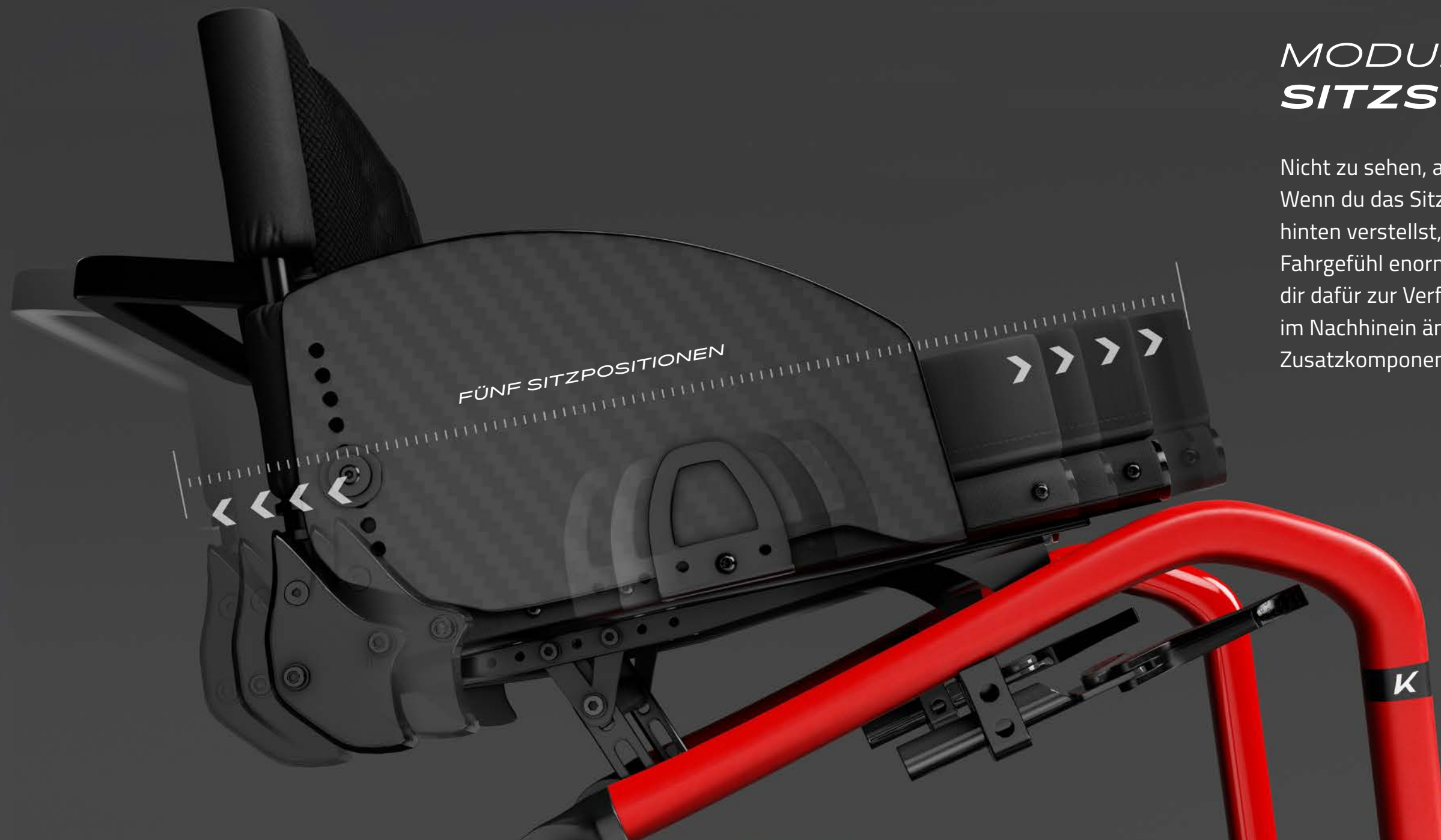

## MODULARES SITZSYSTEM

Nicht zu sehen, aber mit großer Wirkung: Wenn du das Sitzmodul nach vorne oder hinten verstellst, beeinflusst dies das Fahrgefühl enorm. Fünf Positionen stehen dir dafür zur Verfügung. Es lässt sich leicht im Nachhinein ändern, ohne dass dafür Zusatzkomponenten nötig sind.



**K**

*IM HYDROFORMING-  
VERFAHREN  
**HERGESTELLTER  
VORDERRAHMEN***

Die K-Series wurde im Hydroforming-Verfahren hergestellt. Dies bedeutet verbesserte Steifigkeit, weniger Gewicht und eine klare Form. Wir finden dies ist ein einzigartiger, kantiger Charakterrahmen.





# ***DYNAMISCHES FAHRVERHALTEN***

Die Aufnahmen der Vorderradgabeln sind fest mit dem Rahmen verschweißt - das sorgt dafür, dass die Position der Vorderräder stets optimal ist. Zusätzlich steigert dies die Steifigkeit. Das Gesamtergebnis: eine starre Konstruktion für ein einzigartig dynamisches Fahrverhalten!





# SCHAU GENAU HIN

## RÜCKENBÜGEL

Beim Verladen zeigt sich der Vorteil: Der ergonomische Rückenbügel erleichtert das Anheben des Rollstuhls. Er ist niedriger positioniert, wodurch sich die K-Series ideal mit Invacare MatrX® Positionierungsrücken kombinieren lässt.

## RÜCKEN

Der Rücken lässt sich mit sechs verschiedenen Winkeleinstellungen nach Belieben positionieren. Für den Transport kannst du ihn auf das Sitzmodul abklappen.

## SITZMODUL

In der Kuschel K-Series sitzt du mitten drin: Deinen Schwerpunkt kannst du auf fünf Positionen einstellen – je nachdem, wie aktiv das Fahrverhalten sein soll.

## VORDERRADAUFNAHME

Das Aluminiumprofil ist fest mit dem vorderen Rahmen verschweißt – das sieht nicht nur cool aus, sondern ist zusätzlich stabil.



## HYDROGEFORMTER, KANTIGER VORDERRAHMEN

Die Kante ist perfekt zum Abstützen und Umsetzen. Zugleich sieht der Rollstuhl dadurch richtig gut und modern aus. Beim Rahmenwinkel kannst du zwischen 90° und 75° wählen.

## LEICHTE AKTIV-BREMSE

Die Aluminiumbremse ist minimalistisch, leicht und wirkt präzise bis ins letzte Detail.

## ADDUKTIONSRAHMEN

Der Adduktionsrahmen wird nach unten schmaler und unterstützt somit perfekt deine natürliche Beinhaltung.

## FUSSBÜGEL

Minimalistisch, starr, cool: Der Fußbügel verleiht deinen Füßen einen sicheren Stand. Die Oberfläche ist abgeflacht und somit bequemer.





# DEINE K-SERIES – DEIN STYLE!

## 1. WÄHLE DEINE RAHMENFARBE

Standard-Farben



Verkehrsweiß   Anthrazitgrau   Tiefschwarz



Karminrot   Verkehrsblau

Weitere Rahmenfarben\*



Kanallgelb   Schwarz-Glanz   Silbergrau   Perlnachblau




Rubinrot   Dynamite Orange   Waldgrün

\*Verlängerte Lieferzeit

## 2. WÄHLE DEIN RAHMENDESIGN



## 3. WÄHLE DEINE LOGO-FARBE

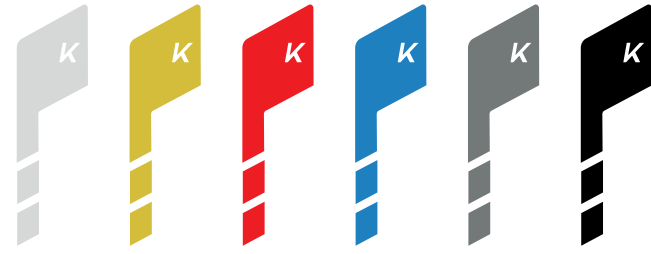

Hellgrau   Gold   Rot   Blau   Dunkelgrau   Schwarz

## 4. UNIQUE SERVICE

Erstelle Deinen individuellen Kuschall-Rollstuhl von den Rädern an. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, denn der Rollstuhl passt sich Dir und Deinem Lebensstil an – mit maßgeschneiderten Lösungen und personalisiertem Design.

**UNIQUE**  
Designed by you. Built by us.





# TECHNISCHE DATEN

## SITZBREITE

320 – 500 mm  
in 20 mm Schritten



## SITZTIEFE

350 – 525 mm  
in 25 mm Schritten



## UNTERSCHENKEL- LÄNGE

290 – 480 mm  
in 10 mm Schritten



## RÜCKENLEHNEN- HÖHE

270 – 480 mm  
in 15 mm Schritten



## RÜCKENLEHNEN- WINKEL

74° / 78° / 82° /  
86° / 90° / 94°



## SITZHÖHE

Vorn: 450 – 520 mm  
Hinten: 390 – 490 mm  
in 10 mm Schritten



## RAHMENWINKEL

75° / 90°



## GESAMTBREITE

ca. 490 - 805 mm



## GESAMTLÄNGE

75° ca. 830  
90° ca. 760



## SCHWERPUNKT

5 Positionen



## RADSTURZ

0° / 3° / 6°



## GESAMTGEWICHT, LEER

ca. 7,9 kg



## TRANSPORT- GEWICHT

ca. 5,3 kg



## MAX. NUTZER- GEWICHT

130 kg



## CRASH TEST

Crash getestet gem.  
ISO 7176-19



HMV-Nr.:  
18.50.03.5011

Alle angegebenen Maße und Gewichte basieren auf einer Sitzbreite von 400 mm und Sitztiefe von 400 mm bei der leichtesten und kompaktesten Konfiguration. Gewichte und Maße können sich bei unterschiedlichen Konfigurationen ändern.



**UNLIMIT YOUR WORLD**

Invacare GmbH  
Am Achener Hof 8  
88316 Isny  
Deutschland  
Telefon +49 7562 700-0  
kontakt@invacare.com  
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH  
Herzog-Odilo-Straße 101  
53110 Mondsee  
Österreich  
Telefon +43 6232 553-50  
Fax +43 6232 553-54  
info-austria@invacare.com  
www.invacare.at

Invacare AG  
Neuhofweg 51  
4147 Aesch BL  
Schweiz  
Telefon +41 61 48770-80  
Fax +41 61 48770-81  
switzerland@invacare.com  
www.invacare.ch