



# Küschall®

## K-SERIES

POSITIONNEMENT  
PERSONNALISABLE  
POUR UNE  
CONDUITE  
OPTIMALE

---



Küschall.com

RÉGLAGES  
PERSONNALISÉS



RIGIDE ET  
EFFICIENT



---

# ***K-SERIES***

**Le Küschall K-Series est un modèle modulaire emblématique.**

Un leader dans le domaine des fauteuils roulants actifs. Grâce à sa conception ingénieuse et polyvalente, ce modèle offre des performances de conduite optimales, où que vous alliez.





## *NAVIGUEZ DANS VOTRE UNIVERS*


Alliant une technologie de pointe à une esthétique élégante, le K-Series reste fidèle au design minimaliste de Küschall. Ce fauteuil vous offre flexibilité et liberté pour vous permettre d'évoluer sans effort dans votre quotidien.





## ASSISE MULTI-POSITIONS

Au coeur du K-Series se trouve un système d'assise modulaire. Avec cinq positions différentes du centre de gravité et de nombreuses hauteurs d'assise les possibilités de réglages sont infinies - et s'ajustent indépendamment du châssis. C'est un concept extrêmement ingénieux qui s'adapte facilement à l'évolution des besoins.

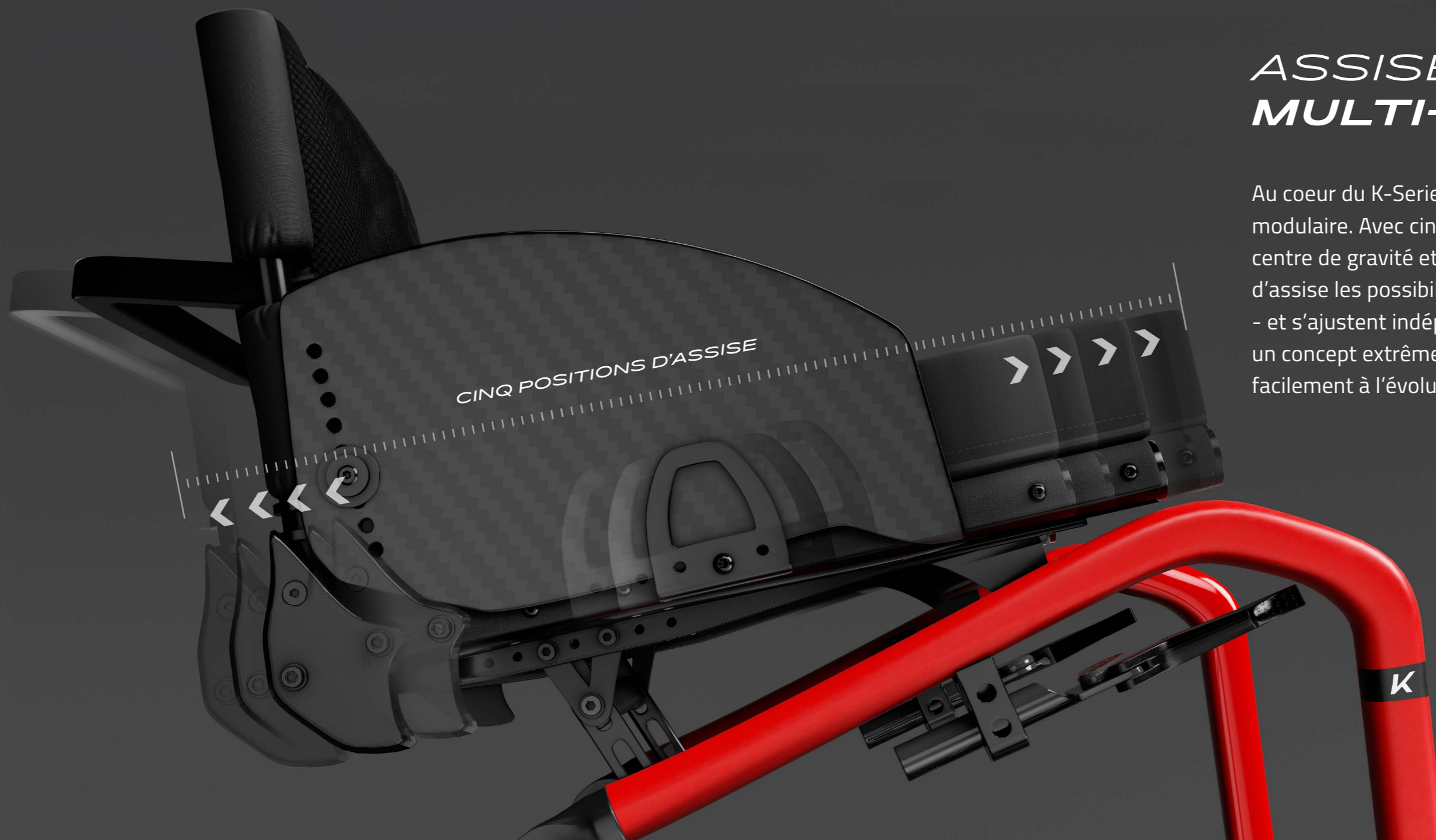



# *CONDUITE SOUPLE ET RÉGULIÈRE*

Le K-Series présente une configuration parfaite par rapport au sol. Le module d'assise indépendant isole le châssis afin de garantir que les roues restent toujours dans la même position, ce qui permet d'obtenir une conduite souple et régulière.



# DÉCOUVREZ LE K-SERIES CARBONE

La performance au quotidien, à un niveau supérieur. Le K-Series en carbone apporte encore plus d'efficacité à un design déjà emblématique. Grâce à une résistance améliorée et à une réduction des pertes d'énergie, le fauteuil offre de meilleures performances, pour une conduite plus souple et plus régulière. La même adaptabilité à laquelle vous faites confiance, désormais avec une finition en carbone plus raffinée et plus affirmée.



Scannez  
pour en  
savoir plus !

Retrouvez le même design minimaliste  
et modulaire, sublimé par le carbone.

C



-290g\*

\*Plus léger que le Champion  
standard en aluminium.



Küschall® | C  
K-SERIES



# REGARDEZ DE PLUS PRES

## BARRE DE RIGIDIFICATION

Poignée ergonomique, un élément essentiel pour soulever ou attraper le fauteuil. Positionnée assez basse, elle permet la fixation de dossiers Matrix®.

## DOSSIER

Dossier rabattable offrant six possibilités de réglage de l'inclinaison pour répondre à différents besoins de positionnement.

## MODULE D'ASSISE

Au coeur du K-Series. Le module d'assise offre cinq positions différentes du centre de gravité, ce qui rend le fauteuil roulant plus maniable.

**Küschall®** | 

## CHÂSSIS CARBONE

Améliore les performances de conduite et offre un style assuré.



## HYDROFORMAGE

Poignée ergonomique, idéale pour les changements de position et les transferts ; angle de châssis disponible en 90° et en 75°

## FREIN ACTIF LÉGER

Le frein en aluminium, au design minimaliste, atteint des niveaux de légèreté inédits. Une précision jusque dans les moindres détails.

## SUPPORT DE FOURCHES

Profilé en aluminium soudé au tube du châssis avant. Un design harmonieux sur l'ensemble du fauteuil roulant.

## CHÂSSIS AVANT RÉTRÉCI

Le châssis avant rétréci permet au fauteuil roulant de s'adapter à votre corps, pour un look épuré.

## REPOSE-PIEDS

Conçu avec une surface plane pour un plus grand confort pendant la conduite et un positionnement parfait.



# PERSONNALISEZ VOTRE K-SERIES

## 1. COLORIS DE CHÂSSIS

Coloris standards



Blanc Éclatant   Gris Anthracite   Noir Spatial



Rouge Carmin   Bleu Azur

Coloris additionnels\*



Jaune Flashy   Noir Brillant   Gris Argent   Bleu Nuit Nacré



Rouge Rubis   Orange Dynamite   Vert Forêt

\* Délais de livraison rallongés

## 2. STYLE DE DÉCALCOMANIE




## 3. COLORIS DE DÉCALCOMANIE



Rouge

Noir

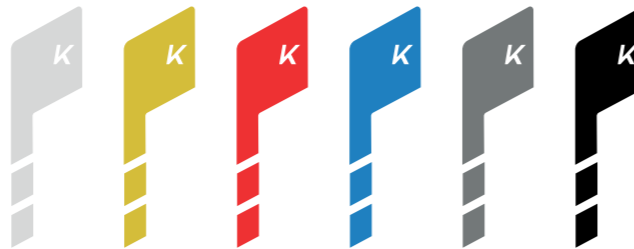

Gris Clair

Doré

Rouge

Bleu

Gris Foncé

Noir

## 4. UNIQUE

Créez votre nouveau fauteuil roulant Kuschall de A à Z grâce à UNIQUE. Ce service dédié vous permettra de concevoir un fauteuil sur mesure, adapté à votre morphologie et à votre style de vie.

**UNIQUE**  
Designed by you. Built by us.





# DONNÉES TECHNIQUES

### LARGEUR D'ASSISE

320 – 500 mm  
par pas de 20 mm



### PROFONDEUR D'ASSISE

350 – 525 mm  
par pas de 25 mm



### DISTANCE UL

290 – 480 mm  
par pas de 10 mm



### HAUTEUR DE DOSSIER

270 – 480 mm  
par pas de 15 mm



### ANGLE DE DOSSIER

74° / 78° / 82° /  
86° / 90° / 94°



### HAUTEUR D'ASSISE

Avant : 450 – 520 mm  
Arrière : 390 – 490 mm  
par pas de 10 mm



### ANGLE DE CHÂSSIS

75° / 90°  
Châssis en V ou rétréci



### LARGEUR TOTALE

Largeur d'assise  
+ 170 mm



### LONGUEUR TOTALE

75° approx. 830 - 1055 mm  
90° approx. 760 - 985 mm



### CENTRE DE GRAVITÉ

80mm / 95mm / 110mm /  
125mm / 140mm



### CARROSSAGE

0° / 3° / 6°



### POIDS TOTAL

Approx. 7.5 kg



### POIDS DE TRANSPORT

Approx. 4.8 kg



### POIDS MAX. UTILISATEUR

130 kg



### CRASH TESTÉ

Homologué - Conforme aux  
exigences de la norme  
ISO 7176-19



Toutes les mesures et poids indiqués sont basés sur la configuration la plus légère et la plus compacte possible dans une largeur d'assise de 400 mm et une profondeur d'assise de 400 mm. Les poids et les mesures peuvent changer en fonction de la configuration du fauteuil. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site internet.

**UNLIMIT YOUR WORLD\***

Tél. : +32 (0)50 - 83 10 10  
marketingbelgium@invacare.com  
www.invacare.be/fr

Invacare SA  
Autobaan 22  
8210 Loppem  
Belgique



Küschall est une marque déposée. Tout a été mis en œuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible au moment de l'impression. Dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, Invacare International GmbH se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés.  
© July 2026, Invacare International GmbH. Tous les droits sont réservés. FR

\* : Votre monde sans limite