

# Küschall®

## K-SERIES



ASSETTO  
PERSONALIZZATO  
MOVIMENTO  
SENZA  
COMPROMESSI

---



Küschall.com

REGOLAZIONE  
PERSONALIZZATA



RIGIDITA' E  
MASSIMA  
EFFICIENZA



# ***K-SERIES***

**La Küschall K-Series è un'icona del design modulare.**

Punto di riferimento tra le carrozzine manuali attive, si distingue per il suo innovativo modulo di seduta, estremamente versatile e configurabile, che offre prestazioni di propulsione eccellenti in ogni situazione.





## *IL TUO MONDO SENZA LIMITI*


Grazie a una tecnologia all'avanguardia e a un'estetica raffinata, la Küschall K-Series rimane fedele al design minimalista che contraddistingue Küschall. Questa carrozzina offre flessibilità e libertà di movimento, permettendoti di muoverti nel tuo mondo con naturalezza e senza sforzo.





## ***SISTEMA DI SEDUTA MULTIPOSIZIONE***

Il cuore della K-Series è il suo sistema di seduta modulare. Grazie a cinque diverse posizioni del baricentro e a numerose altezze di seduta, offre pressoché infinite possibilità di configurazione del posizionamento, regolabili indipendentemente dal telaio. Un progetto estremamente ingegnoso, pensato per adattarsi con facilità all'evoluzione delle esigenze dell'utilizzatore.

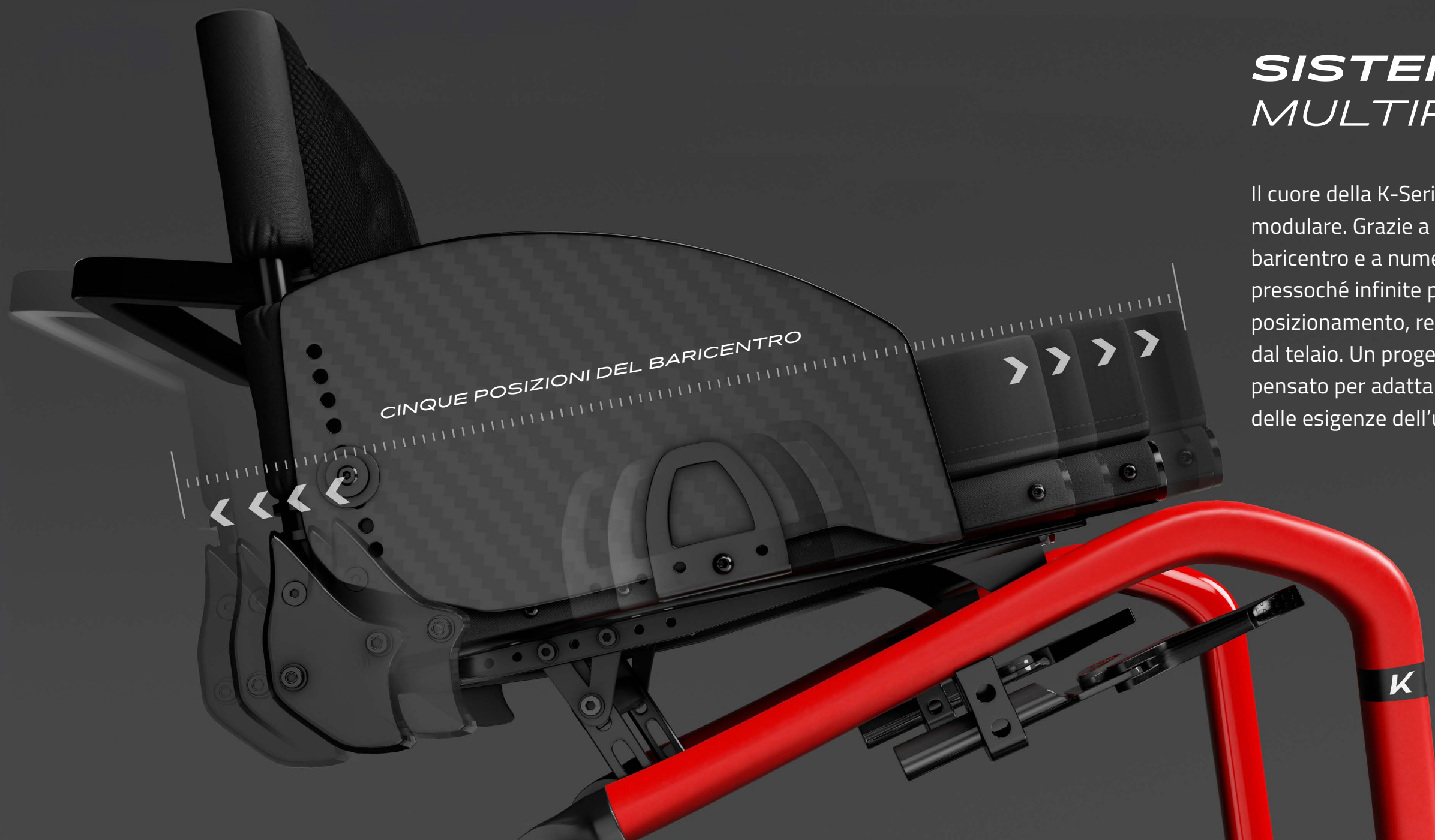



## ***PROPULSIONE FLUIDA E COSTANTE***

La K-Series presenta una geometria perfettamente ottimizzata rispetto al terreno. Il modulo di seduta indipendente isola il telaio, garantendo che le ruote mantengano sempre la stessa posizione. Il risultato è una propulsione fluida e costante, con prestazioni di guida eccellenti.



# LA NUOVA K-SERIES CARBON

**Prestazioni quotidiane, elevate a un nuovo livello.** La K-Series in carbonio porta ancora più efficienza a un design già iconico. Grazie a una maggiore resistenza e a una riduzione della dispersione di energia, la carrozzina offre una propulsione più fluida e costante. La stessa adattabilità che conosci e apprezzi, ora con una finitura in carbonio ancora più raffinata e sicura.



Guarda  
il video

Vivi lo stesso design minimalista e modulare, ora valorizzato dal carbonio.

C



-290g\*

\*Un peso complessivo ridotto rispetto alla K-Series standard in alluminio.



Küschall®  
K-SERIES





# UNO SGUARDO DA VICINO

## **BARRA POSTERIORE**

Impugnatura ergonomica, un elemento fondamentale nelle fasi di sollevamento e carico della carrozzina. Posizionamento ribassato della barra, ideale per gli schienali Matrx®.

## **SCHIENALE**

Schienale pieghevole con sei regolazioni angolari, per un posizionamento personalizzato in base alle diverse esigenze.

## **MODULO DI SEDUTA**

Il cuore della K-Series. Il modulo di seduta offre cinque diverse posizioni del baricentro, rendendo la carrozzina più attiva.

**Küschall®** |

## **OPZIONE TELAIO ULTRALEGGERO IN CARBONIO**

Migliora le prestazioni di propulsione e dona un'estetica raffinata e distintiva.



## **AREA GINOCCHIA IDROFORMATA**

Impugnatura ergonomica, ideale per il riposizionamento e i trasferimenti. Angolo del telaio disponibile nelle configurazioni a 90° e 75°.

## **FRENO ATTIVO ULTRALEGGERO**

Il freno in alluminio dal design minimalista ridefinisce il concetto di leggerezza. Precisione assoluta in ogni dettaglio.

## **SUPPORTO RUOTINA ANTERIORE**

Profilo in alluminio saldato al tubo anteriore del telaio. Un linguaggio estetico uniforme in tutta la carrozzina.

## **TELAIO RASTREMATO**

Il telaio rastremato segue la forma del corpo, offrendo un'estetica elegante e slanciata.

## **ARCHETTO POGGIPIEDI**

Progettato con una superficie piana per offrire maggiore comfort durante la propulsione e un posizionamento ottimale.



# PERSONALIZZA LA TUA K-SERIES

## 1. COLORE TELAIO

Colori standard telaio



Bianco

Grigio  
Antracite

Nero



Rosso

Blu

Colori telaio aggiuntivi\*



Giallo Fluo

Nero Lucido

Grigio Argento

Blu Notte  
Perlato





Rosso Rubino

Arancione  
Dinamite

Verde Foresta

\*Previsti tempi di consegna aggiuntivi.

## 2. STILE DECAL

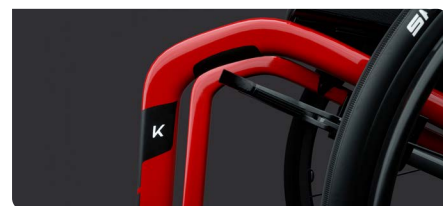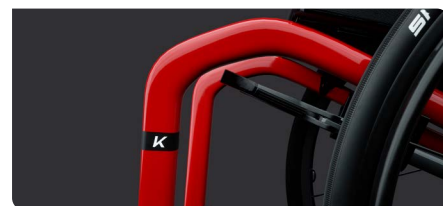


## 3. COLORE DECAL



Rosso

Nero

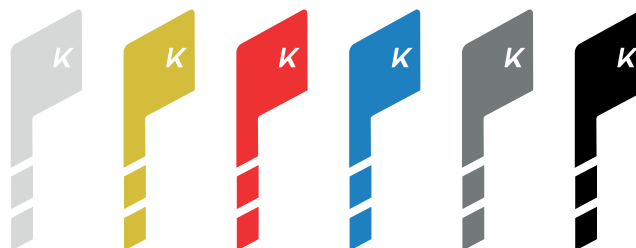

Grigio  
Chiaro

Oro

Rosso

Blu

Grigio  
Scuro

Nero

## 4. SERVIZIO UNIQUE

Crea la tua nuova Küschall UNIQUE,  
costruita su misura a partire dalle ruote.  
Un servizio esclusivo per realizzare la tua  
carrozzina personalizzata, progettata  
intorno a te e al tuo stile di vita.

**unique**  
Designed by you. Built by us.





## DATI TECNICI

### LARGHEZZA SEDUTA

320 – 500 mm  
incrementi di 20 mm



### PROFONDITÀ SEDUTA

350 – 525 mm  
incrementi di 25 mm



### LUNGHEZZA GAMBE

290 – 480 mm  
incrementi di 10 mm



### ALTEZZA SCHIENALE

270 – 480 mm  
incrementi di 15 mm



### ANGOLO DELLO SCHIENALE

74° / 78° / 82° /  
86° / 90° / 94°



### ALTEZZA SEDUTA

Anteriore: 450 – 520 mm  
Posteriore: 390 – 490 mm  
incrementi di 10 mm



### ANGOLAZIONE TELAIO

75° / 90°  
Diritto o con adduzione



### LARGHEZZA TOTALE

SW + 170 mm



### LUNGHEZZA TOTALE

75° circa 830 – 1055 mm  
90° circa 760 – 985 mm



### CENTRO DI GRAVITÀ

80mm / 95mm / 110mm /  
125mm / 140mm



### CAMPANATURA

0° / 3° / 6°



### PESO TOTALE SENZA ACCESSORI

Circa 7.5 kg



### PESO SENZA RUOTE

Circa 4.8 kg



### PESO MASSIMO UTENTE

130 kg



### CRASH TEST

Approvata e conforme ai  
requisiti della norma  
ISO 7176-19



Tutte le misure e i pesi indicati si riferiscono a una larghezza seduta di 400 mm e a una profondità seduta di 400 mm, nella configurazione più leggera e compatta.  
Peso e dimensioni possono variare in base alle diverse configurazioni. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso disponibile sul nostro sito web.

**/ UNLIMIT YOUR WORLD**

info@kuschall.com  
www.kuschall.com

DHCare Italia S.r.l.  
Via Marco Corner, 19  
36016 Thiene (VI)

