

Les différentes versions ▼



Le basculement progressif vers l'arrière s'effectue grâce à un simple appui sur les accoudoirs.



Cette version permet de lever le repose-pieds et incliner le dossier simultanément.



Cette version offre deux possibilités de réglage : soit un réglage indépendant du dossier et du repose-pieds, soit un réglage synchronisé.

Les différentes positions ▼



POSITION RELAX :
Position confort avec bascule de l'assise et du dossier. Cette action est combinée avec les fauteuils 1 moteur et peut être désynchronisée pour une position sur-mesure avec les fauteuils 2 moteurs.




POSITION RELEVEUR :
Position permettant de s'asseoir et de se relever sans effort.



POSITION REPOS :
Position couchée pour s'allonger et dormir.

Les finitions et coloris disponibles ▼

PVC/ Polyester :

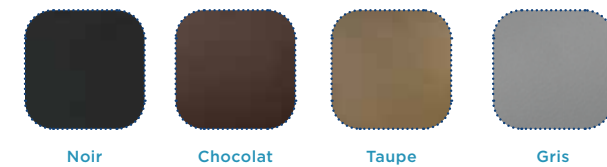

EasyClean :



Microfibre :



Tissu Heritage :

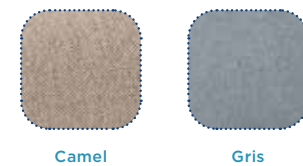


Tableau des caractéristiques ▼

1 MOTEUR											
1644969	Fino	Heritage Camel	120°	1000 mm	730 mm	780 mm	1520 mm	90 mm*	670 mm	125 kg	53 kg
1608090	Faro	Heritage Camel	120°	1110 mm	770 mm	880 mm	1580 mm	90 mm*	600 mm	125 kg	50 kg
1608091		PVC/Polyester Noir									
1608094	Douro	Heritage Camel	120°	1080 mm	740 mm	860 mm	1580 mm	100 mm*	640 mm	125 kg	57 kg
1608097		PVC/Polyester Chocolat									
1608134	Porto NG	PVC/Polyester Chocolat	120°	1020 mm	790 mm	910 mm	1670 mm	50 mm*	600 mm	125 kg	52 kg
1644970		PVC/Polyester Taupe & Microfibre taupe									
1650215		PVC/Polyester Taupe									
1650217	Cosy Up	PVC/Polyester Taupe & EasyClean Bleu	120°	1050 mm	770(1)/ 800 mm	910 mm	1520 mm	90 mm*	640(1)/ 700 mm	125 kg	57 kg
1650227		PVC/Polyester Taupe & EasyClean Taupe									
1660843		PVC/Polyester Gris foncé & EasyClean Gris clair									
1673370	Move Up	Heritage Camel	120°	1110 mm	770 mm	970 mm	1580 mm	360 mm	500 mm	65 kg	120 kg
1673371		Heritage Gris									
2 MOTEURS											
1608092	Faro	Heritage Camel	135°	1080 mm	770 mm	880 mm	1580 mm	480 mm	600 mm	125 kg	50 kg
1608135	Porto NG	Héritage Gris	135°	1020 mm	790 mm	860 mm	1670 mm	460 mm	600 mm	125 kg	52 kg
1608136		PVC/Polyester Taupe									
1644971		PVC/Polyester Taupe + Microfibre taupe									
1650238	Cosy Up	PVC/Polyester Taupe	135°	1050 mm	770(1)/ 800 mm	910 mm	1520 mm	90 mm	640(1)/ 700 mm	125 kg	57 kg
1650240		PVC/Polyester Taupe & EasyClean Bleu									
1650241		PVC/Polyester Taupe & EasyClean Taupe									
MANUEL											
1608093	Douro	PVC/Polyester Chocolat	120°	1080 mm	740 mm	860 mm	1580 mm	200 mm	640 mm	125 kg	57 kg

Les Cosy Up sont également configurables

1. sans revêtement d'accoudoir

* Modèle dos au mur

Vous souhaitez nous consulter pour de plus amples informations ?

C'est avec plaisir !

Nous sommes là pour vous.

Votre Prestataire de Santé à Domicile :

Vous souhaitez en savoir plus sur nos fauteuils releveurs et relax ?

Rendez-vous sur notre site:

www.invacare.fr

Tel. : +33 2 47 62 64 00
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr


Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France

© 2022 Invacare International GmbH. Tous droits réservés. Indications données à titre d'information (information non contractuelle). Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.
LOC - FR - 10/22 - 1644449



Yes, you can.

Fauteuils Releveurs

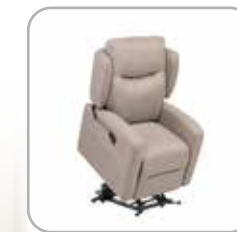

Yes, you can.

Invacare **Fino**

Le produit idéal pour les personnes de petite taille

Les accoudoirs rembourrés du fauteuil **Fino** lui offrent un très bon confort, permettant d'obtenir une largeur d'assise plus petite.

Il bénéficie de deux grandes poches latérales, de chaque côté du fauteuil, pour y glisser des magazines ou des petits objets.

Ce fauteuil nécessite un recul de seulement 9 cm par rapport au mur !

Le + produit : ses petites dimensions d'assise correspondent parfaitement aux utilisateurs de petite taille

Largeur d'assise ▶	45 cm
Profondeur d'assise ▶	45 cm
Hauteur d'assise ▶	47 cm
Poids max. utilisateur ▶	125 kg



Invacare **Faro**

Le bon compromis entre confort et simplicité

Fonctionnel et épuré, le fauteuil **Faro** présente un design moderne qui s'adaptera facilement à tout type d'environnement.

Les versions avec moteurs bénéficient d'une poche latérale pour y glisser la télécommande ou des petits objets.

En version 1 moteur, ce fauteuil nécessite un recul de seulement 9 cm par rapport au mur !

Le + produit : l'appui-tête, qui offre un meilleur maintien et un maximum de confort

Largeur d'assise ▶	53 cm
Profondeur d'assise ▶	54 cm
Hauteur d'assise ▶	47 cm
Poids max. utilisateur ▶	125 kg



Invacare **Douro**

La rencontre entre élégance et confort

Le fauteuil **Douro** offre un confort supplémentaire grâce à la continuité entre l'assise et le repose-pieds. Il bénéficie de maintiens latéraux au niveau de la tête.

Les versions avec moteurs bénéficient d'une poche latérale pour y glisser la télécommande ou des petits objets.

En version 1 moteur, ce fauteuil nécessite un recul de seulement 10 cm par rapport au mur !

Le + produit : livré avec une deuxième protection d'appui-tête en tissu, ce qui permet le lavage de la première

Largeur d'assise ▶	53 cm
Profondeur d'assise ▶	54 cm
Hauteur d'assise ▶	47 cm
Poids max. utilisateur ▶	125 kg



Invacare **Porto_{NG}**

Design sobre et classique

Le design du fauteuil **Porto_{NG}** lui permet de s'intégrer dans tout type d'environnement. Il offre toujours plus de confort grâce à la continuité entre l'assise et le repose-pieds et aux maintiens latéraux présents au niveau de la tête.

Il bénéficie d'une poche latérale pour y glisser la télécommande ou des petits objets.

En version 1 moteur, ce fauteuil nécessite un recul de seulement 5 cm par rapport au mur !

Le + produit : sa continuité entre l'assise et le repose-pieds permet un soutien optimal pour vos jambes

Largeur d'assise ▶	53 cm
Profondeur d'assise ▶	54 cm
Hauteur d'assise ▶	47 cm
Poids max. utilisateur ▶	125 kg



Invacare **Cosy Up**

Ultra personnalisable et très confortable

Le fauteuil releveur **Cosy Up** apporte un maximum de confort grâce à sa véritable assise couette et sa continuité entre l'assise et le repose-pieds.


Sa finition bi-matière lui donne un look épuré et moderne qui conviendra à tout type d'environnement.

Il bénéficie de deux grandes poches latérales, de chaque côté du fauteuil, pour y glisser des magazines ou des petits objets.

En version 1 moteur, ce fauteuil nécessite un recul de seulement 9 cm par rapport au mur !

Le + produit : des dimensions d'assise personnalisable pour adapter la largeur et la profondeur à la morphologie de l'utilisateur

Largeur d'assise ▶	45 ou 53 cm
Profondeur d'assise ▶	45 ou 54 cm
Hauteur d'assise ▶	48 cm
Poids max. utilisateur ▶	125 kg

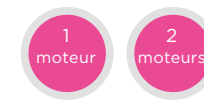

Invacare **Move Up** **NOUVEAU**

L'alliance entre confort et mobilité

Le fauteuil releveur **Move Up** vous apportera un confort optimal grâce à ses appuis-tête latéraux intégrés au dossier et sa continuité entre l'assise et le repose-pied.

Il bénéficie d'une pochette latérale, facile d'accès, elle est idéale pour y glisser la télécommande.

Découvrez le nouveau revêtement Heritage, conçu avec des matériaux plus durables et résistants. Ses propriétés imperméables et déperlantes favorisent son entretien.

Le + produit : le fauteuil devient mobile et maniable instantanément grâce à ses 4 roulettes escamotables dont deux directionnelle

Largeur d'assise ▶	48 cm
Profondeur d'assise ▶	48 cm
Hauteur d'assise ▶	50 cm
Poids max. utilisateur ▶	120 kg



Le **Move Up** se démarque grâce à son mécanisme innovant d'activation des 4 roulettes permettant de déplacer le fauteuil et son utilisateur au sein de son lieu de vie.



Le **Move Up** est équipé de 4 roulettes escamotables, l'activation se fait sans effort par le biais d'une pédale à l'arrière du fauteuil. Afin de retrouver sa stabilité initiale, la même pédale peut être utilisée pour rétracter les roulettes et assurer une sécurité lors de son usage.

