



### **Fleksibelt, funktionelt & komfortabelt**

Invacare **Modulite** er et fleksibelt, funktionelt og komfortabelt sædesystem.

**Modulite** giver god mulighed for individuel tilpasning og optimal positionering. **Modulite** sædesystemet sammensættes fra et stort udvalg af rygbaser, rygpuder, sædepuder, armlæn, benstøtter og øvrigt tilbehør, med eller uden el-funktioner.

**Modulite** kan vælges og justeres i forskellige bredder, højder, dybder og tilpasses til den enkelte brugers ønsker og behov.



Trusted Solutions, Passionate People





## Hurtig og let at tilpasse

**Modulite** kan, efter behov, monteres med enten fast ryg, rygplade eller stroppryg. Det er efterfølgende muligt, at ombytte til andet rygvalg. **Modulite** giver mulighed for trinløs justering af sædedybde, der hurtig og let kan tilpasses, selv med brugeren siddende i stolen.

## Kompatibilitet

**Modulite** tilbyder en stor grad af kompatibilitet mellem Invacare el-kørestole og komfortkørestole, hvilket er fordelagtigt ved ændringer og i forbindelse med genbrugsværdi.

**Modulite** anvender **Flex3** stroppryggen kendt fra Invacare Rea® komfortkørestolene.

**Flex3** ryggen giver god støtte og har mange justeringsmuligheder i rygrør, højde, dybde og bredde, såvel symmetrisk som asymmetrisk.

### Utallige muligheder for valg af ryg eller sædebredde



**Lav**  
Sæde- og rygstil- lingen så tæt på chassiset som muligt.



**Høj**  
Forlænget ryghøjde, dybere sæde.



**Normal**  
Tilpas- ninger af sæde og ryg indenfor standard mål.



**Bred**  
Ryglæn og sæde udvides.



**Bred foroven**  
Ryglæ- net bredt foroven, og smalt forneden samt et smalt sæde.



**Bred forneden**  
Ryglæ- net smalt foroven, og bredt forneden samt et bredt sæde.



**Stor fortil**  
Øverste del af ryglænet med øget plads til skuldre og øverste del af ryggen.



**Stor bagtil**  
Nederste del af stroppryggen indstilles med god plads.



**Kyftotisk ryg**  
Midtersek- tionen af stroppryg- gen tillader ekstra plads til den kyfoti- ske ryg.



**S-formet ryg**  
Stroppryggen kan indstil- les til ekstra støtte eller plads, hvor der er behov.

### Flere rygge - samme stol



#### Stroppryg

**Modulite/Flex3** stroppryggen har mange tilpasningsmuligheder i bredde, højde, hvor meget den favner, samt mulighed for asymmetrisk indstilling fx bred forneden, smal foroven og give ekstra meget vinkling foroven eller forneden.



#### Rygplade

**Modulite/Flex3** fast rygplade kan indstilles i højden og bredden med mulighed for asymmetrisk indstilling fx bred forneden, smal foroven og monteres med forskellige rygpuder efter ønsker og behov.



#### Matrix fast ryg

**Modulite** kan monteres med **Matrix** multijusterbare faste rygge, der giver en stabil og komfortabel støtte og god bevægelsesfrihed.

## Sæde- og rygoptioner



### Komfort rygslag

Et blødt polstret rygslag, der automatisk formes efter stroppryggens facon og brugerens kropskonturer.



### Laguna ryg pude

**Laguna** ryg puden giver med dens formede sider i skum brugeren en afslappet og komfortabel støtte.



### Mistral<sup>2</sup> ryg pude

**Mistral<sup>2</sup>** ryg puden giver med sine ekstra store og stabile sidestøtter brugeren en optimal siddestilling med god støtte og samtidig en stor frihedsgrad for bevægelse af armene.



### Passad<sup>2</sup> ryg pude

**Passad<sup>2</sup>** ryg pude giver stabilitet og komfort og er især velegnet til brugere med stort behov for støtte ved skuldre og bækken.



### Rygpude høj

Den høje ryg pude er egentlig samme pude som **Passad<sup>2</sup>** ryg puden, blot 100 mm højere og designet til høje brugere.



### Vicair<sup>®</sup> Multifunctional

En trykaflastende og positionerende ryg pude, der tilpasses individuelt til den enkelte bruger. Ryg puden er opdelt i separate rum fyldt med **Vicair<sup>®</sup> Soft Cells™**.



### Nakkestøtte

Harsammemonteringsbeslag som hovedstøtten. Konturformet for at give god støtte til nakke og nederste del af hovedet.



### Hovedstøtte

Med vinkeljusterbare "vinger" på siderne. Hovedstøtten er dybde-, vinkel-, højde- og sideværts justerbart og kan dermed indstilles individuelt til den enkelte bruger.



### Hovedstøtte med hagestyr

Harsammemonteringsbeslag som standard hovedstøtten. Dog giver udformningen af selve hovedstøttepuden mulighed for optimal støtte til den mere passive bruger.



### Vaskbart overtræk

For lettere vedligeholdelse af nakke- og hovedstøtte kan anskaffes et aftageligt og vaskbart overtræk af Dartex.

## Øvrige optioner



### Kropsstøtte fast

Kropsstøtten er bredde og dybdejusterbar samt aftagelig.



### Kropsstøtte svingaway

Kropsstøtte med svingaway beslag fås både med fast støttede pude og med en mere komfortabel, multijusterbar pude.



### Kropsstøtte forlænget

Giver en 50 mm højere placering af kropsstøtten end standard kropsstøtte. Specielt velegnet til høje brugere.



### Kropsstøtte multijusterbar

Er med sine mange indstillingsmuligheder let at forme til den enkelte bruger. Passer til alle typer rygge og rygpuder.



### Monteringsbeslag for sele

Monteres sammen med nakkestøtte eller hovedstøtte. Sele/vest kan monteres korrekt over skulderhøjde. Se iøvrigt Invacares sele/vbælte brochure.



### Seler og bæltter

Vi tilbyder et stort program i seler, bæltter og bespændinger. Rekvirer brochure for yderligere oplysninger.



### Overgangsdække

Dækker for et eventuelt mellemrum mellem rygplade og sæde.



### Kiler

Faste positioneringskiler til at give let støtte under sædepude eller bag rygpude.



### Standard armlæn

Med komfortable og rengøringsvenlige armlænsputer, der er aftagelige og justerbare - frem/tilbage og højde.



### Opklappelige-armlæn

**Modulite** kan monteres med forskellige opklappelige armlæn, der følger ryggen eller forbliver i samme position, som sædeenheten, når ryggen justeres frem eller tilbage. Opklappelige armlæn kan vælges med forskellige typer armlænsputer.



### Hemiplegiarmlæn

Højde-, dybde- og vinkeljusterbare for at give optimal komfort for brugeren.

## Øvrige optioner



### Benstøtter

**Modulite** giver mulighed for montering af forskellige typer sidehængte benstøtter, manuel eller elektrisk justerbar.



### Centerbenstøtte

**Modulite** giver mulighed for montering af forskellige centermonterede benstøtter, manuel eller elektrisk justerbar.



### Vinkelstilbare fodplader

Fodpladerne kan indstilles i dybde, højde og vinkel. Her vist med hælrem, der er standard på el-kørestolene.



### Amputationsbenstøtte

Giver brugeren perfekt støtte. Er højde-, vinkel- og dybdejusterbar med sving ind/sving ud funktion.



### Abduktionskile

Blød, oval abduktionskile til placering mellem lårene. Dybdejusterbar og aftagelig.



### Bord

Det aftagelige bord er gennemsigtigt og med bløde polstringer ved albuerne. Justerbart i dybden.



### Stokkeholder

Med plads til to stokke.



### Intuitiv ledsagerstyring

Giver hjælperen mulighed for at styre el-kørestolen, let og uden brug af kræfter.



### Rygvinkling

**Modulite** ryggen har et højt pivot og er manuel eller elektrisk vinkeljusterbar i 30°.



### Sædetilt

Det 30° (alt. 45°) elektriske sædetilt med glidende tyngdepunkt, giver mulighed for at opnå en behagelig og afslappende sidde- eller hvilestilling.



### Elektrisk sædehejs


30 cm el-hejs sikrer at sædehøjden kan tilpasses efter behov eller ifm en god arbejdshøjde for plejepersonalet.



### Hastighedreduktion

Invacare's el-kørestole er forsynet med en føler, der reducerer hastigheden, når man kører uden at sædeenheden er i neutral position.

## Sæde og sædepuder

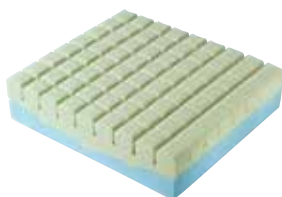

### Profileret overflade

**Propad Premier** er opskåret i tern, hvilket reducerer shear og friktion samtidig med, at trykaflastning opnås.




### Floshape sædepude

Konturformet 100 mm standardpude i latexskum skåret i lave profiler. Pudens form følger kroppens former, og giver derved en god trykaflastning.



### Inkontinensbetræk

Løst inkontinensbetræk, der passer til Invacares standardpuder. Betrækket kan vaskes ved 60°.

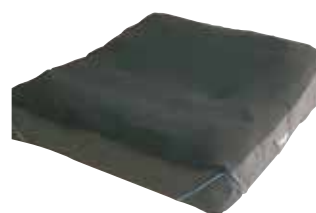

### Vicair® Multifunctional

**Vicair®** med luftfyldte celler, der giver god trykaflastning, stabil positionering og individuelt tilpasning. **Vicair®** kræver ingen daglig kontrol.

## Tekniske data



Standard:  
380 - 430 mm,  
Tilpasset:  
ca. 300 - 650 mm



Standard:  
410 - 510 mm,  
Tilpasset:  
ca. 300 - 650 mm



Standard:  
480 - 560 mm,  
Tilpasset:  
ca. 300 - 650 mm



Standard:  
270 - 390 mm



90° - 120°

**NB!** På vores værksted har vi mulighed for at tilpasse **Modulite** sædeenheden, så den passer nøjagtigt efter ønsker og behov. Vi kan levere i sædebredder fra ca. 30-65 cm og i ryghøjder, der er tilsvarende disse sædebredde. Kontakt vores lokale konsulent og få hjælp til at finde den helt rigtige løsning.

## Betræk



Sort plys



Sort dartex

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Denmark  
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690  
0001  
denmark@invacare.com  
www.invacare.dk

© 2016 Invacare International  
Sàrl  
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Flex3 - DK - 01/2016



**Yes, you can.®**