



**matrx<sup>®</sup> E2**



**SCHIENALE E2**

Serie esclusiva





# matrx® E2

## Progettazione clinica

Vi presentiamo l'esclusivo schienale Matrx E2, la seconda generazione di schienali in schiuma ondulata.

### DESIGN ERGONOMICO

Sagomato anatomicamente per offrire un supporto organico e una distribuzione ottimale della pressione. Progettato per sostenere il bacino e garantire lo spazio necessario alle anche, migliorando stabilità ed equilibrio.



### PRECISIONE

Un team clinico ha guidato la realizzazione di questo schienale con lo scopo di garantire efficienza, qualità e precisione.



### COMFORT

La forma sagomata, in abbinamento all'imbottitura in schiuma ondulata, aderisce alla naturale curvatura del corpo. L'aria viene canalizzata all'interno dell'imbottitura donando sollievo e benessere durante tutto il giorno.



### SUPPORTO

La forma anatomica favorisce una postura naturale e un allineamento perfetto. E' disponibile inoltre un'ampia gamma di supporti per il tronco per costruire l'assetto ideale.


## **m** Perfetta vestibilita'

Matrx E2 è uno schienale ergonomico adatto a diverse corporature e a differenti livelli di mobilità. E' disponibile in 2 diversi incavi per offrire il giusto sostegno in base alle differenti esigenze.




### PROFONDITA'

Incavo di 8 cm

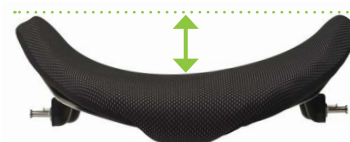

STANDARD

Incavo di 15 cm

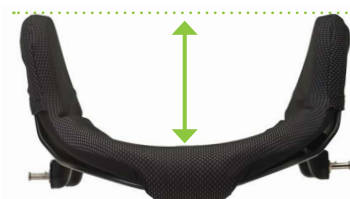


DEEP



## **m** Schiuma ondulata

La superficie in schiuma ondulata aumenta il flusso d'aria, migliorando la traspirabilità, il controllo della temperatura e la riduzione dell'umidità. La schiuma ad alta resilienza offre all'area di scarico della colonna vertebrale una maggiore capacità di accoglimento e una riduzione delle forze di taglio.

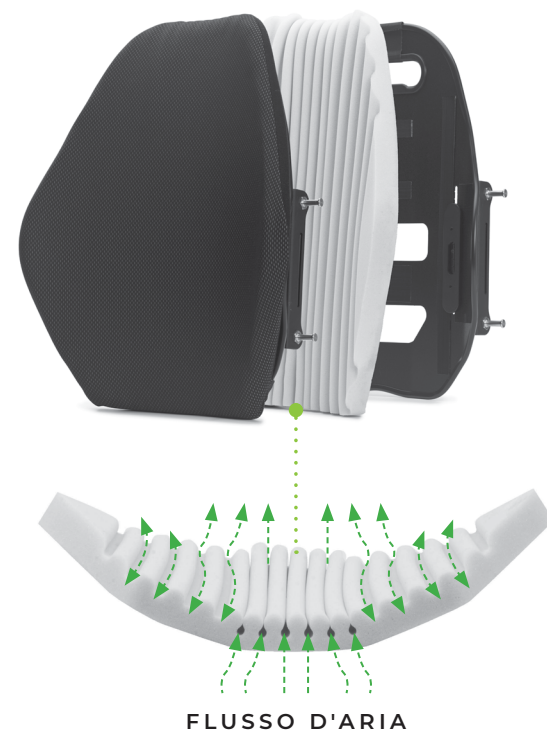

FLUSSO D'ARIA



## **m** Supporti laterali

### **FISSI**

- Si possono fissare sia all'interno che all'esterno della scocca.
- Regolabili in altezza mediante il supporto asolato per raggiungere la posizione ideale.
- Compatibili solo con schienali con altezza <26 cm.



### **GIREVOLI**

- Compatibili solo con schienali con altezza >26 cm.
- Disponibili 4 misure di imbottitura.



### **OFFSET GIREVOLI**

- Compatibili solo con schienali con altezza >31 cm.
- Disponibili 4 misure di imbottitura.



## Scopri nel dettaglio

Matrix® E2 è uno schienale ergonomico che lascia il giusto spazio alle spalle e ai fianchi, progettato per offrire il massimo supporto e libertà di movimento.

### INTERFACCIA PER POGGIATESTA

La piastra di fissaggio del poggiatesta, leggera e con spessore ridotto, può essere installata senza rimuovere la cover. Inclusa in tutti gli schienali con altezza > 36 cm. È disponibile come optional un supporto per poggiatesta heavy duty per utenti con tono muscolare elevato.

### PELOTTE LATERALI OPTIONAL

Fissaggio indipendente, facile da regolare anche con la persona seduta.



Guarda qui il video

### FORMA ANATOMICA

Scocca dello schienale sagomata, con incavi a livello delle spalle e dei fianchi, progettata per aiutare a prevenire limitazioni del movimento.

### DUE PROFONDITA'

Matrix E2 ha una concavità per il busto di 8 cm mentre su Matrix E2 Deep arriva a 15 cm.

### FENDITURE SULLA SCOCCA

Aumentano la ventilazione evitando il surriscaldamento e riducono anche il peso dello schienale. Possono fungere anche da finestre di ispezione per verificare i punti di contatto del busto allo schienale.

### REGOLAZIONE IN ALTEZZA

Le asole laterali permettono di regolare l'altezza dello schienale e dei supporti laterali mentre l'utente è seduto.





## Gamma completa e optional



### SUPPORTO LOMBARE

- Il supporto sacro lombare insiste sul bacino per favorire una corretta postura.
- Può essere tagliato secondo esigenze.

### COVER ANTISCIVOLO

- Rimovibile e lavabile



### INTERFACCIA BRETELLAGGIO

- Per un posizionamento di precisione.




### TELINO PRIVACY

- Si può fissare alla parte bassa dello schienale mediante una striscia strap prevista sul rivestimento dello schienale.
- Disponibile in 4 misure.



### FASCE DI SUPPORTO POSTURE FLEX

- Supporto addominale per un migliore controllo della voce e del respiro.
- Fornisce un supporto posturale elastico alla parte anteriore del tronco.
- Disponibile in 2 misure.
- Optional: linguetta per facilitare l'attacco/stacco in autonomia da parte dell'utilizzatore stesso.

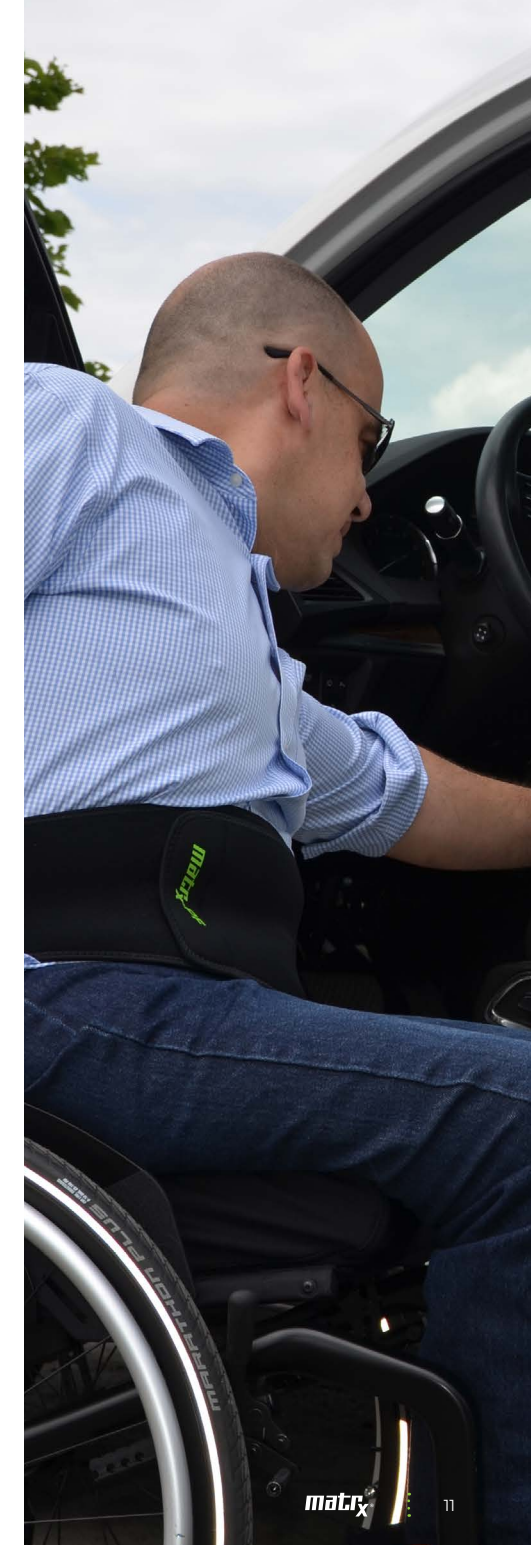


## Attacchi e Hardware

L'interfaccia MiniSet è stata progettata per rendere semplice il montaggio e le regolazioni in altezza, anche con la persona seduta sulla carrozzina. La presenza di fessure orizzontali semplifica la regolazione in continuo della larghezza.

### REGOLABILE IN LARGHEZZA E ALTEZZA



Si monta su carrozzine  
con schienale più  
stretto di 2,5 cm

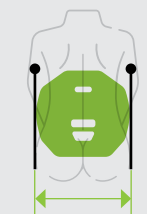

Si monta su carrozzine  
con schienale della  
stessa misura



Si monta su carrozzine  
con schienale più  
largo di 5 cm

### HARDWARE STANDARD



#### MINISET

- Standard per schienali alti almeno 41 cm.



#### EASYSET

- Standard per schienali alti più di 41 cm.

### HARDWARE OPTIONAL



#### MINISET FISSO

- Attacco fisso, rimovibile solo mediante l'uso di attrezzi
- Optional per schienali altri più di 41 cm



#### HEAVY-DUTY MINISET

- Consigliato per utenti che ne fanno un uso intenso
- Sgancio rapido



#### EASYSET FISSO

- Standard su schienali alti da 46 cm a 51 cm
- Vivamente consigliato per carrozzine basculanti o con schienale reclinabile



#### SPLIT

- Sgancio rapido adatto per schienali con forme particolari
- Optional per schienali con EASYSET, non compatibile con MINISET



#### HEAVY-DUTY EASYSET

- Pensato per utenti che ne fanno un uso intenso










## Misura schienale

		LARGHEZZA						
		36 cm	38 cm	41 cm	43 cm	46 cm	48 cm	51 cm
Fits W/C		33.5-41 cm	35.5-43 cm	38.5-46 cm	40.5-48 cm	43.5-51 cm	45.5-53 cm	48.5-56 cm
ALTEZZA	15 cm	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	20 cm	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	26 cm	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	31 cm	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	36 cm	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	41 cm	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	46 cm	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
51 cm	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	

Non adatto per utilizzatori particolarmente pesanti (peso massimo utente 136 kg)

## Dati tecnici

-  Angolo di inclinazione .....+/- 20°
-  Regolazione in profondità .....10 cm
-  Sagomatura laterale .....9, 15, 23 cm
-  Lavaggio rivestimento consigliato ...Max 60°C
-  Peso massimo utilizzatore .....136 kg







[www.invacare.it](http://www.invacare.it)

© 2025 Invacare International GmbH. Le immagini e le informazioni relative ai prodotti sono destinate esclusivamente agli operatori professionali del settore e non hanno finalità pubblicitarie, bensì informative. Tutti i diritti riservati. Si ritiene che tutte le informazioni citate siano corrette al momento della stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza previa consultazione. IT – 01/26