

**matrx<sup>®</sup>MAC**



**DOSSIER MULTI-RÉGLABLE**

Personnalisation sans effort





## matrx® MAC

### Conception clinique

Découvrez notre nouvelle approche pour le maintien postural : le Matrx® MAC est notre nouveau dossier multi-réglable, disponible avec un insert HUG en option.

### AJUSTEMENTS PERSONNALISÉS

Entièrement configurable pour convenir au plus grand nombre de morphologies, et ajustable en cas d'évolution des besoins.

Le Matrx MAC est notre nouvelle solution qui apporte des ajustements, un positionnement et un confort personnalisés.



#### PRÉCISION

Chaque spécificité développée par notre équipe de cliniciens vise l'efficacité et un positionnement de qualité. Combinez les maintiens latéraux pour créer une solution de positionnement personnalisée.



#### CONFORT

La forme du dossier et l'insert optionnel HUG offrent immersion et enveloppement tout en améliorant le confort de l'utilisateur.



#### MAINTIEN

Conçu à partir de la forme anatomique du dossier Matrx Elite E2, le Matrx MAC promeut une posture optimale et un renforcement de l'alignement naturel.

## M Modulaire pour suivre les besoins de l'utilisateur

Le Matrix® MAC est une solution modulaire adaptée aux bascules d'assise et de dossier. Il apporte des maintiens latéraux interchangeables et ambidextres qui peuvent être combinés pour offrir un maintien de tronc sur-mesure pour les personnes ayant des besoins de positionnement complexes.

### PERSONNALISEZ

3 profondeurs et soutiens asymétriques




ASYMÉTRIE

Maintien latéral 23 cm



EXTRA DEEP

Maintien latéral 15 cm

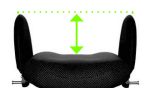

DEEP

Maintien latéral 9 cm



STANDARD

## M Aide à corriger les scolioses légères

L'effondrement postural peut impacter le fonctionnement des organes. Le Matrix MAC offre un alignement naturel de la colonne vertébrale et de la posture.




### LARGEUR ET HAUTEUR AJUSTABLES



Adapté aux fauteuils jusqu'à 5 cm plus larges que le dossier



Adapté aux fauteuils de même largeur que le dossier

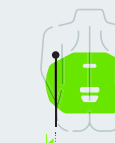

Adapté aux fauteuils jusqu'à 2,5 cm moins larges que le dossier



## Choisissez le Matrx HUG pour un confort plus poussé


La garniture de coussin optionnelle HUG est composée de fibres de Stamina® souples pour un maximum d'immersion et d'enveloppement.

- Régulation du microclimat
- Hypoallergénique
- Lavable en machine et convient aux sèche-linges
- Garde sa forme

Recommandé pour les asymétries posturales légères.

Tout le monde aime les HUG !

**matrx**<sup>HUG</sup>

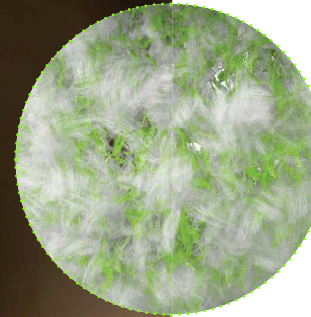

Fibre de Stamina®

### OPTIONS DE GARNITURES DE DOSSIER



STANDARD

#### Double épaisseur de mousse

Couches de mousse à haute résilience super moelleuse/ferme pour assurer le confort et le maintien



OPTIONNEL

#### HUG

Fibres de Stamina® souples pour un maximum de confort et d'enveloppement

## **M** Regardez de plus près

Le Matrx® MAC a une structure ergonomique enveloppante conçue à partir du Matrx® Elite E2 avec des maintiens scapulaires pour des utilisations avec des bascules d'assise et de dossier.

### INTERFACE D'APPUI-TÊTE

Interface d'appui-tête HD inclus

### COUSSIN CENTRAL

Double épaisseur de mousse ou HUG avec de la fibre de Stamina® (non présenté)

### OUTIL D'INSTALLATION

Permet une installation facile garantissant l'alignement de la plaque de dossier et des maintiens latéraux pendant l'installation



### COMBINER & CRÉER

Les maintiens latéraux sont interchangeables. Ils peuvent donc être combinés et assortis en fonction des besoins spécifiques

### AJUSTEMENT DE LA LARGEUR

Ambidextres et interchangeables, les maintiens latéraux sont ajustables indépendamment, permettant d'ajuster la largeur de dossier jusqu'à 3 cm

### AJUSTEMENT DE LA PROFONDEUR

3 profils de maintiens latéraux sont disponibles avec des profondeurs différentes

### AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR

Les maintiens latéraux peuvent être réglés en hauteur indépendamment même lorsque l'utilisateur est assis dans son fauteuil



## Montage et options de fixation



### MONTAGE FACILE

Fixations standards pour les dossiers avec une hauteur allant de 46 à 56 cm. Démontage rapide pour enlever facilement le dossier.



### KIT HD

Recommandé pour un usage impliquant des masses importantes ou pour un usage intensif.



### SPLIT

Permet le dégagement des obstacles du châssis, démontage rapide pour les cannes de dossier de 46 à 56 cm de hauteur. Le démontage rapide permet de retirer aisément le dossier du fauteuil.



### FIXES

Le montage et le démontage nécessitent des outils. Ces attaches sont recommandées pour l'utilisation de bascules d'assise et de dossier. Adaptées pour des dossiers avec des hauteurs comprises entre 46 et 56 cm.

## Tailles de dossier

		LARGEUR				
		41cm	43cm	46cm	48cm	51cm
HAUTEUR	Compatibilité	39-46cm	41-48cm	43-51cm	46-53cm	48-56cm
	41cm	●	●	●	●	●
	46cm	●	●	●	●	●
	51cm	●	●	●	●	●
	56cm	●	●	●	●	●

## Caractéristiques techniques

- Ajustable en angle .....40°
- Ajustable en profondeur sur .....10cm
- Profondeurs de galbe de .....9, 15, 23cm
- Réglage latéral sur .....2,6cm
- Réglage en hauteur des supports latéraux sur .....20cm
- Lavage de la housse à .....60°C
- Poids max. utilisateur .....136kg
- Garantie .....2 ans



● Matrix MAC combiné avec un appui-tête Matrix Lexx sur un fauteuil roulant Rea Azalea



Les dossiers Matrix® MAC utilisés pour le transport de personnes doivent être équipés d'un appui-tête et doivent être utilisés uniquement avec des fauteuils roulants conformes aux exigences des normes RESNA WC19 ou ISO 7176-19



[invacare.fr](http://invacare.fr)

©2024 Invacare International GmbH. Tous droits réservés. Indications données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit. FR - 08/24.