



matrx[®] MINI



SERIE MINI

Supporto per seduta pediatrica





matrx[®] MINI

Progettazione con focus clinico

Il sistema Matrx[®] Mini Series si compone di schienale e cuscino. È progettata specificamente per i bambini, offrendo supporto eccezionale, comfort e massima libertà di movimento.

LEGGERO E RESISTENTE

Sistema di seduta leggero e resistente, pensato per assecondare le capacità motorie dei più piccoli e per offrire massimo comfort e un corretto supporto posturale.



PRECISIONE

Progettata e costruita con cura, la Mini Series risponde alle esigenze specifiche del bambino.



COMFORT

La forma sagomata ed ergonomica offre un ottimo supporto e un affondo confortevole.



SUPPORTO

Studiato per stimolare una corretta posizione evitando posture scorrette.

Posizionamento ottimale

La gamma Matrx Mini si compone dello schienale Mini e dal cuscino Mini PS. Questa combinazione è in grado di garantire il miglior posizionamento per i bambini che usano una carrozzina.





Matrx® Mini PS

Matrx Mini PS is a high resilient wheelchair cushion made with our signature moulded foam. It is designed for mild positioning and targeted immersion around the ischial tuberosities.

SAGOMATO


Una schiuma compatta garantisce stabilità. Il trattamento antimicrobico Ultra-Fresh previene gli odori e il proliferare di funghi e batteri. Una schiuma compatta garantisce stabilità. Il trattamento antimicrobico Ultra-Fresh previene gli odori e il proliferare di funghi e batteri

BORDO ANATOMICO

L'area di contatto viene massimizzata per una migliore protezione della pelle

PROFILO ANTERIORE A CASCATA

La schiuma compatta assicura una posizione stabile

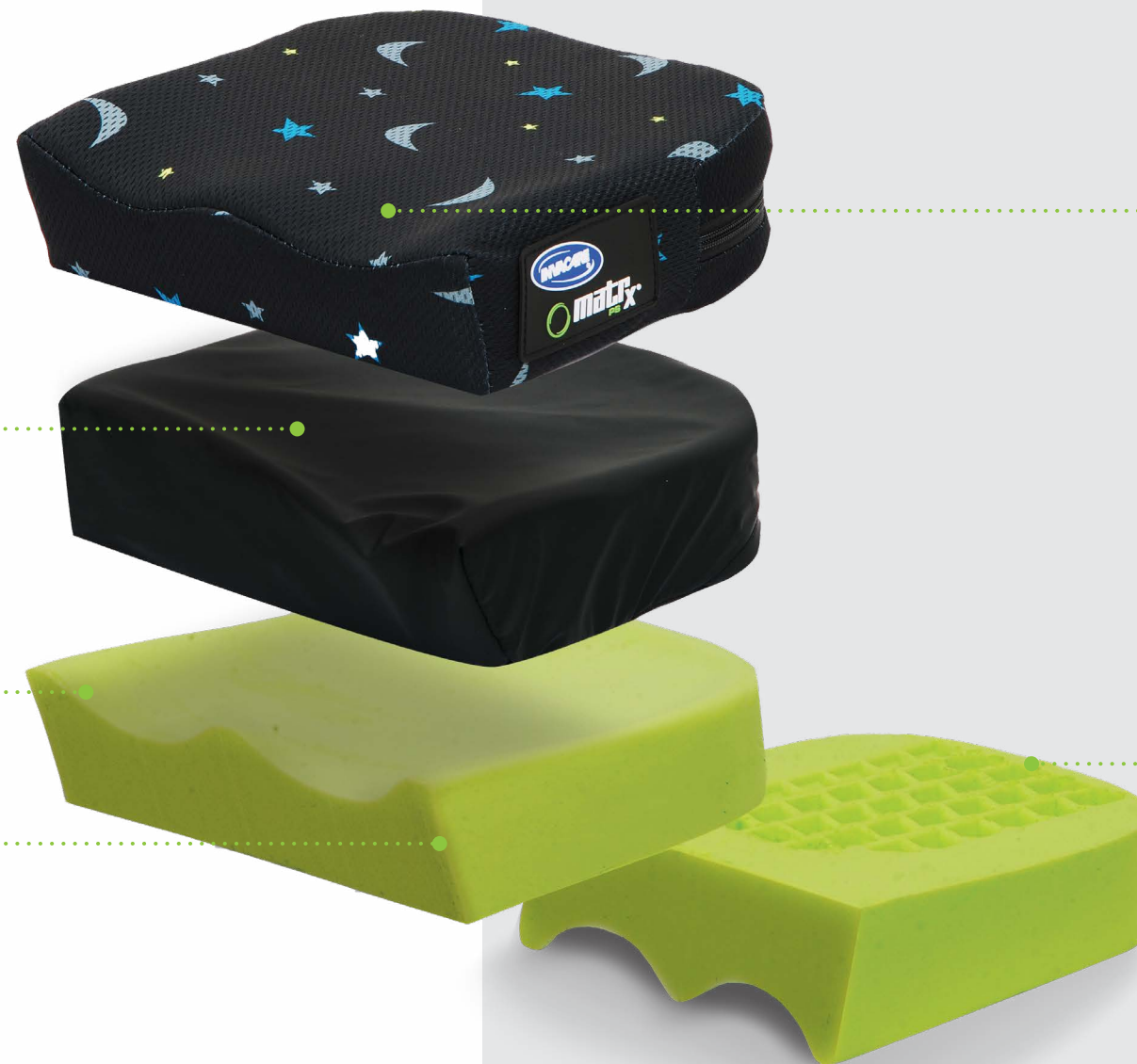

Action³ Junior

IDEALE PER CARROZZINE ACTION JUNIOR

DESIGN "SPAZIALE"

Rivestimento traspirante resistente all'umidità con motivo Kid*a*bra

SUPERFICIE GOFFRATA

Da sollievo alla zona degli ischi e garantisce un affondo confortevole

Matrx® Mini Back

Lo schienale Matrx Mini con il suo aggancio MiniSet è una soluzione posturale leggera che stabilisce un posizionamento corretto. Si monta e si regola in pochi istanti.

SMUSSATURA SCAPOLARE

Consente la massima libertà di movimento a livello delle scapole

SCOCCA LEGGERA

Progettato per stabilizzare anche e tronco, ottimizzando il posizionamento e le funzionalità motorie

ATTACCHI MINISET

Lo sgancio rapido consente regolazioni per adattarsi alla crescita



Action³ Junior

IDEALE PER CARROZZINE ACTION JUNIOR

DESIGN "SPAZIALE"

Rivestimento traspirante resistente all'umidità con motivo Kid*a*bra

PROFILO SAGOMATO


Scocca in alluminio sagomata anatomicamente

m Agganci e Optional

I perni regolabili fissano lo schienale Matrx Mini al sistema MiniSet sulla sedia a rotelle. La ferramenta può essere posizionata per evitare ostacoli del telaio, come i braccioli, e può essere regolata comodamente mentre il bambino è seduto.



REGOLAZIONE IN LARGHEZZA E ALTEZZA

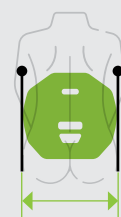

Si monta su carrozzine con schienale della stessa misura



Compatibile con carrozzine con larghezza superiore di 2,5 cm. Adattabile anche a carrozzine con schienale più largo di 5 cm tramite perni più lunghi (optional)

POGGIATESTA ELAN MINI

Regolabile in continuo su 6 punti. Disponibile una vasta gamma di cuscinetti appoggiatesta Elan



POGGIATESTA

Lo schienale Mini è predisposto per fissare il supporto poggiatesta.



CUSCINI LATERALI FISSI

Regolabili in altezza.



INTERFACCIA BRETELLAGGIO

Disponibile uno specifico attacco per bretellaggi.



AGGANCI MINISET

Regolazione in profondità 100 mm per seguire la crescita del bambino. Regolabile in inclinazione +/- 20°. Compatibile con tubi schienale del diametro di 22 mm e 19 mm.




CUSCINETTI LATERALI GIREVOLI

Regolabili in larghezza, altezza e profondità. Il supporto a sgancio rapido consente di ruotare i cuscinetti lateralmente.



INTERFACCIA BRETELLAGGIO PER SCHIENALE MINI

Disponibile uno specifico attacco per bretellaggi.

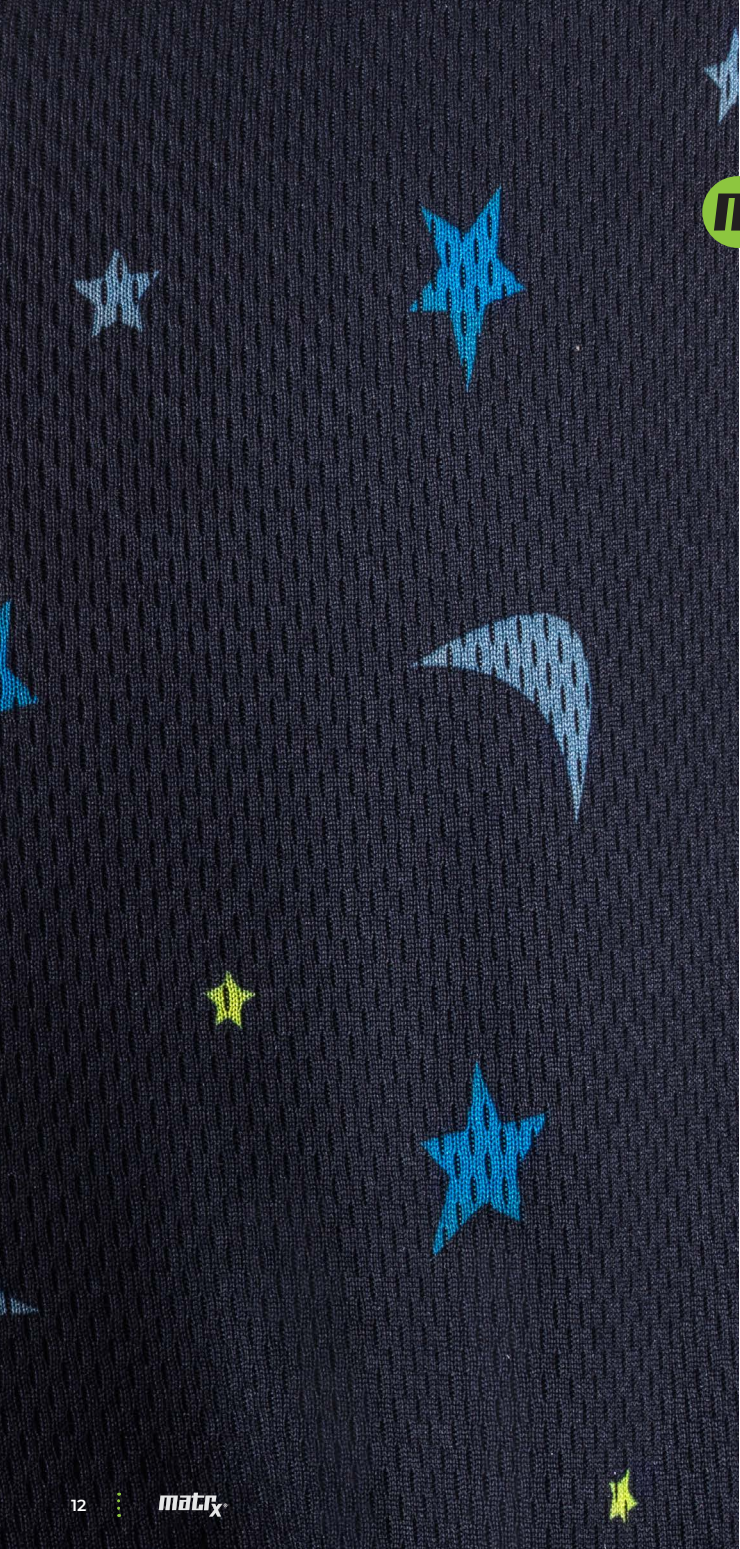

Misure Schienale

		LARGHEZZA				
ALTEZZA		26 cm	28 cm	31 cm	33 cm	36 cm
	Fits W/C	26-31 cm	28-33 cm	31-36 cm	33-38 cm	36-41 cm
	18 cm	●	●	●	●	●
	26 cm	●	●	●	●	●
	31 cm	●	●	●	●	●
	36 cm	●	●	●	●	●

Misure Cuscino

ALTEZZA	LARGHEZZA					
		26 cm	28 cm	31 cm	33 cm	36 cm
	26 cm	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	31 cm	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	36 cm	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>

Dati tecnici schienale



Concavità 8 cm



Regolazione profondità..... 10 cm



Regolazione inclinazione +/- 20°



Peso complessivo..... 400 g and up



Peso massimo utilizzatore..... 68 kg

Dati tecnici cuscino



Spessore a livello deadduttore/
adduttore 8.9 cm



Spessore a livello della coscia 5 cm



Peso complessivo..... 150 g and up



Peso massimo utilizzatore 68 kg



Massima temperatura lavaggio
(fodera esterna) 60°C



Modalità di pulizia consigliata
(liner) con un panno umido





www.invacare.it

© 2025 Invacare International GmbH. Le immagini e le informazioni relative ai prodotti sono destinate esclusivamente agli operatori professionali del settore e non hanno finalità pubblicitarie, bensì informative. Tutti i diritti riservati. Si ritiene che tutte le informazioni citate siano corrette al momento della stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza previa consultazione. IT – 01/26