



matrx[®]MX2



SCHIENALE MX2

Alte prestazioni





matrx[®]MX2

Design nato dall'esperienza clinica

Matrx[®] MX2, la seconda generazione di schienali ultraleggeri che offrono una stabilità senza paragone a chi utilizza carrozzine attive.

ULTRALEGGERO

MX2 è uno schienale in fibra di carbonio, flessibile e al tempo stesso robusto, in grado di esaltare le caratteristiche della carrozzina su cui viene montato.



PRECISIONE

La realizzazione di MX2 è stata condotta sotto la supervisione di un team clinico. Gli obiettivi: efficienza, qualità e precisione.



COMFORT

La sagoma anatomica e leggera offre al busto un supporto stabile e confortevole.



SUPPORTO

La flessibilità della scocca sostiene il tronco e ne asseconda i movimenti.

m Pensato per un utilizzo attivo

Matrx MX2 è uno schienale ultraleggero, progettato specificamente con diversi strati di fibra di carbonio per garantire movimenti flessibili e un efficace assorbimento degli urti. La scelta ideale per uno stile di vita attivo.



Profondità sagoma: 76 mm



m Libertà di movimento



FLESSIBILITA'

Segue delicatamente i movimenti del corpo per garantire funzionalità e prestazioni ottimali.



STABILITÀ

La struttura rigida garantisce un maggiore sostegno laterale.



COMFORT

Riduce efficacemente le vibrazioni, soprattutto quando utilizzato con il fissaggio in carbonio.

m Scopri i dettagli

Matrx® MX2 è un sistema di postura elegante e ultraleggero che garantisce massima stabilità.

SCocca IN CARBONIO

La scocca dorsale in fibra di carbonio offre flessibilità e sospensione per un comfort di guida superiore.

FENDITURE SULLA SCocca

Aumentano la traspirazione, migliorando il microclima corporeo.

CUSCINETTO DI POSIZIONAMENTO

E' incluso nella dotazione di serie un cuscinetto lombare per dare maggiore supporto nella parte inferiore.



Küschall®

IDEALE PER GLI UTENTI KUSCHALL

COVER TRASPIRANTE

Gli schienali con altezza superiore a 23 cm sono dotati anche di rinforzi laterali in similpelle.

BORDI LATERALI SMUSSATI

Lasciano spazio di movimento alle scapole, facilitando l'autospinta.

IMBOTTITURA OVERSIZE

Per maggiore comfort e protezione.

PROFILO INFERIORE SMUSSATO

Ottimo per spostarsi lateralmente con facilità, riducendo la pressione e raggiungendo gli oggetti comodamente.




m Optional



TELINO PRIVACY

Una soluzione per coprire lo spazio visibile tra schienale e seduta.

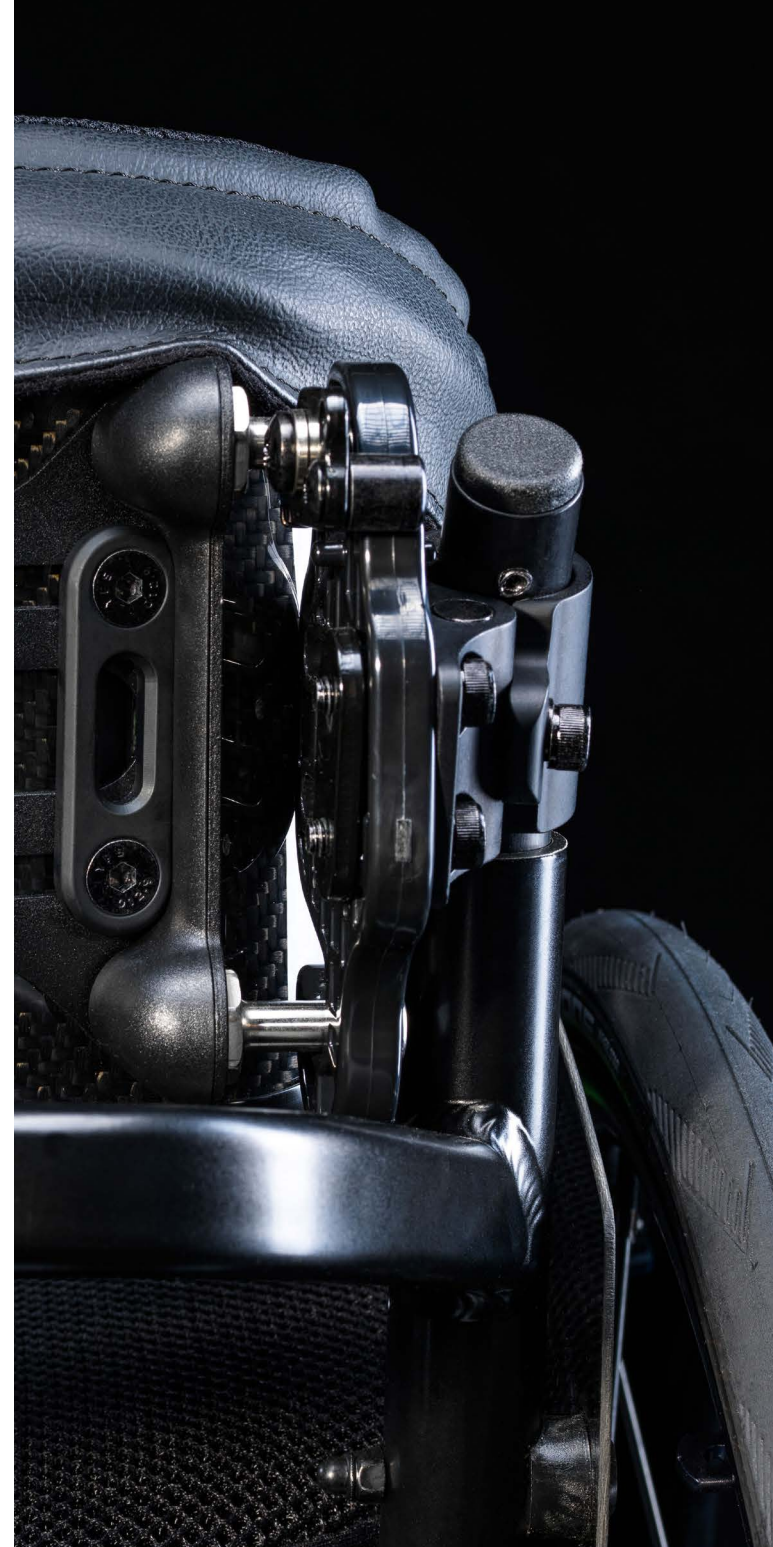

m Agganci hardware optional

Il montaggio è facilitato dall'interfaccia per gli attacchi MiniSet, studiata per poter regolare il posizionamento dello schienale con la persona seduta. Le asole orizzontali, inoltre, permettono la regolazione in larghezza in continuo.

FISSAGGIO DI PRECISIONE

L'hardware MX2 è stato pensato per avere un intervallo di fissaggio flessibile e adattarsi a carrozzine più larghe o più strette, in accordo con le diverse conformazioni fisiche che possono presentare fianchi più larghi della schiena o più stretti.

AGGANCI STANDARD

AGGANCI SGANCIO RAPIDO

Consentono di rimuovere lo schienale per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio.



AGGANCI OPTIONAL


ATTACCO FISSO IN CARBONIO

Realizzato in fibra di carbonio ultraleggera garantisce maggiore flessibilità.




Gli agganci, sia fissi che rimovibili, sono regolabili in altezza, profondità ed inclinazione per una vestibilità perfetta.

**REGOLABILE
IN ALTEZZA E
LARGHEZZA**

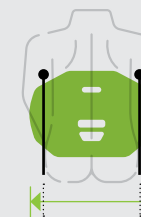

Si monta su carrozzine con schienale più stretto di 2,5 cm

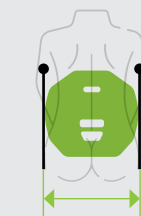

Per carrozzine con larghezza uguale a quella dello schienale.








Si monta su carrozzine con schienale più largo di 5 cm



Misure Schienale

		LARGHEZZA				
		41 cm	43 cm	46 cm	48 cm	51 cm
ALTEZZA	Compatibilità	38,5-46 cm	40,5-48 cm	43,5-51 cm	45,5-53 cm	48,5-56 cm
	41 cm	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	46 cm	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	51 cm	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	56 cm	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>

Dati tecnici

-  Regolazione in inclinazione +/- 20°
-  Regolazione in profondità .. 7.6 cm¹ / 10.8 cm²
-  Lavaggio rivestimento consigliato 60°C
-  Peso massimo utilizzatore 113 kg
-  Peso complessivo 770 gr up
(inclusi gli attacchi fissi)

1. Con attacchi fissi
2. Con attacchi a sgancio rapido





www.invacare.it

© 2025 Invacare International GmbH. Le immagini e le informazioni relative ai prodotti sono destinate esclusivamente agli operatori professionali del settore e non hanno finalità pubblicitarie, bensì informative. Tutti i diritti riservati. Si ritiene che tutte le informazioni citate siano corrette al momento della stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza previa consultazione. IT – 01/26