



matrx[®]MAC



MULTI-JUSTERBART RYGSYSTEM

Ubesværet og let tilpasning





matrx[®]MAC

Klinisk design med bruger i fokus

Matrx[®] MAC er det multijusterbare rygsystem, der tilbyder en let og ubesværet tilpasning

MANGE TILPASNINGSMULIGHEDER

Matrx MAC er vores rygsystem, der er let at indstille til forskellige kropsformer og med mulighed for asymmetrisk indstilling



PRÆCISION

Hver enkelt ryg er udviklet af kliniske specialister med fokus på effektivitet og kvalitet for den enkelte bruger.



KOMFORT

Konturformet ryg med mulighed for HUG pude indsats, der giver ekstra trykfordeling, bedre mikroklima og forbedrer den generelle komfort.



STØTTE OG POSITIONERING

Den anatomisk formede ryg og muligheder for individuel tilpasning giver god støtte og optimale forhold for korrekt positionering

M Modulopbygget

Matrx® MAC er en modulær løsning, der er bedst egnet til brugere med store tilpasningsbehov. Med de udskiftelige og multijusterbare sidestøtter kan man matche komplekse behov for støtte og positionering.



ASYMMETRISK



23cm dybde



15cm dybde



9cm dybde

STANDARD

3 STØRRELSER

3 forskellige dybder og med asymmetrisk indstilling



23cm

15cm

9cm

EXTRA DYB

DYB

STANDARD

M Hjælper ved skoliose

Skoliose kan hæmme funktionen af indre organer. Matrx Mac giver mulighed for støtte og en korrekt positionering.



JUSTERBAR
BREDDE OG
HØJDE



Passer til stole der er 2,5 cm smallere end rygbrede



Passer til stole med samme bredde som rygbrede



Passer til stole der er 5 cm bredere end rygbrede


Matrx HUG for maksimal komfort

HUG er et tilbehør med bløde Stamina-fibre der kan anvendes i stedet for standard rygpolstring. HUG har følgende egenskaber:

- Giver forbedret mikroklima
- Allergivenlig
- Kan vaskes i maskine
- Bevarer sin pasform

Anbefales til behov for støtte/komfort og hvor forbedring af mikroklimaet er i fokus

matrx[®]HUG

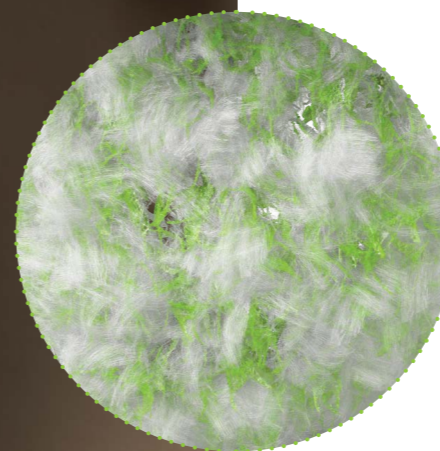

Stamina Fibre[®]

MATRX HUG



STANDARD

Dual Layer Foam

Et mix af to HR skumtyper giver komfort og støtte.



TILBEHØR

HUG

Bløde og komfortable Stamina-fibre giver optimal indhylning og trykaflastning

M Egenskaber

Matrx® MAC har en ergonomisk konturformet basisplade med muligheder for tilføjelse af tilbehør.

HOVEDSTØTTE

Beslag til nakkestøtte.

RYGSKAL

Plads til fastgørelse af Dual Layer skum eller Stamina Fibre®.

SIDESTØTTER

Udskift sidestøtter efter det aktuelle behov.

BREDDEJUSTERING

Multijusterbare og udskiftelige sidestøtter der giver op til 3 cm. breddejustering

DYBDEJUSTERING

3 forskellige sidestøtter med dybde 9, 15 eller 23 cm.

HØJDEJUSTERING

Sidestøtterne kan individuelt justeres i højden - evt. med bruger i stolen.





Montering



SØHESTEBESLAG

Quick-release beslag som giver en let af- og påmontering

Størrelser

		BREDDE				
		41cm	43cm	46cm	48cm	51cm
HØJDE	Kørestols-bredde	39-46cm	41-48cm	43-51cm	46-53cm	48-56cm
	46cm	●	●	●	●	●
	51cm	●	●	●	●	●
	56cm	●	●	●	●	●

Tekniske data

-  Vinkeljustering40°
-  Dybdejustering10cm
-  Sidestøtter dybde9, 15, 23cm
-  Sidestøtter, breddejustering2.6cm
-  Sidestøtter, højdejustering20cm
-  Betræk, vasketemperatur60°C
-  Max. brugervægt136kg

● Matrix MAC monteret på Rea Azalea komfortkørestol





Matrix® MAC der bruges til at transport i bil, bør være udstyret med en nakkestøtte, og må kun anvendes i forbindelse med kørestole, der opfylder ydelseskravene i ISO 7176-19



[invacare.eu.com](https://www.invacare.eu.com)

© 2024 Invacare International Sàrl. All rights reserved. All information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel. Matrix MAC. DK - 08/2024