



**matrx<sup>®</sup>MAC**



**RESPALDO MULTI AJUSTABLE  
ENVOLVENTE & MODULAR**

Personalización sin esfuerzo





# matrx® MAC

## Diseño clínico

Matrx® MAC es nuestro nuevo respaldo envolvente ajustable con un inserto de cojín HUG opcional.

### AJUSTE A MEDIDA

Completamente configurable para la más amplia gama de formas corporales, condiciones y evolutivo.

Una nueva forma de proporcionar ajuste, posicionamiento y confort personalizado.



### PRECISIÓN

Todas las especificaciones desarrolladas por nuestro equipo clínico buscan la eficacia y un ajuste preciso de calidad. Añade nuestra gama de soportes laterales para un ajuste personalizado.



### CONFORT

El diseño contorneado y la almohadilla HUG opcional maximizan la inmersión, el envolvimiento, y mejoran el confort general.



### SOPORTE

Basado en el respaldo anatómico Matrx E2, el Matrx MAC favorece una buena postura y una alineación natural mejorada.

## M Modular para un ajuste personalizado

Matrx® MAC es una solución modular ideal para aplicaciones de basculación y reclinación. Se le pueden añadir varios tipos de soportes de tronco intercambiables que proporcionan una sujeción lateral a medida para personas con necesidades posturales más complejas.



ASIMÉTRICO

Soportes laterales de 23 cm



Soportes laterales de 15 cm



Soportes laterales de 9 cm



ESTÁNDAR

### PERSONALIZABLE

3 profundidades de soportes laterales con opción de asimetría



## M Ayuda a corregir la escoliosis leve

El colapso postural puede impedir el funcionamiento de los órganos internos. Matrx MAX favorece la alineación natural de la columna vertebral y la postura.



### ANCHURA Y ALTURA AJUSTABLES



Se adapta a sillas 25 cm más estrechas que el modelo de respaldo MAC



Se adapta a sillas de igual anchura que el modelo de respaldo MAC



Se adapta a sillas 5 cm más anchas que el modelo de respaldo MAC



## Elija Matrix HUG para un confort avanzado

Cojín HUG opcional, con Stamina Fiber® suave y cómoda para una inmersión y envolvimiento máximos.


- Confort máximo
- Control del Microclima
- Hipoalergénico
- Se puede lavar y secar a máquina
- Conserva su forma

Recomendado para acomodar asimetrías posturales moderadas

¡A todo el mundo le gusta un HUG!\*


\*ABRAZO

**matrix**® HUG

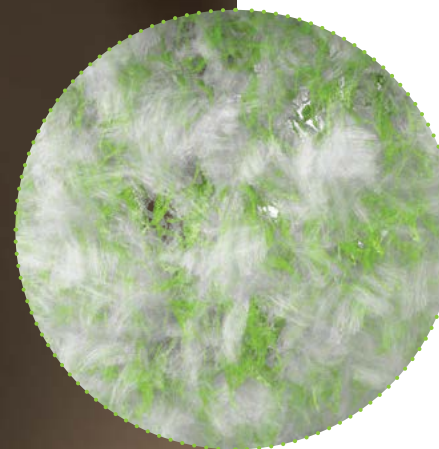

Stamina Fiber®

### OPCIÓN DE COJINES

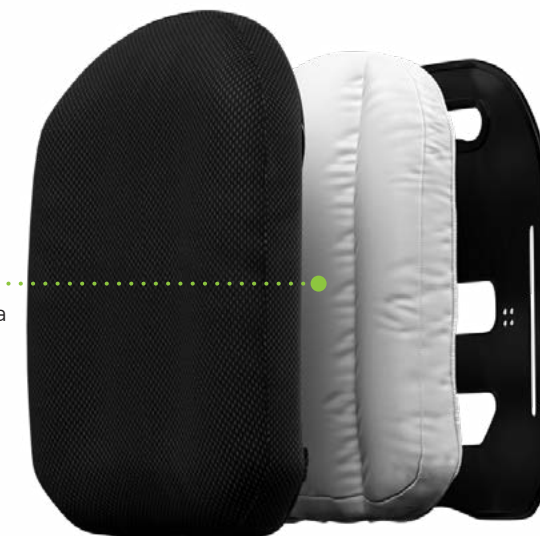

ESTÁNDAR

#### Espuma de doble densidad

2 Capas de espuma:  
HR supersuave/firme para mayor comodidad y sujeción



OPCIONAL

#### HUG

Stamina Fiber® suave y adaptable para una inmersión y envolvimiento máximos

## **M** Échale un vistazo

Matrx® MAC incluye una carcasa de respaldo con contorno ergonómico basada en el reconocido respaldo Matrx® E2 con soporte escapular para aplicaciones de basculación y reclinación.

### INTERFAZ DE REPOSACABEZAS

Interfaz Heavy-duty incluido

### PARTE CENTRAL

Espuma de doble densidad o HUG con fibra Stamina® (no se muestra)

### HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN

Facilita el correcto posicionamiento de los anclajes y los soportes laterales durante la instalación



### MEZCLAR Y COMBINAR

Los soportes laterales son intercambiables, por lo que los perfiles pueden mezclarse y combinarse en función de las necesidades específicas

### AJUSTE DE ANCHURA

Laterales ambidiestros e intercambiables, multiajustables de forma independiente, que permiten un ajuste de anchura de 3 cm.

### AJUSTE DE PROFUNDIDAD

3 perfiles diferentes proporcionan 3 profundidades de soporte lateral

### AJUSTE DE ALTURA

Los soportes laterales pueden ajustarse en altura de forma independiente mientras el usuario permanece sentado



## Opciones de montaje y anclajes disponibles



### FIJACIONES ESTÁNDARES

De serie en todos los respaldos de 46 a 56 cm de altura. Sistema de desmontaje rápido (Quick release) para desmontar fácilmente el respaldo. Fijaciones MINI para respaldos MAC altura 41 cm



### FIJACIONES HEAVY DUTY

Recomendadas para usuarios espásticos o uso intensivo.



### FIJACIONES 4 PUNTOS

Adecuadas para montaje en sillas de chasis rígido o con tensor de respaldo - compatibles con alturas de 46-56 cm. Sistema de desmontaje rápido (Quick release) para quitar fácilmente el respaldo.



### FIJAS

Fijaciones estándares, fijas. Requieren herramienta para ser desmontadas. Recomendadas para sillas con basculación / reclinación. Para respaldos con altura 460 y 560 mm.

## Tallas de respaldo

		ANCHURA				
		41cm	43cm	46cm	48cm	51cm
ALTURA	Compatible con sillas	39-46cm	41-48cm	43-51cm	46-53cm	48-56cm
	41cm	●	●	●	●	●
	46cm	●	●	●	●	●
	51cm	●	●	●	●	●
	56cm	●	●	●	●	●

## Datos Técnicos

-  Ajuste en ángulo .....40°
-  Ajuste en profundidad .....10 cm
-  Soportes laterales .....9, 15, 23 cm
-  Ajuste en anchura del lateral .....2.6 cm
-  Ajuste en altura del lateral .....20 cm
-  Limpieza de la funda .....60°C
-  Peso Máx. Usuario .....136 kg
-  Garantía .....2 años

● Matrix MAC montado en silla de posicionamiento Rea Azalea con respocasabezas Loxx







Los respaldos Matrix® MAC utilizados para transportar a un usuario deben estar equipados con un reposacabezas y sólo pueden utilizarse con sillas de ruedas que cumplan los requisitos de RESNA WC19 o ISO 7176-19.



[invacare.eu.com](https://www.invacare.eu.com)

©2024 Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. Toda la información citada se considera correcta en el momento de la impresión. Invacare se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin consulta previa. ES - 08/24.