



HOOFDSTEUNEN

Hoofdondersteuning naar een hoger niveau





Pictured: Matrix Elan headrest with Ellipse headpad



Klinisch geleid ontwerp

Als toonaangevend, wereldwijd expert in precisie als het aankomt op zitten en positioneren, worden Matrix® producten zorgvuldig gemaakt met een innovatief en klinisch ondersteund design.



PRECISIE

Iedere specificatie die ons klinisch geleide team ontwikkelt, is erop gericht efficiënt, kwalitatief en precies passend te zijn.



COMFORT

Gevormde, onderling uitwisselbare hoofdpads met optioneel HUG kussen biedt extra inzinking en omhulling en verbetert algeheel comfort.



ONDERSTEUNING

Zeer aanpasbare en anatomisch gevormde designs bevorderen natuurlijke aansluiting om functionaliteit binnen de rolstoel te maximaliseren.




Hoofdsteunen

Matrix® hoofdsteunen bieden uitstekende en effectieve houdingsondersteuning zodat gebruikers maximale functionaliteit en een betere kwaliteit van leven kunnen krijgen.

Wij geloven erin direct voor de juiste ondersteuning zorgen. Dat is waarom onze hoofdsteunen ontworpen zijn met simpele, zeer configureerbare hardware opties. Daarnaast kunnen ze worden gecombineerd met een reeks ondersteunende en drukverlichtende hoofdsteunpads.

Simpel en intuïtief

Matrx[®] Loxx[™] is een simpele en intuïtieve hoofdsteun voor een passende en effectieve hoofdondersteuning. Met 4 aanpassingspunten is de configureerbare hardware een passende oplossing voor uiteenlopende behoeften.

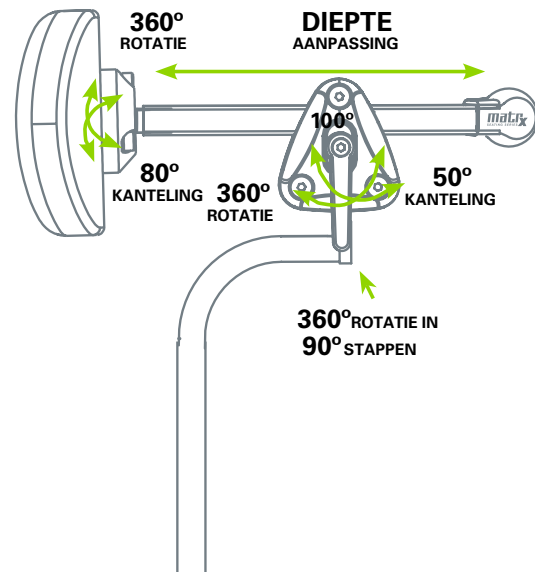

EENVOUDIGE INGEBRUIKNAME

Creëer direct de juiste ondersteuning met de instelhendel, waarmee je gemakkelijke en intuïtieve positieveranderingen realiseert. Met knop voor verwijdering of hoogteaanpassing.



VEILIGE BEVESTIGING

Dit unieke design (in afwachting van patent) is succesvol gecrashtest en garandeert een veilige en stevige bevestiging, zonder speling.



AANPASBAAR

Milde kyfse en asymmetrische houdingen kunnen eenvoudig worden ondersteund. Dit helpt mensen bij hun dagelijkse taken.



Bekijk het van dichtbij



OPTIMALE PADORIËNTATIE

Dubbele draaipunten en schuifbalk voor optimale padoriëntatie.

MEERDERE MONTAGEPOSITIES


Gebogen verticale buis voor goede zichtbaarheid voor laterale of voorwaartse montageposities.

VERBETERDE VEILIGHEID

Veilig, urethaan uiteinde voor goede zichtbaarheid.

Multi instelbaar

Matrx[®] Elan is een compacte en lichtgewicht hoofdsteen met uiterst aanpasbare hardware die maximale ondersteuning en comfort biedt. Met 6 instellingspunten is het onze meest aanpasbare hardware ooit die een oplossing voor een brede range toepassingen biedt.

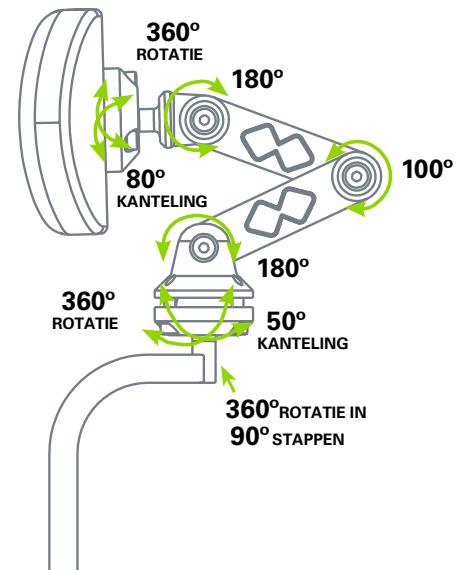

VEELZIJDIG

Innovatieve hardware biedt diverse positioneringsmogelijkheden voor complexere behoeften, inclusief sterkere kyfse. Ook met wegzwenkfunctie voor eenvoudige transfers.



STERKE BEVESTIGING

Dit succesvol gecrashteste ontwerp heeft een innovatieve vergrendeling over meerdere schijven, die een betrouwbare bevestiging garandeert.



EENVOUDIGE INGEBRUIKNAME

Snel en eenvoudig te installeren met een enkele inbussleutel, terwijl met de instellingshendel de positie eenvoudig te veranderen is. Met knop voor verwijdering of hoogteaanpassing.



Bekijk het van dichtbij



BEKROOND ONTWERP

UITGEBREIDE HARDWARE

Ook verkrijgbaar voor het bereiken van ernstiger kyfsehoudingen - inclusief een extra schakel.

2 BUISOPTIES

Standaard (380 mm) en mini (280 mm) om toepasbaar te zijn voor kinderen én volwassenen.


GEBOGEN VERTICALE BUIS

Voor laterale of voorwaartse montageposities.

De nieuwe optionele flip back optie op jouw Matrx® Elan en Matrx® Loxx hoofddeunen. Deze laat je de hoofddeun tijdelijk wegklappen zonder de originele instellingen van de stoel aan te tasten of deze los te hoeven maken van de stoel.

De Matrx® FLIPP geeft zorgverleners de kans dagelijkse handelingen, zoals transfers, aankleden en hygiene eenvoudig uit te voeren. Het kan ook handig zijn als meer hoofdmobiliteit gewenst is.

NIEUW VOOR '24

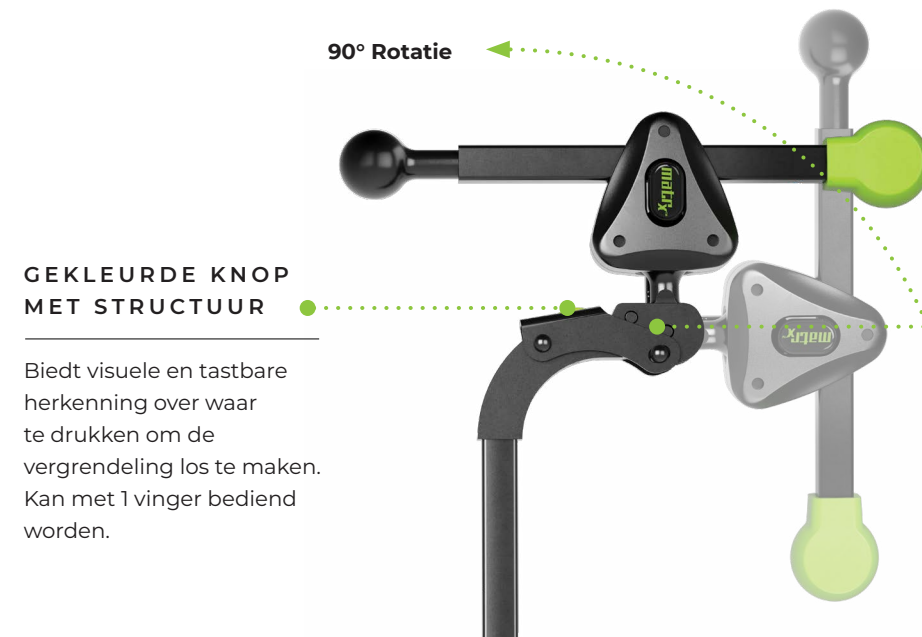

Biedt visuele en tastbare herkenning over waar te drukken om de vergrendeling los te maken. Kan met 1 vinger bediend worden.

VEILIGHEIDSSLUITING

Ontgrendelmechanisme wordt gedeactiveerd wanneer er gewicht op de hoofddeunpad rust om onbedoelde ontgrendeling te voorkomen.



Montage en Combineerbaarheid



INTERFACE INSERTS

Zorgt dat Matrx® hoofddeunen kunnen worden bevestigd op onze Flex 3 rug.



MONTAGEPLAAT KIT

Een montageplaat kit met een ergonomisch laag geprofileerde knop wordt bij iedere Matrx® hoofddeun meegeleverd. Zo kan de hoofddeun op de meeste vaste ruggen worden bevestigd. De kit bevat ook een ringetje voor wanneer extra ruimte nodig is.

Hoofdpads

ZEER COMFORTABEL

Dubbel gegoten foam biedt inzinking en voorkomt dat je door het foam heen gaat. Gevormd foam omringt de achterplaat voor extra bescherming.

UNIEKE PASVORM

Minder dan de helft van het gewicht van vergelijkbare pads van metaal.

EENVOUDIG ONDERHOUD

Hoezen met ritsen voor eenvoudig wassen. Vochtbestendig materiaal of afwasbare optie voor infectiecontrole.



2 ACHTERHOOFD PAD

Ondersteunt het achterhoofd en de lagere achterhoofdzone. Verkrijgbaar in twee maten.



3 ELLIPS PAD

Biedt ondersteuning aan de achterzijde en zijkanten. Verkrijgbaar in drie maten.

Verkrijgbaar met een HUG.




4-PUNTS

Ondersteunt het achterhoofd en de temporale zone. Verkrijgbaar in twee maten.

matrix[®]HUG

NIEUW VOOR '24

Machinewasbaar kussen als alternatief voor het veerkrachtige, gegoten foam. Gemaakt van Stamina Fibre[®] voor extra comfort, ademend vermogen en microklimaatregulatie. Verkrijgbaar in Ellips hoofdsteunen.

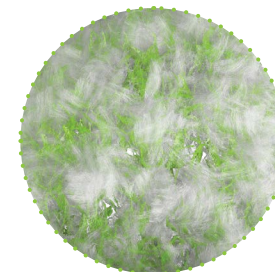

Opties



HOOFDBAND

Comfortabele neopreen voorhoofdondersteuning. Eenvoudige sleutelgat bevestiging voor simpel gebruik. Binnenkant van de band is van anti-slip materiaal.



Technische Gegevens

PAD OPTIES

Ellips Pad

Small 150x90mm
Medium 250x130mm
Large 360x130mm

Achterhoofd Pad

Small 230x180mm
Large 310x200mm

4-punts Pad

Small 290mmx180mm
Large 280x260mm

HARDWARE OPTIES

	Loxx	Elan Mini	Elan	Elan Extended
 Verticale buis	380mm	280mm	380mm	380mm
 Diepte Aanpassing	115mm	260mm	260mm	250mm +76mm
 Lateraal	90° (50mm)	90° (50mm)	90° (50mm)	90° (50mm)
 Kantelrange hardware .50°		50°	50°	50°
 Kantelrange pad	80°	80°	80°	80°
 Kantellink	0°	180°+100°+180°	180°+100°+180°	180°+100°+180°
 Rotatie	360°	360°	360°	360°



* Invacare® Matrix® Elan® en Invacare® Matrix® Loxx™ hoofdsteen hardware heeft de Frontal Impact Sled Testing doorstaan. Getest volgens ISO 16840-4 (2009): Wheelchair Seating – Part 4: Seating Systems for Use in Motor Vehicles. Geschikt voor gebruik in combinatie met rolstoelen die voldoen aan ISO 7176-19 (2022): Wheelchairs-Part 19: Wheelchairs for use as seats in motor vehicles.

** + 70 mm laterale range



[invacare.nl](https://www.invacare.nl)

© 2024 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle weergegeven informatie wordt correct geacht op het moment van creatie van deze brochure. Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties aan te passen zonder consultatie vooraf. NL – 07/24