

# Invacare | **Matrix® Libra®**

NOVITÀ



## **Il cuscino di nuova generazione che combina un alto livello di comfort con un elevato grado di protezione e posizionamento**

- Il suo design rivoluzionario combina la schiuma e il fluido per garantire ad ogni singolo utilizzatore un alto livello di protezione cutanea, di posizionamento e personalizzazione
- La nuova sacca in fluido a doppio strato, facilita la gestione delle forze di taglio e la distribuzione della pressione
- La particolare sagomatura garantisce un ottimo bilanciamento e un'eccellente stabilità del bacino nell'ottica di una maggiore autonomia
- Grazie alla leggerezza e alla facilità d'uso, il cuscino **Libra** combina in modo bilanciato le esigenze funzionali dell'utente con quelle di uno stile di vita attiva
- Adatto per tutti gli utilizzatori

**matrix®**  
SEATING SERIES



**Yes, you can.®**



### Design unico

- Base in schiuma - con sagomatura anatomica per ottimizzare il supporto pelvico e il posizionamento
- Schiuma ad alta resilienza con Ultra-Fresh™ per una protezione antimicrobica e antibatterica duratura nel tempo
- Sacca in fluido a doppio strato a compartimenti sigillati per una protezione massima in prossimità delle prominenze ossee

### Benefici funzionali

- Blocco pre -ischiatrico per contrastare lo scivolamento riducendo le forze di taglio
- Supporto trocanterico per conferire al bacino stabilità laterale
- La particolare sagomatura posteriore del cuscino aiuta a contrastare la retroversione del bacino
- Bordo frontale con taglio a cascata per ottimizzare la profondità di seduta e favorire la propulsione con l'arto inferiore
- Sagomatura della parte anteriore studiata per un migliore controllo dell'adduzione- abduzione degli arti inferiori

### Affidabile e leggero

- Fluido ad auto compensazione che non varia le sue caratteristiche con il variare della temperatura. Non necessita di riposizionamento e/o manutenzione.
- Grazie ad una riduzione del 40% del peso rispetto agli altri cuscini posturali della linea **Flotech™**, il cuscino **Matrx Libra** è indicato per gli utenti che ricercano uno stile di vita attivo.
- Per particolari esigenze posturali, è disponibile un ampio range di accessori.

## Caratteristiche e opzioni



#### Avvolgenza

Ampia superficie di appoggio per un'ottimale distribuzione della pressione.



#### Innovativo design della base

Peso equamente distribuito tra cosce e bacino per un maggior comfort.



#### Immersione


Il corretto posizionamento delle prominenze ossee garantisce una protezione ottimale.



#### Riduzione delle forze di taglio

Il design unico permette di controllare i movimenti del bacino sul piano sagittale.

## Caratteristiche e opzioni

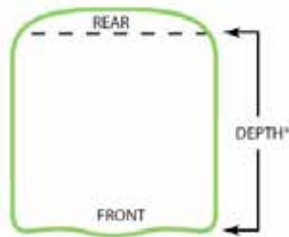

### Taglio a cascata

Per ottimizzare la profondità di seduta, migliorare il posizionamento degli arti inferiori in presenza di retrazione degli ischio-crurali e favorire la propulsione con l'arto inferiore.

### Misura del cuscino

La profondità del cuscino va misurata lungo il bordo laterale del cuscino (vedi immagine).

### Ampia superficie di appoggio posteriore

La particolare curvatura posteriore (3,8 cm) stabilizza il fluido in caso di basculamento garantendo maggior supporto al cocchige e al sacro.



### Cuneo anteriore

Previene lo scivolamento in avanti riducendo le forze di taglio.

### Seduta rifilata

Con l'aggiunta del cuneo è possibile personalizzare la seduta nei casi di limitazione dell'anca in flessione estensione.



### Cuneo rastremato

Posizionato anteriormente per aumentare l'adduzione della coscia.

### Cuneo rastremato

Posizionato posteriormente per conferire maggiore contenimento del bacino.



### Cuneo laterale

Assicura maggiore stabilità laterale al bacino.

### Sacca in fluido aggiuntiva

Per una maggiore protezione e comfort.

### Cuneo abduttore

Per un bilanciato posizionamento delle anche e delle cosce.

### Pratica tasca laterale

Con cordoncino.

## Misure disponibili

### Versione standard in cm: larghezza per profondità Peso massimo utente: 136 kg

36 x 31	38 x 41	41 x 41	43 x 41	46 x 41	48 x 41	51 x 41
36 x 36	38 x 46	41 x 46	43 x 46	46 x 46	48 x 46	51 x 46
36 x 41	38 x 51	41 x 51	43 x 51	46 x 51	48 x 51	51 x 51

### Versione bariatrica in cm: larghezza per profondità Peso massimo utente: 227 kg

53 x 46	56 x 46
53 x 51	56 x 51
53 x 56	56 x 56

## Dati tecnici



**Matrx Libra**

Peso: 1,6 kg



Peso massimo  
utente:  
Std 136 kg  
Bariatrica 227kg



Fodera esterna:  
lavabile in  
lavatrice 80°



Rivestimento  
esterno: superficie  
lavabile con un  
panno umido




- 1/ Conforme alla direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche- RoHS (2011/65/EC).
- 2/ Conforme alla regolamentazione sulla registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

## Fodere



Fodera tessuto nero  
SMOOTH  
Impermeabile  
Traspirante

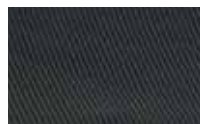

Spacer a nido d'ape

Invacare Meccsan s.r.l.  
Via dei Pini, 62 - 36016  
Thiene (VI) - Italy  
Tel.: +39 0445 380059  
Fax: +39 0445 380034  
e-mail: italia@invacare.com  
www.invacare.it

© 2015 Invacare International Sàrl  
All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.

Matrx Libra - IT - 01/2015



**Yes, you can.®**