

matrx[®] LIBRA



LIBRA ZITKUSSEN

Huidbescherming en ondersteuning op maat





matrx[®] LIBRA

Klinisch geleid ontwerp

Introductie van de Matrx[®] Libra, een modulair kussen dat een perfecte balans biedt van immersie, herverdeling van druk en omsluiting. Matrx[®] Libra biedt het hoogste niveau van huidbescherming en positionering in ons assortiment.


MODULAIR ONTWERP

Een veelzijdig kussen dat de meeste handbewogen en elektrische rolstoelen aanvult. Verkrijgbaar met een volledig assortiment opties voor verstelbare en gerichte huidbescherming en positionering.



PRECISIE

Elke specificatie, ontwikkeld door ons door klinici geleide team, is gericht op efficiëntie, kwaliteit en een nauwkeurige pasvorm.

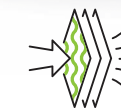

COMFORT


De contourvorm en vloeistof helpen de natuurlijke vorm van het lichaam te ondersteunen en te beschermen.



ONDERSTEUNING

Anatomisch gevormd om een goede houding en natuurlijke uitlijning te bevorderen. Verkrijgbaar met een scala aan opties.

Geavanceerde preventie van drukplekken

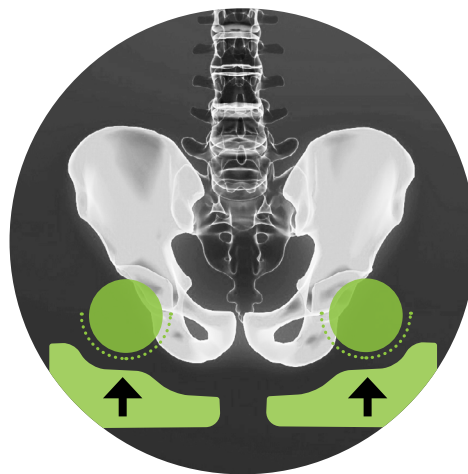

IMMERSIE

Maximaliseert het contactoppervlak om piekdrukken te verminderen.
Druk = Kracht/Oppervlakte.



HERVERDELING VAN DRUK

Verplaatst de krachten weg van de zitknobbels met grotere belasting op de trochanters, heupen en dijen.



OMSLUITING

Vloeistofzak omringt de botuitsteeksels volledig, zelfs tijdens positsieveranderingen.

Bevordert stabiliteit

Stabiliteit begint bij het bekken. Matrix® Libra is een gevormd kussen dat laterale ondersteuning en bekkenstabiliteit biedt. Dit bevordert de positie van de ruggengraat voor een verbeterde functie van het bovenlichaam, evenals de controle over het hoofd.



STABILITEIT

Bevordert een goede houding voor betere functiemogelijkheden.



m Modulair voor een perfecte pasvorm

Matrx® Libra is volledig configureerbaar voor de meest uiteenlopende aandoeningen en positioneringsbehoeften. De kussenopties zijn ontworpen om de immersie te verbeteren en de bekkenpositie te corrigeren of aan te passen.

EENVOUDIG AAN TE PASSEN



WIG VOORZIJDE

Verhoogt de helling, voorkomt wegschuiven en vermindert schuifkrachten.



HALVE WIG VOORZIJDE

Bij beperkingen aan het heupgewricht en voor een lage zithoogte voor trippelen.



EENZIJDIGE WIG VOORZIJDE

Voor extra ondersteuning bij adductie.



EENZIJDIGE WIG ACHTERZIJDE

Ondersteunt een scheefstand van het bekken aan de achterzijde van het kussen.



LATERALE WIG

Verbeterde zijdelingse stabiliteit om een uitgelijnde positie van de dijbenen te bewerkstelligen.



ABDUCTOR

Optimaliseert de positie van dijbenen en heupen.



EXTRA GELZAK

Kan aan één kant worden gebruikt om de bekkenscheefstand te corrigeren, of bilateraal om de diepte van de bekkenholte te vergroten.

m Nader bekeken

Matrix® Libra is een aanpasbaar huidbeschermings- en positioneringskussen dat ons kenmerkende gegoten schuim en Flo-tech™-vloeistof combineert met een reeks opties.

PLATILON VOERING

Bescherm het kussen tegen het binnendringen van vloeistof

PAS AAN

Kies uit een reeks positioneringsopties om de immersie te verbeteren, de bekkenhouding te corrigeren of aan te passen

WATERVALONTWERP VOORZIJDE

Biedt volledige ondersteuning van de dijen, optimale voetpositie, gemakkelijkere transfers en trippelen met de voet



HOES OPTIES

Kies uit stretch, mesh of wipedown

OPBERGVAKJE

Handige opbergmogelijkheid - met gebruiksvriendelijk trekkoord

ACHTERZIJDE KUSSEN

38 mm gebogenachterzijde vergroot het oppervlak voor betere preventie van drukplekken en stabiliseert vloeistof in gekantelde posities

FLO-TECH™ TECHNOLOGIE

Dubbellaagse vloeistofzak met drie kamers voor maximale bescherming rond botuitsteeksels. De niet-temperatuurgevoelige vloeistof vereist geen kneden of onderhoud.

GEGOTEN VORM

Duurzaam gegoten, veerkrachtig schuim zorgt voor stabiliteit in de rolstoel




Kussenmaten

	BREEDTE								
	35.5cm	38cm	40.5cm	43cm	45.5cm	48cm	50.5cm	53cm	56cm
DIEPTE									
30.5cm	●								
35.5cm	●								
40.5cm	●	●	●	●	●	●	●		
43cm				●					
45.5cm		●	●	●	●	●	●	●	●
50.5cm		●	●		●	●	●	●	●
56cm								●	●

Technische gegevens

- Totaal productgewicht 1.6kg
- Max. gebruikersgewicht ... Std 136kg / HD 227kg
- Dikte bij abductor Std 8.5cm / HD 9.1cm
- Dikte bij beenruimte Std 5.7cm / HD 6.6cm
- Max. reinigingstemperatuur (buitenhoes) 80°C
- Reiniging binnenkant met warme, vochtige doek

HOES OPTIES

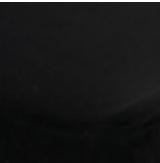

Stretch

- Waterdicht
- Dampdoorlatend



Spacer

- Dampdoorlatend



Wipedown

- Waterdicht
- Dampdoorlatend





invacare.nl

© 2025 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle vermelde informatie wordt geacht correct te zijn op het moment van druk. Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties zonder voorafgaand overleg te wijzigen.

NL – 07/25