

Invacare® | **Matrix® Libra®**

NIEUW



Het *Invacare Matrix Libra* kussen: een complete zitoplossing

- Innovatief design dat een schuimbasis combineert met een vloeibaar gel-pak voor optimale bescherming van de huid. Aanpassings- en positioneringsmogelijkheden om te voldoen aan specifieke behoeftes van de eindgebruiker.
- Een dubbele gel-zak met gepatenteerde *Invacare Flo-tech®* technologie ter voorkoming van schuifkrachten en een uitgebalanceerde drukverdeling.
- Speciaal contour voor stabiliteit en balans voor een actieve zithouding.
- Lichtgewicht en onderhoudsvrij. Geen extra handelingen nodig om goed te zitten.
- Aanbevolen voor alle gebruikers, ook voor hen die een verhoogd risico hebben op huidletsel.

matrix®
SEATING SERIES



Yes, you can.®



Uniek ontwerp

- Schuimkussen - anatomisch gevormd ter ondersteuning en positionering van het bekken.
- Het duurzame schuim met een hoge dichtheid is behandeld met Ultra-Fresh™, om ontwikkeling van bacteriën en geuren tegen te gaan.
- Gel-zak - een dubbele laag gel met afgesloten compartimenten voor een maximale bescherming rondom de contouren van de zitbeenderen.

Functionele voordelen

- Bekkencorrectie om wegschuiven te voorkomen en wrijving te verminderen.
- De opstaande achterkant van het kussen voorkomt een achterwaartse kanteling van het bekken.
- Het waterval ontwerp aan de voorkant van het kussen accomodeert een vrije ruimte in de knieholte.
- De specifieke contouren aan de voorzijde van het kussen ondersteunen de uitlijning van de dij.
- Ondersteuning van de heupen die de laterale stabiliteit van het bekken bevordert.

Betrouwbaar en lichtgewicht

- De gebruikte gel verdeelt zich snel over de oppervlakte en is niet temperatuur gevoelig. Kneden en modelleren is dus niet nodig.
- Het gewicht van het **Matrx Libra** kussen is 1.6 kg. Hierdoor past het kussen perfect binnen een actieve leefstijl.
- Voor complexe situaties is het **Libra** kussen uit te breiden met diverse positionering accessoires.

Eigenschappen en opties



Omsluitend

De vergroting van het steunoppervlak zorgt voor een betere drukverdeling.



Herverdeling van druk

Het gewicht wordt over de gehele oppervlakte verdeeld, waardoor de druk in de risico gebieden wordt verlaagd.



Wegzakken - immersie


Zitbeenderen hebben door de gel-zak meer ruimte om weg te zakken.



Schuifkracht reductie

Het unieke ontwerp maakt bewegingen mogelijk zonder dat het heupgewricht weg schuift.

Eigenschappen en opties

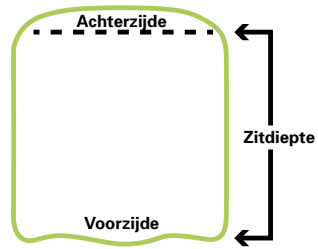

Waternal ontwerp

Speciaal voor trippelen, transfers en verkorte hamstrings.

Afmetingen

Zitdiepte wordt gemeten aan de lange zijde van het kussen.

Achterzijde kussen

De achterzijde van het zitkussen komt 3.8 cm naar buiten om de ruimte tussen de zitting en de rug te beperken. Het stabiliseert daarnaast de gel bij gekantelde posities.



Wig aan voorzijde

Verhoogt de helling, voorkomt wegschuiven en vermindert schuifkrachten.

Gehalveerde wig voorzijde

Bij beperkingen aan het heupgewricht en voor een lage zithoogte voor trippelen.



Eénzijdige wig voorzijde

Voor extra ondersteuning bij adductie.

Eénzijdige wig achterzijde

Ondersteunt een scheefstand van het bekken aan de achterzijde van het kussen.



Laterale wig

Verbeterde zijdelingse stabiliteit om de positie van de dijbenen in de lengte van het zitkussen te bevorderen.

Extra gelzak

Voor doelgerichte bescherming. Past binnen de bestaande gel zak.



Abductor

Optimaliseert de abductie en de positie van dijbenen en heupen.

Opslagvakje aan de zijkant van het kussen

Inclusief een gebruiksvriendelijk trekkoord.



Beschikbare maten

Standaard uitvoering in cm: breedte x diepte Maximaal gebruikersgewicht: 136 kg

36 x 31	38 x 41	41 x 41	43 x 41	46 x 41	48 x 41	51 x 41
36 x 36	38 x 46	41 x 46	43 x 46	46 x 46	48 x 46	51 x 46
36 x 41	38 x 51	41 x 51	43 x 51	46 x 51	48 x 51	51 x 51

Heavy duty uitvoering in cm: breedte x diepte Maximaal gebruikersgewicht: 227 kg

53 x 46	56 x 46
53 x 51	56 x 51
53 x 56	56 x 56

Technische gegevens



Matrx Libra

Gewicht: 1,6 kg




Maximaal
gebruikersgewicht:
Std 136 kg
HD 227kg




Buitenhoes:
geschikt voor de
wasmachine 80°



Binnenkant:
schoonmaken
met een warme
vochtige doek

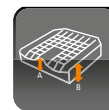

Hoogte
A: 90 mm/
B: 95 mm

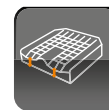


Hoogte
65 mm


- 1/ Voldoet aan de "Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment - RoHS (2011/65/EC)".
- 2/ Voldoet aan de "regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals".



Bekleding

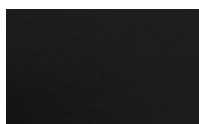

Zwart
Waterdicht
Ademend

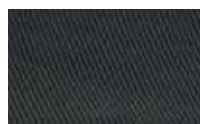

Spacer

Invacare B.V.
Nederland
Tel.: +31 (0) 318 - 695757
Fax +31 (0) 318 - 695758
Email: nederland@invacare.com
www.invacare.nl

© 2015 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafkondiging.

Matrx Libra - NL - 08/2015



Yes, you can.®