



matrx[®]MX2



MX2 RUG

Topprestaties





matrx[®]MX2

Door clinici geleid ontwerp

Met de introductie van onze tweede generatie, ultralichte rugsteun, biedt Matrx[®] MX2 ongeëvenaarde stabiliteit voor mensen in actieve rolstoelen.

ULTRA-LICHTGEWICHT

Flexibel maar sterk, een volledig koolstofvezel achterkant die de functie en prestaties in de rolstoel optimaliseert.



PRECISIE

Elke specificatie die door ons klinisch geleide team is ontwikkeld, richt zich op efficiëntie, kwaliteit en een precieze pasvorm.



COMFORT

Anatomisch gevormd en lichtgewicht ontwerp zorgt voor comfortabele en gemakkelijke houdingsondersteuning.



ONDERSTEUNING

Voorgevormde vormgeving en flexibele rug ondersteunt het lichaam bij elke hobbel en beweging.

Ontworpen voor actief gebruik

Matrix MX2 is een ultralichte rug, speciaal ontworpen met behulp van meerdere lagen koolstofvezel voor flexibele bewegingen en schokabsorptie. Een perfecte keuze voor een actieve leefstijl.



Freedom of Movement



FLEXIBILITEIT

Beweegt zachtjes met het lichaam mee voor een optimale functie en prestaties.



STABILITEIT

Een stijve rug zorgt voor verbeterde zijdelingse ondersteuning.



GEMAK

Helpt trillingen te dempen, vooral in combinatie met de carbon bevestigingshardware.

Bekijk van dichtbij

Matrix® MX2 biedt een stijlvolle en ultralichte houdingsondersteuning voor ultieme stabiliteit en prestaties.

SCHAAL VAN CARBONFIBER

De volledige koolstofvezel rugschaal zorgt voor flex en vering voor een zeer comfortabele rit

UITSPARINGEN

Voor ademend vermogen om het microklimaat te helpen beheersen

POSITIONERINGSKUSSEN

Een lendekussen wordt standaard meegeleverd, voor extra ondersteuning van de onderrug



Küschall®

IDEAAL VOOR KUSCHALL-GEBRUIKERS

ADEMENDE SPACETEX HOES

Rugleuningen van 23 cm of hoger zijn voorzien van kunstlederen zijpanelen

SCHOUDERUITSPARING

Voor het vrijmaken van het schouderblad, waardoor efficiënt zelf rollen mogelijk is

OVERSIZED SCHUIM

Voor meer comfort en bescherming

HEUPUITSPARING

Ideaal bij het zijwaarts leunen voor drukontlasting of bij het reiken om voorwerpen op te pakken




m Opties



PRIVACY FLAP

Een optionele oplossing om de opening tussen de zitting en de rugleuning af te dekken.

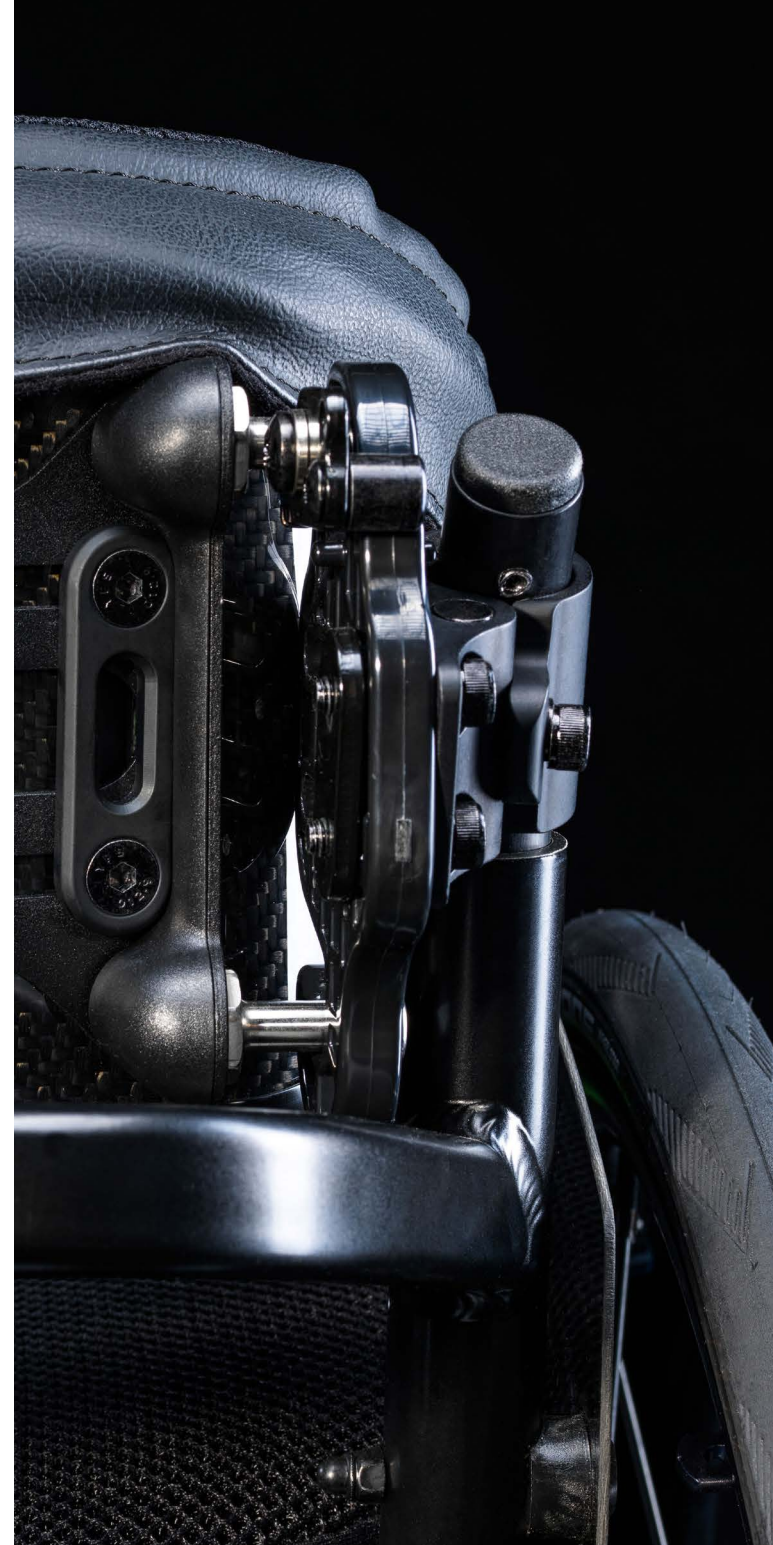

m Montage- en hardware-opties

De MiniSet Mounting pin-interface is ontworpen voor eenvoudige aanpassing van de rughoogte terwijl de persoon in de rolstoel zit. Horizontale sleuven zorgen voor breedteverstelling en eenvoudige montage.

EEN PRECIEZE PASVORM

MX2-hardware is ontworpen om op smallere en bredere rolstoelen te passen, wat een ideale functie is voor mensen met een bredere rug en smallere heupen, of een smalle rug en bredere heupen.

STANDAARD HARDWARE

SNELLE ONTGREDELING

Maakt het mogelijk om de achterkant gemakkelijk te verwijderen voor transportd en opslag.



OPTIONELE HARDWARE


VASTE KOOLSTOFVEZEL BEVESTIGING

Gemaakt met lichtgewicht koolstofvezelplaten voor verbeterde vering.




Zowel de hardware-opties voor snelsluiting als voor vaste montage zijn instelbaar in hoogte, diepte en hoek voor een nauwkeurige en comfortabele pasvorm.

VERSTELBARE BREEDTE EN HOOGTE

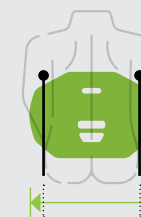

Past op stoelen die 2,5 cm smaller zijn dan de rug

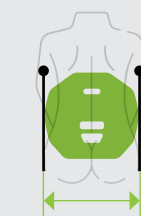

Past op stoelen van gelijke breedtemet de rug



Past op stoelen 5 cm breder dan de rug



Rug Maten

		BREEDTE				
		41cm	43cm	46cm	48cm	51cm
LENGTE	Past op rolstoel	38.5-46cm	40.5-48cm	43.5-51cm	45.5-53cm	48.5-56cm
	41cm	●	●	●	●	●
	46cm	●	●	●	●	●
	51cm	●	●	●	●	●
	56cm	●	●	●	●	●

Technische Gegevens

-  Hoek instelling +/- 20°
-  Diepte instelling 7.6 cm¹ / 10.8 cm²
-  Hoes reiniging 60°C
-  Max. gebruikersgewicht 113kg
-  Totaal gewicht 770gr up (inclusief vaste bevestigingshardware)

1. Met vaste bevestigingshardware
2. Met quick release hardware





[invacare.eu.com](https://www.invacare.eu.com)

© 2025 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle geciteerde informatie wordt verondersteld correct te zijn op het moment van drukken. Invacare behoudt zich het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaand overleg. NL – 05/25