

# Medley Ergo

Stile e comfort per un riposo assicurato



La famiglia di letti elettrici

che offre il massimo comfort e una grande autonomia



Yes, you can.

# Progettato per fornire un valido aiuto al paziente e al caregiver

La nostra gamma di letti Medley Ergo è la soluzione ideale perché rappresenta un indispensabile strumento per la cura del paziente.

Progettato per aumentare l'indipendenza e facilitare il recupero funzionale, grazie alle versioni Medley Ergo, Medley Ergo Low e Medley Ergo Select con pannelli coprimotore per un design più accogliente.

Le caratteristiche e le funzionalità integrate consentono al cliente, così come al caregiver, di controllare il letto con grande facilità. La rete grazie

alla particolare segmentazione delle singoli sezioni, contribuisce a ridurre le forze di taglio e frizione; inoltre se in combinazione con uno dei nostri materassi antidecubito, può migliorare a gestire la distribuzione della pressione e il microclima per il paziente.



1



## Facile da trasportare

Grazie al kit di aggancio (optional), il letto è facile da trasportare e stivare.

2



## Comfort

Grazie alle dimensioni della rete, ottimizzate, sia nella posizione di riposo che nella posizione seduta, è ridotto significativamente il rischio di scivolamento verso il basso.

3



## Supporto

E' facile riposizionare il paziente grazie alla pratica pulsantiera. Pulsantiera con sistema di blocco dei movimenti per una maggiore sicurezza.



> **Rete**  
In materiale facile da pulire

> **Sponde laterali**  
Disponibili a due barre in legno (nella foto), oppure abbattibili a 3/4 in ferro Verso II (optional)

> **Versione Select**  
I copripannelli della versione Select conferiscono un tocco elegante, specie per l'ambiente domiciliare.

> **Telecomando**  
Con funzione di blocco dei movimenti



> **Doppia posizione dell'altezza della rete**  
Range di regolazione in altezza:  
Medley Ergo : 33-73 cm oppure 40-80 cm  
Medley Ergo Low: 21-21 o 28-68 cm

### Medley Ergo Low

- > Questo modello ha il piano rete che si regola fino a 21 cm da terra per offrire all'utilizzatore un maggior livello di sicurezza durante i trasferimenti.
- > Questo particolare range di regolazione in altezza consente al paziente di agire con autonomia.
- > Grazie al sistema di aggancio a baionetta, nella versione Low vi è la possibilità di scegliere tra due posizioni del piano rete: 21-61 cm oppure 28-69 cm.

Accessori:



Pratico e funzionale alzamalati grazie al triangolo regolabile in lunghezza.



Kit estensione in lunghezza +15 cm della rete, per persone molto alte.




Kit piastre di trasporto per una facile movimentazione del letto



Sponde più lunghe se in combinazione con il kit estensione in lunghezza (+15cm)

# L'assistente ideale nella cura della persona

Una combinazione di funzionalità avanzate, un design raffinato e qualità senza compromessi per un'assistenza superiore.

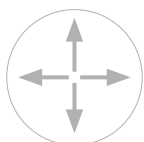

## Riduzione delle forze di taglio e di frizione

Le dimensioni ottimizzate del piano rete aiutano a ridurre le forze di taglio e frizione e aumentano il comfort, in conformità alle raccomandazioni in materia di misure antropometriche e distribuzione della pressione.



## Facile da stivare e trasportare

Il letto Medley Ergo è facile da montare perchè non richiede alcun attrezzo e può essere effettuato da una sola persona. Quando in combinazione con il kit piastre di aggancio (in figura) il letto è facilmente trasportabile e stivabile.



## Sicurezza e qualità assicurata

Conforme allo Standard sulla sicurezza IEC 60601-2-52, il nostro range di Medley Ergo è affidabile perchè garantisce un elevato standard di sicurezza e una qualità senza pari, che offrono al paziente una soluzione durevole sia in ambiente domiciliare che assistenziale.



## Dati tecnici ▼


Per maggiori informazioni, consulta il nostro sito [www.invacare.it](http://www.invacare.it)




Larghezza esterna  
Larghezza interna ▼



Lunghezza esterna  
Lunghezza interna ▼

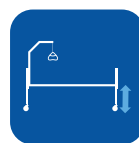

Regolazione in  
altezza ▼

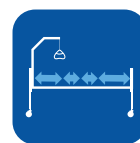

Dimensioni del  
piano rete ▼

	Larghezza esterna Larghezza interna ▼	Lunghezza esterna Lunghezza interna ▼	Regolazione in altezza ▼	Dimensioni del piano rete ▼
Medley Ergo	1020 mm 900 mm	2240 mm 2090 mm	400 - 800 mm or 330 - 730 mm	800 - 230 - 300 - 670 mm
Medley Ergo Low	1020 mm 900 mm	2240 mm 2090 mm	280 - 680 mm or 210 - 610 mm	800 - 230 - 300 - 670 mm




Angolo schienale ▼



Angolo sezione gambe ▼



Sollevamento sezione  
piedi (opzionale) ▼

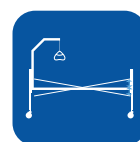

Trendelenburg<sup>1</sup> ▼

	Angolo schienale ▼	Angolo sezione gambe ▼	Sollevamento sezione piedi (opzionale) ▼	Trendelenburg <sup>1</sup> ▼
Medley Ergo	0 - 70°	0 - 24°	0 - 18°	11°
Medley Ergo Low	0 - 70°	0 - 24°	0 - 18°	11°



Peso totale ▼



Peso massimo  
paziente ▼



Componente  
più pesante ▼

	Peso totale ▼	Peso massimo paziente ▼	Componente più pesante ▼
Medley Ergo	64 kg	SWL 180 kg 145 kg	17 kg
Medley Ergo Low	64 kg	SWL 180 kg 145 kg	17 kg

Conforme allo Standard di sicurezza, IEC 60601-2-52

1. La funzione trendelenburg deve essere praticata sotto la supervisione di personale medico.

Il letto non deve essere utilizzato da persone al di sotto dei 12 anni di età o da pazienti con una corporatura equivalente a quella di una persona di 12 anni o più giovane.

Argento

Faggio

Attenzione, alcuni colori potrebbero variare rispetto a quanto sopra riportato.



**Tel.: +39 0445 380059**  
[www.invacare.it](http://www.invacare.it)  
e-mail: [italia@invacare.com](mailto:italia@invacare.com)

Invacare Mecc san s.r.l.  
Via dei Pini, 62 - 36016  
THIENE (VI) - Italy

© 2023 Invacare International GmbH. All rights reserved. Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate. IT - 07/2023

**ESG** ENVIRONMENTAL SOCIAL & GOVERNANCE



**Yes, you can.®**