

# Medley Ergo

Offrir aux utilisateurs confort et bien-être



Une gamme avancée de lits de soins

pour un confort accru et de meilleurs résultats cliniques



Yes, you can.

## Conçu pour prendre soin du patient et du soignant

Notre gamme de lits Medley Ergo représente une solution facile à manipuler qui permet de fournir d'excellents soins et un confort maximal.

Conçu pour accroître l'indépendance et améliorer les résultats cliniques pour des besoins variés. Un choix s'offre entre notre Medley Ergo ou Medley Ergo Low ainsi que la possibilité de choisir le Medley Ergo Select pour un design plus accueillant. Des caractéristiques et

fonctionnalités intégrées permettent à l'utilisateur et au personnel soignant d'utiliser facilement le lit. Les dimensions optimisées des différentes parties du plan de couchage aident à réduire le cisaillement et les frictions. Les lits Medley Ergo offrent une gestion optimale de la pression.



1



### Manipulation facile

Une plaque de transport est disponible en option afin que le lit puisse facilement être déplacé et installé.

2



### Confort

Dans toutes les positions de repos et d'assise avec un risque minimisé de glissement vers le bas grâce à un sommier aux dimensions optimisées.

3



### Support

Repositionnement facile de l'utilisateur à l'aide de la télécommande visant à augmenter l'indépendance et soutenir le personnel soignant. Disponible avec ou sans fonctions verrouillables.



► **Plan de couchage**  
Conçu en acier, facile à nettoyer.

► **Barrières latérales**  
Choisissez parmi 2 options qui varient au niveau de la finition. Pleine longueur - choix entre finition bois ou métal

► **Panneaux Select**  
Un design plus accueillant est possible grâce aux panneaux de lit en bois pour obtenir la version Medley Ergo Select.

► **Commande manuelle**  
Avec ou sans fonctions verrouillables.

► **Double hauteur de plan de couchage**  
Plages de hauteur réglables pour  
Medley Ergo : 33 - 73 cm ou 40 - 80 cm  
Medley Ergo Low : 21 - 61 cm ou 28 - 68 cm

### Medley Ergo Low

Le positionnement extra bas

- Augmente la sécurité des utilisateurs et leur procure une tranquillité d'esprit durant leur sommeil.
- Davantage de confort pour le personnel soignant durant les soins, de par la hauteur variable du lit.
- Permet à l'utilisateur d'accéder et de sortir de son lit de manière autonome.
- Hauteur réglable de **21 à 61 cm** et de **28 à 68 cm**.

En complément :



Potence légère et facilement réglable



Kit d'extension pour augmenter de 15 cm la longueur du plan de couchage




Kit de transport pour faciliter le stockage et la logistique



Barre latérale plus longue pour s'adapter au lit avec extension

# Aide à fournir des soins optimaux aux utilisateurs

Une combinaison de fonctionnalités repensées, des caractéristiques avancées et une qualité sans compromis pour une meilleure prise en charge des patients.

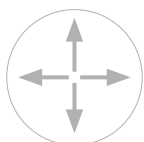

## Réduction du cisaillement et du frottement

Les dimensions optimisées du plan de couchage aident à réduire le cisaillement et la friction, tout en augmentant le confort.

Réalisation conforme aux recommandations d'experts en matière d'anthropométrie et de cartographie de la pression.



## Facile à stocker et à transporter

Le montage et le démontage sans outil en combinaison avec la livraison type trolley (livraison possible en carton également).



## Sécurité et qualité assurées

Conforme à la norme de sécurité IEC 60601-2-52, notre gamme Medley Ergo est considérée comme fiable pour ses normes de sécurité élevées et sa qualité optimale.

Ses certifications contribuent ainsi à fournir une assistance fiable, sur le long terme, que ce soit à domicile ou dans des environnements de soins de longue durée.



## Caractéristiques techniques ▼


Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.




Largeur hors-tout  
Largeur intérieur ▼



Longueur hors tout  
Longueur intérieur ▼

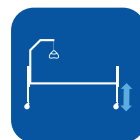

Réglage en hauteur ▼

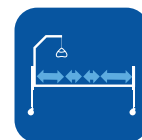

Section de plan de  
couchage ▼

Medley Ergo

1020 mm  
900 mm

2240 mm  
2090 mm

400 - 800 mm ou  
330 - 730 mm

800 - 230 - 300 - 670 mm


Medley Ergo Low

1020 mm  
900 mm

2240 mm  
2090 mm

280 - 680 mm ou  
210 - 610 mm

800 - 230 - 300 - 670 mm

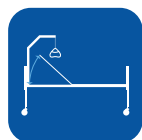


Relève-buste ▼



Angle de plicature ▼



Angle repose-jambes ▼

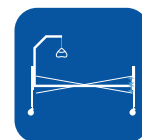

Procline<sup>1</sup> ▼

Medley Ergo

0 - 70°

0 - 24°

0 - 18°

11°

Medley Ergo Low

0 - 70°

0 - 24°

0 - 18°

11°



Poids total  
du produit ▼



Poids max.  
utilisateur ▼



Partie du plan de  
couchage la plus lourde ▼

Medley Ergo

64 kg

Charge de  
fonctionnement 180 kg  
145 kg

17 kg

Medley Ergo Low

64 kg

Charge de  
fonctionnement 180 kg  
145 kg

17 kg

Conforme à la norme NF EN 60601-2-52

1. Veuillez noter que la fonction d'inclinaison n'est pratiquée que pour les utilisateurs sous surveillance médicale.

Le lit ne doit pas être utilisé pour des patients dont l'âge est inférieur à 12 ans ou dont la taille est équivalente ou plus petite à celle d'une personne de moins de 12 ans.

Gris clair

Hêtre

Tel: **+33 2 47 62 64 00**  
contactfr@invacare.com  
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.  
Route de Saint Roch  
37230 Fondettes  
France



Yes, you can.®