

# Action<sup>®5</sup> Vouwframe & Action<sup>5</sup> Vastframe



Ontdek de Action<sup>5</sup> familie

LICHTGEWICHT | INSTELBAAR | VEELZIJDIG TE CONFIGUREREN



# Past perfect bij jouw lifestyle!

De Invacare **Action<sup>5</sup>** is ontwikkeld voor de actievere gebruiker die op zoek is naar een rolstoel met goede rijeigenschappen. Met een betrouwbaar bewezen ontwerp kan de **Action<sup>5</sup>** range aan verschillende wensen en eisen voldoen. De stoelen zijn op veel fronten instelbaar en configureerbaar, wat hen ideaal maakt voor veranderende eisen van de gebruiker.



## Maak het persoonlijk

Om de stoel persoonlijk te maken, is er keuze uit verschillende framekleuren. Daarnaast kunnen extra kleuren gekozen worden voor de asplaten en voorvorken.

## Veelzijdig te configureren

Voor gebruikers die een actievere uitstraling en een nog lichtere stoel willen, is er een vast voorframe verkrijgbaar.



Om transfers te vergemakkelijken en als vouwen en transport belangrijk zijn, is er een uitvoering met wegzwenkbare beensteunen beschikbaar.



Er is een brede range armsteunen en accessoires beschikbaar, waarmee de **Action<sup>5</sup>** naar ieders wensen kan worden geconfigureerd.

## In-stoel instelbaarheid

Onze **unieke gepatenteerde technologie** maakt het mogelijk dat de hoek van de rugleuning ingesteld kan worden terwijl de gebruiker in de rolstoel zit. De ingebouwde schaalverdeling zorgt ervoor dat de rughoek zeer nauwkeurig ingesteld kan worden.



Andere in-stoel instellingen die gedaan kunnen worden aan de **Action<sup>5</sup>** zijn:

- + Zitdiepte
- + Zithoek
- + Zithoogte voor en achter
- + Rughoek
- + Rughoogte
- + Diepte voetsteunen
- + Hoogte armsteunen





## BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN IN EEN OOGOPSLAG

### Action<sup>5</sup> Vastframe

1

#### Vast lichtgewicht frame Uitstekende rijeigenschappen



- ▶ Ideaal voor de actieve gebruiker omdat deze stoel energie efficiënt is dankzij het boxframe ontwerp. Dit zorgt voor extreme stijfheid en stevigheid die zorgen voor beperkt energieverlies bij het rollen. Dit helpt de **spanning en druk op de schouders en het bovenlichaam te verminderen.**



2

#### Combineerbaar met de nieuwe Alber e-pilot<sup>®</sup> Geeft je leven meer snelheid

- ▶ Koppel de **Action<sup>5</sup> Vastframe** aan de nieuwe **Alber e-pilot** aankoppelbike voor een milieuvriendelijk mobiliteitsalternatief met maximaal rijplezier. De **e-pilot** biedt een vorm van mobiliteit waarmee de mogelijkheden om op pad te gaan worden uitgebreid met de flexibiliteit om de aankoppelbike eenvoudig los te koppelen op het moment dat alleen de handbewogen rolstoel nodig is.




## Action<sup>5</sup> Vouwframe

### Vergrendelmechanisme

Stabiel en veilig

 GEPATENTEERD

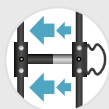

- ▶ Het gepatenteerde H-vormige horizontale vouwmechanisme zorgt voor een **zeer stabiel frame**. Dit betekent dat de rolstoel licht rijdt, zeker in vergelijking met andere vouwrolstoelen op de markt. Het automatische vergrendelmechanisme zorgt voor een veilige zitpositie en zorgt dat de stoel soepel rijdt.

### Uniek vouwmechanisme

Eenvoudig compact design

 GEPATENTEERD



- ▶ Het innovatieve design van de rolstoel zorgt ervoor dat het frame zeer smal opgevouwen kan worden. Ook is de rugleuning neerklapbaar waardoor de rolstoel zeer compact wordt. De handelingen om de stoel op te vouwen en de rug neer te klappen zijn zeer eenvoudig, waardoor deze **ideaal op te bergen of mee te nemen is**.

1



2



3



4



# Maak kennis met de **Action<sup>5</sup>** range

**Rolstoelen voor dagelijks gebruik.  
Bieden een complete oplossing.**



## **Action<sup>5</sup> Vastframe**

- ▲ Een zeer robuuste, lichtgewicht rolstoel met een energie efficiënt boxframe ontwerp, met uitstekende rijeigenschappen.



## **Action<sup>5</sup> Vouwframe**

- ▲ De ideale optie wanneer transport en een klein opvouwbaar pakket gewenst zijn.

## **Alles-in-één oplossing**

De **Action<sup>5</sup>** familie biedt een complete oplossing die perfect geconfigureerd kan worden om aan de wensen van de gebruiker tegemoet te komen én aan die van de leverancier:

- ▶ Onderling uitwisselbare onderdelen
- ▶ Instelbaarheid ingebouwd in iedere stoel
- ▶ Cross compatibiliteit van onderdelen en opties
- ▶ Verminderde complexiteit
- ▶ Geschikt voor **Alber** elektrische ondersteuning

## **Verkrijgbare opties en accessoires**


- ▶ Instelbaar zwaartepunt en camber
- ▶ Reeks wegzwenkbare beensteunen en beensteunopties
- ▶ Diverse armsteunen waaronder een wegzwenkbaar en afneembaar exemplaar
- ▶ Verschillende duwhandvatten
- ▶ Anti-tip
- ▶ Keuze uit verschillende voorwielen
- ▶ Lichtgewicht spatborden

## Technische gegevens ▼

Kijk voor uitgebreide informatie over dit product, zoals de gebruikshandleiding, op [www.invacare.nl](http://www.invacare.nl).

<b>Zitbreedte ▼</b>	<b>Zitdiepte ▼</b>	<b>Zithoek ▼</b>	<b>Zithoogte ▼</b>	<b>Rughoek ▼</b>	<b>Rughoogte ▼</b>	<b>Voorframe hoek ▼</b>
305 / 330 / 355 / 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 530 mm	350 / 375 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm	0 - 9 °	360-535 mm in stappen van 25 mm Zithoogte achter: 360-510 mm in stappen van 25 mm	Vast 90° Of instelbaar 90° -15°/+15°	Vast 300 / 325 / 350 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm Instelbaar 360-400 en 410-490 mm	Vast voorframe 80° Wegzwenkbare beensteunen 70° / 80° & 90° Comfort beensteunen 0-80°
<b>Diepte voetsteun ▼</b>	<b>Hoogte armsteun ▼</b>	<b>Totale breedte<sup>1</sup> ▼</b>	<b>Totale breedte, opgevouwen ▼</b>	<b>Totale lengte, inc. beensteunen<sup>1</sup> ▼</b>	<b>Totale lengte, ex beensteunen ▼</b>	<b>Totale hoogte ▼</b>
Wegzwenkbare beensteunen: 200-510 mm Vastframe: 300-530 mm	150-265 mm 205-280 mm 250-375 mm	ZB +180 mm tot ZB +250 mm	Action <sup>5</sup> Vouwframe: 320-380 mm Action <sup>5</sup> Vastframe: 485-780 mm	845-1205 mm	670-860 mm	701-1108 mm
<b>Max. veilige hellinghoek<sub>2</sub> ▼</b>	<b>Radius<sub>3</sub> ▼</b>	<b>Max. gebruikersgewicht ▼</b>	<b>Totaal gewicht ▼</b>	<b>Gewicht zwaarste onderdeel ▼</b>	<b>Afmetingen Action<sup>5</sup> Vouwframe<sub>4</sub> ▼</b>	
7°	Zie voetnoot nr. 3	100 & 130 kg	Action <sup>5</sup> Vouwframe: vanaf 12,3 kg Action <sup>5</sup> Vastframe: vanaf 10,8 kg	Action <sup>5</sup> Vouwframe: 8,3 kg Action <sup>5</sup> Vastframe: 6,8 kg	670-860 mm	

## Framekleuren ▼

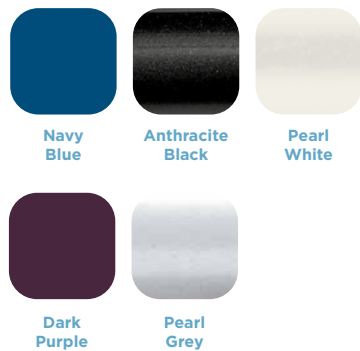


## Voetnoten ▼

- Totale afmetingen**  
In sommige configuraties overschrijdt de totale breedte of lengte de toegestane waarden, waardoor doorgang bij een nooduitgang niet mogelijk is.
- Stabiliteitswaarden:**  
Max. helling parkeerrem = 7°  
Statische stabiliteit heuvel af = 14° - 21°  
Statische stabiliteit heuvel op = 9,4° - 25,5°  
Statische stabiliteit zijwaarts = 20° - 24°
- Radius**  
Minimale draaicirkel = 625 mm  
Pivot breedte = 1050 - 1180 mm
- Opgevouwen afmetingen (Action<sup>5</sup>)**  
Opgevouwen hoogte = 450 - 720 mm  
Opgevouwen diepte = 620 - 1020 mm  
Opgevouwen breedte = 320 - 380 mm

## Accentkleuren ▼



## Bekleding ▼

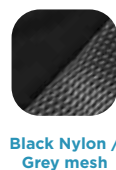

## Overige gegevens ▼



Let op: daadwerkelijke op rolstoel kleuren kunnen afwijken van datgene dat hierboven getoond is.

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57  
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58  
[nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com)  
[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

Invacare B.V.  
Galvanistraat 14-3  
6716 AE Ede  
Nederland

