

POWER SERIES

# AVIVA RX Modulite



Indrukwekkende achterwielaangedreven elektrische rolstoel  
met zeer instelbare en comfortabele Modulite zitting



| AVIVA RX Modulite

# Een vertrouwde en comfortabele rit.

Design. Technologie. Prestaties.

Ontdek de **AVIVA** RX. Een hoogwaardige achterwielaangedreven elektrische rolstoel, gecombineerd met de Modulite zitting voor maximaal comfort in elke omgeving.



| AVIVA RX Modulite

# Design. Technologie. Prestaties.

Bekijk de **AVIVA RX** basis van dichtbij. De eerste van de AVIVA lijn, de AVIVA RX, zet een nieuwe standaard in achterwielaangedreven elektrische rolstoelen. Ontworpen met de laatste technische innovaties voor nóg betere rijprestaties.



## **CTC vering (gepatenteerd)**

Ontworpen om trillingen of hobbels te absorberen tijdens het rijden. Voor optimaal comfort en een vergroot vertrouwen in stabiliteit, met vier wielen die in contact blijven met de vloer.



## **LiNX G-Trac Gyro**

Lange afstanden of met een hogere snelheid reizen is nu nog eenvoudiger met LiNX G-Trac Gyro technologie. Een gyro module in de electronica zorgt dat de AVIVA RX de aangegeven richting volgt en op het juiste pad blijft.



## **Compact design**

Een kortere, smallere wielbasis en lage zithoogte zorgen dat de AVIVA RX gemakkelijk te manoeuvreren is. Met precisiecontrole in iedere omgeving en eenvoudig gebruik in kleine ruimtes dankzij een kleine draaicirkel.



## **Strak en stijlvol**

Zuivere lijnen, strakke hoeken en een hoogwaardige afwerking onderscheiden de AVIVA RX als het gaat om uiterlijk. Modern in design om er net zo goed uit te zien als het presteert en verkrijgbaar in verschillende kleuren.

| AVIVA RX Modulite

# Uitgebreide positioneringsmogelijkheden.

Ons veelzijdige Modulite zitsysteem biedt een gepersonaliseerde positie voor extra comfort en ondersteuning.

Variërend van basic zitbehoeften tot complexere positioneringsbehoeften, het modulaire ontwerp maximaliseert de positioneringsmogelijkheden.



## Complete oplossingen

Uitgebreide reeks zitopties zoals ruggen, zitkussens, armsteunen, hoofdsteunen en meer.



## Ontworpen voor veiligheid & comfort

50° elektrische zitkanteling, 300mm zitlift met 45° kanteling voor comfort en veiligheid.



## LNX beensteun

Verlengt in zowel lengte als hoogte, werkt met elektrische rugkanteling om wrijving te verminderen.



## Bekroonde Matrix®

Gepersonaliseerde Matrix zitopties voor een optimale pasvorm, altijd.

## Reeks van kantelmogelijkheden

voor drukmanagement en maximaal comfort.



**300 mm zitlift gecombineerd met tot 45° kantelpositionering**

| AVIVA RX Modulte

# Modulte zitsysteem. Modulaire veelzijdigheid.

Onze populairste zitoplossing is ontworpen met jou in gedachten. Met een modulaire aanpak kan onze Modulte zitting eenvoudig perfect passend worden gemaakt voor uitzonderlijke ondersteuning en comfort.

## Tech. Spec.

Zibreedte: 330mm - 530mm

Zitdiepte: 410mm - 510mm

Zithoogte: vanaf 435mm

Armsteunhoogte: 230mm - 390mm

Voetsteunlengte: 280mm - 460mm



Instelbare  
zitting  
voor een  
perfecte  
pasvorm.



| AVIVA RX Modulte

# Met geavanceerde LiNX<sup>®</sup> technologie.

LiNX<sup>®</sup> technologie helpt een gepersonaliseerde en vertrouwde rijervaring te geven. De innovatieve technologie leert gewoontes en voorkeuren in, wat het een superintuïtief systeem maakt.



## Nieuwe Resolve Joystick montage

- Exceptionele reeks bereikbare joystick-posities voor zeer veel comfort
- Instelbare spanningsreactie
- Optimale controle en comfort



## 3.5" Touchscreen

Indrukwekkend 3,5» kleuren touchscreen met joystick, snelheidsmeter en kilometer teller.



## Speciale bedieningen

Inclusief compacte begeleidersbedieningen, hoofdbesturingen en benaderingsbesturingen.



## Ingebouwde Bluetooth<sup>®</sup>

Maakt verbinding met apparaten en omgevingsbesturingen mogelijk.



## Bedieningsinput opties

Verschillende bedieningsinput mogelijkheden zorgen voor een persoonlijke set-up voor maximale controle en vertrouwen dat de rolstoel consistent reageert.





| AVIVA RX Modulite

# Technische Gegevens.

Kijk voor uitgebreidere informatie over dit product, zoals de gebruikshandleiding, onze website [www.invacare.nl](http://www.invacare.nl).

## Kleuren

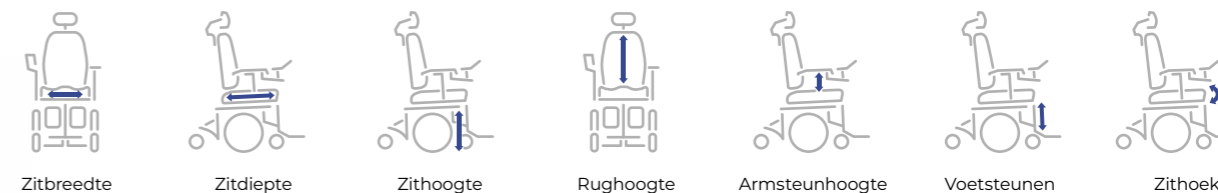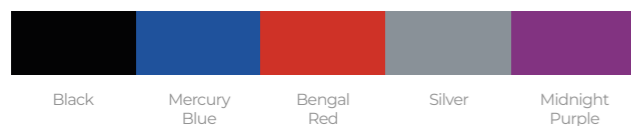

### AVIVA RX 1-delige zitting

Zitbreedte	Zitdiepte	Zithoogte	Rughoogte	Armsteunhoogte	Voetsteunen	Zithoek
430 - 480 mm	410 - 510 mm	435 - 485 mm	480 mm - 540 mm	275 - 390 mm	290 - 460 mm	0° - 20°

### AVIVA RX telescopische zitting

Zitbreedte	Zitdiepte	Zithoogte	Rughoogte	Armsteunhoogte	Voetsteunen	Zithoek
330 - 530 mm	410 - 510 mm	435 - 485 mm	480, 540, 560 - 610 mm	230 - 360 mm	280 - 460 mm	0° - 50°

### AVIVA RX HD:

Zitbreedte	Zitdiepte	Zithoogte	Rughoogte	Armsteunhoogte	Voetsteunen	Zithoek
620 - 650 mm	510 - 580 mm	435 - 485 mm	540 mm	245 - 360 mm	280 - 460 mm	0° - 30°



### AVIVA RX 1-delige zitting


Rughoek	Totale hoogte	Totale lengte inc. voetsteunen	Totale lengte exc. voetsteunen	Breedte drive unit	Max. gebruikersgewicht	Accupaciteit
90° - 120°	1000 mm	1026 - 1300 mm	830 mm	560 mm	136 kg	60/73.5 Ah

### AVIVA RX telescopische zitting

Rughoek	Totale hoogte	Totale lengte inc. voetsteunen	Totale lengte exc. voetsteunen	Breedte drive unit	Max. gebruikersgewicht	Accupaciteit
90° - 120°	1000 - 1335 mm	1026 - 1300 mm	830 mm	560 mm	136 kg	60/73.5 Ah

### AVIVA RX HD:

Rughoek	Totale hoogte	Totale lengte inc. voetsteunen	Totale lengte exc. voetsteunen	Breedte drive unit	Max. gebruikersgewicht	Accupaciteit
90° - 120°	1000 mm	1026 - 1300 mm	830 mm	635 mm	160 kg	60/73.5 Ah

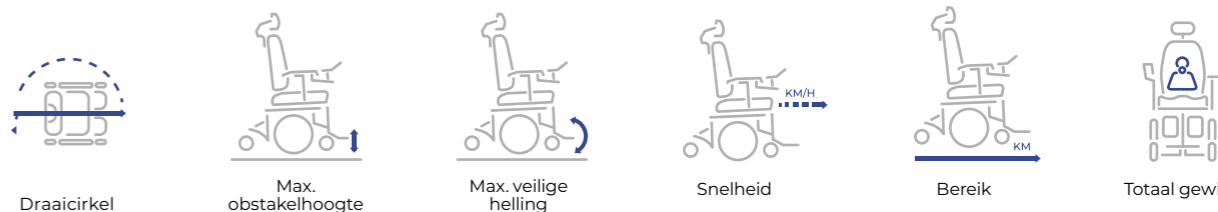

### AVIVA RX

Draaicirkel	Max. obstakelhoogte	Max. veilige helling	Snelheid	Bereik	Totaal gewicht
1506 - 2086 mm	75 mm (100 mm met stoepenklimber)	6° / 10.5%	Tot 12 km/h	Tot 47 km	Tot 185.2 kg

| TDX® SP2 Modulte

# Deel jouw ideeën en help de toekomst van elektrische rolstoelen vorm te geven.

We nodigen je uit jouw feedback te delen. Jouw inzichten helpen ons de gebruikers van elektrische rolstoelen beter te ondersteunen.

Scan hiervoor het formulier en vul dit in.



Bedankt dat wij jouw reis mogen meemaken.

**Invacare Power Series Team**





Deel jouw feedback

SUBSCRIBE



Mijn stoel zorgt ervoor dat ik een onafhankelijk leven leidt en iedere dag naar buiten kan.

**Ian Mackay**  
Invacare Ambassador

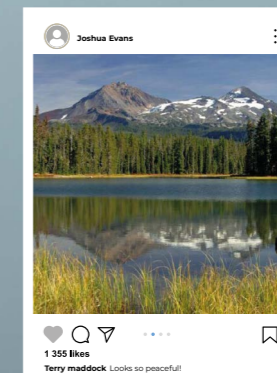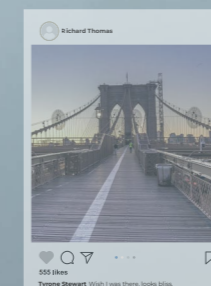



# POWER SERIES

**AVIVA RX**

AVIVA FX

TDX SP2

Esprit Action

Kompas

Storm 4

**Tel: +31 318 69 57 57**

[nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com)

[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

© 2024 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden.  
Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure. Invacare  
behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder  
vooraankondiging. NL - AVIVA RX Modulite - 10/2024.

