

POWER SERIES

AVIVA RX Ultra



Indrukwekkende achterwielaangedreven elektrische rolstoel
met geavanceerde Ultra zitting



| AVIVA RX Ultra

Een vertrouwde en comfortabele rit.

Design. Technologie. Prestaties.

Ontdek de **AVIVA** RX. Een hoogwaardige achterwiel-aangedreven elektrische rolstoel, gecombineerd met de geavanceerde Ultra zitting voor maximaal comfort en ondersteuning in iedere omgeving.



| AVIVA RX Ultra

Design. Technologie. Prestaties.

Bekijk de **AVIVA RX** basis van dichtbij. De eerste van de AVIVA lijn, de AVIVA RX, zet een nieuwe standaard in achterwielaangedreven elektrische rolstoelen. Ontworpen met de laatste technische innovaties voor nóg betere rijprestaties.



CTC vering (gepatenteerd)

Ontworpen om trillingen of hobbels te absorberen tijdens het rijden. Voor optimaal comfort en een vergroot vertrouwen in stabiliteit, met vier wielen die in contact blijven met de vloer.



LiNX G-Trac Gyro

Lange afstanden of met een hogere snelheid reizen is nu nog eenvoudiger met LiNX G-Trac Gyro technologie. Een gyro module in de electronica zorgt dat de AVIVA RX de aangegeven richting volgt en op het juiste pad blijft.



Compact design

Een kortere, smallere wielbasis en lage zithoogte zorgen dat de AVIVA RX gemakkelijk te manoeuvreren is. Met precisiecontrole in iedere omgeving en eenvoudig gebruik in kleine ruimtes dankzij een kleine draaicirkel.



Strak en stijlvol

Zuivere lijnen, strakke hoeken en een hoogwaardige afwerking onderscheiden de AVIVA RX als het gaat om uiterlijk. Modern in design om er net zo goed uit te zien als het presteert en verkrijgbaar in verschillende kleuren.

| AVIVA RX Ultra

Ontworpen voor klinische topkwaliteit.

De Ultra zitting is ontworpen door onze klinische experts om optimaal comfort en ondersteuning te bieden, met een gepersonaliseerde pasvorm voor nog meer onafhankelijkheid en toegankelijkheid.

De combinatie van geïntegreerde instellingsmogelijkheden en het slimme Ultra Rail systeem zorgt ervoor dat de Ultra de correcte, individuele zitoplossing biedt.



Reductie van schuifkrachten

Ontworpen rondom de natuurlijke draaipunten van het lichaam, met een geoptimaliseerde reeks elektrische verstellingen voor een ondersteunde en comfortabele zit. Design helpt schuifkrachten te reduceren en druk te herverdelen.



Positionering op maat

Zeer modulair en aanpasbaar om aan te sluiten bij door de tijd veranderende behoeften.



LNX beensteun

Verlengt in zowel lengte als hoogte, werkt met elektrische rugkanteling om wrijving te verminderen.



Bekroonde Matrix®

Gepersonaliseerde Matrix zitopties voor een optimale pasvorm, altijd.



| AVIVA RX Ultra

matrix[®]
SCIENCE OF SEATING

Optimaal zitten.

Het multi-instelbare Ultra zitsysteem biedt je, in combinatie met de bekronde **Matrix** zitting range, een goed ondersteunde zit met verhoogde bescherming voor maximaal comfort.



| AVIVA RX Ultra

matrx®

SCIENCE OF SEATING

Kies uit een selectie ruggen, zitkussens, hoofdsteunen en een serie accessoires voor een gepersonaliseerde zitoplossing.



Hoofdsteunen

Onze zeer instelbare Matrix Elan hoofdsteun is ontworpen voor effectieve positionering. Het dubbel gegoten foam biedt onderdamping, comfort en bescherming.



Heupgordel

Instelbare quick release bevestiging voor goede positionering en transfers.



Rugopties

Een range rugopties inclusief onze Matrix ruggen zijn beschikbaar voor maximale houdingsondersteuning, drukverlichting en buitengewoon microklimaatmanagement. Met ingebouwde contourondersteuning voor extra stabiliteit.



Zitkussens

Kies uit een selectie zitkussens die positionering en huidbescherming ondersteunen. Onze geavanceerde Matrix Libra is ontworpen met een dubbellaagse Flo-tech gelzak voor verbeterde controle van schuifkrachten. Kan bovendien worden aangepast met extra positioneringsopties.



| AVIVA RX Ultra

Met geavanceerde LiNX[®] technologie.

LiNX[®] technologie helpt een gepersonaliseerde en vertrouwde rijervaring te geven. De innovatieve technologie leert gewoontes en voorkeuren in, wat het een superintuïtief systeem maakt.



| AVIVA RX Ultra

Ontdek meer.

360°

Nieuwe Resolve Joystick montage

- Exceptionele reeks bereikbare joystick-posities voor zeer veel comfort
- Instelbare spanningsreactie
- Optimale controle en comfort



3.5" Touchscreen

Indrukwekkend 3,5" kleuren touchscreen met joystick, snelheidsmeter en kilometer teller.



Speciale bedieningen

Inclusief compacte begeleidersbedieningen, hoofdbesturingen en benaderingsbesturingen.



Ingebouwde Bluetooth®

Maakt verbinding met apparaten en omgevingsbesturingen mogelijk.



Bedieningsinput opties

Verschillende bedieningsinput mogelijkheden zorgen voor een persoonlijke set-up voor maximale controle en vertrouwen dat de rolstoel consistent reageert.





| AVIVA RX Ultra

Technische Gegevens.

Kijk voor uitgebreidere informatie over dit product, zoals de gebruikshandleiding, onze website www.invacare.nl.

Kleuren

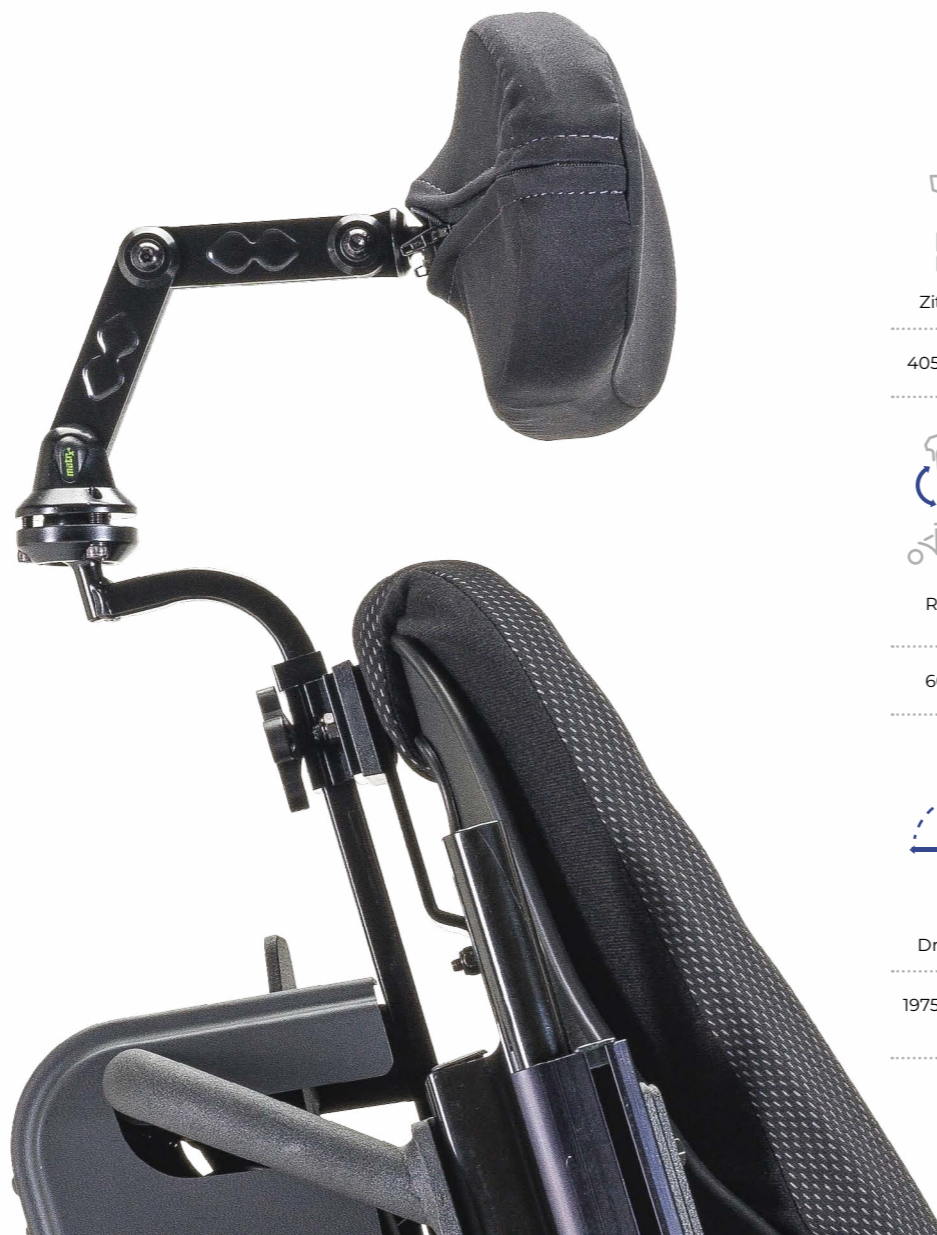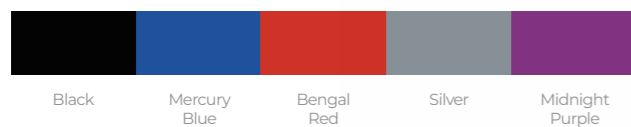

Zitbreedte	Zitdiepte	Zithoogte	Rughoogte	Armsteunhoogte	Voetsteunen	Zithoek
405 - 555 mm	405 - 580 mm	420 - 485 mm	355 - 685 mm	230 - 405 mm	290 - 465 mm	-10° - 50°
Rughoek	Totale hoogte	Totale lengte inc. voetsteunen	Totale lengte exc. voetsteunen	Breedte drive unit	Max. gebruikersgewicht	Accucapaciteit
60° - 170°	1101 - 1210 mm	1251 - 1300 mm	830 mm	560 / 635 mm	136 kg	60 / 73.5 Ah
Draaicirkel	Max. obstakelhoogte	Max. veilige helling	Snelheid	Bereik	Totaal gewicht	
1975 - 2105 mm	75 mm (100 mm met stoepenklimmet)	6° / 10.5%	Tot 12 km/h	Tot 37 km	Tot 190.1 kg	

| AVIVA RX Ultra

Deel jouw ideeën en help de toekomst van elektrische rolstoelen vorm te geven.

We nodigen je uit jouw feedback te delen. Jouw inzichten helpen ons de gebruikers van elektrische rolstoelen beter te ondersteunen.

Scan hiervoor het formulier en vul dit in.



Bedankt dat wij jouw reis mogen meemaken.

Invacare Power Series Team





Deel jouw feedback

SUBSCRIBE



Mijn stoel zorgt ervoor dat ik een onafhankelijk leven leidt en iedere dag naar buiten kan.

Ian Mackay
Invacare Ambassador

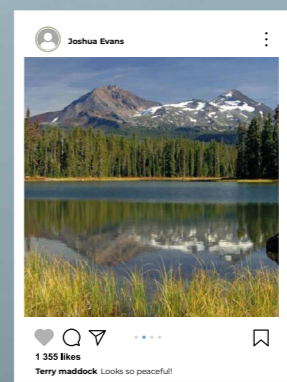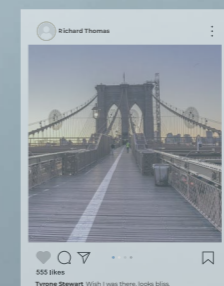

P O W E R S E R I E S

AVIVA RX

AVIVA FX

TDX SP2

Esprit Action

Kompas

Storm 4

Tel: +31 318 69 57 57

nederland@invacare.com

www.invacare.nl

© 2024 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden.
Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure.
Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen
zonder voor aankondiging. NL - Aviva ULM - 10/2024

