

Küschall



Küschall

Invacare International GmbH / Benkenstrasse 260 / CH-4108 Witterswil / Switzerland
Phone +41 (0) 61 487 70 70 / Fax +41 (0) 61 487 70 79 / www.kuschall.com

Nederland: Invacare B.V. / Galvanistraat 14-3 / 6716 AE Ede
Tel.: +31 (0)318 695 757 / Fax: +31 (0)318 695 758 / www.invacare.nl

België: Invacare N.V. / Autobaan 22 / 8210 Loppem
Tel.: +32 (0)50 831 010 / Fax: +32 (0)50 831 011 / www.invacare.be







UNLIMIT YOUR WORLD

We streven het na om u superieure oplossingen te bieden. Onze stoelen geven u mogelijkheden om een succesvol leven te leiden zoals u het zich voorstelt.

Wij geloven dat alles mogelijk is wanneer je de kracht hebt om het te bereiken. We willen dat je een actief leven leidt en het vertrouwen en de drive hebt om niet op te geven bij tegenspoed.

We zijn vastbesloten om de beste oplossingen te bieden. We will Unlimit your world.

HYDROFORMING

Hydrovorming is een proces waarmee metalen in complexe vormen kunnen worden gebogen en de dikte van het metaal kan worden aangepast om de optimale verhouding van gewicht, weerstand en stijfheid te krijgen. Dit proces zorgt ervoor dat onderdelen kunnen worden ontwikkeld met een betere ergonomisch vormgeving. De stoel krijgt hiermee een unieke uitstraling met nog meer comfort.

Door het toepassen van de hydrovorm-technologie, zijn de Kuschall frames niet alleen sterker, maar ook lichter van gewicht. Tests tonen aan dat als gelijke druk wordt uitgeoefend op het frame, de vervorming van het hydrogevormd frame 60% minder is t.o.v. het ronde buis frame en vergelijkbaar met het carbon frame.

Uiteindelijk helpt hydrovorming bij het maken van een rolstoel die sterker is dan ooit en zeer licht rijdt.



K



SPORT

ichall

K

FOLIO

THE KSL®

| VASTFRAME



Elegantie vormt de kern van de KSL®. De volledige Kuschall-ervaring heeft een ongeëvenaarde kwaliteit en een strak, minimalistisch ontwerp. De op maat gemaakte KSL® is ontworpen voor de meer ervaren gebruiker en is volledig aanpasbaar, waardoor u de vrijheid hebt om uw eigen persoonlijkheid te uiten. Deze Super Light Kuschall is de belichaming van pure schoonheid, met het volledig gelaste hydrogevormd frame zorgt de stijfheid voor een sierlijke moeiteloze rit waar je ook gaat.

- **Elegant**
- **Gemaakt als maatwerk**
- **Super Licht**







1



2



3



4

K

1. Simpelweg de lichtste

Op maat gemaakt concept voor de lichtste constructie. Ook heeft de Kuschall Super Light een prachtige geometrie die naadloos overgaat in het silhouet van de stoel.

2. Geïntegreerd ontwerp

Van het voorframe tot het achterframe en de voorwielbehuizing, de nieuwe KSL® spreekt dezelfde ontwerptaal. De nieuwe KSL® is krachtig en slim ontworpen en combineert traditioneel en modern.

3. Vaste of vouwbare rugleuning

De KSL® is ontworpen om de stijfheid en sterkte te vergroten, maar kan ook worden besteld met de opvouwbare rugleuning. Neem nooit genoegen met compromissen en je kunt het overal mee naartoe nemen. De KSL® is perfect voor transport en opslag.

4. Herontworpen voetsteun

Kleine details kunnen een groot verschil maken. We hebben de voetsteun opnieuw ontworpen, een fundamenteel element voor zithouding, volgens de krachtige geometrie en dynamische aantrekkingskracht van de algehele uitstraling.

K-SERIES

| VASTFRAME



De iconische modulaire Kuschall K-serie rolstoel is een product met een veelzijdige zitmodule die moeiteloos en onafhankelijk van het frame worden aangepast. Of u nu een stabielere positie nodig heeft of al een geavanceerde gebruiker bent, de K-serie kan worden aangepast aan uw levensstijl. De dynamische K-serie rolstoel biedt u uitstekende voor onderweg.

- **Iconisch**
- **Modulair**
- **Dynamisch**





1



2



3



4



K

1. Essentie van Küschall

Deze stoel is de essentie van Küschall en waar het merk voor staat, het bevat het al onze knowhow in wat alle gebruikers willen. Een rolstoel die veelzijdigheid, prestaties en design combineert. Als er een product is dat alles vertegenwoordigt waar we in geloven, is de K-serie het wel.

2. Zitsysteem

Het zitsysteem blijft onafhankelijk van het frame en stelt u in staat om uw zitinstellingen altijd en overal te wijzigen.

3. Ergonomische rugbeugel

Meer grip en minder kracht nodig om de stoel op te tillen dankzij de nieuwe slanke, hydrogevormde rugbeugel. Een slim ontworpen rolstoel, ontworpen om zich aan te passen aan de veranderende elementen in uw dagelijks leven.

4. Snel en makkelijk vouwbaar

De opklapbare rugleuning is in hoogte en hoek verstelbaar. Eenvoudig vouwen met het perfecte open frame zorgt voor moeiteloze autotransfers. Blijf onafhankelijk en onderweg!

CHAMPION


| VOUWFRAME



De KÜschall Champion is een opvouwbaar actieve rolstoel met de stijfheid van een vast frame voor ongelooflijke rijprestaties. Het is de perfecte reisgenoot voor je avonturen. Eenvoudig opgevouwen met het uniek ontworpen vouwmechanisme en met de SK (Swiss knife-folding) optie kan de Champion rolstoel nog kleiner worden ingeklapt. Met het innovatieve lichtgewicht hydrogevormde frame is de Champion ideaal voor uw spannende leven onderweg.

- **Uniek**
- **Hybride**
- **Super Compact**



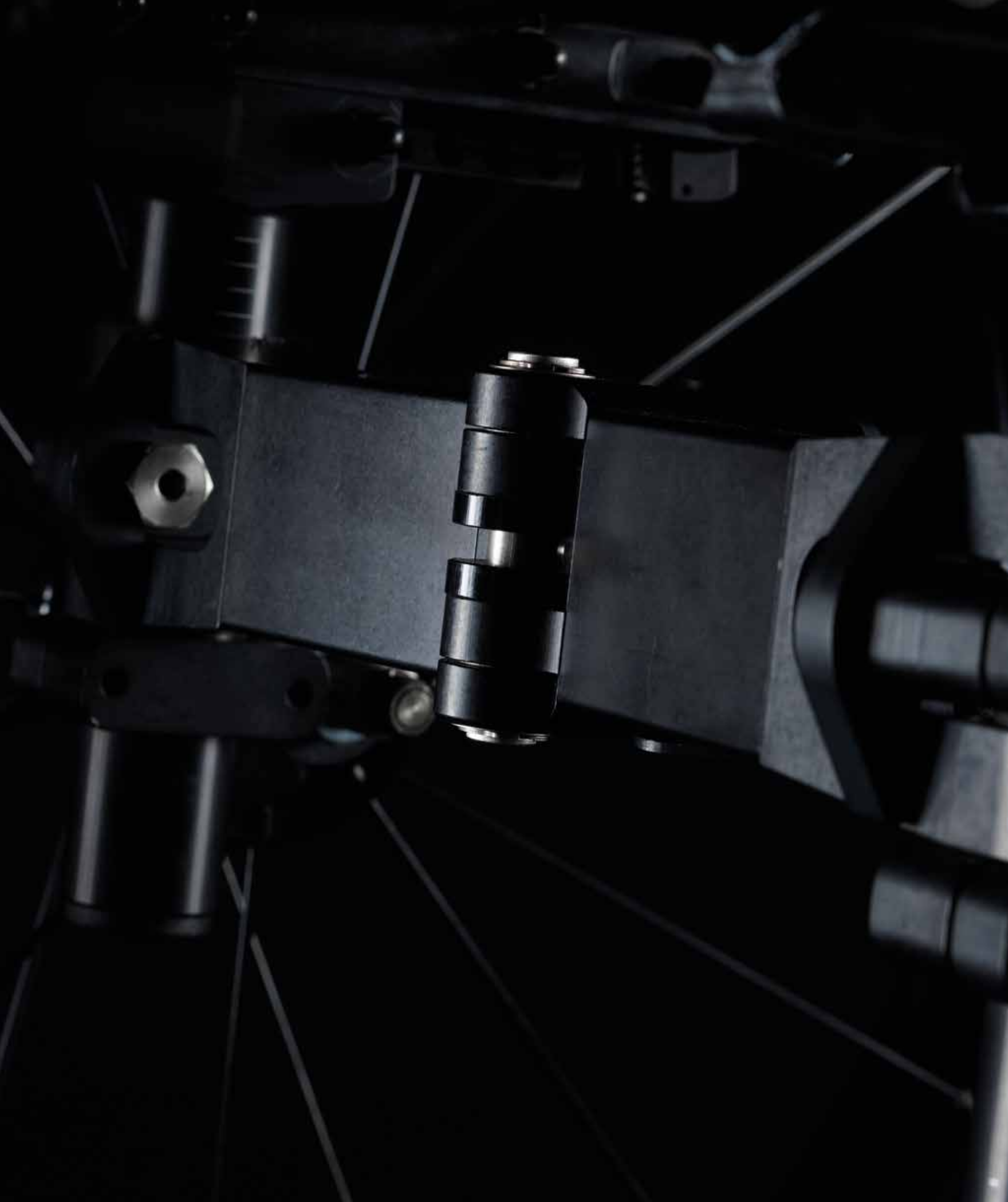



1



2



3



4

K

1. Uniek vouwmechanisme

Het vouwmechanisme is uniek omdat er niets beter verkrijgbaar is op de markt. Het vergrendelingsmechanisme vormt het hart van de Champion. Deze stoel beschikt over alle kwaliteiten van een vouwframe rolstoel en heeft de noodzakelijk stijfheid om de rijprestatie van een vastframe rolstoel te evenaren. Hydrovorming is de kers op de taart, omdat een Champion altijd streeft naar grootheid.

2. Slank herontwerp van de eendelige opklapbare voetplaat

De nieuwe voetsteun past perfect bij het nieuwe design van de nieuwe Kuschall portfolio. Duidelijk vormen en contouren zorgen voor de beste geometrie van de gehele rolstoel, waarbij de technische voordelen blijven gehandhaafd.

3. Formaat tot de grootte van een rugzak

Als je van reizen houdt, is de Champion Swiss Knife optie een uitkomst. De SK optie beschikt over een vouwbaar voorframe dat eenvoudig te sluiten. Een nieuwe generatie, een nieuw begin, van een nog betere Champion.

4. Licht actieve rem

Ontworpen in lijn met het nieuwe frame, bijna een derde lichter dan andere modellen. Deze nieuwe rem bespaard gewicht en geeft perfecte controle. Precisie tot in de kleinste details.

COMPACT

| VOUWFRAME



De Compact is de absolute standaard voor betrouwbaarheid, eerste klas kwaliteit en uitstekende functionaliteit. Küschall Compact kan eenvoudig worden aangepast aan uw behoeften en levensstijl, of u nu een hoger configuratieniveau of een actief product nodig hebt, de Compact is precies wat u zoekt! Deze traditionele, kruisvouwbare rolstoel kan moeiteloos worden ingeklapt. Het lichtgewicht frame is robuust voor soepele rijprestaties.

- **Betrouwbaar**
- **Uitstekende Functionaliteit**
- **Verbeterd Comfort**








K

- 1. Beschikbaar met vaste of wegzwenkbare beensteunen**
Het is gelukt om prestatievermogen en veelzijdigheid samen te voegen tot één product. Met de nieuwe Küschall Compact kunt u vaste of wegzwenkbare beensteunen kiezen, en het resultaat is een allround product met de houding van een superactieve rolstoel.
- 2. Meer stijfheid met kleinere buizen**
Hydroforming maakt een aanzienlijke vermindering van het gewicht van het frame mogelijk, waardoor minder inspanning bij het voortbewegen wordt gegarandeerd, eenvoudige overdrachten aan de voorzijde en compacte opslag.
- 3. Ergonomisch design**
Dankzij de nieuwe vormen in het kniegebied profiteert u van maximale grip voor eenvoudige transfers, herpositionering of de rolstoel in de auto zetten. Ergonomie voldoet aan de hedendaagse mogelijkheden voor hydroforming en geeft leven aan een ontwerp dat traditie en moderniteit verenigt.
- 4. Keep on track**
Jouw behoeften drijven onze innovaties aan. Onze ingenieurs hebben een intuïtieve aanpassing van het zwenkwiel ontworpen, welke uitstekend werkt bij het stabiel houden van de richting.


PERSON

Personaliseer je eigen rolstoel in 3 eenvoudige stappen

1 KIES DE FRAMEKLEUR



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Carmine Red



Azure Blue

2 KIES DE DECORATIESTIJL



Merklabeel




Viperstrepen

3 KIES DE DECORATIEKLEUR



Rood

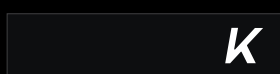

Zwart



Licht grijs



Goud




Rood



Blauw




Donker grijs



Zwart

ALISEER

KÜSCHALL CONFIGURATOR

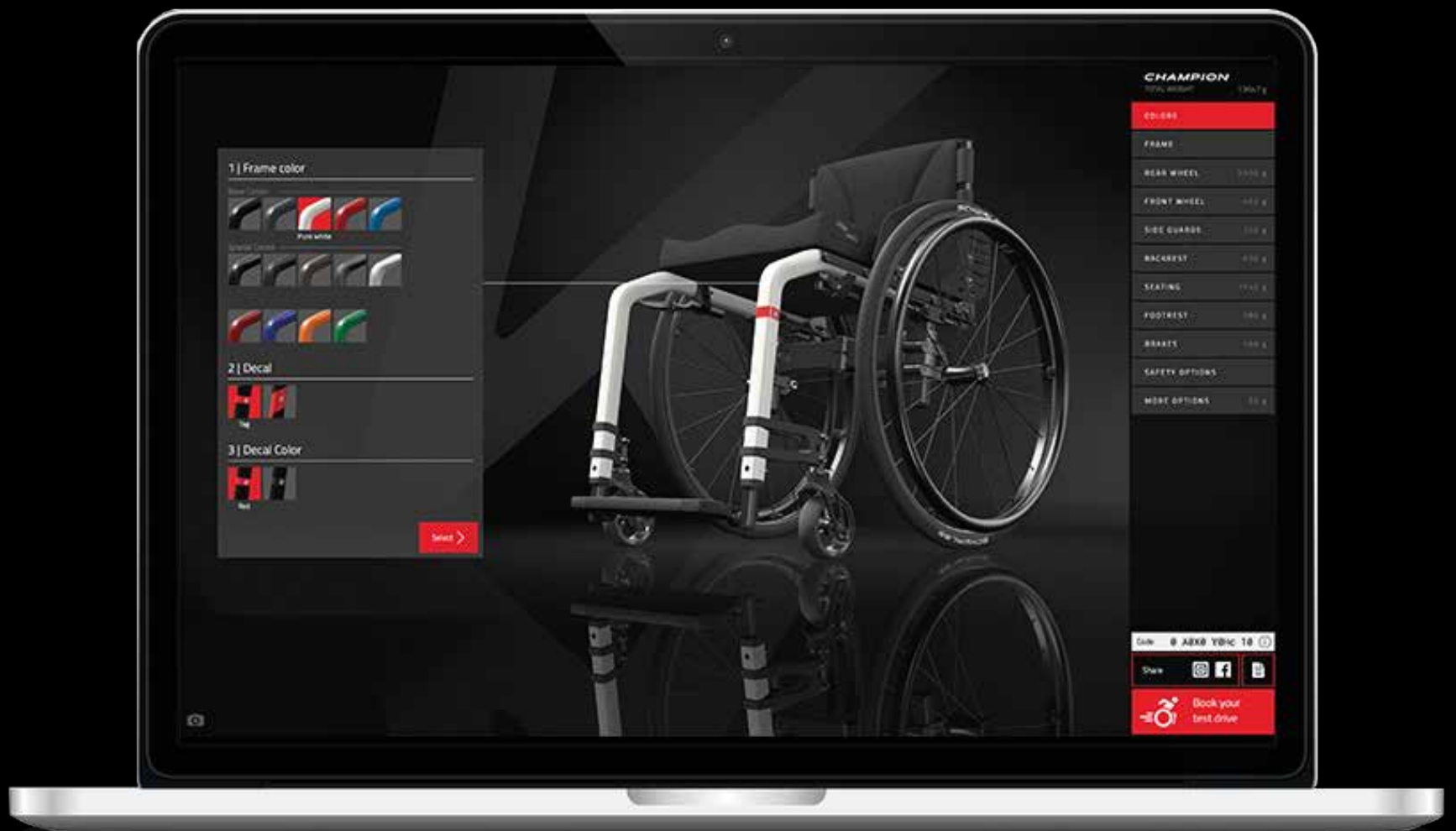


Ga naar www.kuschall.com/international-en/visualizer/ en configureer een uniek ontwerp met de Kuschall Configurator. Ontwerp je rolstoel in eigen stijl en verleg de grenzen!

ACCESSORIES

Stel geen grenzen aan je verlangens, we hebben wat je nodig hebt en nog veel meer.

Ga naar www.kuschall.com/accessories om het complete assortiment aan accessoires voor jouw rolstoel te bekijken.

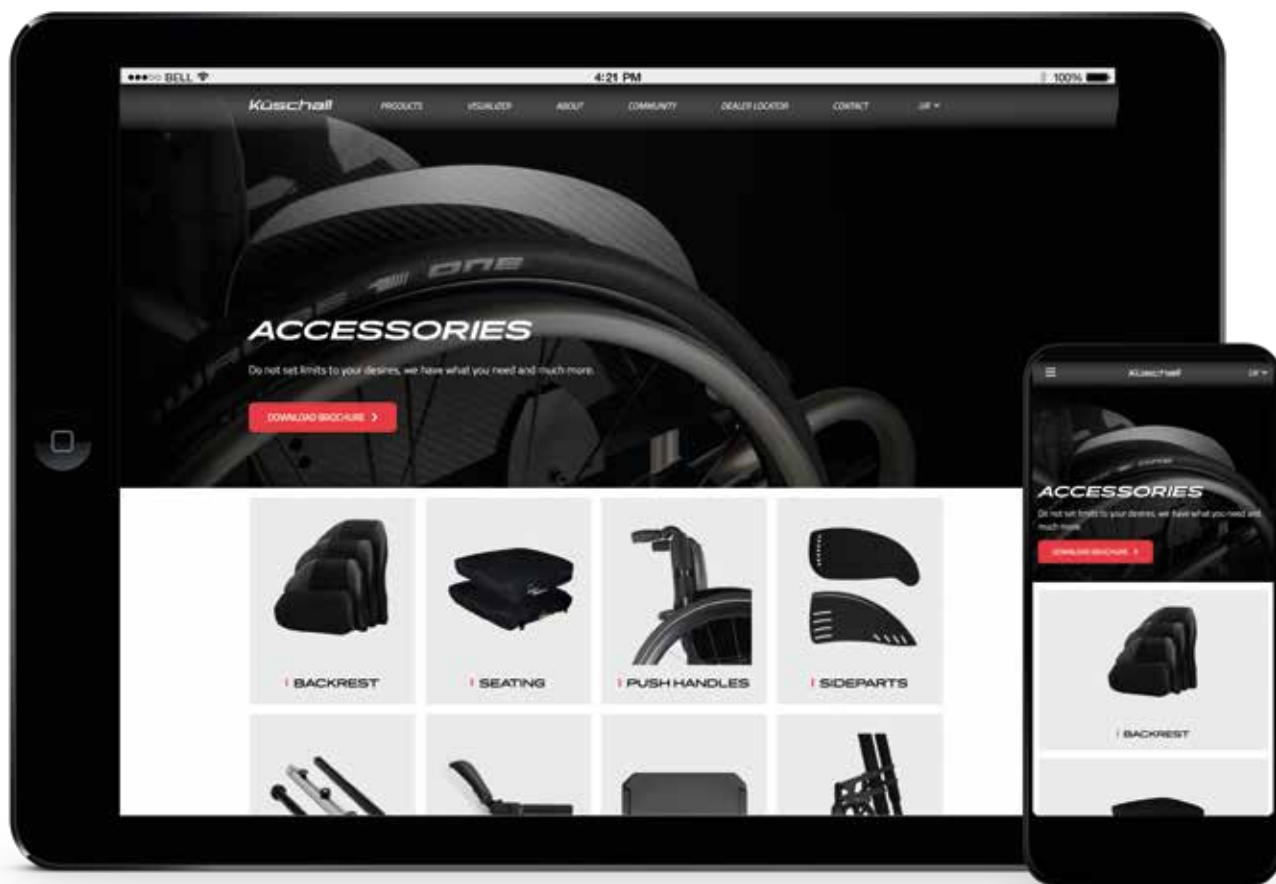



TECHNIS- CHE GE- GEVENS

VASTFRAME

	<i>THE KSL®</i>	<i>K-SERIES</i>
▪ Beensteunhoek	75° / 90°	75° / 90°
▪ Zitbreedte	340 – 440 mm	320 - 500 mm
▪ Zitdiepte	385 – 485 mm	350 - 525 mm
▪ Totale breedte	Zitbreedte + 170 mm	Zitbreedte + 170 mm
▪ Totale lengte	75°: circa 800 mm 90°: circa 730 mm	75°: circa 830 - 1055 mm 90°: circa 760 - 985 mm
▪ Totaal gewicht onbelast	circa 6,8 kg	circa 7,8 kg
▪ Transportgewicht	circa 4,3 kg	circa 5,1 kg
▪ Max. gebruikers gewicht	130 kg	130 kg

VOUWFRAME

	<i>CHAMPION</i>	<i>COMPACT</i>
▪ Beensteunhoek	75° / 90°	70° / 80° (swing away, fixed and tapered)
▪ Zitbreedte	360 - 480 mm	280 - 500 mm
▪ Zitdiepte	340 - 480 mm	320 - 500 mm
▪ Totale breedte	Zitbreedte + 160 - 240 mm	Zitbreedte + 160 mm
▪ Totale lengte	75°: circa 930 mm 90°: circa 830 mm	70°: approx. 870 – 1220 mm 80°: approx. 850 – 1200 mm
▪ Totaal gewicht onbelast	circa 9,2 kg	approx. 10.5 kg (swing away) approx. 9.6 kg (fixed frame)
▪ Transportgewicht	circa 6,7 kg	approx. 7.8 kg (swing away) approx. 6.7 kg (fixed frame)
▪ Max. gebruikers gewicht	120 kg	130 kg

Alle aangegeven afmetingen en gewichten zijn gebaseerd op zitbreedte 400 mm en zitdiepte 400 mm in de lichtste en meest compacte configuratie. Gewicht en afmetingen kunnen veranderen met de verschillende configuraties. Voor meer informatie raadpleeg de gebruiksaanwijzing op onze website.



Küschall is een geregistreerd handelsmerk. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie op het moment van druk actueel is. Vanwege het voortdurende ontwikkelingsproces behoudt Küschall AG zich het recht voor om veranderingen aan bestaande modellen te allen tijde door te voeren. Om informatie en afbeeldingen uit deze publicatie te gebruiken is schriftelijke toestemming van Küschall AG absoluut noodzakelijk. 2023 Copyright © 07/2023, Küschall AG, Switzerland. Alle rechten voorbehouden.

K

| UNLIMIT YOUR WORLD