

# Küschall® K-SERIES



## **UNLIMIT YOUR WORLD**

Bij Kuschall zijn wij ervan overtuigd dat alles mogelijk is als je de kracht hebt om het te bereiken. De Kuschall K-Series biedt modulariteit en prestatie in één product. Vergroot je kracht, onbeperkte vrijheid. **Unlimit your world.**

## **KÜSCHALL K-SERIES**

K-Series is een icoon op het gebied van design en een trendsetter m.b.t. enkelbuizige frames. Het ingenieuze modulaire zitsysteem kan perfect passend worden gemaakt en de dynamiek van de rolstoel biedt een uitstekende rijprestratie.

## **HYDROVORMING**

Het hydrogevormde voorframe tilt het design van je K-Series naar een hoger niveau. Deze nieuwe technologie geeft de rolstoel meer stijfheid wat bijdraagt aan een ongeëvenaarde rijprestatie. De toevoeging van keuze uit verschillende decoratiestijlen, geeft deze rolstoel een strak en tijdloos design.

## HYDROGEVORMD KNIEGEDEELTE

- Ergonomische grip, ideaal bij herpositioneren of bij het maken van transfers, framehoek beschikbaar in 90° en 75°.

## LICHT ACTIEVE REM

- Nieuwe aluminium rem, minimalistisch design, zeer lichte rem. Precisie tot in de kleinste details.

## TOELOPEND FRAME

- Het toelopende frame sluit goed aan bij de contouren van het lichaam en heeft daarmee een slanke vormgeving.

## VOETBEUGEL

- Volledig herontworpen met een plat oppervlak voor een perfecte positionering en meer comfort tijdens het rijden.



# Küschall® K-SERIES

## NIEUWE RUGBEUGEL

- Ergonomisch handvat dat cruciaal is bij het tillen en inladen van de rolstoel. Het rugframe met lage rugbeugel is ideaal voor Matrix ruggen.

## RUGLEUNING

- Inklapbare rugleuning die instelbaar is in zes verschillende rughoeken voor verschillende positioneringsbehoeften.

## ZITMODULE

- De zitmodule van de K-Series beschikt over vijf verschillende posities waarmee het zwaartepunt van de stoel kan worden aangepast. Hiermee kan de rolstoel actiever of juist minder actief worden ingesteld.

## BEHUIZING ZWENKWIELEN

- Nieuw aluminium profiel zit aan het voorframe gelast. De rolstoel beschikt over een consistent design.

## VOORVORK

- Nieuw strak design met geïntegreerde lagers. Vuilvorming in de lagers wordt hierdoor sterk verminderd en het onderhoud een stuk eenvoudiger.

# HOOFDKEN- MERKEN

## ICONISCH

Met het iconische minimalistische open frame and lichtgewicht design, is de K-Series de rolstoel om in te genieten van je dagelijkse activiteiten: naar je werk gaan, het uitoefenen van je hobbies, de K-Series geeft je de vrijheid om jezelf te zijn.



## MODULAIR

Om het zwaartepunt van de rolstoel aan te passen kan onder de zitting van de K-Series gekozen worden uit vijf verschillende zitposities. De zitpositie kan eenvoudig worden ingesteld zonder dat hier extra componenten voor nodig zijn.

## DYNAMISCH

Het frame heeft continu een perfect geometrie t.o.v. de grond, waardoor er niets aangepast hoeft te worden aan het frame.

De achterwielen hebben altijd dezelfde positie op het frame. Een zeer stijve frameconstructie zorgt voor een geweldige rijprestatie.




## HYDROGE- VORMD VOOR- FRAME

Hydrovorming technologie geeft de K-Series nog meer persoonlijkheid. Een iconisch uiterlijk dat vandaag de dag nog meer herkenbaar is vanwege het rechthoekige design bij het kniegedeelte. Met het versterkte frame wordt je rijervaring opwindender dan ooit.

# PERSONALISEREN

## 1 KIES DE FRAMEKLEUR



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Carmine Red



Azure Blue

## 2 KIES DE DECORATIESTIJL



## 3 KIES DE DECORATIEKLEUR



Rood



Zwart



Licht grijs



Goud



Rood



Blauw



Donker grijs



Zwart

# TECHNISCHE GEGEVENS

## ZITBREEDTE

320 – 500 mm  
in stappen van 20 mm



## ZITDIEPTE

350 – 525 mm  
in stappen van 25 mm



## ONDERBEEN- LENGTE

290 – 480 mm  
in stappen van 10 mm



## RUGHOOGTE

270 – 480 mm  
in stappen van 15 mm



## RUGHOEK

74° / 78° / 82° /  
86° / 90° / 94°



## ZITHOOGTE

voor: 450 - 520 mm  
achter: 390 - 490 mm  
in stappen van 10 mm



## FRAMEHOEK

75° / 90°  
V-frame of adductie



## TOTALE BREEDTE

ZB + 170 mm



## TOTALE LENGTE

75°: circa 830 - 1055 mm  
90°: circa 760 - 985 mm



## ZWAARTEPUNT

80 mm / 95 mm / 110 mm /  
125 mm / 140 mm



## CAMBER

0° / 3° / 6°



## TOTAAL GEWICHT ONBELAST

circa 7,8 kg



## TRANSPORTGE- WICHT

circa 5,1 kg



## MAX. GEBRUIKERS GEWICHT

130 kg




## CRASH TEST

Goedgekeurd - Voldoet aan  
de eisen van ISO 7176-19



Alle aangegeven afmetingen en gewichten zijn gebaseerd op zitbreedte 400 mm en zitdiepte 400 mm in de lichtste en meest compacte configuratie. Gewicht en afmetingen kunnen veranderen met de verschillende configuraties. Voor meer informatie raadpleeg de gebruiksaanwijzing op onze website.

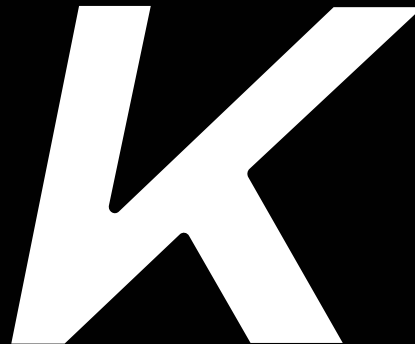

**/ UNLIMIT YOUR WORLD**

**Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57**

Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58

nederland@invacare.com

www.invacare.nl

**Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10**

Fax: +32 (0)50 - 83 10 11

Email: marketingbelgium@invacare.com

www.invacare.be

Invacare B.V.  
Galvanistraat 14-3  
6716 AE Ede  
Nederland

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world en K-Series zijn handelsmerken van Invacare International GmbH. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie op het moment van druk actueel is.

Als onderdeel van een dynamisch ontwikkelingsproces behoudt Küschall AG zich het recht voor om veranderingen ten allen tijde door te voeren.

© July 2019, Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. EU - 1659368