

# Softform<sup>®</sup> Bariatric

Exceptionele drukverdeling voor plus size cliënten



Yes, you can.<sup>®</sup>

# De uitdagingen van plus size cliënten


Softform Bariatric biedt een hoge mate van comfort en tegelijkertijd een effectieve drukverdeling. Geschikt voor gebruik op alle vestelbare bedden. De matras is essentieel voor cliënten aan wiens behoeften niet kunnen worden voldaan met standaard producten. Dit hoogwaardig drukverdelend matras is ontworpen om te voldoen aan de eisen van de langdurige en acute zorgomgeving.

Obese cliënten (een BMI>40, WHO2000) hebben een verhoogd risico op ontwikkeling van decubitus. Door de verminderde vasculariteit en overvloed aan vetweefsel, duurt de wondgenezing langer. Preventieve maatregelen voor plus size cliënten zijn daarom essentieel.




## Bescherming en Comfort

- ▶ Multi stretch, ademende en waterdichte hoes met hoeklassen, verminderen de kans van ophoping van stof en vuil.
- ▶ Hoog frequent gelaste waterdichte naden beschermen de kern van het matras tegen besmettingen.
- ▶ De basis van de Softform Bariatric is gemaakt van een gehard PU-gecoat materiaal dat ontworpen is om de levensduur te verlengen.
- ▶ De hoes is dampdoorlatend en zorgt ervoor dat de huid kan ademen en vermindert huidschade veroorzaakt door overmatig transpireren. Dit is een veel voorkomend probleem bij plus size cliënten.

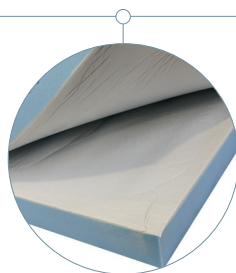

## Geïntegreerd Glide Mechanisme

- ▶ Het glide mechanisme en het scharnier ter hoogte van het rugdeel van de matras, zorgen er voor dat deze goed aanpast aan de verstellingen van het bed.
- ▶ Dit vermindert aanzienlijk onnodige en ongewenste verplaatsing van de cliënt dat kan bijdragen aan huidschade veroorzaakt door schuif- en wrijfkraften. Het voorkomt onnodige zware handelingen en ontlast daarmee de zorg.

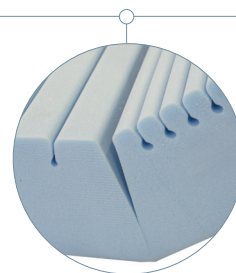

## Geprofileerde toplaag

- ▶ Het speciaal gesneden schuim zorgt voor gelijkmatige drukverdeling waardoor het risico op decubitus voor de plus size cliënt, die waarschijnlijk een beperkt bewegingsbereik zal hebben, wordt verminderd.
- ▶ Veel plus size cliënten hebben moeite met plat liggen door ademhalingsproblemen.
- ▶ Het scharnier in het rugdeel van het Softform Bariatric matras zal voor velen een voordeel zijn.

## Technische gegevens ▼

Kijk voor meer informatie over dit product, zoals de gebruiksaanwijzing op, [www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)



Breedte ▼

1150 - 1200 mm



Hoogte ▼

152 mm



Lengte ▼

2000 mm



Gewicht ▼

15 kg



Gebruikers-  
gewicht ▼

340 kg



Reinigings-  
temperatuur ▼

95 °C



Baltic  
Blue

Kleur

Manufactured to European Standards:  
BS EN 597-1 Cig,  
BS EN 597-2 Match.  
Foam Interior:  
BS 5852: 1990 Crib Source 5; Cover BS7175:  
1989 Crib Source 5.

1. Essentiële verpleegkundige zorg is cruciaal bij decubitus preventie. Dit matras zal een positieve bijdrage leveren aan het resultaat van een decubitus preventief zorgplan. Onderwijs, klinische beoordeling en actie gerichte planning op basis van risicofactoren zijn cruciaal bij het voorkomen van decubitus. Diverse risicoschalen kunnen worden gebruikt als onderdeel van een risico inventarisatie voor decubitus en moet worden gebruikt in combinatie met een klinische beoordeling. Aan een klinische beoordeling wordt meer klinische waarde toevertrouwd.

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57  
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58  
[nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com)  
[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

Invacare B.V.  
Galvanistraat 14-3  
6716 AE Ede  
Nederland



Yes, you can.