


Softform[®] Premier

Hoogwaardig drukverdelend matras

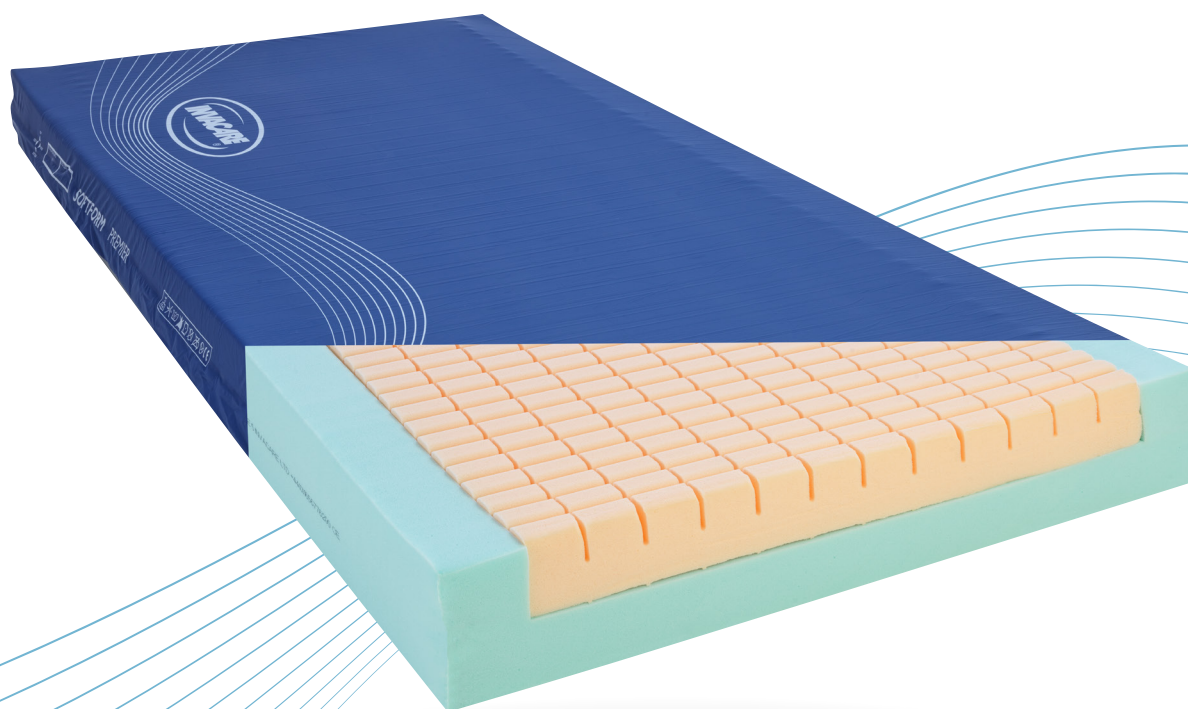

Yes, you can.[®]


Effectieve decubitus preventie

De Invacare Softform Premier is een hoogwaardig drukverdelend matras dat voldoet aan de eisen en wensen van de moderne zorgomgeving. Praktisch en duurzaam. Dit matras biedt een uitzonderlijke hoge mate van comfort en drukverdeling.

De Invacare Softform Premier heeft een unieke geprofileerde bovenlaag met veel comfort voor cliënten en een optimale drukverdeling.

De waterdichte hoed stretcht naar twee kanten en helpt wrijf- en schuifkrachten te reduceren.

De polyurethane hoed heeft gesealde naden en een flap over de rits. Deze combinatie helpt effectief tegen mogelijke indringing van vloeistoffen. De versterkte PU coating zorgt mede voor een langere levensduur.

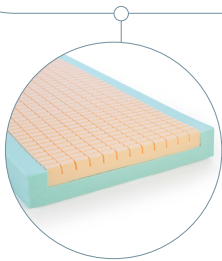

Foam uit één stuk in "U"vorm

- › Vergemakkelijkt cliënt transfers door **effectieve ondersteuning aan de bedrand**.




Flap over de volledige lengte beschermt de rits

- › Deze flap beschermt de rits. Dit **voorkomt het mogelijk risico** van indringing van vocht en voorkomt besmetting van het foam.



Oriëntatie symbool

- › Dit symbool waarborgt dat het matras op **juiste wijze** in bed wordt gelegd.

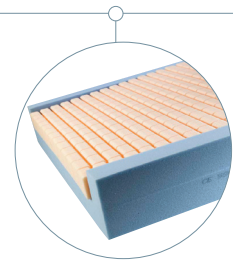

Aflopende hielzone

- › De **bovenlaag van het matras** heeft een aflopende voeteneinde om de druk op de hielen te verlichten, die bijzonder kwetsbaar zijn voor decubitus.

Technische gegevens ▼

Kijk voor meer informatie over dit product, zoals de gebruiksaanwijzing op, www.invacare.nl



Breedte ▼



Hoogte ▼



Lengte ▼



Gewicht ▼



Gebruikersgewicht ▼



Reinigings-temperatuur ▼



Baltic Blue

Kleur

Eénpersoons:
660 - 900 mm
Double size:
910 - 1370 mm
Extra groot:
1380 - 1525 mm

152 mm

1410 - 2100 mm

13 kg

247.6 kg

95 °C

Manufactured to European Standards:
BS EN 597-1 Cig,
BS EN 597-2 Match.
Foam Interior:
BS 5852: 1990 Crib Source 5; Cover BS7175:
1989 Crib Source 5.

1. Essentiële verpleegkundige zorg is cruciaal bij decubitus preventie. Dit matras zal een positieve bijdrage leveren aan het resultaat van een decubitus preventief zorgplan. Onderwijs, klinische beoordeling en actie gerichte planning op basis van risicofactoren zijn cruciaal bij het voorkomen van decubitus. Diverse risicoschalen kunnen worden gebruikt als onderdeel van een risico inventarisatie voor decubitus en moet worden gebruikt in combinatie met een klinische beoordeling. Aan een klinische beoordeling wordt meer klinische waarde toevertrouwd.

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland



Yes, you can.