

NordBed™ Optimo



TECHNOLOGIE ERGOMOVE | RÉHABILITATION | AUTONOMIE



Yes, you can.®

Le NordBed Optimo convient parfaitement aux soins à domicile, son **ergonomie** offre une facilité d'utilisation. Il **accroît continuellement l'indépendance** et la **mobilité** de chaque utilisateur. Sa technologie ErgoMove est au coeur de la prévention afin d'éviter les points de pression, privilégiant un confort de chaque instant. La simplicité du NordBed Optimo assure une manipulation aisée et un environnement de travail fonctionnel.

Technologie ErgoMove

Le NordBed Optimo comprend la technologie ErgoMove, l'objectif étant de faire passer le patient d'une position allongée à une **position assise active**. De même, pour revenir confortablement en position horizontale seulement à l'aide d'un bouton.

La position active **améliore les fonctions de l'utilisateur**, telles que, se restaurer, respirer pleinement ou bien réaliser une activité. La séquence de mouvements assure un maintien optimal, diminuant le risque de glissement le long du lit. Ainsi, cela **réduit les cisaillements**, frictions et points de compression qui peuvent entraîner le développement d'escarres.

Les pivots du cadre de lit correspondent aux points de pivotement naturels de la hanche et du genou, une amplitude accentuée par l'auto-régression.

Lors du positionnement, le matelas ne glisse pas et participe à la compensation du poids du corps, augmentant ainsi, l'espace de la région pelvienne tout en réduisant la pression sur le diaphragme.

La technologie ErgoMove facilite les soins **d'une seule main**, réduisant la nécessité pour le personnel de repositionner le patient.

BREVET DÉPOSÉ



Facile à manipuler

Sa base démontable en **cinq parties**, dont aucune ne pèse plus de **20 kg**, garantit une réelle agilité lors de la manipulation. Le NordBed Optimo peut se livrer en une fois tout en se manœuvrant dans les couloirs et escaliers étroits. Une disposition conçue afin de maintenir des conditions de travail favorables pour les techniciens.

L'installation s'avère simple et intuitive, le lit peut être démonté et **placé sur sa base**. Lorsqu'il est plié, le NordBed Optimo est **extrêmement stable et compact**, ce qui le rend idéal pour le stockage et le transport.

Il peut être spécialement adapté pour résister au nettoyage en machine, la qualité de ces matériaux résiste aux jets à hautes pressions.



Prévention des chutes, autonomie et indépendance

Up-and-Out™

► Consiste à placer le lit dans la position la plus adéquate pour le transfert de l'utilisateur. Les sections profilées s'ajustent automatiquement dans une position appropriée pour les transferts, le patient peut alors se pencher en toute sécurité vers l'avant.

Design

► Le NordBed Optimo propose une large gamme de panneaux de lit modernes et épurés, allant d'une surface peinte aux finitions bois. Il peut être également configuré avec une gamme de panneaux latéraux, barrières et plus encore.

4

DES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

1

Technologie ErgoMove

- Incline l'utilisateur dans une position d'assise active confortable et le ramène à une position horizontale sans effort
- Réduit significativement les cisaillements

2

Manipulation simple - Idéal pour la réhabilitation

- Se démonte facilement en cinq parties et sans outils, aucune d'entre elles ne pèsent plus de 20 kg
- Le pliage du NordBed Optimo, rend le stockage et le transport optimal
- Il peut être spécialement adapté pour résister au nettoyage en machine

3

Up-and-Out

- Garantit des transferts sûrs et en douceur
- Intensifie l'ergonomie du mouvement

4

Dimensions optimisées du plan de couchage

- Définies par des mesures anthropométriques, elle s'adapte à chaque morphologie pour un confort absolu



Caractéristiques supplémentaires

- **RememberMe™:**
 - Télécommande LCD programmable
 - ErgoMove et Up-and-Out peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins individuels
- **Extension du plan de couchage intégrée**
 - 10 cm de longueur supplémentaire afin de s'adapter aux besoins de l'utilisateur
- **Procline et option Déclive**
 - Aide le personnel soignant à repositionner le patient en minimisant l'effort
 - Ajustement simple et redistribution de la pression
- **Lumière sous le lit**
 - Facile d'accès
 - Prévention des chutes grâce à une sécurité omniprésente



Télécommande ▲

Des couleurs perceptibles pour les utilisateurs malvoyants

- ▶ Boutons aux couleurs facilement identifiables, celles-ci ont été sélectionnées en collaboration avec des experts
- ▶ Afin de guider le patient, l'ensemble des touches s'allument lorsqu'un bouton est sollicité, favorise la reconnaissance des fonctionnalités de jour comme de nuit
- ▶ Pour une sélection intuitive, les fonctions sont placées en haut de la télécommande et les ajustements en bas de l'appareil
- ▶ Verrouillage individuel de chaque fonction


Données techniques ▼

Pour plus d'information sur ce produit, veuillez vous référer aux manuels d'utilisation et de maintenance disponibles sur www.invacare.fr

Largeur ext. / Largeur int. ▼	Longueur ext. / Longueur int. ▼	Hauteur plan de couchage ▼	Section de plan de couchage ▼	Garde au sol ▼	Angle plicature ▼	
NordBed Optimo	100 / 90 cm	213 / 200 cm	32 - 81 cm	80-17-30-65 cm	15 cm	0 - 49°
Angle repose- jambes ▼	Proclive/ Déclive ▼	Poids max. utilisateur ▼	Poids total ▼	Poids de la partie la plus lourde ▼	Nettoyage en machine ▼	
NordBed Optimo	0 - 19°	+/- 15°	200 kg	100 kg	20 kg	Oui

NB: Le lit ne doit pas être utilisé par des patients âgés de moins de 12 ans ou par des patients dont la taille est équivalente à celle d'un enfant de 12 ans.

Couleur du châssis ▼

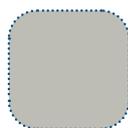

Gris

Coloris des panneaux ▼



Hêtre



Chêne



Noyer



Blanc