

NordBed™ Optimo Wide



TECHONOLOGIE ERGOMOVE | RÉHABILITATION |
POIDS MAX UTILISATEUR ÉLEVÉ POUR LES FORTES CORPULENCES



Yes, you can.®

Le NordBed Optimo Wide convient parfaitement aux patients à **forte corpulence**, son **ergonomie** offre une facilité d'utilisation. Il **accroît continuellement l'indépendance** et la mobilité de chaque utilisateur. Sa technologie ErgoMove est au coeur de la prévention afin d'éviter les points de pression, privilégiant un confort de chaque instant.

Cette largeur de lit convient également aux utilisateurs ayant besoin d'espace supplémentaire, notamment pour se repositionner. Le NordBed Optimo Wide est disponible en 105 cm de large avec un poids max utilisateur de 200 kg et 250 kg pour celui en 120 cm.

Technologie **ErgoMove**

Le NordBed Optimo Wide comprend la technologie ErgoMove, l'objectif étant de faire passer le patient d'une position allongée à une **position assise active**. De même, pour revenir **confortablement** en position horizontale seulement, à l'aide d'un bouton.

Le cadre de lit offre une stabilité au niveau du bassin, assurant un maintien optimal tout en diminuant le risque de glissement le long du lit. Ainsi, sa fonction **réduit les cisaillements, frictions et points de compression** qui peuvent entraîner le développement d'escarres.

La position active améliore les fonctions de l'utilisateur, telles que, se restaurer, respirer pleinement ou bien réaliser une activité.

Lors de la séquence de mouvement, le matelas ne glisse pas et participe à la compensation du corps grâce à l'auto-regression. Augmentant ainsi, l'espace de la région pelvienne tout en réduisant la pression sur le diaphragme.

La technologie ErgoMove facilite les **soins d'une seule main**, réduisant la nécessité pour le personnel de repositionner le patient.

Facile à manipuler

Le Nordbed Optimo Wide a également été adapté pour une manipulation et un transport facile. Le Nordbed Optimo Wide 105 cm est démontable en cinq parties, ce qui garantit une réelle agilité lors de la manipulation. Il peut être livré en une seule fois et manœuvré dans les couloirs et escaliers étroits. Une configuration conçue afin de maintenir des conditions de travail favorables pour les techniciens. Quant au Nordbed Optimo Wide en 120 cm, il se scinde en trois parties.



BREVET DÉPOSÉ



L'installation s'avère simple et intuitive, le lit peut être démonté et **placé sur sa base**. Lorsqu'il est plié, le NordBed Optimo Wide est **extrêmement stable** et compact, ce qui le rend idéal pour le stockage et le transport.

Il peut être spécialement adapté pour résister au nettoyage en machine, la qualité de ces matériaux résiste aux jets à hautes pressions.



Prévention des chutes, autonomie et indépendance

Up-and-Out™

► Consiste à placer le lit dans la position la plus adéquate pour le transfert de l'utilisateur. Les sections profilées s'ajustent automatiquement dans une position appropriée pour les transferts, le patient peut alors se pencher vers l'avant en toute sécurité.

Design

► Le NordBed Optimo Wide propose une importante gamme de panneaux de lit modernes et épurés, allant d'une surface peinte aux finitions bois. Il peut être également configuré avec une gamme de panneaux latéraux, barrières et plus encore.

4

DES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

1

Technologie ErgoMove

- Incline l'utilisateur dans une position assise active confortable et le ramène à une position horizontale sans effort
- Réduit significativement les cisaillements

3

Up-and-Out

- Garantit des transferts sûrs et en douceur
- Intensifie l'ergonomie du mouvement

2

Manipulation simple - Idéal pour la réhabilitation

- Se démonte facilement
- Il peut être spécialement adapté pour résister au nettoyage en machine

4

Dimensions optimisées du plan de couchage

- Définies par des mesures anthropométriques, elle s'adapte à chaque morphologie pour un confort absolu

Caractéristiques supplémentaires

► RememberMe™:

- Télécommande LCD programmable
- ErgoMove et Up-and-Out peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins individuels

► Extension du plan de couchage

- 10 cm de longueur supplémentaire afin de s'adapter aux besoins de l'utilisateur

► Proclive et option Déclive

- Aide le personnel soignant à repositionner le patient en minimisant l'effort
- Ajustement simple et redistribution de la pression

► Lumière sous le lit

- Facile d'accès
- Prévention des chutes grâce à une sécurité omniprésente



Télécommande ▲

Des couleurs perceptibles pour les utilisateurs malvoyants

- ▶ Boutons aux couleurs facilement identifiables, celles-ci ont été sélectionnées en collaboration avec des experts
- ▶ Afin de guider le patient, l'ensemble des touches s'allument lorsqu'un bouton est sollicité, favorise la reconnaissance des fonctionnalités de jour comme de nuit
- ▶ Pour une sélection intuitive, les fonctions sont placées en haut de la télécommande et les ajustements en bas de l'appareil
- ▶ Verrouillage individuel de chaque fonction


Données techniques ▼

Pour plus d'information sur ce produit, veuillez vous référer aux manuels d'utilisation et de maintenance disponibles sur www.invacare.fr

	Largeur ext. / Largeur int. ▼	Longueur ext. / Longueur int. ▼	Hauteur plan de couchage ▼	Section de plan de couchage ▼	Garde au sol ▼	Angle plicature ▼
NordBed Optimo Wide 105	115 / 105 cm	213 / 200 cm	32 - 81 cm	80-17-30-65 cm	15 cm	0 - 49°
NordBed Optimo Wide 120	130 / 120 cm	213 / 200 cm	32 - 81 cm	80-17-30-65 cm	15 cm	0 - 49°
	Angle repose-jambes ▼	Proclive/ Déclive ▼	Poids max. utilisateur / Charge de fonctionnement ▼	Poids total (sans panneaux) ▼	Poids de la partie la plus lourde ▼	Nettoyage en machine ▼
NordBed Optimo Wide 105	0 - 19°	+/- 15°	200 kg 235 kg	110 kg	25 kg	Oui
NordBed Optimo Wide 120	0 - 19°	+/- 15°	250 kg 285 kg	130 kg	70 kg	Oui

NB: Le lit ne doit pas être utilisé par des patients âgés de moins de 12 ans ou par des patients dont la taille est équivalente à celle d'un enfant de 12 ans.

Coloris du châssis ▼

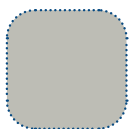

Gris

Coloris des panneaux ▼



Hêtre



Chêne



Noyer



Blanc