

NordBed™ Ultra



TECHNOLOGIE ERGOMOVE | PRÉVENTION DES CHUTES |
AUTONOMIE



Yes, you can.®

L'innovant NordBed Ultra

Afin de répondre au mieux, aux besoins de chaque patient, le Nordbed Ultra bénéficie d'une utilisation simple et d'un **design convivial**. Son ergonomie vise à **accroître continuellement l'indépendance** et la **mobilité**. Le Nordbed Ultra, contribue au bien-être grâce à son auto-régression intégrée **réduisant les cisaillements**. Sa conception avancée assure une manipulation aisée et un environnement de travail fonctionnel pour le personnel soignant.

Technologie ErgoMove

Le NordBed Ultra comprend la technologie ErgoMove, l'objectif étant de faire passer le patient d'une position allongée à une position assise active. De même, pour revenir **confortablement** en position horizontale, seulement à l'aide d'un bouton. La **position active** améliore les fonctions de l'utilisateur, telles que, se restaurer, respirer pleinement ou bien réaliser une activité.

Les pivots du cadre de lit correspondent aux points de pivotement naturels de la hanche et du genou, une amplitude accentuée par l'auto-régression. Lors du positionnement, le matelas ne glisse pas et participe à la compensation du poids du corps, augmentant ainsi, **l'espace de la région pelvienne** tout en réduisant la pression sur le diaphragme.

Cette technologie facilite les **soins d'une seule main, réduisant la nécessité pour le personnel de repositionner le patient.**

Les dimensions optimisées du plan de couchage sont définies par les mesures anthropométriques, s'adaptant à chaque morphologie pour un confort absolu.

BREVET DÉPOSÉ



Sécurité, autonomie et indépendance

Le Nordbed Ultra dispose d'une hauteur minimale de 25 cm seulement :

- ▶ **Augmente la sécurité** tout réduisant le risque pour les patients ayant tendance à tomber du lit
- ▶ Préviend des chutes, l'utilisation des barrières n'est pas indispensable pour les personnes atteintes de démence
- ▶ Facilite le transfert des utilisateurs
- ▶ Permet également des transferts en toute sécurité, les personnes de petite taille peuvent atteindre le sol et se lever aisément

Up-and-Out™

- ▶ Consiste à placer le lit dans la position la plus adéquate pour le transfert de l'utilisateur à l'intérieur et à l'extérieur du lit. Les sections profilées **s'ajustent automatiquement** dans une position appropriée pour les transferts, l'utilisateur peut alors se pencher vers l'avant en toute sécurité.

Design

- ▶ Le NordBed Ultra propose une large gamme de panneaux de lit modernes et épurés, allant d'une surface peinte aux finitions bois. Il peut être également configuré avec une gamme de panneaux latéraux, barrières et plus encore.



Convient pleinement aux patients souffrant de démence

- ▶ La faible hauteur permet un environnement sûr
- ▶ Le NordBed Ultra est hautement configurable ainsi peut être adapté afin de :
 - Ressembler à un lit plus traditionnel, d'aspect familial
 - Réaliser une ambiance cosy, chaleureuse et sûre
 - Réduire le risque de blessure lors des entrées et sorties de lit, grâce à sa lumière intégrée

4

DES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

1

Technologie ErgoMove

- ▶ Incline l'utilisateur dans une position assise active confortable et le ramène à une position horizontale sans effort
- ▶ Réduit significativement les cisaillements

3

Up-and-Out

- ▶ Garantit des transferts sûrs et en douceur
- ▶ Intensifie l'ergonomie du mouvement

2

Hauteur minimale de 25 cm seulement

- ▶ Roulettes standards de 10 cm pour prévenir des chutes ainsi effectuer des transferts en toute sécurité

4

Dimensions optimisées du plan de couchage

- ▶ Définies par des mesures anthropométriques, elle s'adapte à chaque morphologie pour un confort absolu

Caractéristiques supplémentaires

- ▶ **RememberMe™:**
 - Télécommande LCD programmable
 - ErgoMove et Up-and-Out peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins individuels
- ▶ **Extension du plan de couchage intégrée**
 - 10 cm de longueur supplémentaire afin de s'adapter aux besoins de l'utilisateur
- ▶ **Proclive et option Déclive**
 - Aide le personnel soignant à repositionner le patient en minimisant l'effort
 - Ajustement simple et redistribution de la pression
- ▶ **Lumière sous le lit**
 - Facile d'accès
 - Prévention des chutes grâce à une sécurité omniprésente



Télécommande ▲

Des couleurs perceptibles pour les utilisateurs malvoyants

- ▶ Boutons aux couleurs facilement identifiables, celles-ci ont été sélectionnées en collaboration avec des experts
- ▶ Afin de guider le patient, l'ensemble des touches s'allument lorsqu'un bouton est sollicité, facilite la reconnaissance des fonctionnalités de jour comme de nuit
- ▶ Pour une sélection intuitive, les fonctions sont placées en haut de la télécommande et les ajustements en bas de l'appareil
- ▶ Verrouillage individuel de chaque fonction


Données techniques ▼

Pour plus d'information sur ce produit, veuillez vous référer aux manuels d'utilisation et de maintenance disponibles sur www.invcare.fr

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|
| | | | | | | |
| | Largeur ext. / Largeur int. ▼ | Longueur ext. / Longueur int. ▼ | Hauteur plan de couchage ▼ | Section de plan de couchage ▼ | Garde au sol ▼ | Angle plicature ▼ |
| NordBed Ultra | 100 / 90 cm | 213 / 200 cm | 25 - 85 cm | 80-17-30-65 cm | 15 cm | 0 - 49° |
| | | | | | | |
| | Angle repose- jambes ▼ | Proclive/ Déclive ▼ | Poids max. utilisateur ▼ | Poids total (sans panneaux) ▼ | Poids de la partie la plus lourde ▼ | Nettoyage en machine ▼ |
| NordBed Ultra | 0 - 19° | +/- 15° | 200 kg | 105 kg | 55 kg | Oui |

NB: Le lit ne doit pas être utilisé par des patients âgés de moins de 12 ans ou par des patients dont la taille est équivalente à celle d'un enfant de 12 ans.

Couleur du châssis ▼

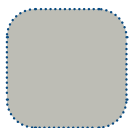

Gris

Coloris des panneaux ▼



Hêtre



Chêne



Noyer



Blanc