

La famiglia Ocean Ergo

Scopri di seguito l'intero e l'ampia gamma di accessori



Ocean Ergo

Versione base da transito per pazienti fino a 150 Kg di peso



Ocean Ergo XL

Versione base da transito con larghezza maggiorata dello schienale, per pazienti fino a 180 Kg di peso



Ocean 24'' Ergo

Versione base autospinta per pazienti fino a 150 Kg



Ocean 24'' Ergo XL

Versione base autospinta, con larghezza maggiorata dello schienale, per pazienti fino a 180 Kg di peso



Ocean VIP Ergo

Versione basculante con schienale reclinabile, ideale per utenti che necessitano di un maggior controllo posturale



Ocean Dual VIP Ergo

Versione basculante con schienale reclinabile, ideale per utenti con esigenze specifiche di seduta e posizionamento

Dati tecnici

Per maggiori informazioni consultate il sito www.invacare.it



Larghezza seduta ▼



Profondità seduta ▼



Larghezza totale ▼



Profondità totale ▼



Distanza tra braccioli ▼

Ocean Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	905 mm	475 mm
Ocean Ergo XL	480 mm	480 mm	645 mm	905 mm	555 mm
Ocean 24'' Ergo	480 mm	480 mm	670 mm	1050 mm	475 mm
Ocean 24'' Ergo XL	480 mm	480 mm	670 mm	1050 mm	555 mm
Ocean VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm
Ocean Dual VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm



Basculamento ▼



Reclinazione ▼




Peso ▼



Portata max. ▼

Ocean Ergo	-	-	17 kg	150 kg
Ocean Ergo XL	-	-	18 kg	180 kg
Ocean 24'' Ergo	-	-	23 kg	150 kg
Ocean 24'' Ergo XL	-	-	24 kg	180 kg
Ocean VIP Ergo	-5° - 40°	-	23.5 kg	150 kg
Ocean Dual VIP Ergo	-5° - 40°	5° - 35°	28.3 kg	150 kg

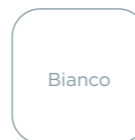

Colore telaio

Tel: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc San s.r.l.
Via dei Pini, 62
36016 THIENE (VI)
Italy

© 2021 Invacare International GmbH. All rights reserved. Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate. Invacare Ocean Ergo - IT - 10/2021



AQUATEC®
Ocean Ergo

Soluzioni modulari per la cura della persona

Soluzioni ideali per la cura delle persone

Ergonomica, versatile e facile da manovrare



Soluzioni sempre più versatili ed ergonomiche

La famiglia Aquatec Ocean Ergo è stata progettata per rendere ancora più facili le operazioni di cura personale.

Dalla versione a spinta, a quella ad autopulsione, fino al modello basculante, Ocean Ergo offre una soluzione per quasi tutti gli utilizzatori.

Grazie alla collaborazione con i principali terapisti, gli obiettivi di progettazione si sono concentrati sull'ergonomia, sullo stile di vita e sul benessere dei pazienti

Ogni modello della linea Ocean Ergo è stato progettato con un nuovo design per assicurare all'utente livelli più elevati di sicurezza, comfort e supporto.

Sia che la cura personale avvenga in modo indipendente o con l'aiuto di un assistente, ciascun modello di sedia altamente modulare offre una soluzione dignitosa.

I modelli basculanti offrono delle soluzioni posturali aggiuntive

Ocean VIP Ergo e Ocean Dual VIP Ergo consentono un basculamento della seduta tra i -5° e i 40° con un meccanismo intelligente di bilanciamento del peso che assicura una stabilità ottimale anche in piccoli spazi.

La versione Dual VIP beneficia sia del basculamento che della reclinazione dello schienale, in modo da consentire, con semplici gesti, di aprire l'angolo da 5° a 35°.




NUOVE funzionalità

Sistema bracciolo migliorato

> Grazie al nuovo design, i braccioli garantiscono un supporto addizionale e maggiore comfort per l'utente.

I nuovi copribraccioli, disponibili come accessorio, garantiscono una superficie più morbida e una seduta più confortevole per l'utente.

Il sistema di blocco bracciolo è ora integrato nella seduta (opzionale).

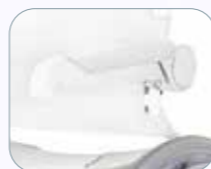

Riduzione dell'altezza seduta

> E' stata introdotta una nuova regolazione dell'altezza della seduta per garantire una maggiore sicurezza e trasferimenti indipendenti.

Il telaio infatti può essere abbassato ulteriormente per rispondere alle esigenze di quelle persone di corporatura minuta.



Funzione di arresto del basculamento

> Si tratta di una funzione optional facile da applicare che impedisce il basculamento anteriore del telaio oltre i 0°. Ciò garantisce che il telaio rimanga in posizione orizzontale ed è un valido aiuto per coloro che vengono continuamente sollevati dalla sedia.



Supporto ergonomico per poggiatesta

> Grazie alle regolazione su più assi, il supporto ergonomico del poggiatesta offre una soluzione posturale completa per la zona testa/collo. Le regolazioni sono facili e veloci, perchè è sufficiente ruotare le viti manuali integrate per ottenere la posizione corretta. Ideali durante una valutazione o una regolazione da parte dei terapisti perchè non servono attrezzi.



Nuova seduta ergonomica

> La nuova seduta garantisce il corretto posizionamento del bacino, promuovendo l'autonomia e il comfort del paziente.

> La particolare forma è stata sviluppata sulla base della conformazione anatomica delle persone in posizione seduta.

> Grazie all'inclinazione del sedile di 5°, le ginocchia sono leggermente sollevate anteriormente, per facilitare la naturale posizione di squat.

> Facilita il trasferimento frontale per un riposizionamento più agevole e confortevole.



Altamente configurabile

> Disponibile con un'ampia gamma di accessori per la seduta e il posizionamento WC, per rispondere alle diverse esigenze cliniche del paziente.



Estremamente stabile

> Grande stabilità frontale per una maggiore sicurezza.



Facile da manovrare

> Dimensioni della base ottimizzate, ideali per spazi stretti.

> Facile smontaggio per il trasporto e lo stoccaggio.