



AQUATEC®

Ocean Ergo

uma gama avançada de cadeiras de banho modulares



Soluções de referência em cuidados de higiene

Ergonómica, versátil e fácil de manobrar



Yes, you can.®

Ainda maior versatilidade e melhorias ergonómicas

A mais recente gama Aquatec Ocean Ergo foi especificamente concebida para facilitar ainda mais os banhos e a higiene.

Desde uma cadeira de banho com 4 rodízios, até uma cadeira de autopropulsão ou uma com basculação, a Ocean Ergo oferece uma solução para quase qualquer utilizador.

Em colaboração com os principais terapeutas, os nossos objetivos de design foram centrados na ergonomia, no estilo de vida e bem-estar dos pacientes.

Cada modelo da gama Ocean Ergo é otimizado com novas alterações, para alcançar níveis mais elevados de segurança, conforto e apoio.

Quer o utilizador seja independente ou tenha ajuda de um cuidador, cada uma das nossas cadeiras altamente modulares oferece uma solução digna.

Um modelo com basculação, que oferece soluções adicionais

A Ocean Ergo VIP tem -5° a 40° de ângulo de basculação do assento com um mecanismo de mudança de peso integrado que assegura uma estabilidade óptima com um pequeno volume.



NOVAS características

Apoios de braço melhorados

- > Os apoios de braços recentemente concebidos proporcionam maior apoio e conforto para o utilizador. As novas e opcionais almofadas dos apoios de braços oferecem aos utilizadores uma superfície mais suave e uma posição de descanso. Apresentam um sistema de bloqueio de segurança integrado, opcional e fácil de operar.



Mais opções para reduzir a altura do assento

- > Foi introduzido um ajuste adicional da altura do assento para promover transferências seguras e independentes. O assento pode ser rabaixado ainda mais, para pessoas de menor estatura. Função disponível na Ocean Ergo/ Ergo XL/ Ergo 24".



Função de bloqueio de basculação

- > Função de bloqueio, fácil de utilizar, que evita que a cadeira bascule anteriormente para menos de 0°. Assim garante que o chassis fica sempre paralelo ao chão, facilitando a utilização de elevadores de transferência. Como opção, pode ainda adquirir um peça para fazer o bloqueio da basculação em qualquer grau. Disponível apenas na Ocean Ergo VIP.



Suporte ergonómico do apoio de cabeça (brevemente disponível)

- > Com ajuste de eixos múltiplos, o suporte ergonómico do apoio de cabeça oferece um apoio postural superior para a região da cabeça/pescoço. Os ajustes são rápidos e fáceis de fazer através da simples rotação dos parafusos manuais integrados para alcançar a posição correta para o utilizador. Ideal para fins de avaliação e configuração, sem necessidade de ferramentas.





Assento ergonómico inovador

- > O design baseado no feedback dos utilizadores incentiva uma posição sentada mais direita para maior independência e conforto.
- > A inclinação positiva a 5º do assento coloca o utilizador numa posição favorecida (squat), quando a cadeira é utilizada como cadeira sanitária com a aparadeira montada ou diretamente sobre o vaso sanitário.
- > Os recortes do assento na parte frontal ajudam o utilizador a posicionar da melhor forma as mãos aquando do processo de reposicionamento ou transferência.



Altamente configurável

- > Disponível com uma vasta gama de acessórios de posicionamento, de assento e de higiene, que podem adequar-se a uma grande variedade de condições e necessidades posturais.



Extremamente estável

- > Estabilidade melhorada para maior segurança e tranquilidade, mesmo com a basculação máxima.



Fácil de manobrar

- > Um chassis pequeno, compacto e otimizado, de forma a facilitar as manobras em espaços pequenos.
- > Desmontagem fácil para transporte e armazenamento.

Apresentamos a mais recente gama **Ocean Ergo**

Descubra a gama completa abaixo, incluindo acessórios opcionais para necessidades específicas.



Ocean Ergo

Versão 4 rodízios (um rodízio direcional). Fornecida com encosto regulável em tensão. Encosto rígido disponível como opção. Com capacidade de peso até 150 kg.



Ocean Ergo XL

Versão bariátrica, com largura entre braços aumentada, 4 rodízios (um rodízio direcional). Fornecida com encosto regulável em tensão. Com capacidade de peso até 180 kg.



Ocean 24'' Ergo

Versão com rodas traseiras de auto propulsão (24"). Fornecida com encosto regulável em tensão. Encosto rígido disponível como opção. Com capacidade de peso até 150 kg.



Ocean 24'' Ergo XL

Versão bariátrica, com largura entre braços aumentada, rodas traseiras de auto propulsão (24"). Fornecida com encosto regulável em tensão. Com capacidade de peso até 180 kg.



Ocean VIP Ergo

Versão 4 rodízios (um rodízio direcional), com basculação da unidade de assento e apoio de cabeça. Fornecida com encosto regulável em tensão. Encosto rígido disponível como opção. Com capacidade de peso até 150 kg.

Especificações técnicas

Para informações de pré-venda mais completas sobre este produto, incluindo o manual do utilizador do produto, consulte o website da Invacare.



Largura do assento ▼



Profundidade do assento ▼



Largura total ▼



Profundidade total ▼



Largura entre apoios de braços ▼

	Largura do assento ▼	Profundidade do assento ▼	Largura total ▼	Profundidade total ▼	Largura entre apoios de braços ▼
Ocean Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	905 mm	475 mm
Ocean Ergo XL	480 mm	480 mm	645 mm	905 mm	555 mm
Ocean 24" Ergo	480 mm	480 mm	670 mm	1050 mm	475 mm
Ocean 24" Ergo XL	480 mm	480 mm	670 mm	1050 mm	555 mm
Ocean VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm



Ângulo de basculação ▼




Peso ▼



Peso máximo do utilizador ▼

	Ângulo de basculação ▼	Peso ▼	Peso máximo do utilizador ▼
Ocean Ergo	-	17 kg	150 kg
Ocean Ergo XL	-	18 kg	180 kg
Ocean 24" Ergo	-	23 kg	150 kg
Ocean 24" Ergo XL	-	24 kg	180 kg
Ocean VIP Ergo	-5° - 40°	23.5 kg	150 kg

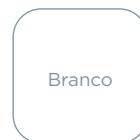

Branco

Cor do chassis

Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal II
Rua Estrada Velha, nº949
4465-784 Leça do Balio
Portugal