

**Orion<sup>®</sup> Pro**



**Conforto, segurança e fiabilidade com  
performance adicional**



## Orion <sup>PRO</sup>

Ideal para grandes viagens dentro da cidade ou para tardes a passear no parque com os netos, a nova **Orion <sup>PRO</sup>** desenvolvida a pensar na ergonomia é um upgrade poderoso ao nosso modelo standard **Orion <sup>Metro</sup>**.

Com uma performance de bateria melhorada, suspensão superior e rodas largas de 12", a nova **Orion <sup>PRO</sup>** é ideal para utilizadores que precisam de uma performance extra.

A **Orion <sup>PRO</sup>** combina esta performance excelente com máximo conforto, segurança e fiabilidade, tornando-se na escolha ideal para utilizadores mais exigentes.



### Suspensão avançada, condução mais suave

O sistema de suspensão avançada da **Orion <sup>PRO</sup>** foi desenvolvido para garantir uma melhor performance e oferece uma condução mais suave em várias superfícies e terrenos. Além disso, a **Orion <sup>PRO</sup>** combina um motor poderoso e rodas pneumáticas de 12" para assegurar que, quer esteja na cidade ou no campo, pode ir onde quiser com conforto e estilo.

### Performance com segurança e proteção

A **Orion <sup>PRO</sup>** foi sujeita a testes no laboratório Alemão TÜV para assegurar que os utilizadores podem ter confiança ao conduzir uma scooter que cumpre com os últimos padrões europeus para dispositivos médicos.

O sistema de redução de velocidade reduz automaticamente a velocidade nas curvas, garantindo que os utilizadores fazem manobras confortáveis. Além disso, a alavanca de bloqueio duplo previne que a scooter se desengate acidentalmente.

### Manutenção simples e rápida

A **Orion <sup>PRO</sup>** foi desenvolvida com componentes de qualidade, o que nos permitiu torná-la fiável e de fácil manutenção. A eletrónica e o motor têm uma proteção adicional contra a água e a corrosão, salvaguardando as partes vitais da scooter contra qualquer avaria desnecessária. A parte superior da proteção pode ser facilmente removida para verificar o motor, as baterias, eletrónica e cabos.



## Características e opções



### Rodas pneumáticas

Se procura um nível de performance adicional e estilo, escolha a opção dos novos pneus baixo perfil disponíveis em 12".



### Regulação da coluna de direção

O utilizador pode ajustar a coluna de direção às suas necessidades.



### Volante ergonómico

O tamanho, curvatura e material do volante garantem conforto e estabilização na condução.



### Travão de mão

Garante uma travagem imediata se necessário.



### Luz de travagem

Clara e brilhante, avisa quando a scooter abranda




### Alavanca de bloqueio duplo

Previne que a scooter se desengate acidentalmente.



### Redução automática da velocidade

Reduz a velocidade nas curvas para uma segurança adicional.

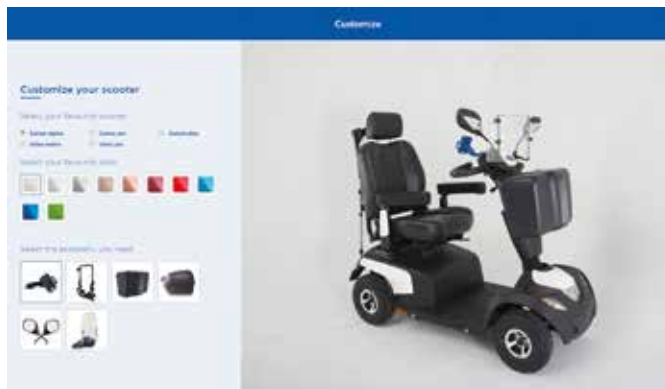












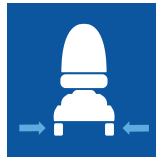


### Personalize a sua scooter com carenagens coloridas e acessórios

Escolha a partir de 10 cores de carenagens e mais de 25 acessórios para personalizar a scooter ao seu estilo. Para saber mais visite o nosso microsite em: [www.invacarescooter.com](http://www.invacarescooter.com).

## Dados técnicos

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Largura do encosto	Profundidade de assento	Altura assento-chão	Altura do encosto	Largura total	Comprimento total	Peso
<i>Orion PRO</i>	 510 mm	 Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm	 Min. 440 mm Max. 510 mm	 Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	 650 mm	 1320 mm	 136 kg

	Parte mais pesada	Peso max. utilizador	Capacidade da bateria	Diâmetro de viragem	Altura max. ultrapassar obstáculos	Distância do solo	Max. inclinação
<i>Orion PRO</i>	 aprox: 62 kg	 160 kg	 2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	 2750 mm	 100 mm	 100 mm	 10 °

	Autonomia	Velocidade máxima	Capacidade do motor
<i>Orion PRO</i>	 52 km	 10 km/h	 240 W / 600 W <sup>1</sup>

1. Pico de performance

## Cor das carenagens

Branco mármore	Azul alium	Verde Jade	Beige	Bronze
				
Vermelho carmim	Cromado	Prateado	Azul elétrico	Vermelho Garnet
				

## Estofa

Preto vinil
