

POWER SERIES

# AVIVA RX Modulite



Dernière génération de fauteuil électrique à roues arrière motrices  
avec assise Modulite adaptable et confortable.



| AVIVA RX Modulite

# Une conduite sûre et confortable.

Design. Technologie. Performance.

Découvrez l'**AVIVA** RX. Un fauteuil électrique à propulsion arrière très performant, associé à l'assise Modulite pour un confort maximal dans n'importe quel environnement.



| AVIVA RX Modulite

# Design. Technologie. Performance.

Regardez de plus près la base **AVIVA RX**. Premier modèle de la gamme AVIVA, l'AVIVA RX établit une nouvelle norme en matière de fauteuils à propulsion arrière. Conçu avec les dernières innovations techniques pour offrir une performance de conduite plus avancée.



## Suspension CTC (brevetée)

Conçue pour absorber les vibrations et les secousses pour un confort de conduite optimal et assurer une grande stabilité grâce à ses quatre roues toujours en contact avec le sol.



## Gyro LiNX G-Trac

La technologie Gyro LiNX G-Trac facilite les déplacements sur de longues distances ou à des vitesses élevées. Un module gyroscopique intégré à l'électronique LiNX permet à l'AVIVA RX de maintenir le contrôle de sa trajectoire et de rester sur la bonne voie.



## Design compact

L'empattement plus court et plus étroit et une hauteur d'assise basse rend l'AVIVA RX plus facile à manœuvrer, avec un contrôle précis dans tous les environnements même les plus exigeants grâce à son court rayon de giration.



## Élégant et raffiné

Des lignes épurées, des angles discrets et une finition de haute qualité, l'AVIVA RX se distingue en matière d'esthétique. Un design moderne pour être aussi beau que performant et personnalisable grâce aux différents choix de couleurs.

| AVIVA RX Modulite

# Nombreuses options de positionnement.

Notre système d'assise Modulite permet d'obtenir un positionnement personnalisé pour plus de confort et de soutien. Il permet de répondre à tous types de besoins posturaux, des plus élémentaires aux plus complexes, sa conception modulaire offre une infinité de réglage pour un positionnement sur mesure.



## Solutions complètes de positionnement

Large gamme d'options d'assise comprenant des dossiers, des coussins d'assise, des accoudoirs, des appuis-tête et bien d'autres encore.



## Conçu pour la sécurité et le confort

L'inclinaison d'assise électrique de 50°, l'élévation d'assise de 300 mm avec une inclinaison de 45° apportent confort et sécurité.



## Repose-jambes central LNX

L'extension mécanique combinée à l'inclinaison électrique offre une compensation optimale et permet de réduire le cisaillement.



## Les dossiers et coussins de positionnement Matrix® primés

La personnalisation des dossiers et coussins Matrix garantis un positionnement optimal à chacun.

## Gamme complète d'inclinaison d'assise

Permet de décharger les pressions et offrir un confort optimal.



Élévation d'assise électrique de **300 mm** combinée avec une inclinaison d'assise jusqu'à **45°**

| AVIVA RX Modulite

# Assise Modulite. Polyvalence et modularité.

Notre solution d'assise la plus populaire est conçue pour vous. Grâce à son approche modulaire, notre assise Modulite s'adapte facilement pour s'ajuster parfaitement et offrir un confort et un soutien exceptionnel.

## Caractéristiques techniques :

Largeur d'assise : 330 - 530 mm

Profondeur d'assise : 410 - 510 mm

Hauteur sol/siège : à partir de 435 mm

Hauteur des accoudoirs : 230 - 390 mm

Longueur du repose-pieds : 280 - 460 mm



Assise réglable  
pour un  
ajustement  
parfait



| AVIVA RX Modulite

# Equipé de l'électronique avancée **LiNX**

L'électronique **LiNX**® permet d'offrir une expérience de conduite personnalisée et sûre. Cette électronique innovante permet d'apprendre des habitudes et des préférences de conduite au fil du temps, ce qui en fait un système très intuitif.



## Nouveau support de manipulateur Maxx Resolve

- Une infinité de position pour un confort optimal.
- Réglage de la dureté d'escamotage.
- Confort et contrôle optimisés.



## Ecran tactile 3.5"

Grand écran couleur tactile 3,5" avec joystick, compteur de vitesse et kilométrique.



## Commandes spéciales

Joysticks compacts, commandes occipitales et contacteurs de proximité à quatre directions.



## Bluetooth® intégré

Permet la connexion avec les appareils connectés et les contrôles d'environnement.



## Modules d'entrée



Les modules d'entrée permettent une configuration personnalisée pour un contrôle maximal de différentes interfaces pilotées par le fauteuil.

## AVIVA RX Modulite

# Données techniques.

Pour plus d'informations sur ce produit y compris le manuel d'utilisation, veuillez consulter notre site [www.invacare.eu.com](http://www.invacare.eu.com).

## Couleurs

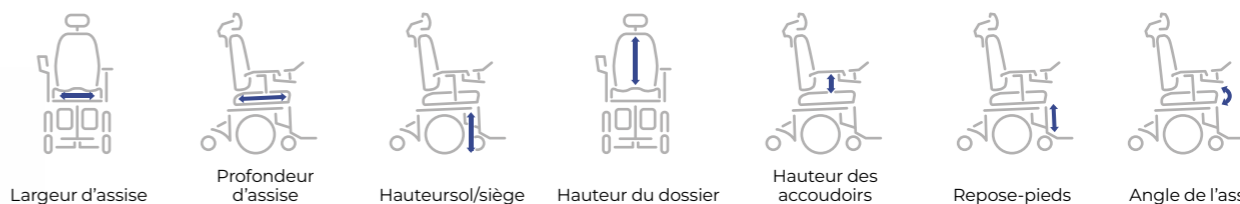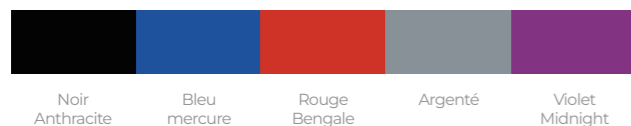

Largeur d'assise Profondeur d'assise Hauteursol/siège Hauteur du dossier Hauteur des accoudoirs Repose-pieds Angle de l'assise

### AVIVA RX avec Assise Modulite Standard

430 - 480 mm 410 - 510 mm 435 - 485 mm 480 mm - 540 mm 275 - 390 mm 290 - 460 mm 0° - 20°

### AVIVA RX avec Assise Modulite Modulaire

330 - 530 mm 410 - 510 mm 435 - 485 mm 480, 540, 560 - 610 mm 230 - 360 mm 280 - 460 mm 0° - 50°

### AVIVA RX HD:

620 - 650 mm 510 - 580 mm 435 - 485 mm 540 mm 245 - 360 mm 280 - 460 mm 0° - 30°



Angle du dossier Hauteur totale Longueur totale avec repose-pieds Longueur totale sans repose-pieds Largeur hors tout Poids max. utilisateur Batterie

### AVIVA RX avec Assise Modulite Standard

90° - 120° 1000 mm 1026 - 1300 mm 830 mm 560 mm 136 kg 60/73.5 Ah

### AVIVA RX avec Assise Modulite Modulaire

90° - 120° 1000 - 1335 mm 1026 - 1300 mm 830 mm 560 mm 136 kg 60/73.5 Ah

### AVIVA RX HD:

90° - 120° 1000 mm 1026 - 1300 mm 830 mm 635 mm 160 kg 60/73.5 Ah



Diamètre de giration Franchissement max. Pente max. de sécurité Vitesse Autonomie Poids total

### AVIVA RX

1506 - 2086 mm 75 mm (100 mm avec monte-trottoir) 6° / 10.5% Jusqu'à 12 km/h Jusqu'à 47 km Jusqu'à 185.2 kg

| AVIVA RX Modulite

# Partagez vos idées et contribuez au développement futur des fauteuils électriques.

Nous vous invitons à nous faire **part de vos expériences**. Vos témoignages nous aideront à mieux servir la communauté des personnes en fauteuil électrique.

Veuillez scanner le QR-code et compléter le formulaire.



Merci de nous laisser participer à votre aventure.

L'équipe Invacare Power Series.





Partagez votre expérience

SUBSCRIBE



Mon fauteuil me permet de mener une vie indépendante et de sortir tous les jours.

Ian Mackay  
Ambassadeur Invacare

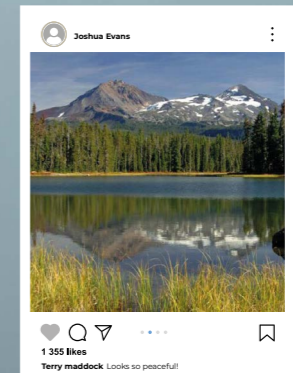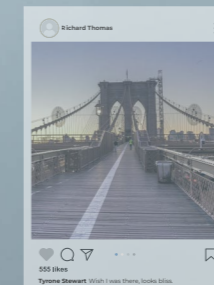



P O W E R   S E R I E S

**AVIVA RX**

AVIVA FX

TDX SP2

Esprit Action

Kompas

Storm 4

**Tel: +33 247 62 64 66**  
contactfr@invacare.com  
www.invacare.fr

© 2024 Invacare International GmbH. Tous droits réservés. Indications données à titre d'information (information non contractuelle). Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit. AVIVA RX - FR - 11/2024

