

POWER SERIES

AVIVA RX Modulite



Impressionante cadeira de rodas elétrica de tração traseira
com assento Modulite, altamente adaptável e confortável



| AVIVA RX Modulite

Uma condução segura e confortável.

Design. Tecnologia. Performance.

Descubra a **AVIVA RX**. Uma cadeira de rodas elétrica com tração traseira de elevado desempenho, combinada com o assento Modulite para o máximo conforto em qualquer ambiente.



| AVIVA RX Modulite

Design. Tecnologia. Performance.

Conheça em detalhe a base da **AVIVA RX**. A primeira da linha AVIVA, a AVIVA RX estabelece um novo padrão em cadeiras de rodas de tração traseira. Concebida com as mais recentes inovações técnicas para proporcionar um desempenho de condução mais avançado.



Suspensão CTC (patenteada)

Concebida para absorver as vibrações ou os impactos durante a condução, para um conforto ótimo, e proporciona uma maior garantia de estabilidade com as quatro rodas em contacto com o solo.



LiNX G-Trac Gyro

Viajar longas distâncias ou a velocidades mais elevadas tornou-se ainda mais fácil com a tecnologia LiNX G-Trac. Um módulo giroscópico que assegura que a AVIVA RX segue a direção do comando e permanece no caminho certo.



Design compacto

A base de tração mais curta e estreita e a baixa altura do assento ao chão, tornam a AVIVA RX fácil de manobrar com um controlo preciso em todos os ambientes e ainda mais fácil de utilizar em espaços estreitos com um raio de viragem reduzido.



Elegante e moderna

Linhas sóbrias, ângulos elegantes e um acabamento de alta qualidade, distinguem a AVIVA RX no que diz respeito à estética. Com um design moderno para ter um aspeto tão bom como o seu desempenho, pode ser personalizada com uma seleção de cores à escolha.

| AVIVA RX Modulite

Vastas opções de posicionamento.

A nossa versátil unidade de assento Modulite proporciona uma posição personalizada para maior conforto e suporte.

Desde os requisitos de assento mais básicos até às necessidades posturais mais complexas, o design modular maximiza as possibilidades de posicionamento.



Soluções completas

Vasta gama de opções de posicionamento sentado, incluindo encostos, almofadas de assento, apoios de braços, apoios de cabeça e muitos outros.



Concebida para segurança e conforto

a basculação de 50° e a elevação do assento de 300 mm com inclinação de 45°, promovem maior alívio de pressão.



Apoios de pernas central elétrico LNX

Ajustam-se tanto em ângulo como em comprimento, funcionando com a reclinção elétrica para ajudar a reduzir as forças de cisalhamento.



Soluções premiadas Matrix®

Opções de assentos Matrix personalizados para garantir sempre um ótimo ajuste.

Várias de opções de basculação

para alívio de pressão e conforto otimizado.



300 mm de elevação do assento combinados com uma basculação até 45°

| AVIVA RX Modulite

Assento Modulite. Ajustabilidade modular.

A nossa solução de assentos mais popular foi concebida a pensar em si. Com uma abordagem modular, a unidade de assento Modulite é facilmente adaptada para se ajustar perfeitamente e proporcionar um conforto e suporte excecionais.

Dados Técnicos

Largura do assento: 330 - 530 mm

Profundidade do assento: 410 - 510 mm

Altura do assento: a partir de 435 mm

Altura do apoio de braços: 230 - 390 mm

Comprimento do apoio de pés: 280 - 460 mm



Assento
ajustável para
um encaixe
perfeito



| AVIVA RX Modulite

Com tecnologia avançada LINX®

A tecnologia LINX® ajuda a proporcionar uma experiência de condução personalizada e confiável. A tecnologia inovadora aprende os hábitos e as preferências ao longo do tempo, tornando-a num sistema super intuitivo.



Novo suporte de comando Resolve

- Gama excepcional de posições de comando para um conforto otimizado.
- Ajustável em tensão.
- Conforto e controlo otimizados.



Ecrã tátil de 3.5"

Impressionante ecrã tátil a cores de 3,5" com joystick, velocímetro e conta-quilómetros.



Comandos especiais

Incluindo comandos compactos, de cabeça e com sensores de proximidade.



Bluetooth® incorporado

Permite a conectividade com dispositivos e comandos externos.



Opções de input

Uma grande variedade de opções input de comandos, permite uma configuração personalizada para um controlo máximo e a garantia de que a cadeira elétrica reagirá de forma consistente.



AVIVA RX Modulte

Dados técnicos.

Para mais informações sobre este produto, incluindo o manual do utilizador, visite o nosso sítio Web www.invacare.pt.

Cores



Unidade assento única AVIVA RX	430 - 480 mm	410 - 510 mm	435 - 485 mm	480 mm - 540 mm	275 - 390 mm	290 - 460 mm	0° - 20°
Assento telescópico AVIVA RX	330 - 530 mm	410 - 510 mm	435 - 485 mm	480, 540, 560 - 610 mm	230 - 360 mm	280 - 460 mm	0° - 50°
AVIVA RX HD:	620 - 650 mm	510 - 580 mm	435 - 485 mm	540 mm	245 - 360 mm	280 - 460 mm	0° - 30°
Unidade assento única AVIVA RX	90° - 120°	1000 mm	1026 - 1300 mm	830 mm	560 mm	136 kg	60/73.5 Ah
Assento telescópico AVIVA RX	90° - 120°	1000 - 1335 mm	1026 - 1300 mm	830 mm	560 mm	136 kg	60/73.5 Ah
AVIVA RX HD:	90° - 120°	1000 mm	1026 - 1300 mm	830 mm	635 mm	160 kg	60/73.5 Ah
AVIVA RX	1506 - 2086 mm	75 mm (100 mm com dispositivo para transposição de bernas)	6° / 10.5%	Até 12 km/h	Até 47 km	Até 185.2 kg	

| TDX® SP2 Modulte

Partilhe as suas ideias e ajude a moldar o futuro das cadeiras elétricas.

Convidamo-lo/a a **partilhar a sua opinião**. As suas perspetivas ajudar-nos-ão a servir melhor os utilizadores de cadeiras elétricas.

Digitalize e preencha o formulário.



Obrigado por nos deixar participar na sua viagem.


Equipa Invacare Power Series






Partilhe a sua opinião

SUBSCRIBE



 A minha cadeira permite-me viver uma vida independente e sair à rua todos os dias.

Ian Mackay
Embaixador da Invacare

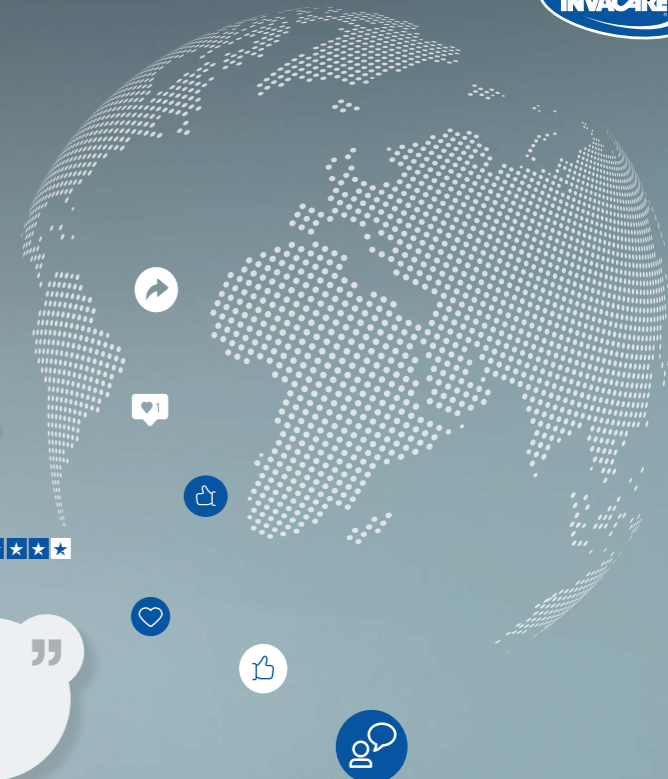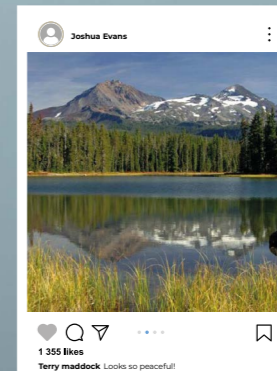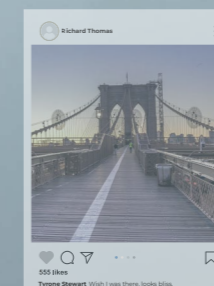

POWER SERIES

AVIVA RX

AVIVA FX

TDX SP2

Esprit Action

Kompas

Storm 4

Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

©2024 Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados.
Todas as informações citadas são consideradas corretas no
momento da impressão. A Invacare reserva-se o direito de alterar
as especificações do produto sem consulta prévia. PT - AVIVA RX
Modulite - 11/2024.

