

ELDRIVEN RULLSTOL

 AVIVA FX 40

Modulite



Smart och modern framhjulsdriven elrullstol
med det anpassningsbara och bekväma sittsystemet Modulite



Yes, you can.®

AVIVA FX40

Helt ny körupplevelse

Design. Teknologi. Prestanda.

Vi presenterar vår framhjulsdreven elrullstol **AVIVA FX40** som passar lika bra inom- såväl som i utomhusmiljö. Kombinerad med den anpassningsbara Modulite-sitsen ger den maximal komfort i alla förhållanden. En imponerande blandning av design, teknik och oslagbar prestanda.

**Det är dags att upptäcka en ny
en värld av möjligheter.**




AVIVA FX40

Design. Teknologi. Prestanda.

Ta dig tid att upptäck **AVIVA FX40** chassit. Ett nytt och spännande alternativ till vår populära **AVIVA**-familj. Denna framhjulsdreven elrullstol upprätthåller **AVIVA**-seriens sanna DNA.

Njut av en förstklassig körupplevelse.

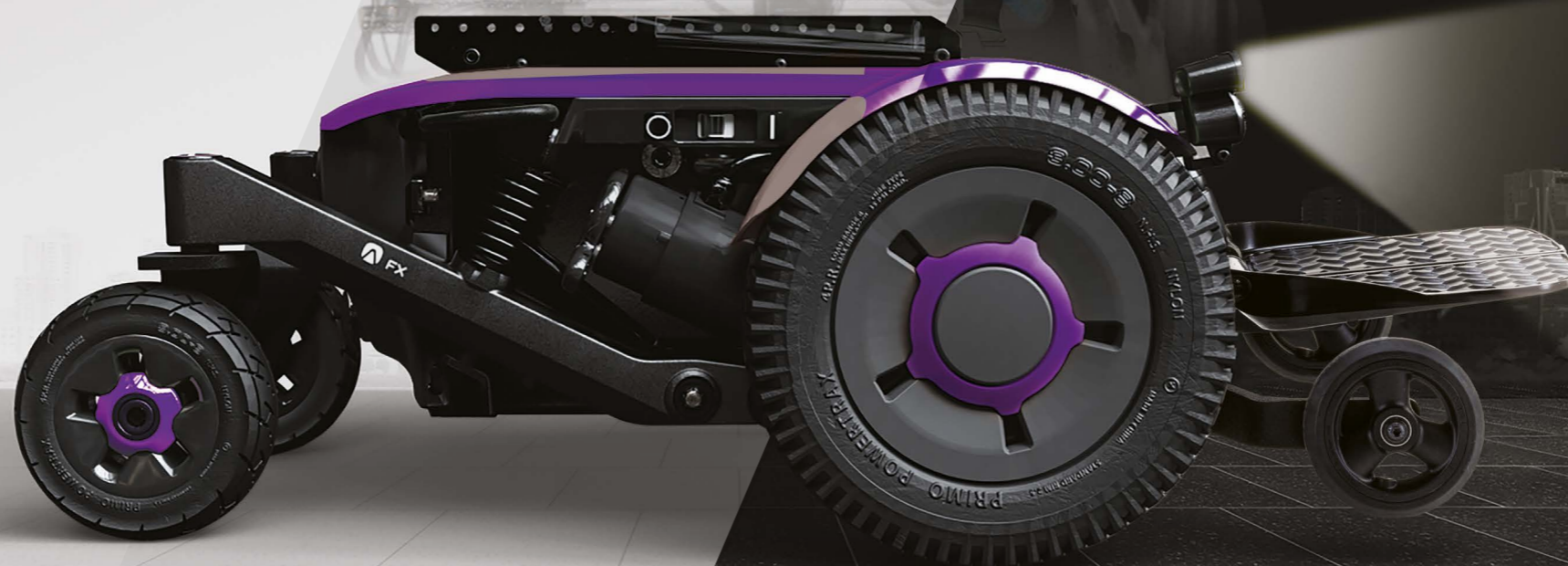

>>> LiNX G-Trac Gyro

Att färdas längre sträckor eller i högre hastigheter har gjorts ännu enklare med LiNX G-Trac Gyro teknologi. En gyromodul ser till att **AVIVA FX40** håller kursen stadigt och förbättrar körupplevelsen.



4Sure® Stötdämparsystem

En ny design som förbättrar kontroll och grepp oberoende av terräng eller underlag. Fjädringen isolerar sittsystemet från vibrationer och stötar för att ge bättre komfort.



Köregenskaper

De avfjädrande tippskydden fram, stötdämpare och gummidämparna arbetar alla tillsammans för att maximera både komfort och stabilitet. Sitsen håller sig så plant som möjligt, även när man tar sig an ojämnheter eller andra hinder.



4-ledskoppling

Den betydande körprestandan förstärks ytterligare av en patenterad 4-ledskoppling med rörliga ledpunkter som skapar en mjuk åktur, bättre grepp och effektiv framkomlighet även vid låga hastigheter.

AVIVA FX 40

Sittsystem Modulite

Det mångsidiga sittsystemet Modulite är flexibelt och justerbart i dess design. Vårt mest populära sittsystem är designat med användaren i åtanke där fokus legat på att tillhandahålla ett sittsystem som prioriterar komfort, och täcker över ett brett spektrum av kliniska behov.

Kör den och upplev bekvämligheten.

Hög ledpunkt

En hög ledpunkt minimerar skjuvning genom att möjliggöra en rörelse som efterliknar kroppens konturer. Detta ger en bekvämare och mer följsam positionering, vilket bidrar till ökad komfort och stabilitet

Snabbkoppling


För att snabbt och enkelt kunna fälla ryggstödet vid transport.

Tryckavlastning

Tack vare antingen 20° eller 30° sitstilt, och ryggfällning på 30°

Skensystem

För enkel och precis montering av tillbehör

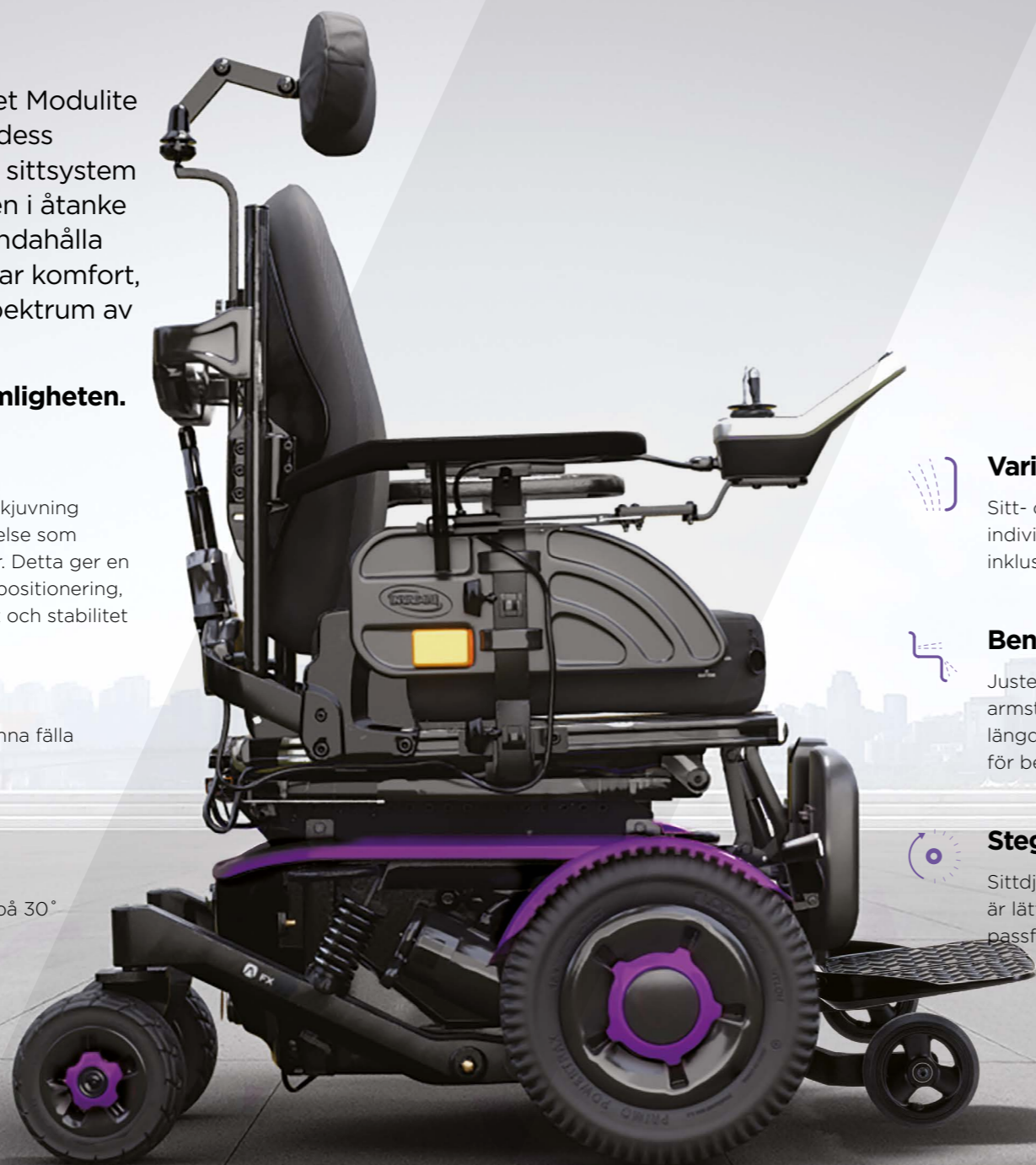

Variation av sitt- ryggstöd

Sitt- och ryggalternativ för att passa individuella sitt- och positioneringsbehov, inklusive Matrix och Flex 3.

Ben- och armstöd

Justerbara och avtagbara ben- och armstöd efter behov. Elektriska alternativ av längdkompenserande benstöd som ger stöd för ben och vader under hela rörelseomfånget.

Steglös justering

Sittdjup, bredd, vinkel och tyngdpunkten är lätt att justera för en perfekt individuell passform.

Pekskärm

Manöverbox REM400

3.5"

peksskärm i färg med joystick.



Programmering och uppdateringar kan anpassas trådlöst och i realtid via Bluetooth®

Tekniska data

För mer information om denna produkt, inklusive användarmanual etc. besök vår webbplats www.invacare.se

Sittbredd ▾	Sittdjup ▾	Sitshöjd ▾	Ryggstödhöjd ▾	Armstödhöjd intervall ▾	Benstödslängd intervall ▾	Sitsvinkel intervall ▾
380 - 530 mm ^{1,2}	410 - 510 mm ²	430, 470, 495, 520 mm ³	480, 540, 560 mm ^{2,5}	245 - 310 / 295 - 360 mm ²	280 - 460 mm ⁶	0 - 30° ⁴
Ryggstödvinkel intervall ▾	Höjd total ▾	Längd total inkl benstöd ▾	Längd total exkl benstöd ▾	Hjulbas ▾	Max brukarvikt ▾	Batterikapacitet ▾
90° - 120°	1000 - 1335 mm ⁸	1205 mm ⁸	1070 mm ⁸	618 mm ⁷	136 kg	73.5 Ah (C20)
Svängdiameter ▾	Max hindertagning ▾	Max. säker lutning ▾	Motorkapacitet ▾	Hastighet ▾	Körsträcka ▾	Totalvikt ▾
1240 mm	83 mm	9°	2 x 340 W	6, 10, 12 km/h	Up to 35.5 km ⁹	105 - 185.2 kg ⁸

¹ Ytterligare 50mm med armstödsjustering utåt samt 30mm inåt (Inriggad armstöd)
² Andra mått kan levereras på begäran.
³ Mått från golvet till sitsplatta utan dyna
⁴ Större tilt intervall på begäran
⁵ Mått från sitsplattan
⁶ Mått från fotplatta till sitsplatta

⁷ Mått hjulbas (Drivhjul)
⁸ Beroende på konfiguration
⁹ Enligt ISO 7176-4:2008. Det angivna värdet är den högsta teoretiskt möjliga sträckan.
¹⁰ Invacare Modulite sittsystem är kompatibel med komponenter från Invacares manuella rullstolssortiment. Vi tillåter att sitskomponenter och benstöd från detta segment används på Modulite sitsen.

Färgval



Tel: +46 8 761 70 90
 sweden@invacare.com
 www.invacare.se

Invacare AB
 Fagerstagatan 9
 163 53 Spånga
 Sverige



©2024 Invacare International GmbH. Alla rättigheter är reserverade för Invacare. Invacare reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tryck. All information är korrekt vid tiden för tryckning. SE - AVIVA FX40 Modulite - 11/24.



Yes, you can.