

ELDRIVEN RULLSTOL

AVIVA RX ULM



Enstående bakhjulsdriven elrullstol
med det avancerade sittsystemet ULM



| AVIVA RX ULM

För en trygg och bekväm användning.

Design. Teknologi. Prestanda.

Utforska **AVIVA RX**. En högpresterande bakhjulsdriven elrullstol, kombinerad med ULM-sitsen för mer avancerad sittproblematik.



| AVIVA RX ULM

Design. Teknologi. Prestanda.

Ta en närmare titt på **AVIVA RX**-chassit. Den första från AVIVA familjen. AVIVA RX sätter en ny standard för bakhjulsdrivna elrullstolar. Designad med de senaste tekniska innovationerna för att ge en bästa körprestanda och komfort



CTC-stötdämpning (patenterad)

Designad för att absorbera vibrationer eller stötar under åkturen. Den ger komfort och en ökad försäkring om stabilitet med fyra hjul som förblir i kontakt med underlaget.



LiNX G-Trac Gyro

Att färdas längre sträckor eller i högre hastigheter har gjorts ännu enklare med LiNX G-Trac Gyro teknologi. En gyromodul ser till att AVIVA RX håller kursen stadigt och förbättrar körupplevelsen.



Kompakt design

En kortare, smalare hjulbas och låg sitthöjd gör AVIVA RX lätt att manövrera med full kontroll i alla miljöer samt att det även underlättar vid användning i mindre utrymmen med dess snäva svängradie.



Snygg och stilren

Rena linjer, eleganta färger och en kvalitetsfinish skiljer AVIVA RX från resten. Modern design för att se lika bra ut som den presterar.

| AVIVA RX ULM

Designad för klinisk excellens.

ULM-sitsen – framtagen av experter med klinisk kompetens för att erbjuda dig den perfekta kombinationen av komfort och stöd. ULM är utvecklad för en individuell passform som främjar ökat oberoende och tillgänglighet för användaren. Med sin integrerade justeringsfunktion och det innovativa Ultra Rail-systemet kan ULM skräddarsys för att passa varje användares unika behov.



Ökad skjuvreducering

Designad kring kroppens ledpunkter med ett optimerat utbud av motoriserade positioneringsmöjligheter för att säkerställa att sittandet förblir stödjande och bekvämt. Konstruktionen hjälper till att minimera skjuvning och hantera tryckfördelning.



Skräddarsydd positionering

Höggradigt modulär och justerbar för att anpassas efter behov som förändras över tid.



LNX benstöd

Med längdkompensering hjälper till att reducera skjuvning.



Prisbelönt Matrix

Matrix Sits- och ryggdynor säkerställer en optimal passform varje gång.



| AVIVA RX ULM

matrx[®]
SCIENCE OF SEATING

Avancerad och ergonomisk sittlösning.

I kombination med det justerbara ULM-sittsystemet ger det prisbelönta **Matrx**-sortimentet en mer stödjande passform för att säkerställa maximal komfort.



| AVIVA RX ULM

matrx[®]
SCIENCE OF SEATING

Välj från ett urval av ryggstöd, sittdynor, huvudstöd och olika tillbehör för en personligt anpassad sittlösning.



Huvudstöd

Vårt justerbara Matrx Elan sortiment är utformat för att möjliggöra optimal positionering. Med två lager av formgjutet skum gör det att nackstödsdynan ger stöd efter bästa passform med en lätt fördjupning där det behövs, vilket ökar funktion och komfort.



Bodypoint positioneringsbälten

För optimal funktion, rörlighet och stabilitet erbjuder vi ett urval av bröst- och positioneringsbälten. Detta hjälper till att säkerställa att både bäcken och överkropp är säkra för mer kontroll och förbättrad funktionalitet.



Höft och lår/knästöd

I ett flertal former och storlekar. Justerbara snabbkopplingsfästen för förbättrad positionering som samtidigt är lätta att ta bort vid förflyttningar.



Ryggstöd

En rad ryggstödsalternativ inklusive vår Matrx-serie finns tillgängliga för maximalt posturalt stöd, tryckavlastning och mikroklimatkontroll. Den formade ryggen med inbyggt stöd ger ökad bålstabilitet.



Sittdynor

Välj från ett stort urval av sittdynor som underlättar positionering. Vår avancerade Matrx Libra är designad med skum och en silikonbaserad gel för att ge en hög nivå av skydd mot tryck. Positionering och justerbarhet kan anpassas med ytterligare positioneringsalternativ.

| AVIVA RX ULM

Med **LiNX**[®] kontrollsystem.

Invacare **LiNX**[®] kontrollsystem underlättar vid personlig tillpassning och skänker en trygg körupplevelse. Systemet är innovativt och lär sig vanor och körbeteende över tid och på så sätt erbjuder en banbrytande körupplevelse för varje individ.



| AVIVA RX ULM

Upptäck mer.



Manöverboxfäste Maxx Resolve

- Fler inställningsmöjligheter att positionera manöverboxen
- Ställbar hårdhet på kraften som krävs vid undanfällning
- Optimerad komfort och kontroll



3.5" Peksärm

3,5" pekskärm i färg med joystick, hastighetsmätare och en kilometerräknare.



Alternativa styrningar

såsom kompakt joystick, huvud- och sensorstyrning, four-switch proximity.



Inbyggd Bluetooth®

Möjliggör anslutning så att användaren kan koppla upp sig mot externa enheter, såsom telefon, PC eller omgivningskontroller.



Input alternativ

En mängd olika signalmoduler möjliggör en personlig inställning för maximal kontroll och trygghet i att elrullstolen reagerar konsekvent.





| AVIVA RX ULM

Tekniska data

För mer information om denna produkt, inklusive användarmanual etc. besök vår webbplats www.invacare.se.

Färgval

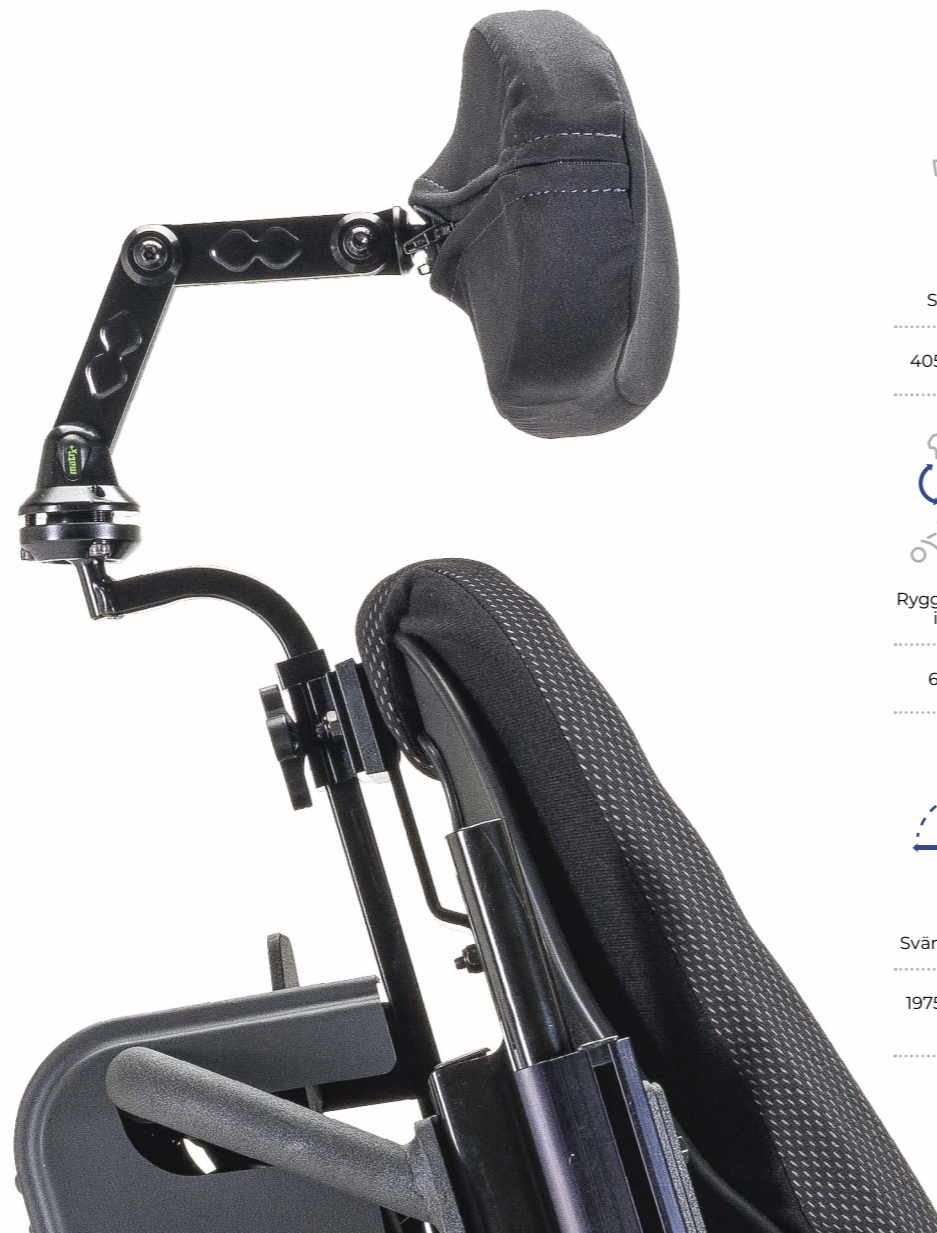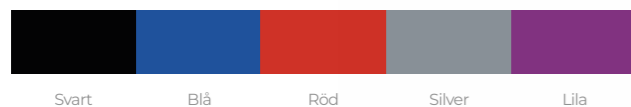

Sittbredd	Sittdjup	Sitshöjd	Ryggstödshöjd	Armstödshöjd intervall	Benstödslängd intervall	Sitsvinkel intervall
405 - 555 mm	405 - 580 mm	420 - 485 mm	355 - 685 mm	230 - 405 mm	290 - 465 mm	-10° - 50°
Ryggstödvinkel intervall	Höjd total	Längd total inkl benstöd	Längd total exkl benstöd	Hjulbas	Max brukarvikt	Batterikapacitet
60° - 170°	1101 - 1210 mm	1251 - 1300 mm	830 mm	560 / 635 mm	136 kg	60 / 73.5 Ah
Svängdiameter	Max hindertagning	Max. säker lutning	Hastighet	Körsträcka	Totalvikt Intervall	
1975 - 2105 mm	75 mm (100 mm med kantklättrare)	6° / 10.5%	Upp till 12 km/h	Upp till 37 km	Upp till 190.1 kg	

AVIVA RX ULM

Dela med dig av dina tankar och erfarenheter och hjälp oss forma framtidens elrullstolar.

Vi bjuder in dig att dela med dig av din erfarenhet. Dina insikter hjälper oss att bättre förstå behoven. Vänligen skanna och fyll i formuläret. Tack för att vi får ta del av din vardag.



Invacare Eldrivna rullstolar-teamet.

Invacare Power Series Team





Dela med dig av din erfarenhet

SUBSCRIBE



”
Min elrullstol gör det möjligt för mig att leva ett självständigt liv och komma ut varje dag.

Ian Mackay
Invacare Ambassador

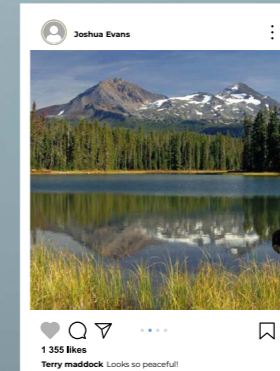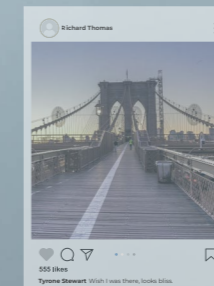

E L D R I V E N R U L L S T O L

AVIVA RX

AVIVA FX

TDX SP2

Esprit Action

Kompas

Storm 4

Tel: +46 8 761 70 90
sweden@invacare.com
www.invacare.se

©2024 Invacare International GmbH. Alla rättigheter är reserverade för Invacare. Invacare reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tryck. All information är korrekt vid tiden för tryckning. SE - AVIVA RX ULM - 11/2024.

