

**matrix**<sup>®</sup>  
SEATING SERIES

# E2 Ryggsystem



Invacare<sup>®</sup> **Matrix<sup>®</sup> E2<sup>™</sup> Ryggsystem**

INNOVATION | KOMFORT | LIVSKVALITET



# Postural support för att underlätta individuell rörelsefrihet

Det nya **E2-ryggstödet** är vår senaste innovation inom ryggsystem och erbjuder maximalt posturalt stöd för personer med nedsatt rörlighet. Med monteringsstift för enkel applicering, **E2-ryggstödet** finns i ett brett utbud av bredder och höjder för att säkerställa maximal passform. Det nya uppdaterade skummet med profileringen- Ripple ger ett bättre mikroklimat, förbättrad tryckfördelning med hög komfort

## Ergonomisk Design

Den nya ergonomiska designen optimerar stödet och tryckfördelningen för att säkerställa en mer exakt och bekväm passform. Designen är formad för att stödja bäckenet vilket ger ökat stöd och stabilitet




## Ryggskal

- ▶ Urtag för luftflöde
- ▶ Vertikala spår för monteringsfäste
- ▶ Mer plats för svanskotan
- ▶ Förborrad för PostureFlex - Buk och båsele



## Profilerat skum - Ripple teknologi

Det profilerade skummets yta ökar ventilationen och kontroll av mikroklimat. Det högelastiska skummet möjliggör för ryggraden att sjunka in och reducerar skjuvkrafter

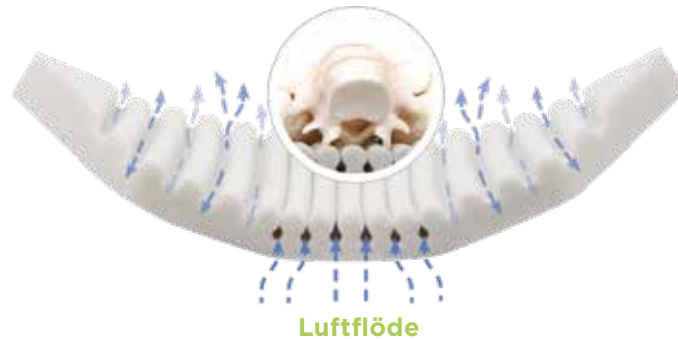

### Överdrag

- ▶ Vätsketätt Meshtex överdrag som ångandas
- ▶ Skum och överdrag överlappar skalet för skydd och komfort



## Monteringsstift för fastsättning

Ryggstödet monteras på stolen och fästs med lätt justerbara monteringsstift. Den flexibla monteringen är utformad för att matcha behoven hos en rad olika kroppsformer och storlekar, och kan även justeras när användaren sitter. Den kan också placeras olika för att undvika hinder -såsom armstöd och stabiliseringsbåge etc.



### Monteringsstift

- ▶ Justerbar i höjd och bredd  
Passar stolar med samma ryggstöds bredd eller 2,5 cm bredare / smalare
- ▶ Rygghöjden kan justeras med användaren sittande i rullstolen
- ▶ Monteringsfästet kan placeras smidigt för att undvika hinder som armstöd och stabiliseringsbåge
- ▶ MiniSet-monteringsfäste används på ryggstödshöjd upp till 41 cm, EasySet monteringsfäste på ryggstödshöjd 46 / 51cm



# Matrix E2-ryggstöd

finns i två kontur djup



▲ **E2 Ryggstöd standard**  
E2 Standard - 8cm Kontur

▲ **E2 Ryggstöd djup**  
E2 Djup - 15cm Kontur

## Produkt Specifikation

- ▶ Bredd: 36/38/41/43/46/48/51cm
- ▶ Höjd: 15/20/26/31/36/41/46/51cm
- ▶ Max brukarvikt: 136kg.



## Bålstöd Easy Fix

- ▶ Fasta bålstöd kan monteras inuti eller utanpå ryggskalet
- ▶ Höjdjusterbar i det vertikala spåret, kan förskjutas
- ▶ Kompatibel med E2 standardkontur rygg 26cm och högre



## Bålstöd Swing Away

- ▶ Standard kompatibel med E2-ryggar 26cm och högre, höjdförskjutbara med rygg 31cm och högre
- ▶ Finns med fyra dynstorlekar: XS / S / M / L

Montering insida    Montering utsida



## Tillbehör ▾



### ▲ Länd/bäckenstöd

Länd/bäckenstödet  
målsättning är att ge support  
för en upprätt postural ställning

- Anatomisk formad ger stöd mot SIPS
- Går att anpassa till valfri storlek
- Fastsätts med kardborrband mot ryggskalet och är enkelt att justera



### ▲ Överdrag för infektionskontroll

För att skydda ryggstödet.  
Kan torkas av med godkända  
desinfektionsmedel för ökad  
hygien. Lätt att applicera och ta  
bort vid tvätt.



### ▲ PostureFlex Buk/bålsele

Designad för att öka det interna  
buktrycket för förbättrad röst-  
och andningskontroll. Ger ett  
bekvämt upprätt posturalt  
stöd med flexibel stretch för  
funktionella aktiviteter.

#### Enkelt nyckelhålsfäste

- 3 monteringshöjder förborrade monteringshål på baksidan.
- Finns i två storlekar: M / L.
- Quick release för muskelsvaga, enkel att använda både vid applicering och avlägsnande av PostureFlex



### ▲ Huvudstödsfäste

Huvudstödsfäste i lätt och låg  
profil kan installeras utan att  
överdraget tas bort. Ingår med  
alla ryggar 36 cm och högre.  
Extra starkt huvudstödsfäste  
i stål som tillval för extrema  
påfrestningar, hög tonus eller  
tung brukare.



### ▲ Fäste för bålsele

Monteringsfäste för exakt  
placering av bålsele.

#### Modeller:

36 till 38cm breda ryggar  
41 till 51cm breda ryggar



### ▲ Matrix integritetsskydd

Kan fästas på ryggstödet  
med ett insytt kardborreband  
finns längst ner på baksidan av  
överdraget.

Finns i fyra storlekar:  
XS / S / M / L

# Olika monteringsfästen ▾

för optimal anpassning och större kompatibilitet med vårt rullstolsutbud

## Standard monteringsfästen



### MiniSet:

- ▶ Standard på alla E2 / E2D ryggar upp till 41 cm hög



### EasySet:

- ▶ Standard på alla E2 / E2D ryggar 46cm & 51cm

## Alternativa monteringsfästen



### Fasta MiniSet:

- ▶ Permanent montering kräver verktyg för borttagning, rekommenderas för tilt / recline rullstolar
- ▶ Tillval för E2 / E2D-ryggstöd upp till 41 cm hög



### Fasta EasySet:

- ▶ Permanent montering kräver verktyg för borttagning, rekommenderas för tilt / recline rullstolar
- ▶ Tillval för E2 / E2 djupa ryggar med Easy Set monteringsstift endast (46 & 51cm hög)



### Delade fästen

- ▶ Används om konflikt vid montering finns på ramen, quick release
- ▶ Tillval för E2 / E2D ryggar med Easy Set monteringsstift, inte kompatibel med MiniSet ryggar



### Heavy-Duty MiniSet:

- ▶ Rekommenderad för användare med hög muskel tonus eller hög belastning
- ▶ Quick release



### Heavy-Duty EasySet:

- ▶ Rekommenderas för användare med hög muskel tonus eller hög belastning

**Justeringar:** Vinkel (40 °), djup (5 cm framför eller bakom ryggrören), kan höjdförskjutas för att anpassa vid rotation

**Passar:** 2,5 cm ryggrör, inlägg för 1,9 cm och 2,2 cm ryggrör ingår

## Skapa en familj i ditt sittsystem

Invacare erbjuder också ett komplett utbud av olika produkter som kompletterar ditt E2-ryggstöd.



Vicair®



Invacare Sittdyna Matrix® Libra



Invacare Huvudstöd Matrix® Elan



Tel: +46 761 70 90  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se

Invacare AB  
Fagerstagatan 9  
163 91 Spånga  
Sweden



Yes, you can.®

© 2021 Invacare International GmbH. Alla rättigheter förbehållna. All citerad information antas vara korrekt vid tryckningen.

Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående samråd. Matrix E2 Back - SE - 01/2021

