



matrx[®]MAC



MULTIJUSTERBAR KONTURERAD RYGG

Anpassning utan ansträngning





matrx® MAC

Klinikerledd design

Vi introducerar vårt nya koncept för ett skräddarsytt ryggstöd. Matrx® MAC är vår nya justerbara konturerade rygg med ett alternativt mjuk HUG-fiberinlägg

ANPASSAD PASSFORM

Helt konfigurerbar för de flesta kroppstyper, tillstånd och med justerbarhet för förändringar.

Matrx MAC är vårt nya sätt att erbjuda en anpassad passform, positionering och komfort.



PRECISION

Varje specifikation utvecklad av vårt klinikerledda team strävar efter effektivitet, kvalitet och en optimal anpassning. Mixa och matcha vårt utbud av laterala stöd för en skräddarsydd passform.



KOMFORT

Konturerad form och alternativt med HUG-fiberinlägg ger extra insjunkning, omfamning och förbättrar den övergripande komforten.



STÖD

Baserat på den anatomiskt formade Matrx E2-ryggen, främjar Matrx MAC en bra hållning och en förbättrad postural kontroll.

M Modulär för anpassad passform

Matrx® MAC är en modulär lösning bäst lämpad för tilt in space rullstolar. Den har utbytbara och olika storlekar på lateralstöd som kan varieras och matchas för att erbjuda skräddarsytt stöd för människor med mer komplexa posturala behov.



ASYMMETRISK



23 cm kontur



15 cm kontur



9 cm kontur

ANPASSA

3 konturdjup och asymmetrisk kontur




M Hjälper till att korrigera mild skolios

Postural kollaps kan hindra de inre organens funktion. Matrx MAC främjar en naturlig form på ryggraden och hållning.




JUSTERBAR
BREDD OCH
HÖJD

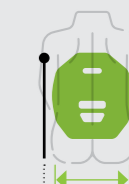

Passar stolar
2,5cm smalare än
ryggstorleken



Passar stolar med
samma bredd som
ryggstorleken

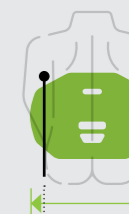

Passar stolar
5cm bredare än
ryggstorleken

Välj Matrx HUG för ökad komfort


HUG-fiberinlägg, som alternativ innehåller mjuk bekväm Stamina Fibre® för maximal insjunkning och omfamning.

- Kontroll av mikroklimat
- Hypoallergenisk
- Maskintvättbar och torkvänlig
- Bibehåller formen

Rekommenderas för mindre posturala asymmetrier.

Alla älskar en HUG!

matrx[®] HUG

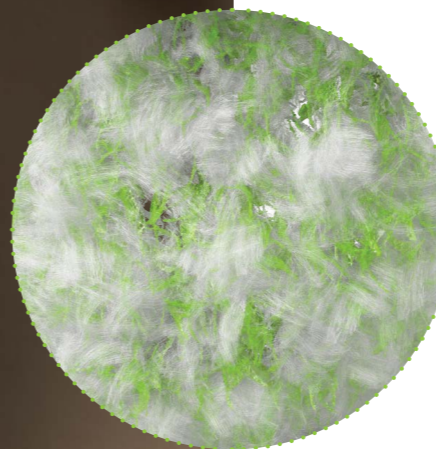

Stamina
Fibre®

RYGGINLÄGG ALTERNATIV



STANDARD

Dubbelt lager av skum
Supermjuk/fast HR skumlager
för komfort och stöd



VALFRITT

HUG
Mjuk, formbar Stamina Fibre® för maximal
insjunkning och omfamning

m Ta en närmare titt

Matrx® MAC har en ergonomiskt formad konturerat ryggskal baserat på etablerad Matrx E2 med extra skulderstöd för tilt in space rullstolar

MONTERINGSFÄSTE HUVUDSTÖD

Heavy-duty fäste ingår

RYGGSKAL

Dubbelt lager av skum eller HUG med Stamina Fibre® (ej visad)

INSTALLATIONSVERKTYG

Ger enkel installation genom att justera ryggen och laterala stöd under installationen



MIXA OCH MATCHA

Laterala stöd är utbytbara, så profiler kan blandas och matchas beroende på specifika behov

BREDDJUSTERING

Olika stora, utbytbara, multi-justerbara laterala stöd som är oberoende av varandra, vilket möjliggör 3 cm breddjustering

DJUPJUSTERING

3 olika profiler ger 3 konturdjup

HÖJDJUSTERING

Laterala stöd kan justeras oberoende i höjd medans brukaren förblir sittande



Monterings och Monteringsalternativ



EASYSET

Standard på alla 46 - 56 cm höga ryggstöd. Quick release för enkel borttagning av ryggstödet.



HEAVY-DUTY EASY SET

Rekommenderas för hög tonus eller ökad påfrestning.



DELAT

Tillåter fritt utrymme för hinder på ryggrör, quick release 46 - 56cm höga ryggstöd. Quick release för enkel borttagning av ryggstödet.



FASTA

Fast montering kräver verktyg för borttagning. Rekommenderas för tilt in space rullstolar. Lämplig för 46 - 56 cm höga ryggstöd.

Ryggstorlekar

	BREDD				
	41cm	43cm	46cm	48cm	51cm
Passar rullstolsbredd	39-46cm	41-48cm	43-51cm	46-53cm	48-56cm
HÖJD	41cm	46cm	51cm	56cm	

Tekniska Data

- Vinkeljustering40°
- Djupjustering10cm
- Lateral kontur9, 15, 23cm
- Lateral breddjustering2.6cm
- Lateral höjdjustering20cm
- Tvätt av överdraget60°C
- Max brukarvikt136kg
- Begränsad garanti2 år

● Matrix MAC visas med Matrix Loxx nackstöd på Invacare Rea Azalea rullstol





Matrix® MAC Backs som används för att transportera en brukare i fordon rekommenderas starkt att ryggen är utrustade med ett nack/huvudstöd och får endast användas i samband med rullstolar som uppfyller prestationskraven enligt RESNA WC19 eller ISO 7176-19



[invacare.eu.com](https://www.invacare.eu.com)

© 2024 Invacare International GmbH. Alla rättigheter förbehållna. All information som anges anses vara korrekt vid tryckning. Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående konsultation. SE - 06/24.