

ELDRIVEN RULLSTOL

TDX[®] SP2 ULM



Intuitiv mitthjulsdriven elrullstol
med det avancerade sittsystemet ULM



| TDX® SP2 ULM

Optimal komfort och prestanda.


TDX® SP2 ULM (Ultra Low Maxx) är en av våra högst presterande mitthjulsdrivna elrullstolar. Kvalitet och teknik i grunden, kombinerat med vårt sittsystem ULM tillsammans med det intuitiva LiNX-kontrollsystem så uppnås optimal komfort och prestanda varje dag.



| TDX® SP2 ULM

Så mycket mera.

TDX® SP2 är framtagen för att leverera och utan ansträngning ta dig dit du vill. Lätt att hantera och manövrera för att ge dig mer frihet och oberoende i alla förhållanden.

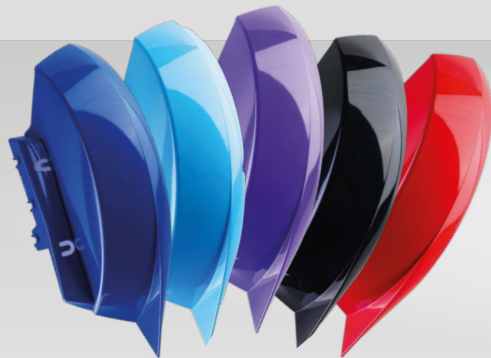

Uppdaterade kåpor

Välj bland ett urval av spännande nya färger för en snygg look.



650 mm



Svängradie 560 mm



Utmärkt manövrerbarhet

Mitthjulsdriften gör navigering genom trånga utrymmen lättare och ger dig mer kontroll.



Den patenterade SureStep® teknologin

möjliggör en mjuk gång samtidigt som den övervinner hinder.



Utmärkt stabilitet och säkerhet

Designad för att säkerställa att alla sex hjulen har kontakt med marken tack vare den integrerade "Stability Lock" funktion.

| TDX® SP2 ULM

Nya kåpor. Extra stryktåliga.

Välj en fräsch och elegant touch med det nya kåporna. Kåporna är extra stryktåliga och hjälper till att skydda mot vardagens utmaningar.



Svart

Röd

Lila

Blå

Arctic Blue

| TDX® SP2 ULM

Designad för klinisk excellens.

ULM-sitsen – framtagen av experter med klinisk kompetens för att erbjuda dig den perfekta kombinationen av komfort och stöd. ULM är utvecklad för en individuell passform som främjar ökat oberoende och tillgänglighet för användaren. Med sin integrerade justeringsfunktion och det innovativa Ultra Rail-systemet kan ULM skräddarsys för att passa varje användares unika behov.



Ökad skjuvreducering

Designad kring kroppens ledpunkter med ett optimerat utbud av motoriserade positioneringsmöjligheter för att säkerställa att sittandet förblir stödjande och bekvämt. Konstruktionen hjälper till att minimera skjuvning och hantera tryckfördelning.



Skräddarsydd positionering

Höggradigt modulär och justerbar för att anpassas efter behov som förändras över tid.



LNX benstöd

Med längdkompensering hjälper till att reducera skjuvning.



Prisbelönt Matrix®

Matrix Sits- och ryggdynor säkerställer en optimal passform varje gång.



| TDX® SP2 ULM

matrx®
SCIENCE OF SEATING

I kombination med det justerbara ULM-sittsystemet ger det prisbelönta **Matrx**®-sortimentet en mer stödjande passform för att säkerställa maximal komfort.



Huvudstöd

Vårt justerbara Matrx Elan sortiment är utformat för att möjliggöra optimal positionering. Med två lager av formgjutet skum gör det att nackstödsdynan ger stöd efter bästa passform med en lätt fördjupning där det behövs, vilket ökar funktion och komfort.



Bodypoint positioneringsbälten

För optimal funktion, rörlighet och stabilitet erbjuder vi ett urval av bröst- och positioneringsbälten. Detta hjälper till att säkerställa att både bäcken och överkropp är säkra för mer kontroll och förbättrad funktionalitet.



Höft och lår/knästöd

I ett flertal former och storlekar. Justerbara snabbkopplingsfästen för förbättrad positionering som samtidigt är lätta att ta bort vid förflyttningar



Ryggstöd

En rad ryggstödsalternativ inklusive vår Matrx-serie finns tillgängliga för maximalt posturalt stöd, tryckavlastning och mikroklimatkontroll. Den formade ryggen med inbyggt stöd ger ökad bålstabilitet.



Sittdynor

Välj från ett stort urval av sittdynor som underlättar positionering. Vår avancerade Matrx Libra är designad med skum och en silikonbaserad gel för att ge en hög nivå av skydd mot tryck. Positionering och justerbarhet kan anpassas med ytterligare positioneringsalternativ.



| TDX® SP2 ULM

Med **LiNX**[®] kontrollsystem.

Invacare **LiNX**[®] kontrollsystem underlättar vid personlig tillpassning och skänker en trygg körupplevelse. Systemet är innovativt och lär sig vanor och körbeteende över tid och på så sätt erbjuder en banbrytande körupplevelse för varje individ.



| TDX® SP2 ULM

Upptäck mer.



360°

Manöverboxfäste Maxx Resolve

- Fler inställningsmöjligheter att positionera manöverboxen
- Ställbar hårdhet på kraften som krävs vid undanfällning
- Optimerad komfort och kontroll



3.5" Pekskärm

3,5" pekskärm i färg med joystick, hastighetsmätare och en kilometerräknare.



Alternativa styrningar

såsom kompakt joystick, huvud- och sensorstyrning, four-switch proximity.



Inbyggd Bluetooth®

Möjliggör anslutning så att användaren kan koppla upp sig mot externa enheter, såsom telefon, PC eller omgivningskontroller.



Input alternativ

En mängd olika signalmoduler möjliggör en personlig inställning för maximal kontroll och trygghet i att elrullstolen reagerar konsekvent.




| TDX® SP2 ULM

Tekniska data.

För mer information om denna produkt, inklusive användarmanual etc. besök vår webbplats www.invacare.se.

Färgval

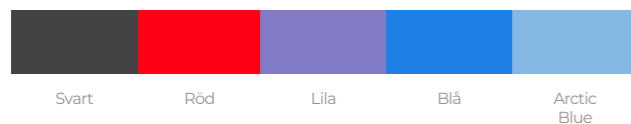

Sittbredd	Sittdjup	Sitshöjd	Ryggstödshöjd	Armstödshöjd intervall	Benstödslängd intervall	Sitsvinkel intervall
405 - 610 mm	405 - 580 mm	420 - 544 mm	355 - 685 mm	230 - 405 mm	290 - 465 mm	-10° - 50°
Ryggstödsvinkel intervall	Höjd total	Längd total inkl benstöd	Längd total exkl benstöd	Hjulbas	Max brukarvikt	Batterikapacitet
60° - 168°	1080 - 1210 mm	1290 mm	980 mm	650 mm	136 kg	73 Ah
Svängdiameter	Max hindertagning	Max. säker lutning	Hastighet	Körsträcka	Totalvikt	
1120 mm	75 mm	9° / 15,8%	Upp till 12 km/h	Upp till 41 km	183 kg	

| TDX® SP2 ULM

Dela med dig av dina tankar och erfarenheter och hjälp oss forma framtidens elrullstolar.

Vi bjuder in dig att dela med dig av din erfarenhet. Dina insikter hjälper oss att bättre förstå behoven. Vänligen skanna och fyll i formuläret. Tack för att vi får ta del av din vardag.



Invacare Eldrivna rullstolar-teamet.

Invacare Power Series Team





Dela med dig av din erfarenhet

SUBSCRIBE



”
Min elrullstol gör det möjligt för mig att leva ett självständigt liv och komma ut varje dag.

Ian Mackay
Invacare Ambassador

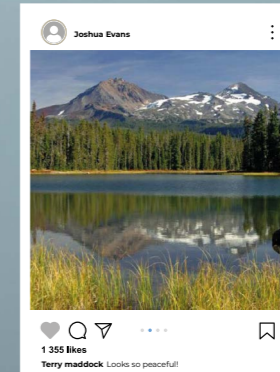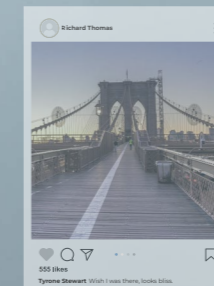

E L D R I V E N R U L L S T O L

TDX SP2

AVIVA RX

AVIVA FX

Esprit Action

Kompas

Storm 4

Tel: +46 8 761 70 90
sweden@invacare.com
www.invacare.se

©2024 Invacare International GmbH. Alla rättigheter är reserverade för Invacare. Invacare reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tryck. All information är korrekt vid tiden för tryckning. SE - TDX SP2 ULM - 11/2024.

