

InvaSoft™ Hybrid

avancerad hybrid teknologi



Hybrid madrass utan pump

Hanterar tryck, skjuv och mikroklimat



Yes, you can.®

Revolutionerande Hybrid madrass utan pump

Vår nya InvaSoft™ Hybrid madrass har avancerade funktioner gällande hybridteknik för att bättre hantera kritiska faktorer förknippade med tryckskador.

InvaSoft™ Hybrid använder en innovativ kombination av material och teknik för att förbättra tryckfördelning, minska skjuvning och friktion samt säkerställa en mycket effektivt mikroklimat hantering.

Genom vårt dedikerade forskning och design team inklusive ett samarbete med hudvårds

experter, InvaSoft™ Hybrid är en enkel, effektiv lösning designad för att möta de många utmaningar som vi står inför i olika vårdmiljöer.

Oberoende testresultat bekräftar också att vår InvaSoft™ Hybrid är mycket effektiv att hantera de viktigaste externa faktorerna för utveckling av tryckskador.



Överdrag




> **Slitstarkt medicinskt tyg** med hög luftgenomsläpplighet.



> **Elastiskt tyg i flera riktningar** minskar skjuvning och friktion.


1

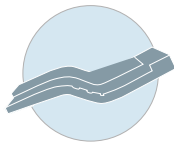

Tryckfördelning

Vår innovativa **automatiska inställande teknik** tillåter icke-strömförsörjande tryckfördelning i alla patientpositioner, utan behovet av en pump.

2

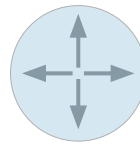

Reducering av Skjuv och friktion

InvaSoft™ Hybrid-fördelar **innovativa material** för att minska skjuvning och friktion.

5°

> **Sluttande hälzon och skyddande lager** mot skjuv som flyttar vikten från det sårbara häloområdet.



> **Mjukt, följsamt toppskikt** omsluter brukaren för maximal komfort och stöd.



> **Åtta horisontella luftceller** för individualiserad reaktiv tryckfördelning.



> **Minskning av överskottsvärme** och fukt genom speciellt utformade intag.

3



Mikroklimat Reglering

Ett **banbrytande luftflöde utan pump** (N.P.A.T.), InvaSoft™ Hybrid ger en kontinuerlig reglering av mikroklimat.




> Exceptionell luftcirkulation

med ett öppet strukturerad och stödjande nudelmaterial.



> **Profilerat skum** för extra komfort och tryckfördelning

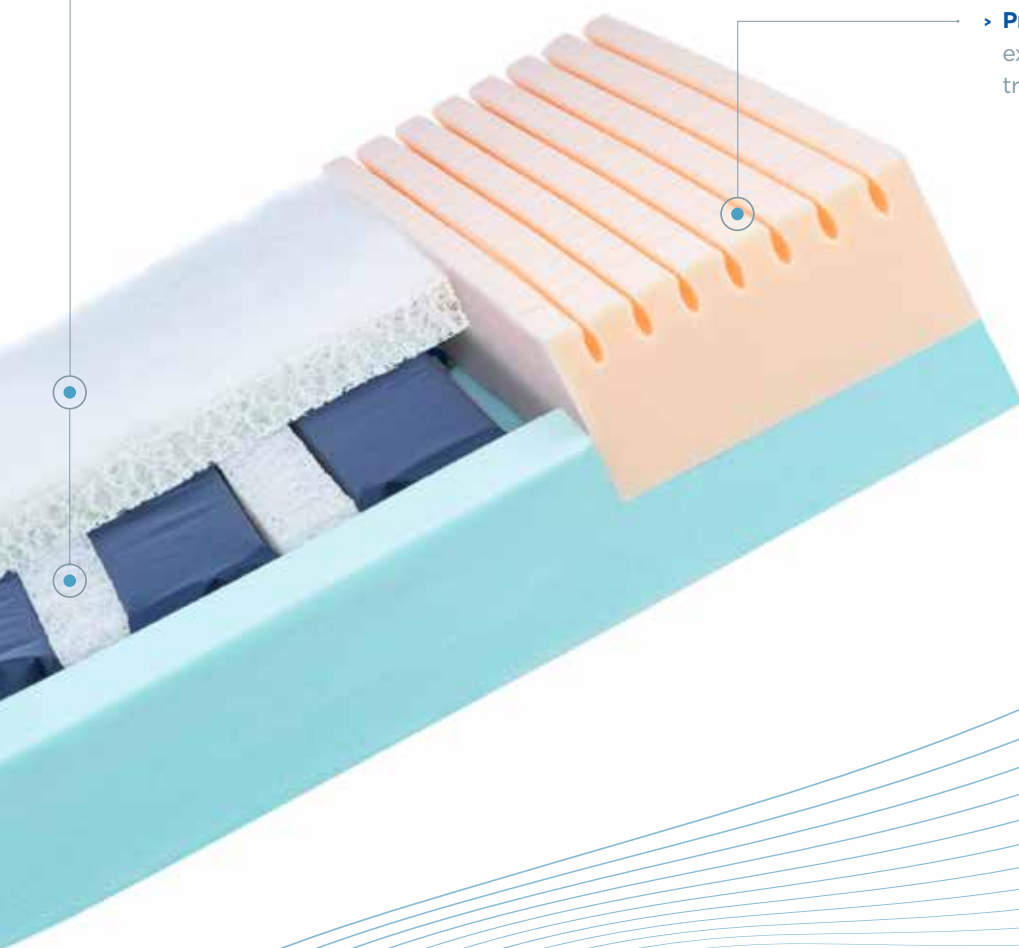

Brukarens komfort



> Ultra-mjukt och stödjande

lager för extra komfort och stabilitet.



> 230 kg brukarvikt

ger tydligt support.

Avändarvänlig Effektiv Underhåll

Kostnadseffektiviteten och de kliniska fördelarna med hybridmadrasser erkänns alltmer. Den modulära designen och komponenterna i InvaSoft™ Hybrid är alla utbytbara vilket maximerar produktens livslängd, minskar kostnader och minimera miljöpåverkan.



Användarvänlig

Lätt att använda, ingen komplicerad installation är nödvändig.

Lätt att rengöra, vilket garanterar en snabb rotation mellan patienter.

Lätt att underhålla, huvudkomponenter kan enkelt bytas ut utan behovet av specialverktyg eller kunskap.



Effektiv

Effektiv och oberoende testad gällande **omfördelningen av trycket**.

Effektiv och oberoende testad gällande **minskning av skjuvning och friktion**.

Effektiv och oberoende testad gällande **hantering av mikroklimat**.



Underhåll

Inget förebyggande underhåll nödvändig.

Ingen elektrisk pump behövs och bidrar därför till ett miljövänligt system med ett positivt koldioxidavtryck.



Modulär design betyder att huvudkomponenter kan individuellt ersättas.

Kostnadseffektivitet

Kliniska fördelar

Enkel lösning



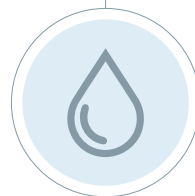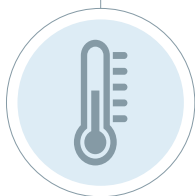

Oberoende testad


InvaSoft™ Hybrid har genomgått rigorösa testningar via Berlin Cert, en oberoende testanläggning med specifika expertkunskaper av madrasser. De tester som utfördes jämförde InvaSoft™ Hybrid med tre ledande hybrid madrasser inom områdena tryck, friktion och hantering av mikroklimat.

Klinisk Excellens

InvaSoft™ Hybrid visade sig ha överlägsen prestanda i temperatur och fuktighetshantering - överträffar alla konkurrenskraftiga hybrid madrasser.

TEMPERATUR

FUKTIGHET

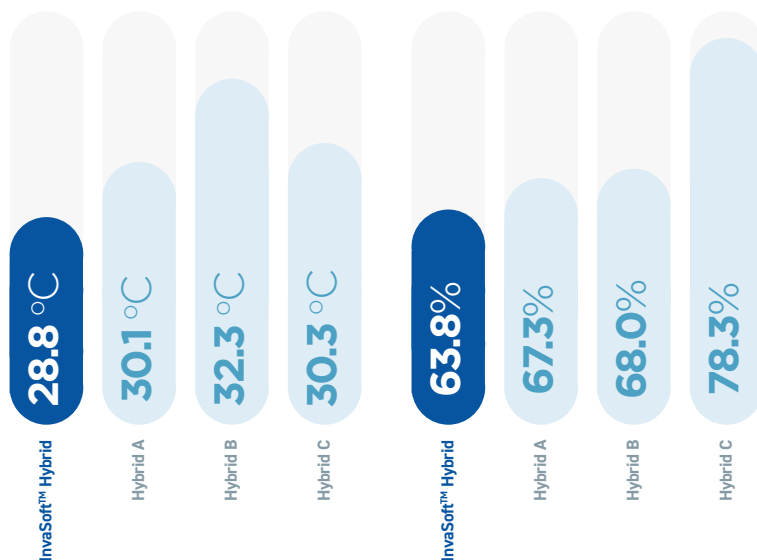

*Jämförande tester med tre ledande hybrid madrasser.


Teknisk data ▼

För mer information om den här produkten, inklusive bruksanvisningen, besök vår webbplats: www.invacare.se



Bredd ▼

83,85,88 cm

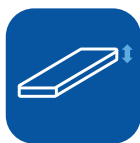

Höjd ▼

17 cm



Längd ▼

200, 210 cm



Vikt ▼

18 kg



Max brukarvikt ▼

230 kg



Tvätttemperatur ▼

95 °C

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®