

Raizer® II

Sedia rialzante



Solleva una persona caduta in soli 30 secondi

Una soluzione sicura e rispettosa della dignità della persona,
gestibile da un solo operatore




Sicurezza e comfort con Raizer II

Raizer II è una sedia di sollevamento mobile a batteria che consente di riportare una persona caduta dal pavimento a una posizione quasi eretta in soli 20–30 secondi.

Raizer è facile da assemblare e utilizzare anche da parte di un solo operatore e non richiede sforzi fisici, se non il semplice supporto di una mano durante il sollevamento.

Il design di Raizer è stato studiato per rendere l'assemblaggio e l'utilizzo semplici e intuitivi, garantendo al contempo una pulizia facile e rapida.

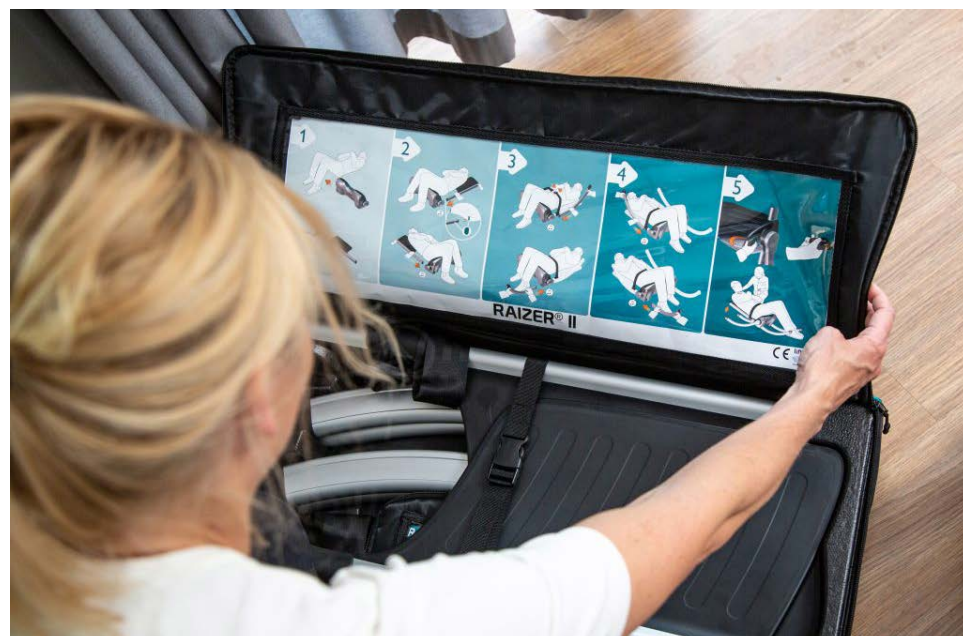

Fino a 80 sollevamenti con una singola carica

Fino a 80 sollevamenti con una sola carica. Bastano 10–15 minuti di ricarica per un ulteriore sollevamento.



4 gambe identiche e 2 schienali identici

Assemblaggio semplice: tutti i componenti sono intercambiabili, per garantire ogni volta un montaggio corretto.




> **Tutte le superfici sono progettate** per essere facilmente pulibili e disinfettabili

> Se necessario, è **possibile applicare cinture di contenimento** aggiuntive per aumentare la stabilità della persona durante il sollevamento.

> **Indicatori LED** e segnali acustici intuitivi per un assemblaggio corretto.

> Il **telecomando** è alloggiato sull'unità di seduta e fissato in modo sicuro.

> Per una **maggiore igiene**, sono disponibili coperture monouso come accessorio opzionale

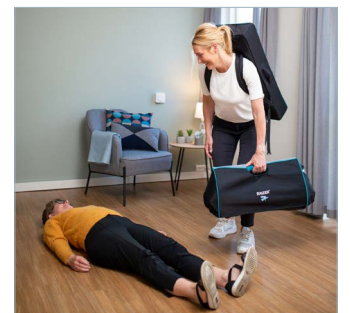

Fase 1 – Posizionare l'unità di seduta accanto alla persona caduta.



Fase 2 – Montare le gambe e lo schienale attorno alla persona



Fase 3 – Mettere in sicurezza la persona e avviare il sollevamento



Fase 4 – La persona raggiunge una posizione quasi eretta e viene trasferita sulla sedia

Scheda tecnica ▼



Portata di sollevamento ▼

Max. 150kg



Tempo di sollevamento ▼

20-30 secondi



Peso ▼

Seduta: 8.5kg
Gambe e
schienale: 4.5kg
Totale: 13kg



Numero di sollevamenti possibili quando la carica è completa ▼

40 con carico di peso massimo.
Circa 80 con carico di peso medio



Tempo di ricarica ▼

Fino a 6 ore

0445 380059
italia@dhcare.com
www.dhcare.it

DHCare Italia S.r.l.
Via Marco Corner, 19
36016 Thiene (VI)

