



Confidence in posture solutions

Azalea[®] Minor



La silla de posicionamiento diseñada para adolescentes o usuarios de talla pequeña.



La **Rea Azalea Minor** ha sido concebida para usuarios que necesitan una anchura de asiento reducida (340 mm. hasta 440 mm.) y una profundidad de asiento inferior a la **Azalea** estándar (380 mm. hasta 450 mm.). Desarrollada a partir del modelo **Rea Azalea**, la **Minor** incorpora como estándar un dispositivo de basculación de asiento con transferencia de peso (hasta 25°) y una reclinación del respaldo de 30°. Estos dos movimientos se pueden regular con facilidad de forma manual o eléctrica.

Las claves del DSS (Dual Stability System) : compensación ergonómica y puntos de fijación altos

Al estar situados en posición alta y cerca de las articulaciones de la cadera y de la rodilla, los puntos de fijación de los reposapiernas y del respaldo de la **Azalea** contribuyen a minimizar las presiones y fricciones para garantizar un correcto posicionamiento y limitar el riesgo de escaras.

Basculación de asiento con sistema DSS (Dual Stability System)

Al bascular el asiento, el centro de gravedad se desplaza para que la **Rea Azalea** pueda conservar su estabilidad y sus buenos resultados de conducción. Además, al modificar el ángulo del respaldo, el reposacabeza y los soportes de tronco se mantienen siempre a la misma altura para un confort óptimo.



Características y opciones



Reposapiernas

Ajustables en ángulo de 0° a 80° mediante palanca posicionadora (opcional). Con sistema de compensación ergonómica.



Cojín de respaldo Laguna

Anchura de asiento 34 cm. Cojín de respaldo anatómico, con tapizado Dartex.



Chasis más corto


Chasis más corto de 30 mm, profundidad de asiento y altura de respaldo reducidas con respecto al modelo estándar.

Datos Técnicos ¹

Para más información previa a la compra de este producto, incluyendo el manual de usuario, puede consultar nuestra web www.invacare.es

	Ancho de asiento	Profundidad asiento	Altura asiento	Altura respaldo	Altura reposabrazos	Regulación de los reposapiés	Ángulo de asiento	Ángulo respaldo
Rea Azalea Minor	340 - 440 mm	380 - 450 mm	400/450 mm	550 - 650 mm	240 - 360 mm	330 - 500 mm	-1° a +20° (22/24") -1° a +25° (16")	0° - 30°
	Ancho total	Alto total	Largo total	Peso total	Peso máximo del usuario	Peso de transporte	Prueba de choque	
Rea Azalea Minor	SW ² +260 mm (24") SW ² +220 mm (12") SW ² +290 mm (24")+freno tambor	900 - 1250 mm	900 - 970 mm	28 kg	Max 75 kg	14,5 kg	Prueba de choque ISO 7176-19	

Color chasis

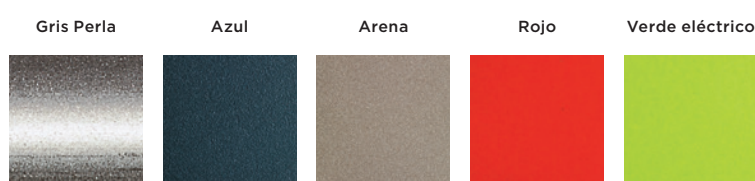

Color tapizado



1. Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, corresponden a una configuración estándar y son sujetas a cambio. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.
2. SW=Ancho de asiento