

Soft Tilt™ 2.0



Innovativ trykaflastning og
repositionering



Yes, you can.®

Soft Tilt er et innovativt system, designet med to længdegående vinger/sider koblet til et elevationssystem, der sikrer, at liggefladen og den overliggende madras kan vinkles fra 0 og op til 80 grader i breddeaksen.

Soft Tilt kan monteres på *Invacare Nordbed* og **SB 755** plejesengene samt **SB 910** hospitalssenge.

- ▶ Kontinuerlig automatisk trykaflastning
- ▶ Effektiv hjælp til forflytning og håndtering af sengeliggende borgere
- ▶ Tryghed og ro for borgerne.
Ud over fordelene for borgeren medvirker **Soft Tilt** til at skabe:
 - Optimalt arbejdsmiljø
 - Bedre anvendelse af personaleressourcer



Automatisk og manuel trykaflastning og forflytning

Soft Tilt består af to længdegående vinger/sider, som kan vinkles og som monteres på plejesengens liggeflade under madrassen. Vinklingen af siderne foregår enten manuelt eller automatisk. I forbindelse med forflytninger kan **Soft Tilt** anvendes manuelt i intervallet 0° - 80° ved hjælp af en håndbetjening. Ved behov for automatisk og kontinuerlig trykaflastning, anvendes en programmerbar kontrolboks. Kontrolboksen kan programmeres til at tilte borgeren fra side til side i intervallet 0° - 40°.

Optimering af arbejdsmiljøet

For plejepersonaler, som arbejder alene hos borgeren, er **Soft Tilt** et ideelt redskab. Ved hjælp af håndbetjeningen kan siderne manuelt eleveres op til 80°. Den manuelle funktion letter arbejdet i forbindelse med sejlplægning, brug af glidestykker og personlig pleje. **Soft Tilt** fungerer også som effektiv hjælp ved udstigning af sengen til stående position.

Komfort og sansestimulering

Soft Tilt tilbyder, med en automatisk, stille og rolig positionering, borgeren en behagelig og uforstyrret nattesøvn. Denne komfortable sansestimulering giver ro og tryghed og forbedrer søvnkvaliteten markant for borgere, der ellers er urolige i nattetimerne.



Unikke egenskaber og fordele




◀ Komfortabel, automatisk redistribuering af tryk

Når **Soft Tilt** er indstillet til automatisk funktion, eleveres den ene side en anelse først. Når den anden side har nået den endelige position (max 40°), sænkes den første side til vandret igen. Således oplever borgeren et trygt og behageligt positionsskift.

▲ Følger plejesengen

Soft Tilt monteres enkelt på plejesengen og følger liggefladens bevægelser med henblik på at skabe en komfortabel position for borgeren samt understøtte udstigning af sengen.

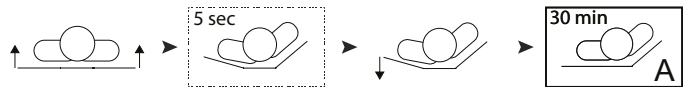

◀ Programmerbar kontrolboks

Soft Tilt leveres med en kontrolboks med en forprogrammeret indstilling (auto) samt mulighed for yderligere to programmeringer. De indstillede programmer aktiveres ved et tryk på en enkelt tast.

▲ Manuel funktion

Når **Soft Tilt** anvendes manuelt, kan siderne vinkles op til 80°. Denne funktion anvendes i forbindelse med pleje- og forflytningsopgaver.



▲ Sansestimulering

Soft Tilt kan programmeres til at vippe liggefladen stille fra side til side. Denne "kramme"/"vugge" funktion skaber tryghed og ro for borgeren.

▲ Intuitiv håndbetjening

Den intuitive og enkle håndbetjening bruges, når **Soft Tilt** anvendes manuelt.

▲ Betræk

Soft Tilt leveres med betræk med elastiske stropper til at holde madrassen på plads. Betrækket kan maskinvaskes.

Invacare senge - kompatible med **Soft Tilt 2.0**



▶ Invacare® **SB 755**



▶ Invacare® **NordBed Optimo**
▶ Invacare® **NordBed Ultra**



▶ Invacare® **SB 910**

Tekniske data ▼

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.



Max vinkel ved manuel anvendelse ▼

Soft Tilt 2.0

80°



Max vinkel ved automatisk anvendelse ▼

40°



Tidsinterval ved automatisk anvendelse ▼

0 - 180 minutter



Max brugervægt ▼

165 kg /
SWL 185 kg ¹
135 kg /
SWL 180 kg ²



Tungeste del af produktet ▼

18 kg



Betræk ▼

80°

¹ Nordbed og SB 755

² SB 910

Stelfarve ▼



Hvid

NB: **Soft Tilt** må ikke anvendes af patienter under 12 år eller patienter med kropsstørrelse ækvivalent med en 12 år gammel eller mindre. **Soft Tilt** må alene anvendes i kombination med **Nordbed Optimo 90**, **NordBed Ultra**, **SB 755** og **SB 910**.

Soft Tilt produceres af Careturner A/S på vegne af Invacare. Testet i henhold til IEC 60601-2-52

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37,
2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.®