



Dolomite | ***Symphony***

Ekstra let design og mange
tilpasningsmuligheder



Nogle gange kan det være nødvendigt med en ekstra let rollator, for eksempel til de brugere, som løfter deres rollator, de som er svage, eller de som kan have problemer med at trække vejret selv ved meget lidt aktivitet. *Dolomite **Symphony*** har et rustfrit og elegant aluminiumsstel, med en totalvægt på kun 6,7 kg.

Dette design resulterer i en speciel, tilpasningsvenlig rollator, der passer godt både inde og udendørs brug.



Plads til fødderne

Der er altid rigtig god plads til fødderne, når man går med en *Dolomite* rollator. Det gør det lettere at nå frem og fx åbne en dør. De bageste hjulgafler er afglattet for at beskytte, ankler og sko. Sædet er med skridsikkert mønster, afrundet bagkant og god plads, så brugeren kan sidde sikkert og komfortabelt. Husk at slå sædet op når du går for at give et bedre gangmønster.

Brugervenlige bremses

Lange bremsehåndtag og bremseklodser giver mulighed for enkelt at bremse selv med svage hænder. Kort afstand mellem greb og parkeringsbremse reducerer risikoen for at miste balancen. Forstærket bremsekabel og bremseklodser i rustfrit stål.

Let aluminiumsstel

Det lette stel sørger for, at rollatoren holder en lav vægt, hvilket gør den nemmere at løfte og transportere. De rustfrie dele sikrer god holdbarhed i al slags vejr. **Symphony's** enkle design gør rollatoren yderst rengøringsvenlig.

Egenskaber og tilbehør



Bakke

Produceret i hård plast. Med fire stabiliserende gummistøtter under bakken sikres stabiliteten.



Stokkeholder

Gør det nemt at have stokken med rollatoren, uden at den kommer i vejen.



Rygstrop

Rygstroppen giver en tryk og behagelig lændestøtte, kan evt. forsynes med blød og komfortabel polstring.



Trædepedal

Gør det lettere for brugeren at komme op over kantsten og andre lignende små forhindringer.



Løsthængende taske

Monteres under sædet. Giver ekstra plads, når kurven er fyldt. Beskytter dine ejendele mod regn og nysgerrige blikke.



Enhåndsbremse

Begge bremses aktiveres med én hånd.



Bremseforstærker

Giver ekstra bremsestyrke til svage hænder.



Slæbebremse

En sikkerhed hvis brugeren skubber asymmetrisk, eller rollatoren kører hurtigt.



HP-greb sammen med Adapt håndgreb

HP-grebet kan vinkelstilles. Vælges i højre eller venstre side med max. 15 cm interval.




Skrue i stedet for håndskruer

Udskift fingerskruen med en skrue, hvis man skubbehøjden skal være stationær.



Iltflaskeholder

Rollatorens lette vægt kan bruges til at kompensere for den tunge vægt fra iltflasken.

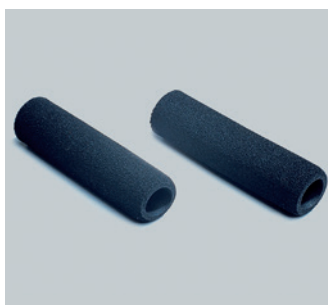

Bløde greb

De bløde greb er et rart alternativ til de anatomiske greb.



Hjulafskærmning

Beskytter tøj og stænk fra hjulet, hvis man kører udendørs.



Tværgreb

Tværgreb kan monteres på flere af rollatorerne. Tværgrebet giver et justeringsinterval på 17 cm målt fra laveste skubbehøjde.



Kurv

Praktisk kurv med håndtag til transport af mindre ejendele. Der er forskellige kurve til forskellige størrelser rollatorer. Max vægt 7 kg.

Tekniske data

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website: <http://www.invacare.dk>

	Totalbredde	Dybde	Afstand mellem hjul	Højde interval	Sædehøjde	Afstand mellem håndtag	Hjuldiameter
Symphony 450	600 mm	620 mm	460 mm	640-790 mm	480 mm	420 mm	200 mm
Symphony 520	600 mm	645 mm	460 mm	705-850 mm	540 mm	420 mm	200 mm
Symphony 600	600 mm	710 mm	460 mm	785-935 mm	625 mm	420 mm	200 mm

	Vægt	Max brugervægt
Symphony 450	6.7 kg	100 kg
Symphony 520	6.8 kg	100 kg
Symphony 600	7.0 kg	100 kg

Farve

Sølvgrå



Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Danmark

INVACARE
Yes, you can.®

