



Simpelweg mobiel.

scalamobil[®] scalacombi[®]

trappenklimmer



Eenvoudig en veilig
trappen op en af



*“Eindelijk kunnen we
overal heen met de
rolstoel”*

Eindelijk weer zonder obtakels - dankzij scalamobil en scalacombi

Eenvoudig en veilig traplopen - duizenden keren bewezen

Elke stap wordt een obstakel wanneer u door ziekte of invaliditeit niet meer zelf trap kan lopen: thuis, bij de dokter, in openbare gebouwen of het bezoeken van vrienden en familieleden. Met de trappenklimmers van Alber - scalamobil en scalacombi - worden onbegaanbare trappen toegankelijk.

Een traplif is overbodig

De trappenklimmers zijn te verdelen in 2 types: een trappenklimmer met geïntegreerde zitting (model S34, S36, S39) of een trappenklimmer waar een rolstoel aan bevestigd wordt (model S35, S38).



En zo werkt het....

Twee paar elektrisch aangedreven wielen zetten continu de door ene stap na de andere - omhoog of omlaag. Dit zorgt voor een vlotte en betrouwbare trappenklimmer. Dit systeem is door Alber gepatenteerd. Tijdens het traplopen stoppen vier noodremmen scalamobil en scalacombi automatisch op elke traptrede. De begeleider kiest de looprichting en snelheid. Tijdens het traplopen dient de begeleider de trappenklimmer alleen in balans te houden, de rest doet het systeem zelf.



De productvoordelen in een oogopslag:

- ook te gebruiken op smalle en wenteltrappen; binnen- en buitenshuis
- werkt bij elk type trapbekleding; hout, steen, metaal of tapijt
- beschadigt de trapbekleding niet
- ergobalans handgrepen die zorgen voor een veilige bediening met minimale inspanning
- tot 300 treden met een volle accu
- met geïntegreerde beveiligings sensoren



“Veilig en comfortabel op elke trap - dat voegt kwaliteit toe aan je leven.”


scalamobil® model S35, S38

Trappen op en af in uw eigen rolstoel

De scalamobil kan gebruikt worden met de meeste rolstoelen. Het grote voordeel: u kunt de trap beklimmen terwijl u in uw eigen rolstoel blijft zitten.

1) Uw rolstoel krijgt een kleine bevestigingsbracket waar de scalamobil aan bevestigd wordt. De bracket veroorzaakt geen beperkingen in bijvoorbeeld het vouwmechanisme of de instellingen van uw rolstoel.

2) De scalamobil wordt moeiteloos met een paar korte handelingen in de klemmen aan de rolstoel vastgezet en beveiligd.

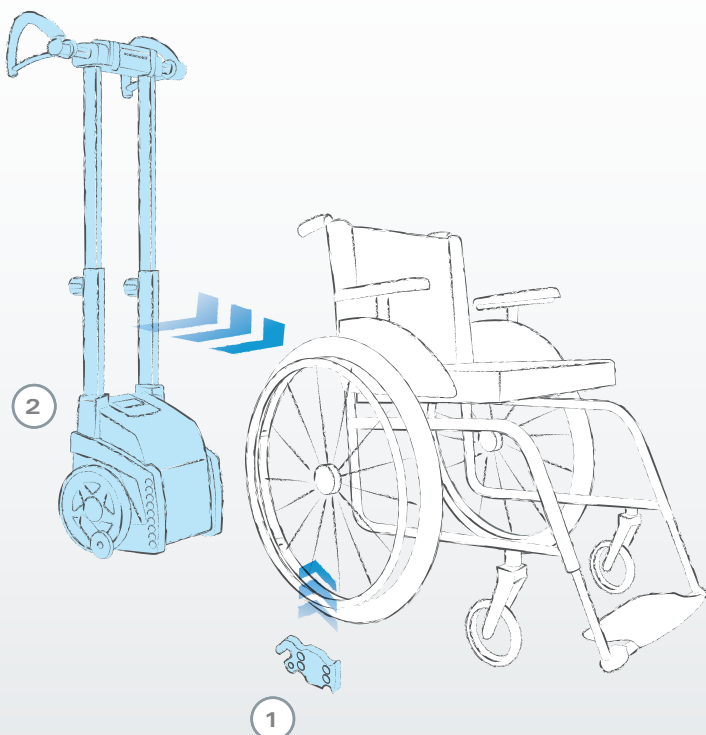


Met de universele adapter scalaport kunt u de scalamobil gebruiken met verschillende rolstoelen zonder dat er een speciale bracket nodig is. Uitermate handig voor vervoersdiensten en in openbare gebouwen.



Scalacombi® en Scalamobil®: model S34, S36, S39

De trappenklimmer met geïntegreerde zitting

Heeft u hulp nodig met traplopen, echter niet perse een rolstoel? Of is uw eigen rolstoel te groot voor de trap? De trappenklimmer scalacombi / scalamobil brengt u moeiteloos trap af en trap op. De compacte afmetingen en de bestuurbare voorwielen maken de scalacombi zeer wendbaar. Zo is de scalacombi zelfs met gemak te gebruiken in kleine ruimtes en op een smalle trap. Wanneer u de scalacombi niet nodig heeft kan deze gemakkelijk worden opgevouwen om ruimte te besparen:

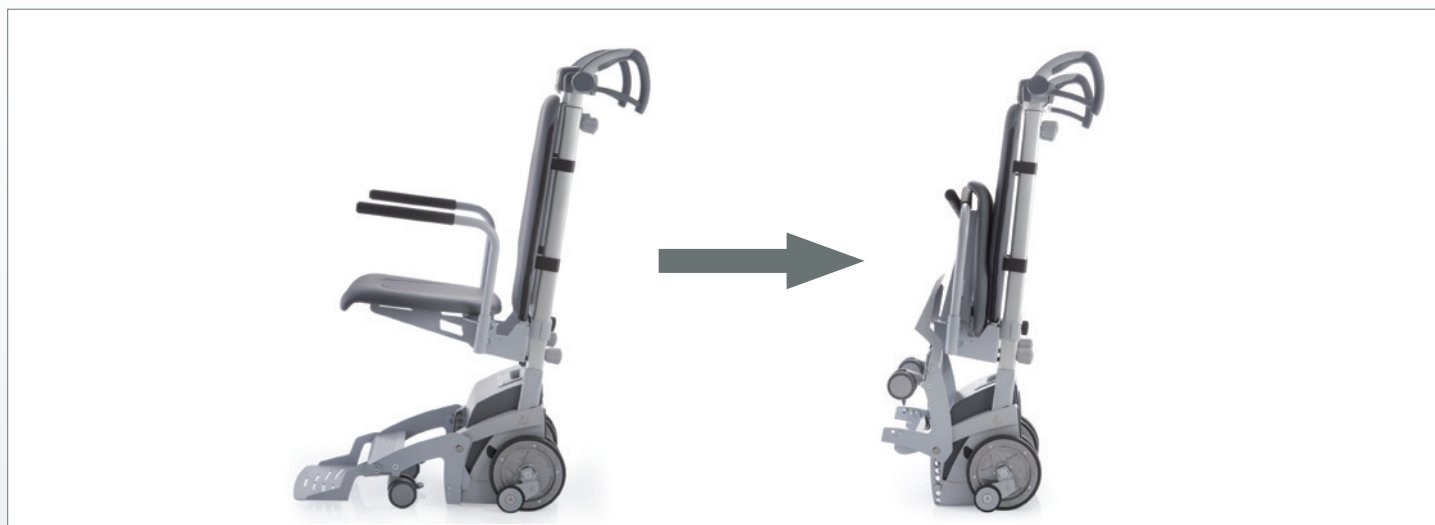

scalamobil en scalacombi zijn ook te verkrijgen in een speciale uitvoering voor zeer hoge traptredes (tot 25 cm). Voor alle versies is er een breed scala aan accessoires beschikbaar (bv. gordels, hoofdsteunen e.d.).



scalamobil en scalacombi - grote voordelen

Intelligent en veilig

Maximale veiligheid en comfort bij het traplopen, dankzij intelligente elektronica: scalamobil en scalacombi kunnen ingesteld worden op de specifieke kenmerken van de trap in huis en beklimmen hierdoor bijzonder soepel en comfortabel uw trap.

Gebruiksvriendelijk

Dankzij uitstekende ergonomie zitten alle bedieningen precies op de juiste plaats en ligt de trappenklimber perfect in de hand. Hierdoor ziet en voelt u de meer dan 25 jaar ervaring in het ontwikkelen van de trappenklimber door Alber.

Veelzijdig

De scalamobil en scalacombi passen zich aan u aan - niet andersom. De handvatten zijn in hoogte en breedte verstelbaar en hiermee optimaal aan te passen aan elke begeleider en trap.



Ergobalans handgrepen: non-slip en handige vorm



Comfort pad: beschermt uw dijbeen van het stoten tegen het bedieningspaneel



Duidelijke display: alle functies in één oogopslag



*"Ook onderweg
kunnen we nu elke trap
beklimmen"*

Handig voor op reis ...

Heeft u vragen of wilt u een
vrijblijvende en gratis demonstratie?
Bel ons op: 0318 69 57 57



Scalamobil en scalacombi kunnen overal worden gebruikt. In een mum van tijd kunt u de trappenklimber uit elkaar halen waarna er 3 compacte gedeeltes overblijven, hierdoor is het systeem ook gemakkelijk te vervoeren in kleine(re) kofferbakken.

De, met een handvat uitneembare, batterij weegt maar 3 kg en heeft na één keer opladen genoeg energie voor maximaal 300 traptreden.

Veiligheid is altijd aanwezig

Veiligheid is onze topprioriteit. Om deze reden, worden onze producten voortdurend getest door verschillende instellingen. Bijvoorbeeld door de TÜV, deze test de veiligheid van het product volgens de richtlijnen voor medische producten. Scalamobil en scalacombi voldoen aan de EG-richtlijn 93/42/EEG voor medische producten. Gecertificeerd volgens de normen: ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 voor medische hulpmiddelen.



MADE IN GERMANY

Gemaakt in Duitsland door de leider op het gebied van elektrische ondersteuning.

scalamobil en scalacombi in een oogopslag.

Trappenklimbers

Omschrijving

scalacombi eco S34

Aantrekkelijk
geprijsde
trappenklimber
met geïntegreerde
zitting



scalacombi S36

S 35 met
geïntegreerde
zitting



scalamobil fly S39

S 36 voor hogere
treden



scalamobil S35

Geavanceerde
trappenklimber
voor
rolstoelbevestiging



scalamobil S38

S35 voor hogere
treden



Met geïntegreerde zitting	✓	✓	✓		
Voor rolstoel bevestiging				✓	✓
IQ functie / instelbaar		✓	✓	✓	✓
ErgoBalance handvatten		✓	✓	✓	✓
Overzichtelijk display		✓	✓	✓	✓
2 paar wielen voor het perfect nemen van trappen		✓	✓	✓	✓
Uitneembare accu		✓	✓	✓	✓
Max. hoogte van trede	20 cm	20 cm	25 cm	20 cm	25 cm
Max. diepte van trede	14 cm	11 cm	13 cm	11 cm	13 cm
Max. Klimsnelheid (treden per minuut)	12	6 - 19	6 - 19	6 - 19	6 - 19
Max. Gebruikersgewicht	120 kg	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg
Max. toegestane totaal gewicht	160 kg	180 kg	180 kg	180 kg	180 kg



"Heeft u nog vragen over onze trappenklimbers?
Neem gerust contact met ons op – wij zijn er om u te helpen!"



Leverancier van Alber producten in België:
Invacare N.V.
Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
Email: belgium@invacare.com
www.invacare.be