



# INVACARE SCOOTER

So schön kann mobil sein



Yes, you can.®

# STEIGEN SIE EINFACH UM: AUF EINEN SCOOTER!

Leicht zu bedienen, leise und umweltfreundlich – Scooter sind ideale Fortbewegungsmittel und liegen voll im Trend rund um die wachsende Elektro-Mobilität. Ob zum Einkaufen oder für den Abstecher in den Park - Mit Invacare Scootern gestalten Sie Ihr Leben aktiv, modern und vor allem mobil. Entscheiden Sie selbst, welches Elektro-Mobil am besten zu Ihnen passt und werden Sie so richtig unabhängig.



## INHALTSÜBERSICHT

**Entscheidungshilfe & Technische Daten** ..... S. 4

*Invacare® Comet®-Familie* ..... S. 6

**Comet® PRO**



**Comet® ULTRA**



*Invacare® Orion®-Familie* ..... S. 9

**Orion® PRO**



**Orion® METRO**



*Invacare® Leo®* ..... S. 13



*Invacare® Colibri®* ..... S. 14



**Ausstattung, Zubehör & Farben** ..... S. 16

**Tipps & Tricks** ..... S. 24

# DER RICHTIGE SCOOTER AUF EINEN BLICK

Reichweite in km



## ENTSCHEIDUNGSHILFE

So finden Sie den Scooter, der am besten zu Ihnen passt:

	Invacare <sup>®</sup> Comet <sup>®</sup> PRO	Invacare <sup>®</sup> Comet <sup>®</sup> ULTRA	Invacare <sup>®</sup> Orion <sup>®</sup> PRO	Invacare <sup>®</sup> Orion <sup>®</sup> METRO	Invacare <sup>®</sup> Leo <sup>®</sup>	Invacare <sup>®</sup> Colibri <sup>®</sup>
Höchstgeschwindigkeit	10 <sup>1</sup> / 15 km/h	10 km/h	10 km/h	6 / 10 <sup>1</sup> km/h	6 / 8 <sup>1</sup> km/h	6 km/h
Max. Reichweite <sup>2</sup>	55 km	49 km	52 km	43 km	34 km	16 km
Fahrzeuggewicht inkl. Batterien	136 kg	148 kg	136 kg	110 kg	83 kg	44-49 kg
Gesamtbreite <sup>3</sup>	665 - 685 mm	665 - 685 mm	650 mm	660 mm	590 mm	505 mm
Länge	1450 mm	1450 mm	1320 mm	1270 mm	1220 mm	1010 mm
Max. überwindbare Hindernishöhe	100 mm	100 mm	100 mm	80 mm	60 mm	45 mm
Max. Nutzergewicht	Bis 160 kg	Bis 220 kg	Bis 160 kg	Bis 136 kg	Bis 136 kg	Bis 136 kg
<b>Einsatzbereich</b>						
Kurze Wegstrecken, z.B. Einkaufsfahrten	-	-	-	●	●	●
Längere Ausfahrten, z.B. ins Grüne	●	●	●	-	-	-
Anspruchsvolles Gelände (Unebenheiten, steigend, etc.)	●	●	●	-	-	-
Für Transport zerlegbar	-	-	-	-	●	●

1: Nur in der Schweiz erhältlich!

2: Maximale Reichweite abhängig von tatsächlichem Fahrverhalten bzw. Modell

3: Bereich der Armlehnenverstellung

Erleben Sie Scooter-Fahren mit Premium-Charakter, und vor allem mit viel Spaß: Genießen Sie das außergewöhnliche, leistungsstarke Fahrverhalten der *Invacare Comet*-Elektromobile, verpackt in schönem, modernen Design.

Invacare *Comet Pro* ist der Scooter der Wahl für alle, die Wert auf Stil und Leistung legen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h zählt der *Comet Pro* zu den schnellsten Invacare Scootern.

Der *Comet Ultra* bietet besonders großen, kräftigeren Menschen ein sicheres und leistungsstarkes Fahrerlebnis - ohne Kompromisse an Stil oder Funktionalität. Der *Comet Ultra* bringt Sie schnell und besonders komfortabel an Ihr Ziel.

## Kraft und Leistung für Anspruchsvolle

Sie haben einen erlesenen Geschmack und einen ausgeprägten Sinn für Ästhetik? Unser *Comet Pro* verwöhnt Sie zudem mit **luxuriösem Fahrkomfort**.

Genießen Sie ein Höchstmaß an Sicherheit, stilvoll verpackt im **elegantem Power-Paket** eines **Premium-Modells**.



Reichweite  
KM\*




Max. Nutzergewicht  
KG



Geschwindigkeit  
KM/H

### UNSER TIPP: Draufsetzen, los fahren!

Mit einem Scooter fahren Sie ganz einfach überall hin. Sie brauchen keinen Führerschein, aber ein Mindestalter von 15 Jahren. Und los geht's!

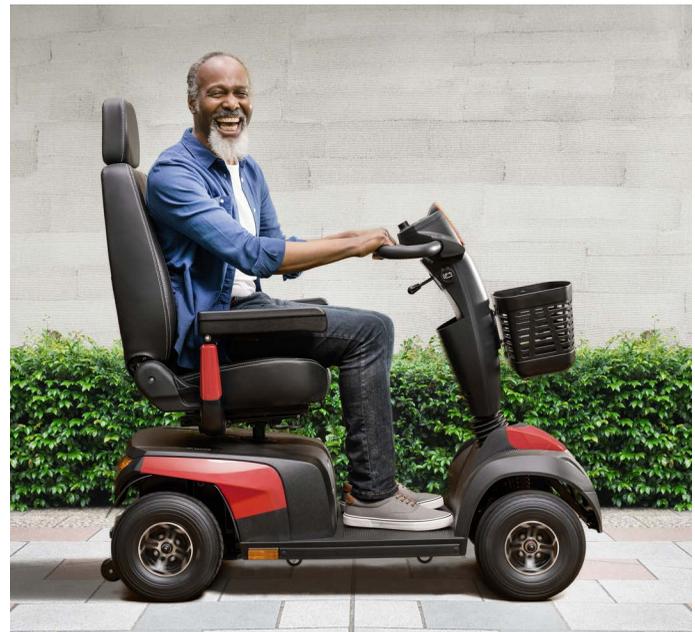

\*Maximale Reichweite abhängig von tatsächlichem Fahrverhalten

### Der Scooter für starke Typen

Sie gehen keine Kompromisse ein? Gut so! Unser **Comet Ultra** bietet Fahrern mit größerem Körperumfang **reichlich Platz, Unterstützung** und **Sicherheit**.

Hoher Fahrkomfort und Funktionalität inklusive. Wer diesem Kraftpaket vertraut, kommt ohne Umwege bequem von A nach B.



Reichweite  
KM\*



Max. Nutzergewicht  
KG



Geschwindigkeit  
KM/H



Bleiben Sie mobil und unabhängig! Mit einem *Invacare Orion* kommen Sie schnell und sicher überall hin, ob eben mal zum Einkaufen oder für die ausgedehnte Spazierfahrt.

### Für alle, die mehr wollen

Der ergonomisch aufgebaute **Orion Pro** ist leistungsstark und ermöglicht hohe Reichweiten. Obendrein werden Sie das einzigartige Fahrverhalten sowie seine Sicherheit und Zuverlässigkeit schätzen. Der **Orion Pro** ist mit einer höheren Batterieleistung, einer hochwertigen Federung und den großen 12 Zoll-Rädern ideal für alle geeignet, denen dieses Mehr an Leistung wichtig ist. Längeren Fahrten in die Stadt oder in den Park steht nichts mehr im Wege.



\*Maximale Reichweite abhängig von tatsächlichem Fahrverhalten

**Der ideale Partner, nicht nur für den Alltag**

Der *Invacare Orion Metro* wurde so konzipiert, dass er sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Scooter-Fahrern Freude macht. Er ist besonders wendig und lässt sich auch auf schmalen Wegen hervorragend lenken.

**Sicherheit ist Standard**

Alle *Orion*-Modelle sind mit einer hellen Lichtanlage ausgestattet. Eine elektronische Geschwindigkeitsdrosselung verlangsamt den Scooter in Kurven automatisch. So können Sie Ihren Scooter in allen Situationen sicher und bequem manövrieren. Außerdem verfügen die Scooter über einen zweistufigen Entriegelungshebel, der ein ungewolltes Losrollen verhindert. Diese Eigenschaften, kombiniert mit umfangreichen TÜV-Tests, gewährleisten die hohe Sicherheit der Invacare Scooter.

**UNSER TIPP:  
Scooter-Fahren liegt im Trend!**

Erstens sind die umweltfreundlichen Elektromobile praktisch und günstig im Unterhalt. Zweitens erinnern sie an die Designs und Farben der Automobil-Branche - so sind Sie top-aktuell unterwegs.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns gerne auf [www.invacarescooter.com](http://www.invacarescooter.com).



**Zuverlässig und leistungsstark - ideal für Abenteuerlustige**

Einkaufstouren in die Stadt, Ausflüge in den Park? Wer häufig längere Wegstrecken zurücklegt, kommt mit dem *Orion Pro* wirklich weit. Der Vorsprungsfaktor im Vergleich

zum Standard-Modell *Orion Metro*: komfortables Fahrwerk, leistungsstarke Batterien sowie ein Premium-Sitz - für alle, die mehr wollen!



Reichweite  
KM\*



Max. Nutzergewicht  
KG



Geschwindigkeit  
KM/H



\*Maximale Reichweite abhängig von tatsächlichem Fahrverhalten

**Einfach mobil sein**

Raus aus den vier Wänden und eine **kleine Runde** drehen. Um kurze Wege **sicher und bequem** zurückzulegen, steht Ihnen der **Orion Metro** stets zu

Diensten. Der **Invacare Orion** ist so wendig, dass Sie mit ihm ganz leicht durch enge Gassen und in Einkaufszentren fahren.



Reichweite  
KM\*



Max. Nutzergewicht  
KG



Geschwindigkeit  
KM/H

**Klein, kompakt und dennoch ein ganz Großer.**

Ein perfekter Einkaufsbegleiter: seine Stärken. Wenn Sie wollen, nehmen Sie ihn im Auto mit – einfach und ohne Werkzeug zerlegen und in fast jedem Kofferraum transportieren.



Reichweite  
KM\*



Max. Nutzergewicht  
KG



Geschwindigkeit  
KM/H



Variante  
ÖPNV

Erfüllt exakt die Vorgaben für die Mitnahme in Linienbussen des ÖPNV.



\*Maximale Reichweite abhängig von tatsächlichem Fahrverhalten



\*Maximale Reichweite abhängig von tatsächlichem Fahrverhalten

## Der City-Floh

Nehmen Sie ihn einfach mit! Mit dem *Invacare Colibri* fahren Sie überall dort, wo Autos nicht hinkommen, sogar im Supermarkt. Dieser Scooter ist der kleinste und leichteste Invacare Scooter, der schnell werkzeuglos zerlegt ist und sogar in

Kleinwägen transportiert werden kann. Der *Colibri* macht Sie auch zuhause mobil: Er ist so klein und wendig, dass er problemlos durch Zimmertüren fährt.



Reichweite  
KM\*



Max. Nutzergewicht  
KG



Geschwindigkeit  
KM/H



\*Maximale Reichweite abhängig von tatsächlichem Fahrverhalten

# SCOOTER AUSSTATTUNG

Ausstattung Elektromobile	Beschreibung	Invacare® <b>Comet</b> <sup>PRO</sup> 15 km/h	Invacare® <b>Comet</b> <sup>ULTRA</sup> 10 km/h	Invacare® <b>Orion</b> <sup>PRO</sup> 10 km/h	Invacare® <b>Orion</b> <sup>METRO</sup> 6 km/h	Invacare® <b>Leo</b> <sup>®</sup> 6 km/h	Invacare® <b>Colibri</b> <sup>®</sup> 6 km/h
Ablagefach	für Kleinigkeiten, wie z. B. Schlüssel, Geldbeutel, Handy	✓	✓	✓	✓		
Automatische Geschwindigkeitsreduktion	sorgt für sichere Fahrt in den Kurven	✓	✓	✓	✓		
LED-Display	leicht erhöhte Tasten, Tastenton und optische Bestätigung durch LED. Inkl. schräg gestellter Ladestandsanzeige, die auch bei Sonnenlicht gut erkennbar ist				✓	✓	✓
LCD-Display	übersichtlicher, heller Bildschirm mit Anzeige von Geschwindigkeit, Uhrzeit, Temperatur, Kilometerstand, Fehleranzeige, etc. Inkl. gut erkennbarer Ladestandsanzeige	✓	✓	✓			
Blinker	ein Piepton gibt an, dass der Blinker eingeschaltet ist, der Blinker schaltet nach 30 Sekunden automatisch ab	✓	✓	✓	✓	✓	
Bremslicht	hell leuchtendes Licht mit Signalwirkung	✓	✓	✓	✓	✓	
Doppel-Scheinwerfer	zwei Glühlampen sorgen für extra helles Licht	✓	✓	✓	✓	✓	
Einfacher Transport	ohne Werkzeug zerlegbar bzw. faltbar					✓	✓
Federung	für optimalen Fahrkomfort (Spezialfederung für <b>Comet</b> <sup>HD</sup> )	✓	✓	✓	✓		
Große Räder	für hohen Fahrkomfort und einfache Überwindung von Hindernissen	✓	✓	✓	✓		
Handbremse	zusätzliche Bremse	✓	✓	✓	✓		
Lenksäule einstellbar	stufenlos einstellbar für ideale, entspannte Sitzposition (beim <b>Colibri</b> <sup>®</sup> in Stufen)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reflektoren	zahlreiche Reflektoren sorgen für passive Beleuchtung und Sicherheit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherer Transport	Verzurrösen am Fahrwerksrahmen	✓	✓	✓	✓		
Polster-Sitz	mit Polsterung und angenehmem Sitzkomfort						✓
Standard-Sitz	mit Kopfstütze, einstellbar und drehbar, ergonomisch und komfortabel auch auf längeren Strecken				✓	✓	
Komfort-Sitz	mit Kopfstütze, stufen- und werkzeuglose Rückenwinkel-verstellung, Seitenhalt und Führung, einstellbar und drehbar	✓		✓			
Ultra-Sitz	extra großer Sitz mit besonders kräftiger Sitzaufnahme bietet genügend Platz und Unterstützung, einstellbar und drehbar		✓				
Stützräder	für kontrolliertes Überfahren von Bordsteinkanten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zweistufige Entkupplung	Antrieb kann nicht aus Versehen entkuppelt werden	✓	✓	✓	✓	✓	
ÖPNV Ausstattung (optional)	Feststellbremse, ÖPNV-Zulassung, ÖPNV-Kennzeichnung					✓	

\* Ausstattung je nach Land ggf. unterschiedlich



## MC-Style Box

Abschließbare Wertsachenbox für hinten, MC steht für Motorcycle und erinnert an die Box von einem Motorroller.



## Großer Transportkorb

Ideal für Ihren Einkauf: Der geräumige Korb ist sicher hinter dem Sitz angebracht - perfekt für Taschen oder den Schoßhund.



## Stockhalter

Wohin mit dem Gehstock? Einfach in den Stockhalter und losfahren.



## Komfort-Sitz

Der Komfort-Sitz ist mit einem schwarzem, strapazierfähigen Bezug in Lederoptik bezogen. Er verfügt über eine stufen- und werkzeuglose Rückenwinkelverstellung.



## Halter für Gehhilfen

So fährt auch Ihr Rollator mit: einfach zusammenklappen, an den Halter hängen und mit dem Gurt sichern.



## Elektrischer Sitzlifter

Sie sitzen lieber höher? Bedienen Sie den elektrischen Sitzlifter mit dem Kippschalter an der Lenksäule und fahren Sie nach oben, und nach unten.



## Volle Rundumsicht

Alles hinter sich lassen und dennoch den Überblick behalten: Mit einem zusätzlichen Rückspiegel erweitern Sie Ihr Sichtfeld nach hinten.



## Windschild

Flott unterwegs? Gegen den Fahrtwind empfehlen wir das praktische Windschild.

\*optionales Zubehör gegen Aufpreis (modellabhängig), Ausstattung je nach Land ggf. unterschiedlich



## Smartphone-Halter

Das Handy muss mit. Am sichersten in dieser Halterung - geeignet für die meisten gängigen Smartphones.



## Haltegurt mit Schnappverschluss

Der verstellbare Haltegurt hält Sie sicher auf dem Scooter und ist leicht zu öffnen.



## Regenschutz myBlanket

Optimaler Schutz vor Witterungseinflüssen. Als Sommer oder Winter Version erhältlich.

## Weiteres Zubehör

- Große Sitztasche
- Wasser- und schmutzabweisender Sitzbezug
- Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (Standard bei den 10/15 km/h Modellen)



## Faltbarer Getränkehalter

Dosen, Flaschen, Kaffeebecher - im Getränkehalter an der Lenksäule haben Sie Ihr Getränk stets in Griffweite. Wird er nicht gebraucht, einfach einklappen.



## Rammschutz

Sollten Sie trotz größter Vorsicht doch einmal anstoßen, schützen die soliden Stoßfänger Ihren Scooter vor Beschädigungen - für vorne und hinten erhältlich.

## Farbauswahl



Himmelsblau



Ahornrot



Silber



## Faltgarage

Schützt Ihren geparkten Scooter vor Schmutz & Staub.

## UNSER TIPP: Tolles Transportmittel

Mit einem Invacare Scooter kommen Sie nicht nur weiter, Sie können auch noch so einiges transportieren! Fragen Sie Ihren Händler nach Zubehör.



\*optionales Zubehör (modellabhängig) gegen Aufpreis, Ausstattung je nach Land ggf. unterschiedlich

# SERIENMÄSSIGES UND OPTIONALES ZUBEHÖR ELEKTROMOBILE

Zubehör	Beschreibung	Invacare® Comet <sup>PRO</sup> 10/15 km/h	Invacare® Comet <sup>ULTRA</sup> 10 km/h	Invacare® Orion <sup>PRO</sup> 10 km/h	Invacare® Orion <sup>METRO</sup> 6/10 km/h	Invacare® Leo <sup>+</sup> 6/8 km/h	Invacare® Colibri <sup>+</sup> 6 km/h
Batterieladegerät	für kurze Ladezeiten	●	●	●	●	●	●
Einkaufskorb, vorn	stabiler Korb für den kleinen Einkauf	●	●	●	●	●	●
Einkaufskorb, hinten	großer, stabiler Metallkorb für den Transport größerer Gegenstände			○	○	○	○
Wertsachenbox für hinten, abschließbar	verstaute Dinge trocken und sicher				○	○	
Sitztasche	mit Deckel zum Verstauen von Kleinigkeiten	○	○	○	○	○	
Spiegel, links	für Sicherheit im Straßenverkehr	●	●	●	●	●	
Spiegel, rechts	für Sicherheit im Straßenverkehr	●	●	●	○	○	
Stockhalter	zur Mitnahme von Gehstöcken oder Krücken	○	○	○	●	○	○
Halter für Rollator/ Gehgestell	zur Befestigung eines Gehgestells oder Rollators, inkl. Stockhalter	○	○	○	○	○	
Getränkehalter	der praktische Halter für ein Getränk	○	○	○	○		
Haltegurt	zur optimalen Positionierung im Sitz	○	○	○	○	○	
Windschild	schützt zuverlässig gegen Wind und Schmutz	○	○	○	○	○	
Smartphone-Halter		○	○	○	○		
Faltgarage	schützt den Scooter vor Schmutz & Staub	○	○	○	○	○	○
Sitzabdeckung	schützt den Sitz vor Nässe und Schmutz	○		○	○		
Sitzlifter, elektrisch	zur einfachen und schnellen Einstellung der Sitzhöhe ohne Werkzeug	○					
Sitzfederung	für extra sanfte Fahrt auf unebenen Wegen	○	○*	○	○	●/○	○
<b>Farben / Abdeckungen</b>							
Silber						●	
Saphirblau							●
<b>Farbangebot</b>	Ahornrot, Silber, Himmelsblau	●	●	●	●		●

● = serienmäßig    ○ = optional    \* = bis max. 160 kg Nutzergewicht

Farben und Modelle sind je nach Land ggf. unterschiedlich.

## 1. Wo dürfen Elektromobile fahren?



Überall dort, wo auch Fußgänger unterwegs sind, also in Fußgängerzonen, auf Gehwegen, in Parks, in Einkaufspassagen usw. Dabei ist Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben.

Selbstverständlich dürfen Elektromobile auch auf der Straße gefahren werden. Eine Helmpflicht besteht nicht.

## 2. Ist eine Versicherung nötig?



Scooter mit einer Geschwindigkeit bis max. 6 km/h müssen in Deutschland nicht versichert werden. Sie sind in der Regel über Ihre normale Haftpflichtversicherung abgesichert. Elektromobile mit einer Geschwindigkeit von über 6 km/h müssen versichert sein. Hierzu benötigen Sie ein Versicherungszeichen (wie beim Mofa), das Sie bei Ihrer Versicherung erhalten. Fragen Sie dazu auch Ihren Fachhändler und Ihre Versicherung.

## 3. Wo parke ich meinen Scooter?



Überall dort, wo auch Fahrräder abgestellt werden. Über eine längere Dauer steht er am besten überdacht und trocken.

## 4. Braucht der Scooter eine Garage?



Wenn Sie eine Garage haben, freut sich Ihr Scooter selbstverständlich darüber. Er kann aber auch im Freien abgestellt werden. Am besten geschützt mit einer Regenabdeckung, die Sie in unserem Zubehörprogramm finden.

## 5. Ist eine Probefahrt sinnvoll?



Wie beim Auto sollten Sie auf jeden Fall eine Probefahrt mit einem Elektromobil machen. Dabei erfahren Sie im wahrsten Sinne des Wortes selbst, wie einfach und bequem es ist, mit einem Scooter unterwegs zu sein. Am besten vereinbaren Sie eine Probefahrt bei Ihrem Sanitätsfachhändler. Den nächsten Händler finden Sie auch in unserer Händlersuche auf: [www.invacare.de](http://www.invacare.de)


## 6. Werden Scooter von der Krankenkasse bezuschusst?



Scooter können prinzipiell bei Bedarf von der Krankenkasse erstattet werden, dies gilt für die Standardmodelle ohne Sonderausstattung.

Diese Modelle verfügen über eine Hilfsmittelnummer und sind im Hilfsmittelverzeichnis gelistet. Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung als Hersteller von medizinischen Hilfsmitteln.

## 7. Wichtig: Pflege der Scooter-Batterien

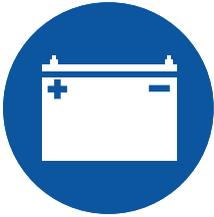

Der pflegliche Umgang mit den Scooter-Batterien erhöht die Lebensdauer ausdrücklich. Laden Sie die Batterien vor dem allerersten Gebrauch mindestens 18 Stunden lang. Die Batterien erreichen ihre volle Kapazität nach 10 bis 20 Ladezyklen. Am besten laden Sie die Batterien jeden Abend auf, auch dann, wenn Sie nur wenig mit dem Scooter gefahren sind – idealerweise über 12 Stunden. Ein ausgeglichener Fahrstil fördert höhere Reichweiten!

### Am besten selbst testen!

Sie werden sich auf einem Invacare Scooter von Anfang an nicht nur wohl, sondern ebenso sicher fühlen – und Ihre neue Freiheit genießen!

Wir wünschen Ihnen viel Freude und stets eine gute Fahrt mit unseren Invacare Scootern!

# WUNSCH- SCOOTER ENTDECKEN

QR-Code scannen oder unter  
[www.invacarescooter.com](http://www.invacarescooter.com)



**UNSER TIPP:  
Scooter Fahren macht Spaß**

Entdecken Sie unsere coolen  
Scooter und genießen Sie Ihre  
neue Unabhängigkeit!



[www.invacarescooter.com](http://www.invacarescooter.com)

**Invacare GmbH**  
Am Achener Hof 8  
88316 Isny  
Deutschland  
Telefon +49 7562 700-38  
kontakt@invacare.com  
www.invacare.de

**Invacare Austria GmbH**  
Herzog-Odilo-Straße 101  
5310 Mondsee  
Österreich  
Telefon +43 6232 553-50  
Fax +43 6232 553-54  
info-austria@invacare.com  
www.invacare.at

**Invacare AG**  
Neuhofweg 51  
4147 Aesch BL  
Schweiz  
Telefon +41 61 48770-80  
Fax +41 61 48770-81  
switzerland@invacare.com  
www.invacare.ch

© 2025 Invacare International Sàrl. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben entsprechen bei Drucklegung dem aktuellsten Stand. Technische Änderungen unserer Produkte behalten wir uns vor. Stand 04/2025 Art.-Nr. 1525597



**Yes, you can.**