


Softform[®] Excel

Drukverdelend matras

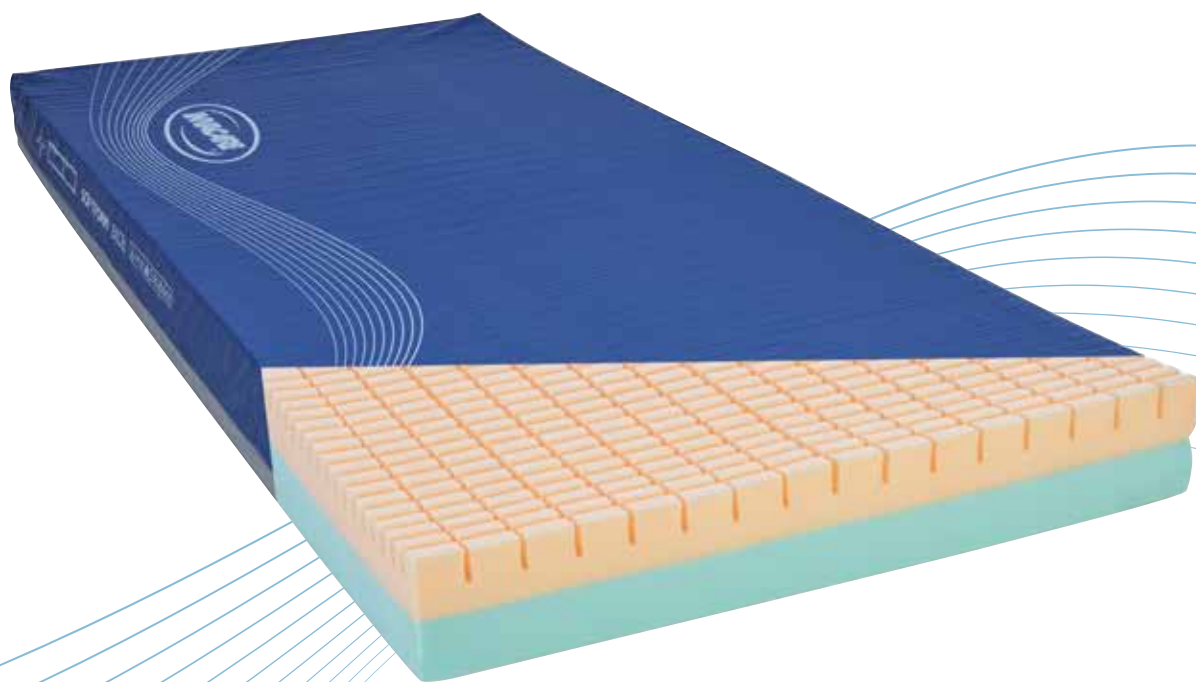

Yes, you can.[®]


Effectieve decubitus preventie

De Invacare Softform Excel biedt een hoge mate van comfort en is gemaakt van hoogwaardig schuim, dat een gelijkmatige gewichtsverdeling geeft voor meer comfort en drukverdeling. De robuuste schuimbasis voorkomt "bottoming" en het matras is geschikt voor diegenen die het risico lopen decubitus te ontwikkelen.

De robuuste basis is van een hoogwaardig schuim om substantiële ondersteuning te bieden.

De hoes biedt een uitstekende duurzaamheid en helpt bij het verminderen van schuif- en wrijvingskrachten. De hoes is voorzien van een polyurethaan (PU) coating die de matras beschermt bij gebruik van verstelbare bedbodems.

De bovenlaag van de Invacare Softform Excel is geprofileerd om het gewicht gelijkmatig te verdelen, meer comfort te geven en de drukverdeling te vergemakkelijken.

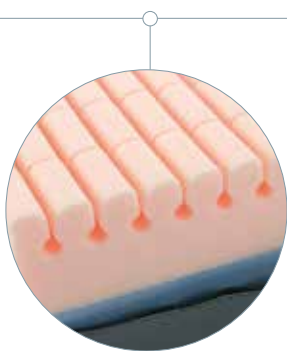

Sterke en duurzame constructie

› De Invacare Softform Excel is een **veel gemaakte keuze** van zorgprofessionals.



Rits aan drie zijden

› Zorgt voor een **makkelijke inspectie** van het matras.



Oriëntatie symbool

› Dit symbool waarborgt dat het matras op de **juiste wijze** in bed wordt gelegd.

Technische gegevens ▼

Kijk voor meer informatie over dit product, zoals de gebruiksaanwijzing, op www.invacare.nl.



Breedte ▼

Eénpersoons:
800, 855, 880,
900 mm



Hoogte ▼

152 mm



Lengte ▼

1950 mm



Gewicht ▼

10 kg



Gebruikers-
gewicht ▼

140 kg



Reinigings-
temperatuur ▼

95 °C



Baltic
Blue

Kleur

Geproduceerd volgens Europese Normen:
BS EN 597-1 Cig,
BS EN 597-2 Match.
Foam Interior:
BS 5852: 1990 Crib Source 5; Cover BS7175:
1989 Crib Source 5.

1. Essentiële verpleegkundige zorg is cruciaal bij decubitus preventie. Dit matras zal een positieve bijdrage leveren aan het resultaat van een decubitus preventief zorgplan. Onderwijs, klinische beoordeling en actie gerichte planning op basis van risicofactoren zijn cruciaal bij het voorkomen van decubitus. Diverse risicoschalen kunnen worden gebruikt als onderdeel van een risico inventarisatie voor decubitus en moet worden gebruikt in combinatie met een klinische beoordeling. Aan een klinische beoordeling wordt meer klinische waarde toevertrouwd

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland



Yes, you can.